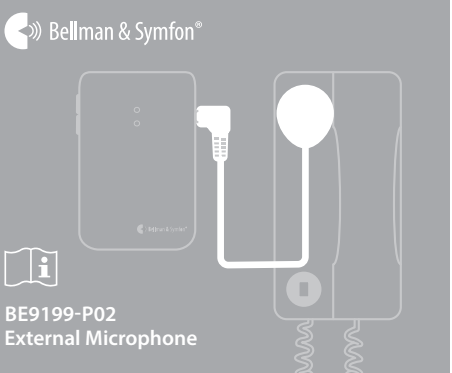




Product information

Read this first

This booklet guides you on how to use and maintain your new External Microphone. Ensure you read this booklet carefully, including the **Warnings** section. If you have additional questions, contact your hearing care professional.

About the BE9199-P02 External Microphone

Intended purpose

The intended purpose of the Visit alerting system is to alert deaf and hard of hearing people of important signals in their home.

Intended user group

The intended user group consists of people of all ages with mild to severe hearing loss or deafness that need audio, visual or sensory amplification.

Intended user

The intended user is a person with mild to severe hearing loss or deafness.

Principle of operation

The Visit alerting system consists of a set of wirelessly connected transmitters and receivers that are located across the home. When a transmitter detects an activity, it signals the Visit receiver that alerts the user with sound, flashes or vibrations. In order to use the system, you need at least one transmitter and one receiver.

- The Visit alerting system will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment or deafness resulting from organic conditions.

General warnings

This section contains important information about safety, handling and operating conditions. Keep this leaflet for future use. If you are just installing the device, this leaflet must be given to the householder.

Hazard warnings

- Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to the device or other property.
- Keep this device out of reach of children under 3 years.
- Do not use or store this device near any heat sources such as naked flames, radiators, ovens or other devices that produce heat.
- Do not dismantle the device; there is a risk of electric shock. Tampering with or dismantling the device will void warranty.
- This device is designed for indoor use only. Do not expose the device to moisture.
- Protect the device from shocks during storage and transport.
- Do not make any changes or modifications to this device. Use only original Bellman & Symfon accessories to avoid any electrical shock.
- Protect cables from any potential source of damage.

Information on product safety

- Failure to follow these instructions could result in damage to the device and void the warranty.
- Do not use the device in areas where electronic equipment is prohibited.
- The device may only be repaired by an authorized service center.
- If a serious incident occurs in relation to this device, contact the manufacturer and relevant authority.
- If you encounter other problems with your device, contact the point of purchase, your local Bellman & Symfon office or the manufacturer. Visit [bellman.com](https://www.bellman.com) for contact info.
- Do not drop your device. Dropping onto a hard surface can damage it.

Operating conditions

Operate the device in a dry environment within the temperature and humidity limits stated in this leaflet. If the device gets wet or is exposed to moisture, it should no longer be regarded as reliable and should therefore be replaced.

Cleaning

Disconnect all cables before you clean your device. Use a soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings. Do not use household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia or abrasives. This device does not require sterilization.

Service and support

If the device appears to be damaged or doesn't function properly, follow the instructions in the user guide and this leaflet. If the product still doesn't function as intended, contact your local hearing care professional for information on service and warranty.

Warranty conditions

Bellman & Symfon guarantees this product for six (6) months from date of purchase assuming any defects that are due to faulty materials or workmanship. This guarantee only applies to normal conditions of use and service, and does not include damage resulting from accident, neglect, misuse, unauthorized dismantling, or contamination howsoever caused. This guarantee excludes incidental and consequential damage. Furthermore, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary with territory. Some countries or jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This guarantee is in addition to your statutory rights as a consumer. The above warranty may not be altered except in writing signed by both parties hereto.

Symbol explanation

	Indicates the item is a medical device.
	Indicates a carrier that contains unique device identifier information.
	Indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.
	Indicates the manufacturer's serial number so that a specific medical device can be identified.
	Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified.
	Indicates the medical device manufacturer.
	This symbol indicates the need for the user to consult the instructions for use.
	This symbol indicates that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.
	To identify a place where information may be found, especially in an emergency.
	Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed.
	Indicates the range of humidity to which the medical device can be safely exposed.

Compliance information

Herby Bellman & Symfon declares that, in Europe, this product is in compliance with the essential requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. The full text of the declaration of conformity can be obtained from the Bellman & Symfon website [bellman.com](https://www.bellman.com).

Technical specifications

Weight	15 g
Dimensions	33 × 36 × 4 mm
Colour	White
Cable length	2,5 m
Connector	3,5 mm mono plug
Microphone type	Piezoelectric
Operation	Temp: 0° to 35° C Humidity: 15% – 90%, non-condensing
Configuration	Intented for BE1411-868 Visit Door Transmitter
In the box	BE9199-P02 External Microphone

- For detailed product information, see the corresponding user manual.

Produktinformationen

Lesen Sie dies zuerst

Diese Broschüre enthält eine Anleitung zur Verwendung und Wartung Ihres neuen Externen Mikrofons. Lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch, einschließlich des Abschnitts **„Warnhinweise“**. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.

Über das BE9199-P02 Externes Mikrofon

Verwendungszweck

Das Visit Benachrichtigungssystem soll gehörlose und schwerhörige Menschen auf wichtige Signale in ihrem Zuhause aufmerksam machen.

Vorgesehene Anwendergruppe
Die vorgesehene Anwendergruppe besteht aus Personen jeden Alters mit leichtem bis schwerem Hörverlust oder Taubheit, die eine akustische, visuelle oder sensorische Verstärkung benötigen.

Vorgesehener Anwender

Der vorgesehene Anwender ist eine Person mit leichtem bis schwerem Hörverlust oder Taubheit.

Funktionsprinzip

Das Visit Benachrichtigungssystem besteht aus einer Reihe von Sendern und Empfängern, die über das Haus verteilt und drahtlos miteinander verbunden sind. Wenn ein Sender eine Aktivität erkennt, sendet er ein Signal an den Visit Empfänger, der den Benutzer durch Töne, Blinkzeichen oder Vibrationen benachrichtigt. Um das System zu verwenden, benötigen Sie mindestens einen Sender und einen Empfänger.

- Das Visit Benachrichtigungssystem kann das normale Hörvermögen nicht wiederherstellen und kann eine organisch bedingte Hörminderung oder Taubheit weder verhindern noch verbessern.

Allgemeine Warnhinweise

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Handhabung und Betriebsbedingungen. Bewahren Sie diese Broschüre für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät gerade installieren, muss diese Broschüre dem Hausbesitzer ausgehändigt werden.

Gefahrenhinweise

- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder Schäden am Gerät oder anderen Sachwerten führen.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie offenen Flammen, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Durch Manipulation oder Demontage des Geräts erlischt die Garantie.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Schützen Sie das Gerät während der Lagerung und des Transports vor Stößen.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät vor. Verwenden Sie nur Originalzubehör von Bellman & Symfon, um Stromschläge zu vermeiden.
- Schützen Sie die Kabel vor möglichen Beschädigungen.
- Informationen zur Produktsicherheit**
 - Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Gerät und zum Erlischen der Garantie führen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen elektronische Geräte verboten sind.
 - Das Gerät darf nur von einem autorisierten Service-Center repariert werden.
 - Wenn ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit diesem Gerät auftritt, wenden Sie sich an den Hersteller und die zuständige Behörde.
 - Wenn Sie andere Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, Ihr örtliches Bellman & Symfon-Büro oder den Hersteller. Visit [bellman.com](https://www.bellman.com) für Kontaktinformationen.
 - Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen. Wenn es auf eine harte Oberfläche fällt, kann es beschädigt werden.

Betriebsbedingungen

Betreiben Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung innerhalb der in dieser Broschüre angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen. Wenn das Gerät gegen Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sollte es nicht mehr als zuverlässig angesehen werden und daher ersetzt werden.

Reinigung

Trennen Sie alle Kabel, bevor Sie Ihr Gerät reinigen. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in die Öffnungen gelangt. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Seifenmittel. Dieses Gerät muss nicht sterilisiert werden.

Dienstleistungen und Unterstützung

Wenn das Gerät beschädigt zu sein scheint oder nicht richtig funktioniert, befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch und in dieser Broschüre. Wenn das Produkt immer noch nicht wie vorgesehen funktioniert, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Hörgeräteakustiker, um Informationen zu Dienstleistungen und Garantie zu erhalten.

Garantiebedingungen

Bellman & Symfon gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von sechs (6) Monaten ab Kaufdatum gegen alle Defekte, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt nur für normale Nutzungs- und Dienstleistungsbedingungen und umfasst keine Schäden, die durch Unfälle, Vernachlässigung, Missbrauch, unbefugte Demontage oder Kontamination, wie auch immer verursacht, entstehen. Diese Garantie schließt Neben- und Folgeschäden aus. Darüber hinaus deckt die Garantie keine Fälle höherer Gewalt ab, wie z. B. Feuer, Überschwemmungen, Hurikane und Tornados. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Je nach Region können Sie auch andere Rechte haben. In einigen Ländern oder Rechtsprechungen ist die Beschränkung oder der Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden oder die Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, sodass die oben genannte Beschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft. Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher. Die oben genannte Garantie darf nur durch eine schriftliche Vereinbarung geändert werden, die von beiden Parteien unterzeichnet wurde.

Erklärung der Symbole

	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein medizinisches Gerät handelt.
	Zeigt einen Träger an, der eindeutige Informationen zur Gerätekenung enthält.
	Gibt an, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden darf, sondern zur Wiederverwendung und zum Recycling an separate Sammelstellen geschickt werden muss.
	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes medizinisches Gerät identifiziert werden kann.
	Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das medizinische Gerät identifiziert werden kann.

	Gibt den Hersteller des medizinischen Geräts an.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung konsultieren muss.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass beim Betrieb des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Verstoß geboten ist oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit des Bedieners erfordert oder ein Eingreifen des Bedieners erforderlich ist, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
	Kennzeichnet einen Ort, an dem Informationen zu finden sind, insbesondere in Notfällen.
	Gibt die Temperaturgrenzen an, denen das medizinische Gerät sicher ausgesetzt werden kann.
	Gibt den Feuchtigkeitsbereich an, dem das medizinische Gerät sicher ausgesetzt werden kann.

Informationen zur Einhaltung von Vorschriften

Hiermit erklärt Bellman & Symfon, dass dieses Produkt in Europa den grundlegenden Anforderungen der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745 entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist auf der Bellman & Symfon-Website [bellman.com](https://www.bellman.com) verfügbar.

Technische Daten

Gewicht	15 g
Abmessungen	33 × 36 × 4 mm*
Farbe	Weiß
Kabellänge	2,5 m
Anschluss	3,5-mm-Monostecker
Mikrofontyp	Piezoelektrisch
Betrieb	Temp: 0°C bis 35 °C Luftfeuchtigkeit: 15 % – 90 %, nicht kondensierend
Konfiguration	Vorgesehen für BE1411-868 Visit-Türsender
Lieferumfang	BE9199-P02 Externes Mikrofon

- Detaillierte Produktinformationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Information om produktet

Læs dette først

Dette hæfte vejleder dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye Eksterne Mikrofon. Sørg for at læse denne piece omhyggeligt, herunder afsnittet **Advarsler**. Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din høreapparatsspecialist.

Om BE9199-P02 Ekstern Mikrofon

Tilslaget formal

Det tilsligede formal med Visit notifikationsystemet er at advare dig og hørehæmmede om vigtige signaler i deres hjem.

Tiltækt brugergruppe

Den tiltænkte brugergruppe består af mennesker i alle aldre med mildt til svært høreløst og døvhed, der har brug for lyd-, syns- eller sanseforstærkning.

Tiltækt bruger

Den tiltænkte bruger er en person med mildt til svært høreløst og døvhed.

Funktionsprincip

Visit notifikationsystemet består af et sæt trådløst forbundne sendere og modtagere, der er placeret rundt omkring i hjemmet. Når en sender registrerer en aktivitet, sender den et signal til Visit-modtageren, som advær brugen med lyd, blink eller vibrationer. For at kunne bruge systemet skal du have mindst en sender og en modtager.

- Visit notifikationsystemet vil ikke genoprette normal hørelse og vil ikke forhindre eller forbedre en høreløst eller døvhed som følge af organiske forhold.

Generelle advarsler

Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, håndtering og driftsbetingelser. Opbevar denne folder til senere brug. Hvis du lige har installeret enheden, skal denne folder gives til husstandsen.

Advarsler om farer

- Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan resultere i brand, elektrisk stød eller anden personskade eller skade på enheden eller anden ejendom.
- Opbevar denne enhed utilgængeligt for børn under 3 år.
- Brug eller opbevar ikke denne enhed i nærheden af varmekilder som f.eks. åben ild, radiatorer, ovne eller andre enheder, der producerer varme.
- Skil ikke enheden ad; der er risiko for elektrisk stød. Garantien bortfalder, hvis der pilles ved eller afmonteres enheden.
- Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Udsæt ikke enheden for fugt.
- Beskyt enheden mod stød under opbevaring og transport.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer af denne enhed. Brug kun originalt Bellman & Symfon-tilbehør for at undgå elektrisk stød.
- Beskyt kablerne mod enhver potentiel kilde til skade.

Oplysninger om produktsikkerhed

- Hvis disse instruktioner ikke følges, kan enheden blive beskadiget, og garantien bortfalder.
- Brug ikke enheden i områder, hvor elektronisk udstyr er forbudt.
- Enheden må kun repareres af et autoriseret servicecenter.

- Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med denne enhed, skal du kontakte producenten og den relevante myndighed.
- Hvis der opstår andre problemer med enheden, skal du kontakte købsstedet, dit lokale Bellman & Symfon-kontor eller producenten. Visit [bellman.com](https://www.bellman.com) for kontaktoplysninger.
- Tab ikke din enhed. Hvis du taber den på en hård overflade, kan den tage skade.

Driftsbetingelser

Brug enheden i et tørt miljø inden for de temperatur- og fugtighedsgrænser, der er angivet i denne folder. Hvis enheden bliver våd eller udsat for fugt, bør den ikke længere betragtes som pålidelig og bør derfor udfixes.

Renngøring

Afbryd alle kabler, før du rengør din enhed. Brug en blød, fugtfri klud. Undgå at få fugt ind i åbninger. Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, aerosolsprays, opglesningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibemidler. Denne enhed kræver ikke sterilisering.

Service og støtte

Hvis enheden ser ud til at være beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du følge de instruktioner i brugervejledningen og denne folder. Hvis produktet stadig ikke fungerer efter hensigten, skal du kontakte din lokale høreapparatsspecialist for at få oplysninger om service og garanti.

Garantibetingelser

Bellman & Symfon garanterer dette produkt i seks (6) måneder fra købsdatoen mod eventuelle defekter, der skyldes materiale- eller fabriksfejl. Denne garanti gælder kun under normale brugs- og serviceforhold og omfatter ikke skader som følge af ulyk, forsømmelse, misbrug, uautoriseret demontering eller forurening, uanset hvordan de er opstået. Denne garanti udelukker tilfældige skader og folgeschäden. Desuden dækker garantien ikke naturkatastrofer som f.eks. brand, oversvømmelse, orkaner og tornadoer. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer med territoriet. Nogle lande eller jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af tilfældige skader eller folgeschäden eller begrænsning af, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti er et supplement til dine lovestemte rettigheder som forbruger. Ovenstående garanti må ikke ændres, mindredre det sker skriftligt og er underskrevet af begge parter.

Forklaring af symboler

	Angiver, at enheden er en medicinsk enhed.
	Angiver en bærer, der indeholder unikke oplysninger om enhedens identifikation.
	Angiver, at produktet ikke må bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til separate indsamlingsfaciliteter til genbrug og genanvendelse.
	Angiver producentens serienummer, så en specifik medicinsk enhed kan identificeres.
	Angiver producentens katalognummer, så den medicinske enhed kan identificeres.
	Angiver producenten af den medicinske enhed.
	Dette symbol angiver, at brugeren skal læse brugsanvisningen.
	Dette symbol angiver, at der skal udvises forsigtighed, når enheden eller betjeningsanordningen betjenes tæt på det sted, hvor symbolet er placeret, eller at den aktuelle situation kræver, at operatøren er opmærksom eller handler for at undgå uønskede konsekvenser.
	For at identificere et sted, hvor der kan findes oplysninger, især i en nødsituation.
	Angiver de temperaturgrenser, som den medicinske enhed sikkert kan udsættes for.
	Angiver det fugtighedsinterval, som den medicinske enhed sikkert kan udsættes for.

Information om overholdelse

Herméd erklærer Bellman & Symfon, at dette produkt i Europa er i overensstemmelse med de væsentlige krav i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745. Den fulde tekst til overensstemmelseserklæringen kan hentes på Bellman & Symfon's hjemmeside [bellman.com](https://www.bellman.com).

Tekniske specifikationer

Vægt	15 g
Dimensioner	33 × 36 × 4 mm
Farve	Hvid
Kabellængde	2,5 m
Stik	3,5 mm monostik
Mikrofontype	Piezoelektrisk
Drift	Temperatur: 0° til 35° C Luftfugtighed: 15 % – 90 %, ikke-kondenserende
Konfiguration	Beregnet til BE1411-868 Visit Dørsender
I kassen	BE9199-P02 Ekstern Mikrofon

- Se den tilsvarende brugervejledning for detaljerede produktoplysninger.

Información sobre el producto

Lea esto primero

Este folleto le explica cómo utilizar y mantener su nuevo Micrófono Externo. Asegúrese de leer atentamente este folleto, incluida la sección **Advertencias**. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su audióprotesista.

Acerca del BE9199-P02 Micrófono Externo

Objetivo previsto

El Objetivo previsto del Sistema de alerta de Visit es alertar a las personas sordas o con dificultades auditivas de señales importantes en su hogar.

Grupo de usuarios previsto

El Grupo de usuarios previsto está formado por personas de todas las edades con pérdida de audición o sordera de leve a severa que necesitan amplificación auditiva, visual o sensorial.

Usuario previsto

El Usuario previsto es una persona con pérdida de audición o sordera de leve a severa.

Principio de funcionamiento

El Sistema de alerta de Visit consiste en un conjunto de transmisores y receptores conectados de forma inalámbrica que se encuentran repartidos por toda la casa. Cuando un transmisor detecta una actividad, envía una señal al receptor Visit que alerta al usuario mediante sonidos, destellos o vibraciones. Para utilizar el sistema, necesita al menos un transmisor y un receptor.

- El sistema de alerta Visit no restablecerá la audición normal y no evitará ni mejorará una deficiencia auditiva o una sordera derivada de afecciones orgánicas.

Advertencias generales

Esta sección contiene información importante sobre seguridad, manejo y condiciones de funcionamiento. Conserve este folleto para futuras consultas. Si acaba de instalar el aparato, entregue este folleto al cabeza de familia.

Advertencias de peligro

- El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad puede provocar incendios, descargas eléctricas u otras lesiones o daños al aparato o a otros bienes.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- No utilice ni guarde este dispositivo cerca de fuentes de calor como llamas, radiadores, hornos u otros dispositivos que produzcan calor.
- No desmonte el aparato; existe riesgo de descarga eléctrica. La manipulación o desmontaje del aparato anulará la garantía.
- Este aparato está diseñado para uso exclusivo en interiores. No exponga el aparato a la humedad.
- Proteja el dispositivo de golpes durante el almacenamiento y el transporte.
- No realice cambios ni modificaciones en este dispositivo. Utilice únicamente accesorios originales Bellman & Symfon para evitar cualquier descarga eléctrica.
- Proteja los cables de cualquier posible fuente de daños.
- Información sobre la seguridad de los productos**
 - El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en el aparato y anular la garantía.
 - No utilice el dispositivo en zonas donde está prohibido el uso de equipos electrónicos.
 - El aparato solo puede ser reparado por un centro de servicio autorizado.
 - Si se produce un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el fabricante y la autoridad competente.
 - Si tiene otros problemas con el dispositivo, póngase en contacto con el punto de compra, con la oficina local de Bellman & Symfon o con el fabricante. Visite [bellman.com](https://www.bellman.com) para obtener información de contacto.
 - No deje caer el dispositivo. Las caídas sobre superficies duras pueden dañarlo.

Condiciones de funcionamiento

Utilice el dispositivo en un entorno seco dentro de los límites de temperatura y humedad indicados en este folleto. Si el aparato se moja o queda expuesto a la humedad, dejará de considerarse fiable y deberá sustituirse.

Limpieza

Desconecte todos los cables antes de limpiar el aparato. Utilice un paño suave y sin pelusa. Evite que penetre humedad en las aberturas. No utilice limpiadores domésticos, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco ni productos abrasivos. Este dispositivo no requiere esterilización.

Servicio y asistencia

Si el aparato parece estar dañado o no funciona correctamente, siga las instrucciones de la guía del usuario y de este folleto. Si el producto sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con su audióprotesista local para obtener información sobre el servicio y la garantía.

Condiciones de la garantía

Bellman & Symfon garantiza este producto durante seis (6) meses a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto que se deba a materiales o mano de obra defectuosos. Esta garantía sólo se aplica a las condiciones normales de uso y servicio, y no incluye los daños resultantes de accidentes, negligencia, uso indebido, desmontaje no autorizado o contaminación, cualquiera que sea su causa. Esta garantía excluye los daños incidentales y consecuentes. Además, la garantía no cubre casos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían según el territorio. Algunos países o jurisdicciones

no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía es adicional a sus derechos legales como consumidor. La garantía anterior no podrá modificarse salvo por escrito firmado por ambas partes.

Explicación de los símbolos

	Indica que el artículo es un dispositivo médico.
	Indica un soporte que contiene información exclusiva de identificación del dispositivo.
	Indica que el producto no debe desecharse como residuo sin clasificar, sino que debe enviarse a instalaciones de recogida selectiva para su recuperación y reciclaje.
	Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un producto sanitario específico.
	Indica el número de catálogo del fabricante para poder identificar el producto sanitario.
	Indica el fabricante del producto sanitario.
	Este símbolo indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.
	Este símbolo indica que es necesario tener precaución al utilizar el dispositivo o el control cerca de donde está colocado el símbolo, o que la situación actual necesita que el operador sea consciente o que actúe para evitar consecuencias no deseadas.
	Identifica un lugar donde se puede encontrar información, especialmente en caso de emergencia.
	Indica los límites de temperatura a los que puede exponerse con seguridad el producto sanitario.
	Indica los límites de humedad a los que el producto sanitario puede exponerse con seguridad.

Información sobre el cumplimiento

Por la presente, Bellman & Symfon declara que, en Europa, este producto cumple los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. El texto completo de la declaración de conformidad puede obtenerse en el sitio web de Bellman & Symfon [bellman.com](https://www.bellman.com).

Especificaciones técnicas

--

IT: Informazioni sul prodotto

Legga prima questo

Questo libretto la guida all'uso e alla manutenzione del suo nuovo Microfono Esterno. Si assicuri di leggere attentamente questo libretto, compresa la sezione **Attenzione**. Se ha ulteriori domande, si rivolga al suo audiodistributista.

Informazioni sul BE9199-P02 Microfono Esterno

Scopo previsto

Lo scopo previsto del sistema di allerta Visit è quello di avvisare le persone sorde e ipoudenti di segnali importanti nella loro casa.

Gruppo di utenti previsti

Il Gruppo di utenti previsti è costituito da persone di tutte le età con ipacusia o sordità da lieve a grave che necessitano di un'amplificazione audio, visiva o sensoriale.

Utente previsto

L'utente previsto è una persona con perdita dell'udito o sordità da lieve a grave.

Gruppo di utenti previsti

Il sistema di allerta Visit è costituito da una serie di trasmettitori e ricevitori collegati in modalità wireless e posizionati in tutta la casa. Quando un trasmettitore rileva un'attività, segnala al Ricevitore Flash Visit che avvisa l'utente con suoni, lampi o vibrazioni. Per utilizzare il sistema, sono necessari almeno un trasmettitore e un ricevitore.

Il sistema di allerta Visit non ripristina l'udito normale e non previene o migliora un'ipacusia o una sordità derivante da condizioni organiche.

Avvertenze generali

Questa sezione contiene informazioni importanti sulla sicurezza, sulla manipolazione e sulle condizioni operative. Conservi questo opuscolo per un uso futuro. Se sta installando il dispositivo, questo foglio deve essere consegnato al proprietario della casa.

Avvertenze di pericolo

La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni al dispositivo o ad altri beni.

Tenga questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Non utilizzi o conservi questo dispositivo vicino a fonti di calore come fiamme libere, termosifoni, forni o altri dispositivi che producano calore.

Non smonti il dispositivo; esiste il rischio di scosse elettriche. La manomissione o lo smontaggio del dispositivo annullerà la garanzia.

Questo dispositivo è progettato solo per uso interno. Non esponga il dispositivo all'umidità.

Protegga il dispositivo dagli urti durante la conservazione e il trasporto.

Non apporti modifiche o cambiamenti a questo dispositivo. Utilizzi solo accessori originali Bellman & Symfon per evitare scosse elettriche.

Informi i cavi da qualsiasi potenziale fonte di danno.

Informazioni sulla sicurezza dei prodotti

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

Non utilizzi il dispositivo in aree in cui è vietato l'uso di apparecchiature elettroniche.

Il dispositivo può essere riparato solo da un centro di servizio autorizzato.

Se si verifica un incidente grave in relazione a questo dispositivo, contatti il produttore e le autorità competenti.

Se riscontra altri problemi con il dispositivo, contatti il punto vendita, l'ufficio locale di Bellman & Symfon o il produttore. Per informazioni sui contatti, visiti il sito **bellman.com**.

Non faccia cadere il dispositivo. La caduta su una superficie dura può danneggiarlo.

Condizioni operative

Utilizzi il dispositivo in un ambiente asciutto, entro i limiti di temperatura e umidità indicati in questo opuscolo. Se il dispositivo è esposto all'umidità, non deve più essere considerato affidabile e deve quindi essere sostituito.

Pulizia

Prima di pulire il dispositivo, scollegli tutti i cavi. Utilizzi un panno morbido e privo di pelucchi. Eviti che l'umidità penetri nelle aperture. Non utilizzi detergenti domestici, spray, solventi, alcol, ammoniaca o abrasivi. Questo dispositivo non richiede la sterilizzazione.

Servizio e supporto

Se il dispositivo sembra danneggiato o non funziona correttamente, segua le istruzioni contenute nel manuale d'uso e in questo foglio. Se il prodotto continua a non funzionare come previsto, contatti il suo audiodistributista di fiducia per informazioni sul servizio e sulla garanzia.

Condizioni di garanzia

Bellman & Symfon garantisce questo prodotto per sei (6) mesi dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto dovuto a materiali o lavorazione difettosi. Questa garanzia si applica solo alle normali condizioni d'uso e di servizio e non include i danni derivanti da incidenti, negligenza, uso improprio, smontaggio non autorizzato o contaminazione, in qualsiasi modo causati. Questa garanzia esclude i danni incidentali e consequenziali. Inoltre, la garanzia non copre gli Atti di Dio, come incendi, inondazioni, uragani e tornado. La presente garanzia le conferisce diritti legali specifici e potrebbe avere anche altri diritti che variano a seconda del territorio. Alcuni Paesi o giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione

di danni incidentali o consequenziali, o limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile a lei. Questa garanzia si aggiunge ai suoi diritti legali di consumatore. La garanzia di cui sopra non può essere modificata se non in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

Spiegazione del simbolo

MD Indica che l'articolo è un dispositivo medico.

UDI Indica un supporto che contiene informazioni sull'identificatore unico del dispositivo.

 Indica che il prodotto non deve essere gettato come rifiuto indifferenziato, ma deve essere inviato a strutture di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.

SN Indica il numero di serie del produttore, in modo da poter identificare un dispositivo medico specifico.

REF Indica il numero di catalogo del produttore, in modo da poter identificare il dispositivo medico.

 Indica il produttore del dispositivo medico.

 Questo simbolo indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso.

 Questo simbolo indica che è necessario prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo o il controllo vicino al punto in cui è posizionato il simbolo, oppure che la situazione attuale richiede la consapevolezza dell'operatore o l'azione dell'operatore per evitare conseguenze indesiderate.

 Identifica un luogo in cui è possibile trovare informazioni, soprattutto in caso di emergenza.

 Indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro.

 Indica l'intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro.

Informazioni sulla conformità

Con la presente Bellman & Symfon dichiara che, in Europa, questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745. Il testo completo della dichiarazione di conformità può essere ottenuto dal sito web Bellman & Symfon **bellman.com**.

Specifiche tecniche	
Peso	15 g
Dimensioni	33 × 36 × 4 mm
Colore	Bianco
Lunghezza del cavo	2,5 m
Connettore	Spina mono da 3,5 mm
 Tipo di microfono	Piezoelettrico
Funzionamento	Temperatura: 0° a 35° C Umidità: 15% – 90%, senza condensa
Configurazione	Destinato al BE1411-868 Trasmettitore Porta Visit
Nella confezione	BE9199-P02 Microfono Esterno

 Per informazioni dettagliate sul prodotto, consulti il manuale utente corrispondente.

NLE Productinformatie

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

Non utilizzi il dispositivo in aree in cui è vietato l'uso di apparecchiature elettroniche.

Il dispositivo può essere riparato solo da un centro di servizio autorizzato.

Se si verifica un incidente grave in relazione a questo dispositivo, contatti il produttore e le autorità competenti.

Se riscontra altri problemi con il dispositivo, contatti il punto vendita, l'ufficio locale di Bellman & Symfon o il produttore. Per informazioni sui contatti, visiti il sito **bellman.com**.

Non faccia cadere il dispositivo. La caduta su una superficie dura può danneggiarlo.

Lees dit eerst

Dit boekje helpt u bij het gebruik en onderhoud van uw nieuwe Externe Microfoon. Zorg ervoor dat u dit boekje zorgvuldig doorleest, inclusief het gedeelte **Waarschuwingen**. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien.

Over de BE9199-P02 Externe Microfoon

Beoogd doel
Het doel van het Visit waarschuwingssysteem is om doven en slecht-horenden te waarschuwen voor belangrijke signalen in hun huis.

Beoogde gebruikersgroep
De beoogde gebruikersgroep bestaat uit mensen van alle leeftijden met licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid die audio-, visuele of sensorische versterking nodig hebben.

Beoogde gebruiker
De beoogde gebruiker is een persoon met licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid.
Prinsipp of drift
Het Visit waarschuwingssysteem bestaat uit een set draadloos verbonden zenders en ontvangers die in het hele huis geplaat zijn. Wanneer een zender een activiteit detecteert, stuurt deze een signaal naar de Visit ontvanger die de gebruiker waarschuwt met geluid, flitsen of trillingen. Om het systeem te kunnen gebruiken, hebt u minstens één zender en één ontvanger nodig.

Het Visit waarschuwingssysteem kan het normale gehoor niet herstellen en kan gehoorverlies of doofheid als gevolg van organische aandoeningen niet voorkomen of verbeteren.

Algemene waarschuwingen

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over veiligheid, bediening en gebruiksmstandigheden. Bewaar deze folder voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat pas installeert, moet u deze bijsluiter aan de huisgeenar geven.

- Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken of ander letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen.

Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

Gebruik of bewaar dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals open vuur, radiatoren, ovens of andere apparaten die warmte produceren.

- Demonteer het apparaat niet; er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Als u met het apparaat knoeit of het uit elkaar haalt, vervalt de garantie.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Bescherm het apparaat tegen schokken tijdens opslag en transport.
- Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat aan. Gebruik alleen originele Bellman & Symfon accessoires om elektrische schokken te voorkomen.
- Bescherm kabels tegen mogelijke schadebronnen.

Informatie over productveiligheid

Als u deze instructies niet opvolgt, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.

Gebruik het apparaat niet in gebieden waar elektronische apparatuur verboden is.

Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkend servicecentrum.

Als er zich een ernstig incident voordoet met betrekking tot dit apparaat, neem dan contact op met de fabrikant en de betreffende instantie.

Als u andere problemen met uw apparaat ondervindt, neem dan contact op met het verkooppunt, uw plaatselijke Bellman & Symfon kantoor of de fabrikant. Visit **bellman.com** voor contactgegevens.

Laat uw apparaat niet vallen. Als u het op een hard oppervlak laat vallen, kan het beschadigd raken.

Gebruiksmstandigheden

Gebruik het apparaat in een droge omgeving binnen de temperatuur- en vochtigheidslimieten die in deze bijsluter worden vermeld. Als het apparaat nat wordt of wordt blootgesteld aan vocht, mag het niet langer als betrouwbaar worden beschouwd en moet het daarom worden vervangen.

Reinigen

Koppel alle kabels los voordat u uw apparaat schoonmaakt. Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in openingen komt. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuwmiddelen. Dit apparaat hoeft niet gesteriliseerd te worden.

Service en ondersteuning

Als het apparaat beschadigd lijkt of niet goed werkt, volg dan de instructies in de gebruikershandleiding en deze folder. Als het product nog steeds niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met uw audicien voor informatie over service en garantie.

Garantievoorwaarden

Bellman & Symfon garandeert dit product gedurende zes (6) maanden vanaf de aankoopdatum tegen defecten van te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is alleen van toepassing op normale gebruik- en serviceomstandigheden en omvat geen schade als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd gebruik, onbevoegde demontage of verontreiniging door welke oorzaak dan ook. Deze garantie sluit incidentele schade en gevolgschade uit. Bovendien dekt de garantie geen overmacht, zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die na land verschillen. Sommige landen of rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of beperkingen van de duur van een impliciete garantie niet toe, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten als consument. De bovenstaande garantie kan niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk ondertekend door beide partijen.

Symbol uitleg

MD Geeft aan dat het artikel een medisch apparaat is.

UDI Geeft aan dat het om een drager gaat die unieke identificatiegegevens voor apparaten bevat.

 Geeft aan dat het product niet als ongeoorseerd afval mag worden weggegooid, maar naar aparte inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor terwinning en recycling.

SN Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch apparaat geïdentificeerd kan worden.

REF Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.

 Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan.

 Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.

 Dit symbool geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat of de bediening in de buurt van waar het symbool is geplaatst, of dat de huidige situatie vraagt om oplettendheid van de gebruiker of actie van de gebruiker om ongewenste gevolgen te voorkomen.

 Om een plaats aan te duiden waar informatie kan worden gevonden, vooral in een noodgeval.

 Geeft de temperatuurlimieten aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.

 Geeft het vochtigheidsbereik aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.

Informatie over naleving

Hierbij verklaart Bellman & Symfon dat dit product in Europa voldoet aan de essentiële eisen van de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de Bellman & Symfon website **bellman.com**.

Technische specificaties

Gewicht	15 g
Afmetingen	33 × 36 × 4 mm
Kleur	Wit
Kabel lengte	2,5 m
Aansluiting	3,5 mm monostekker
Type microfoon	Piezo-elektrisch
Working	Temperatuur: 0° tot 35° C Vochtigheid: 15% – 90%, niet-condenserend
Configuratie	Bestemd voor BE1411-868 Visit Deurbelzender
In de doos	BE9199-P02 Externe Microfoon

 Zie de bijbehorende gebruikshandleiding voor gedetailleerde productinformatie.

NLE Produktinformasjon

Les dette først

Dette heftet gir deg veiledning i hvordan du bruker og vedlikeholder din nye Eksterne Mikrofon. Sørg for at du leser dette heftet nøye, inkludert avsnittet **Advarsler**. Hvis du har flere spørsmål, må mindre det gjøres skriftlig og undertegnes av begge parter.

Om den BE9199-P02 Eksterne Mikrofonen

Dette heftet gir deg veiledning i hvordan du bruker og vedlikeholder din nye Eksterne Mikrofon. Sørg for at du leser dette heftet nøye, inkludert avsnittet **Advarsler**. Hvis du har flere spørsmål, må mindre det gjøres skriftlig og undertegnes av begge parter.

Den tiltenkte brukerguppen består av personer i alle aldre med mildt til alvorlig hørselstap eller døvhøet som trenger lyd-, syns- eller sanserestoterking.

Tiltenkt brukerguppe

Den tiltenkte brukerguppen består av personer i alle aldre med mildt til alvorlig hørselstap eller døvhøet som trenger lyd-, syns- eller sanserestoterking.

Tiltenkt bruker
Den tiltenkte brukeren er en person med mildt til alvorlig hørselstap eller døvhøet.

Prinsipp for bruk
Visit-varslingsstemet består av et sett med trådløst tilkoblede sendere og mottakere som er plassert rundt omkring i hjemmet. Når en sender registrerer en aktivitet, sender den et signal til Visit-mottakere som varsler brukeren med lyd, blink eller vibrasjoner. For å kunne bruke systemet trenger du minst én sender og én mottaker.

Visit-varslingsstemet vil ikke gjennopprette normal hørsel og vil ikke forhindre eller forbedre en hørselsnedsettelse eller døvhøet som skyldes organiske forhold.

Generelle advarsler

Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering og driftsforhold. Ta vare på denne brosjyren for fremtidig bruk. Hvis du bare skal installere enheten, må denne brosjyren gå til huseieren.

Fareadvarsler

Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen personskade eller skade på apparatet eller annen eiendom.

Oppbevar dette apparatet utilgjengelig for barn under 3 år.

Ikke bruk eller oppbevar dette apparatet i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiatoren, ovner eller andre enheter som produserer varme.

Ikke demonter enheten; det er fare for elektrisk støt. Garantien bortfaller hvis du manipulerer eller demonterer enheten.

Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke settett enheten for fuktighet.

Beskytt enheten mot støt under lagring og transport.

Ikke gjør endringer eller modifikasjoner på denne enheten. Bruk kun originale Bellman & Symfon tilbehør for å unngå elektrisk støt.

Beskytt kabelene mot potensielle skadekilder.

Informasjon om produktikkerhet

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på apparatet og gjøre garantien ugyldig.

Ikke bruk apparatet i områder der det er forbudt å bruke elektronisk utstyr.

Apparatet må kun repareses av et autorisert servicecenter.

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med dette apparatet, må du kontakte produsenten og de relevante myndighetene.

Hvis du får andre problemer med enheten, må du ta kontakt e med det lokale Bellman & Symfon-kontor eller tilleverkaren. Besøk **bellman.com** for kontaktfinformasjon.

Ikke slipp enheten din i gulvet. Hvis du mister den på en hard overflate, kan den ta skade.

Driftsforhold

Bruk enheten i et tørt miljø innenfor de temperatur- og fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Hvis enheten blir våt eller utsettes for fuktighet, er den ikke lenger å anse som pålitelig og bør derfor skiftes ut.

Rengjøring

Koble fra alle kabler for du rengjør enheten. Bruk en myk, fuktig klut. Unngå å få fuktighet inn i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler, aerosolprepar, iseremidler, alkoholl, ammoniak eller slipemidler. Denne enheten krever ikke sterilisering.

Service and support

Hvis enheten ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som den skal, følger du instruksjonene i brukerhåndboken og denne brosjyren. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer som tiltenkt, kan du kontakte din lokale audiograf for informasjon om service og garanti.

Garantibetingelser

Bellman & Symfon garanterer dette produktet i seks (6) måneder fra kjøpsdato mot eventuelle defekter som skyldes feil i materialer eller utførelse. Denne garantien gjelder kun under normale bruks- og serviceforhold, og omfatter ikke skader som følge av uhell, forsummelse, misbruk, uautorisert demontering eller forurensning, usøstett ånsak. Denne garantien omfatter ikke tilfældige skader og følgeskader. Garantien dekker heller ikke naturkatastrofer som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer med territorium. Noen land eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfældige skader eller følgeskader, eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Ovennevnte garanti kan ikke endres, med mindre det gjøres skriftlig og undertegnes av begge parter.

Symbolforklaring

MD Indikerer at produktet er en medisinsk enhet.

UDI Indikerer en bærer som inneholder unik informasjon om enhens identifikator.

 Indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.

SN Angir produsentens serienummer, slik at et spesifikt medisinsk utstyr kan identifiseres.

REF Angir produsentens katalognummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres.

 Angir produsenten av det medisinske utstyret.

 Dette symbolet indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.

 Dette symbolet indikerer at det må utvises forsiktighet ved bruk av enheten eller kontrollenheten i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatoren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser.

 For å identifisere et sted hvor informasjon kan finnes, spesielt i en nødsituasjon.

 Angir temperaturgrensene som det medisinske utstyret trygt kan utsettes for.

 Angir luftfuktigheten som det medisinske utstyret trygt kan utsettes for.

Samsvarsinformasjon

Bellman & Symfon erklærer herved at dette produktet i Europa er i samsvar med de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen kan hentes fra Bellman & Symfons nettsted **bellman.com**.

Tekniske spesifikasjoner

Vekt	15 g
Dimensjoner	33×36×4 mm
Farge	Hvit
Kabellengde	2,5 m
Kontakt	3,5 mm monoplug
Mikrofontype	Piezoelektrisk
Bruk	Temperatur: 0° til 35° C Luftfuktighet: 15 % – 90 %, ikke-kondenserende
Konfigurasjon	Beregnet for BE1411-868 Vist Dørser
I esken	BE9199-P02 Ekstern Mikrofon