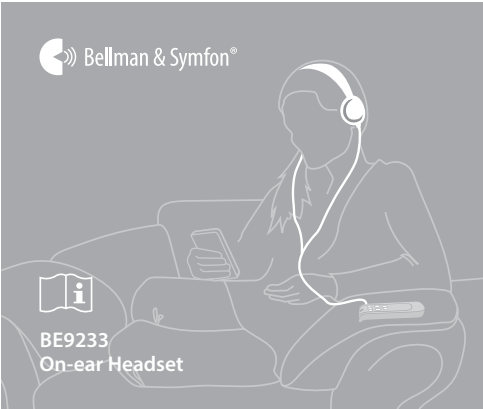




Product information

Read this first

This leaflet guides you on how to use and maintain your new On-ear Headset. Ensure you read this leaflet carefully, including the **Warnings** section. If you have additional questions, contact your hearing care professional.

About the BE9233 On-ear Headset

Intended user group

People of all ages.

Intended user

A user that wants to control tuning and listening volume.

Principle of operation

The audio product family consists of several amplifiers and sound transmitters which have been specifically developed to provide sound enhancement even in demanding situations. Depending on the assigned function of the specific amplifier or sound transmitter, different microphones can be used to pick up direct sound or enhance the ambient sound.

Principle of operation

The audio product family consists of several amplifiers and sound transmitters which have been specifically developed to provide sound enhancement even in demanding situations. Depending on the assigned function of the specific amplifier or sound transmitter, different microphones can be used to pick up direct sound or enhance the ambient sound.

 This device will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment or deafness resulting from organic conditions.

General warnings

This section contains important information about safety, handling and operating conditions. Keep this leaflet for future use. If you are just installing the device, this leaflet must be given to the householder.

Hazard warnings

- Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to the device or other property.
- Keep this device out of reach of children under 3 years.
- Do not use or store this device near any heat sources such as naked flames, radiators, ovens or other devices that produce heat.
- Do not dismantle the device; there is a risk of electric shock. Tampering with or dismantling the device will void warranty.
- This device is designed for indoor use only. Do not expose the device to moisture.
- Protect the device from shocks during storage and transport.
- Protect cables from any potential source of damage.
- Do not make any changes or modifications to this device. Use only original Bellman & Symfon accessories to avoid any electrical shock.
- The connected listening device has a very powerful amplifier and the sound level can cause discomfort or, in serious cases, endanger hearing if the product is used carelessly. Always turn the volume down to a low level before putting on the headset.

Information on product safety

- Failure to follow these instructions could result in damage to the device and void the warranty.
- Do not use the device in areas where electronic equipment is prohibited.

- The device may only be repaired by an authorized service center.
- If you encounter problems with your device, contact the point of purchase, your local Bellman & Symfon office or the manufacturer. Visit **bellman.com** for contact info.
- Do not drop your device. Dropping onto a hard surface can damage it.

Cleaning

Use a soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings. Do not use household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia or abrasives. This device does not require sterilization.

Service and support

If the device appears to be damaged or doesn't function properly, follow the instructions in the user guide and this leaflet. If the product still doesn't function as intended, contact your local hearing care professional for information on service and warranty.

Warranty conditions

Bellman & Symfon guarantees this product for 90 days from date of purchase against any defects that are due to faulty materials or workmanship. This guarantee only applies to normal conditions of use and service, and does not include damage resulting from accident, neglect, misuse, unauthorized dismantling, or contamination howsoever caused. This guarantee excludes incidental and consequential damage. Furthermore, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary with territory. Some countries or jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This guarantee is in addition to your statutory rights as a consumer. The above warranty may not be altered except in writing signed by both parties hereto.

Symbol explanation

	Indicates the manufacturer's serial number so that a specific device can be identified.
	Indicates the device manufacturer.
	This symbol indicates the need for the user to consult the instructions for use.
	This symbol indicates that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.
	To identify a place where information may be found, especially in an emergency.
	Indicates the temperature limits to which the device can be safely exposed.
	Indicates the range of humidity to which the device can be safely exposed.

Technical specifications

Weight	63 g, 2.2 oz
Frequency range	20 Hz – 20 kHz
Impedance	32 Ω +/- 10%
Sensitivity	113 dB/mW @ 1 kHz
Colour	Black
Cable length	1.2 meters
Connector	3.5 mm stereo plug
Accessories	BE9150 Headphone Covers
Configuration	This headset can be configured with the following personal amplifier: BE2021 Maxi Pro Personal Amplifier
Operation	Temperature: 0° to 35° C, 32° to 95° F Humidity: 15% – 90%, non-condensing
In the box	BE9233 On-ear Headset

 For detailed product information, see the corresponding user manual.

ES Información sobre el producto

Lea esto primero

Este folleto le guiará en el uso y mantenimiento de sus nuevos auriculares supraaurales. Asegúrese de leer atentamente este folleto, incluida la sección **Advertencias**. Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en cont acto con su audioprotesista.

Acerca de los auriculares supraaurales BE9233

Grupo de usuarios previsto

Personas de todas las edades.

Usuario previsto

Usuario que desea controlar la sintonización y el volumen de escucha.

Principio de funcionamiento

La familia de productos de audio consta de varios amplificadores y transmisores de sonido que se han desarrollado específicamente para proporcionar una mejora del sonido incluso en situaciones exigentes. Dependiendo de la función asignada al amplificador o transmisor de sonido específico, se pueden utilizar diferentes micrófonos para captar el sonido directo o realizar el sonido ambiente.

Principio de funcionamiento

La familia de productos de audio se compone de varios amplificadores y transmisores de sonido que se han desarrollado específicamente para proporcionar un realce del sonido incluso en situaciones exigentes. Dependiendo de la función asignada al amplificador o transmisor de sonido específico, se pueden utilizar distintos micrófonos para captar el sonido directo o realizar el sonido ambiente.

 Este aparato no restablecerá la audición normal y no evitará ni mejorará una deficiencia auditiva o una sordera derivada de afecciones orgánicas.

Advertencias generales

Esta sección contiene información importante sobre seguridad, manejo y condiciones de funcionamiento. Conserve este folleto para un uso futuro. Si acaba de instalar el aparato, entregue este folleto al propietario.

Advertencias de peligro

- El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones o daños al aparato o a otros bienes.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- No utilice ni guarde este aparato cerca de fuentes de calor como llamas, radiadores, hornos u otros aparatos que produzcan calor.
- No desmonte el aparato; existe riesgo de descarga eléctrica. La manipulación o el desmontaje del aparato anulará la garantía.
- Este aparato está diseñado únicamente para su uso en interiores. No exponga el aparato a la humedad.
- Proteja el aparato de golpes durante su almacenamiento y transporte.
- Proteja los cables de cualquier fuente potencial de daños.
- No realice cambios ni modificaciones en este aparato. Utilice únicamente accesorios originales de Bellman & Symfon para evitar cualquier descarga eléctrica.
- El aparato de escucha conectado tiene un amplificador muy potente y el nivel de sonido puede causar molestias o, en casos graves, poner en peligro la audición si el producto se utiliza de forma descuidada. Baje siempre el volumen a un nivel bajo antes de ponerse los auriculares.

Información sobre la seguridad de los productos

- El incumplimiento de estas instrucciones podría dañar el aparato y anular la garantía.
- No utilice el aparato en zonas donde esté prohibido el uso de equipos electrónicos.
- El aparato sólo puede ser reparado por un centro de servicio autorizado.
- Si tiene problemas con su aparato, póngase en contacto con el punto de compra, con su oficina local de Bellman & Symfon o con el fabricante. Visite **bellman.com** para obtener información de contacto.
- No deje caer su dispositivo. Si lo deja caer sobre una superficie dura puede dañarlo.

Limpieza

Utilice un paño suave y sin pelusas. Evite que entre humedad en las aberturas. No utilice limpiadores

domésticos, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco ni productos abrasivos. Este aparato no requiere esterilización.

Servicio y asistencia

Si el aparato parece estar dañado o no funciona correctamente, siga las instrucciones de la guía del usuario y de este folleto. Si el producto sigue sin funcionar como es debido, póngase en contacto con su audioprotesista local para obtener información sobre el servicio y la garantía.

Condiciones de la garantía

Bellman & Symfon garantiza este producto durante 90 días a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto que se deba a materiales o mano de obra defectuosos. Esta garantía sólo se aplica a las condiciones normales de uso y servicio, y no incluye los daños resultantes de accidentes, negligencia, uso indebido, desmontaje no autorizado o contaminación, sea cual sea su causa. Esta garantía excluye los daños incidentales y consecuentes. Además, la garantía no cubre los casos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían según el territorio. Algunos países o jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no ser aplicable en su caso. Esta garantía es adicional a sus derechos legales como consumidor. La garantía anterior no podrá ser modificada salvo por escrito firmado por ambas partes.

Explicación de los símbolos

	Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un producto concreto.
	Indica el fabricante del producto.
	Este símbolo indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.
	Este símbolo indica que es necesario actuar con precaución al utilizar el dispositivo o control cerca de donde está colocado el símbolo, o que la situación actual requiere la atención del operador o la acción del operador para evitar consecuencias indeseables.
	Identificar un lugar donde se puede encontrar información, especialmente en caso de emergencia.
	Indica los límites de temperatura a los que puede exponerse con seguridad el producto.
	Indica el intervalo de humedad al que puede exponerse con seguridad el producto.

Especificaciones técnicas

Peso	63 g, 2,2 oz
Gama de frecuencias	20 Hz - 20 kHz
Impedancia	32 Ω +/- 10%.
Sensibilidad	113 dB/mW a 1 kHz
Color	Negro
Longitud del cable	1,2 metros
Conector	Clavija estéreo de 3,5 mm
Accesorios	BE9150 Fundas para auriculares
Configuración	Este auricular puede configurarse con los siguientes amplificadores personales: BE2021 Amplificador Personal Maxi Pro
Funcionamiento	Temperatura: 0° a 35° C, 32° a 95° F Humedad: 15% - 90%, sin condensación
En la caja	BE9233 Auriculares Supraaurales

 Para obtener información detallada sobre el producto, consulte el manual del usuario correspondiente.

FR Informations sur le produit

Lisez d'abord ceci

Cette notice vous explique comment utiliser et entretenir votre nouveau casque supra-auriculaire. Veuillez à lire attentivement cette notice, y compris la section **Avertissements**. Si vous avez d'autres questions, contactez votre audioprothésiste.

A propos du Casque supra-auriculaire BE9233

Groupe d'utilisateurs visé

Personnes de tous âges.

Utilisateur visé

Un utilisateur qui souhaite contrôler l'accord et le volume d'écoute.

Principe de fonctionnement

La famille de produits audio se compose de plusieurs amplificateurs et émetteurs de son qui ont été spécifiquement développés pour fournir une amélioration du son, même dans des situations exigeantes. Selon la fonction assignée à l'amplificateur ou à l'émetteur sonore, différents microphones peuvent être utilisés pour capter le son direct ou améliorer le son ambiant.

Principe de fonctionnement

La famille de produits audio se compose de plusieurs amplificateurs et émetteurs de son qui ont été spécialement conçus pour améliorer le son, même dans des situations difficiles. Selon la fonction assignée à l'amplificateur ou à l'émetteur, différents microphones peuvent être utilisés pour capter le son direct ou améliorer le son ambiant.

 Cet appareil ne rétablit pas une audition normale et ne prévient ni n'améliore une déficience auditive ou une surdité résultant de conditions organiques.

Avertissements généraux

Cette section contient des informations importantes sur la sécurité, la manipulation et les conditions d'utilisation. Conservez cette notice pour une utilisation ultérieure. Si vous venez d'installer l'appareil, cette notice doit être remise au propriétaire de la maison.

Avertissements de danger

- Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres blessures ou dommages à l'appareil ou à d'autres biens.
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- N'utilisez pas et ne rangez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues, des radiateurs, des fours ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne démontez pas l'appareil, il y a un risque d'électrocution. L'altération ou le démontage de l'appareil annule la garantie.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. N'exposez pas l'appareil à l'humidité.
- Protégez l'appareil des chocs pendant le stockage et le transport.
- Protégez les câbles de toute source potentielle de dommage.
- N'apportez aucune modification à cet appareil. N'utilisez que des accessoires d'origine Bellman & Symfon afin d'éviter tout choc électrique.
- L'appareil d'écoute connecté possède un amplificateur très puissant et le niveau sonore peut provoquer une gêne ou, dans des cas graves, mettre en danger l'audition si le produit est utilisé sans précaution. Baissez toujours le volume avant de mettre le casque.

Informations sur la sécurité du produit

- Le non-respect de ces instructions peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones où les équipements électroniques sont interdits.
- L'appareil ne peut être réparé que par un centre de service agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, contactez le point de vente, votre bureau local Bellman & Symfon ou le fabricant. Visitez le site **bellman.com** pour obtenir des informations de contact.
- Ne laissez pas tomber votre appareil. Une chute sur une surface dure peut l'endommager.

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. Évitez de faire pénétrer de l'humidité dans les ouvertures. N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers, d'aérosols, de solvants, d'alcool, d'ammoniaque ou de produits abrasifs. Cet appareil ne nécessite pas de stérilisation.

Service et assistance

Si l'appareil semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement, suivez les instructions du guide de l'utilisateur et de cette brochure. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas comme prévu, contactez votre audioprothésiste local pour obtenir des informations sur le service et la garantie.

Conditions de garantie

Bellman & Symfon garantit ce produit pendant 90 jours à compter de la date d'achat contre tout défaut dû à un vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions normales d'utilisation et de service et ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un démontage non autorisé ou d'une contamination, quelle qu'en soit la cause. Cette garantie exclut les dommages accessoires et indirects. En outre, la garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient en fonction du territoire. Certains pays ou juridictions n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur. La garantie ci-dessus ne peut être modifiée que par un écrit signé par les deux parties.

Explication du symbole

	Indique le numéro de série du fabricant afin de permettre l'identification d'un appareil spécifique.
	Indique le fabricant de l'appareil.
	Ce symbole indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.
	Ce symbole indique qu'il faut être prudent lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé, ou que la situation actuelle nécessite une prise de conscience ou une action de la part de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.
	Identifier un lieu où l'on peut trouver des informations, notamment en cas d'urgence.
	Indique les limites de température auxquelles l'appareil peut être exposé en toute sécurité.
	Indique la plage d'humidité à laquelle l'appareil peut être exposé en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

Poids	63 g, 2.2 oz
Gamme de fréquences	20 Hz - 20 kHz
Impédance	32 Ω +/- 10%
Sensibilité	113 dB/mW @ 1 kHz
Couleur	Noir
Longueur du câble	1,2 mètre
Connecteur	3,5 mm stéréo
Accessoires	BE9150 Housses D'écouteurs
Configuration	Ce casque peut être configuré avec l'amplificateur personnel suivant: BE2021 Amplificateur personnel Maxi Pro
Fonctionnement	Température: 0° à 35° C, 32° à 95° F Humidité: 15% - 90%, sans condensation
Dans la boîte	BE9233 Casque Supra-auriculaire

 Pour des informations détaillées sur le produit, consultez le mode d'emploi correspondant.

Bellman & Symfon North America Inc. PO Box 1388, Morrisville, North Carolina 27560, USA Phone: (910) 239-5796 Customer support: (833) BELLMAN or (833) 235-5626 Bellman & Symfon Asia Ltd. 1401 & 1408, Lailufeng International Centre 33 Jie Fang Road South Guangzhou, China Phone: +86 20 8318 2950	
Bellman & Symfon Group AB Södra Långebergsgatan 30 436 32 Askim Sweden Phone: +46 31 68 28 20 E-mail: info@bellman.com bellman.com	Revision: BE9233_027MAN1.0 Date of issue: 2025-02-12 © 2025 Bellman & Symfon AB. All rights reserved.

CN*Si* 产品信息

请先阅读

本手册将指导您如何使用和维护本带麦克风耳机。请务必仔细阅读本手册，包括**警告**部分。如有其他疑问，请联系您的经销商。

关于 BE9233 带麦克风耳机

目标用户群

所有年龄段的人。

目标用户

希望控制调谐和聆听音量的用户。

工作原理

音频产品系列由多个放大器和声音发射器组成，这些放大器和声音发射器专门用于在要求苛刻的情况下提供声音增强功能。根据特定放大器或声音发射器的指定功能，可以使用不同的麦克风来拾取直接声音或增强环境声音。

⚠ 本设备不能恢复正常听力，也不能预防或改善因器质性病变导致的听力损伤或耳聋。

一般警告

本节包含有关安全、处理和操作条件的重要信息。请保留本宣传页，以备将来使用。

⚠ 危险警告

- 不遵守这些安全说明可能会导致火灾、触电或其他伤害，或损坏设备或其他财产。
- 请将本设备放在 3 岁以下儿童接触不到的地方。
- 请勿在任何热源（如明火、散热器、烤箱或其他发热设备）附近使用或存放本设备。
- 请勿拆卸设备；否则有触电的危险。篡改或拆卸设备将导致保修失效。
- 请勿将设备暴露在潮湿环境中。
- 保护设备在存储和运输过程中免受冲击。
- 防止电缆受到任何潜在的损坏。
- 请勿对本设备进行任何更改或修改。仅使用 Bellman & Symfon 原装配件，以避免任何电击。
- 连接的听力设备具有非常强大的放大器，如果使用不当，音量可能会导致不适，严重时甚至危及听力。佩戴耳机前，请务必将音量调低。

ⓘ 产品安全信息

- 不遵守这些说明可能会导致设备损坏并使保修失效。
- 请勿在禁止使用电子设备的区域使用本设备。
- 耳机只能由授权服务中心维修。
- 如果您的设备出现问题，请联系购买点、当地 Bellman & Symfon 办事处或制造商。请访问 **bellman.com** 获取联系信息。
- 请勿将设备跌落。跌落到坚硬表面可能会损坏设备。

清洁

使用柔软的无绒布。避免开口处受潮。请勿使用家用清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或研磨剂。本设备无需消毒。

服务和支持

如果设备出现损坏或无法正常工作，请按照用户指南和本手册中的说明进行操作。如果产品仍然不能正常工作，请联系当地的经销商，了解有关服务和保修的信息。

保修条件

Bellman & Symfon 保证本产品自购买之日起 90 天内不会出现因材料或工艺缺陷造成的任何瑕疵。本保证仅适用于正常的使用和服务条件，不包括因意外、疏忽、误用、未经授权的拆卸或污染而造成的损坏。本保修不包括附带损害和间接损害。此外，保修不包括天灾，如火灾、洪水、飓风和龙卷风。

本保证书赋予您特定的法律权利，您可能拥有其他权利，这些权利因地区而异。某些国家或司法管辖区不允许限制或排除附带或间接损害赔偿，也不允许限制默示担保的持续时间，因此上述限制可能不适用于您。本保证是对您作为消费者的法定权利的补充。除非双方签署书面文件，否则不得更改上述保证。

符号解释

SN	表示制造商的序列号，以便识别特定设备。
🏭	表示设备制造商。
📖	该符号表示用户需要查阅使用说明。
⚠	该符号表示在靠近该符号的位置操作设备或控制装置时需要格外小心，或者当前情况需要操作员注意或采取行动，以避免造成不良后果。
ℹ	用于标识信息的位置，特别是在紧急情况下。
🔥	表示设备可以安全暴露的温度范围。
💧	表示设备可以安全暴露的湿度范围。

技术规格

重量	63 克, 2.2 盎司
频率范围	20 Hz - 20 kHz
阻抗	32 Ω +/- 10%
灵敏度	113 dB/mW @ 1 kHz
颜色	黑色
电缆长度	1.2 米
连接器	3.5 毫米立体声插头
配件	BE9150 耳机罩
配置	该耳机可配置以下个人交流器：BE2021 个人交流器 Maxi Pro
操作温度	温度：0° 至 35° C, 32° 至 95° F 湿度：15% 至 90%，无冷凝
包装盒内	BE9233 带麦克风耳机

- ⓘ 有关详细产品信息，请参阅相应的用户手册。

CN*Tr* 產品資訊

請先閱讀

本單張教您如何使用和保養您的本帶麥克風耳機。請務必仔細閱讀本單張，包括**警告**部分。如果您有其他問題，請聯絡您的經銷商。

關於 BE9233 帶麥克風耳機

使用者群組

所有年齡層的人士。

預期使用者

想要控制調音和聆聽音量的使用者。

運作原理

音訊產品系列包含多種放大器和聲音傳送器，這些產品都是特別為了在嚴苛的環境下仍能提供聲音強化效果而開發。根據特定放大器或聲音發射器的指定功能，可使用不同的麥克風來擷取直接聲音或增強環境聲音。

本裝置無法恢復正常聽力，也無法預防或改善由器質性病變造成的聽力損傷或耳聾。

一般警告

本節包含有關安全、處理和操作條件的重要資訊。請妥善保存本說明書，以備日後使用。

⚠ 危險警告

- 若未遵循這些安全說明，可能會導致火災、觸電或其他傷害，或損壞裝置或其他財產。
- 請勿讓 3 歲以下兒童接觸本裝置。
- 請勿在任何熱源附近使用或存放本裝置，例如明火、散熱器、烤箱或其他會產生熱能的裝置。
- 請勿拆卸本裝置，否則有觸電的危險。篡改或拆卸本裝置將導致保固失效。
- 請勿將本裝置暴露於濕氣中。
- 保護裝置在儲存和運輸過程中不受震動。
- 防止纜線受到任何可能來源的損害。
- 請勿對本裝置進行任何變更或修改。請僅使用 Bellman & Symfon 原廠配件，以避免任何電擊。
- 接的聆聽裝置具有非常強大的擴音器，如果不小心使用本產品，其音量可能會造成不適，嚴重時甚至會危及聽力。戴上耳機麥克風之前，請務必先將音量調低。

產品安全資訊

- 不遵守這些指示可能會導致裝置損壞，並使保固失效。
- 請勿在禁止使用電子設備的區域使用本裝置。
- 本裝置只能由授權的維修中心維修。
- 如果您的裝置遇到問題，請與購買點、當地的 Bellman & Symfon 辦公室或製造商聯繫。請造訪 **bellman.com** 以取得聯絡資訊。
- 請勿掉落您的裝置。掉落到硬表面可能會損壞裝置。

清潔

使用柔軟、不起毛的布。避免濕氣進入開口。請勿使用家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水或研磨劑。本裝置不需要消毒。

服務與支援

如果裝置出現損壞或無法正常運作，請按照使用者指南和本單張的指示操作。如果產品仍無法正常運作，請聯絡您當地的經銷商，以取得有關服務和保固的資訊。

保固條件

Bellman & Symfon 保證本產品自購買日起 90 天內，不會因材料或製造過程的錯誤而產生任何瑕疵。本保證僅適用於正常的使用和服務狀況，不包括因意外、疏忽、誤用、未經授權的拆卸或污染而造成的損壞，無論其原因為何。本保證不包括意外及間接損害。此外，保固不包括天災，如火災、水災、颶風和龍捲風。

本保證賦予您特定的法律權利，您也可能擁有其他權利，這些權利因地區而異。某些國家或司法管轄區不允許限制或排除附帶或間接損害，或限制默示保證的期限，因此上述限制可能不適用於您。本保證是您作為消費者的法定權利的補充。上述保證不得更改，除非有本保證雙方簽署的書面文件。

符号解释

SN	表示制造商的序列号，以便识别特定设备。
🏭	表示设备制造商。
📖	该符号表示用户需要查阅使用说明。
⚠	该符号表示在靠近该符号的位置操作设备或控制装置时需要格外小心，或者当前情况需要操作员注意或采取行动，以避免造成不良后果。
ℹ	用于标识信息的位置，特别是在紧急情况下。
🔥	表示设备可以安全暴露的温度范围。
💧	表示设备可以安全暴露的湿度范围。

技術規格

重量	63 克, 2.2 盎司
頻率範圍	20 Hz - 20 kHz
阻抗	32 Ω +/- 10%
靈敏度	113 dB/mW @ 1 kHz
顏色	黑色
線長	1.2 公尺
連接器	3.5 mm 立體聲插頭
配件	BE9150 耳機套
配置	此耳機可與下列個人交流器：BE2021 個人交流器 Maxi Pro
操作	溫度：0° 至 35° C, 32° 至 95° F 濕度：15% - 90%，不凝結
包裝盒內	BE9233 帶麥克風耳機

- ⓘ 如需詳細的產品資訊，請參閱相對應的使用者手冊。

JP 製品情報

まず最初にこちらをお読みください

このリーフレットでは、新しいオンイヤーヘッドセットの使用方法和メンテナンス方法について説明しています。**警告**セクションを含め、このリーフレットを注意深くお読みください。さらにご質問がある場合は、補聴器販売店までお問い合わせください。

BE9233 オンイヤーヘッドセットについて

想定されるユーザーグループ

あらゆる年齢層の方。

想定されるユーザー

チューニングとリスニング音量のコントロールを希望するユーザー。

動作原理

このオーディオ製品群は、厳しい環境下でも音質を向上させるために特別に開発された複数のアンプとサウンドトランスミッターで構成されています。特定のアンプまたはサウンドトランスミッターの機能に応じて、直接音を拾うためのマイクや周囲の音を増幅するためのマイクが使用されます。

⚠ この装置は、通常の聴力を回復させるものではなく、また、器質性難聴による聴力障害や難聴を防止または改善するものではありません。

一般的な警告

このセクションには、安全、取り扱い、動作条件に関する重要な情報が記載されています。このリーフレットは、将来使用できるように保管しておいてください。この装置を設置する場合は、このリーフレットを家主にお渡しください。

⚠ 危険に関する警告

- これらの安全に関する指示に従わない場合、火災、感電、その他の傷害、装置やその他の物的損 害の原因となることがあります。
- この装置は、3 歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 裸火、ラジエーター、オープン、その他の熱を発する装置などの熱源の近くで、本装置を使用または保管しないでください。
- 感電の危険があります。感電の恐れがあります。本装置に手を加えたり、分解したりすると、保証が無効になります。
- この装置は屋内専用です。デバイスを湿気にさらさないでください。
- 保管中および輸送中の衝撃から装置を保護してください。
- ケーブルをあらゆる潜在的な損傷源から保護してください。
- ケーブルに変更や修正を加えないでください。感電を避けるため、Bellman & Symfonの純正アクセサリのみを使用してください。
- 接続されたリスニングデバイスには非常に強力なアンプが搭載されており、音量によっては不快感が生じたり、場合によっては聴覚に危険が及ぶこともあります。ヘッドセットを装着する前に、必ず音量を低く設定してください。

ⓘ 製品の安全に関する情報

- これらの指示に従わない場合、デバイスが損傷し、保証が無効になることがあります。
- 電子機器の使用が禁止されている場所では、デバイスを使用しないでください。
- 本デバイスの修理は、認定サービスセンターでのみ行うことができます。
- 機器に問題が発生した場合は、購入先、最寄りの Bellman & Symfon オフィス、または製造元にお問い合わせください。連絡先については、**bellman.com**をご覧ください。
- デバイスを落とさないでください。硬い面に落とすと破損することがあります。

クリーニング

柔らかく、糸くずの出ない布を使用してください。開口部に水分が入らないようにしてください。家庭用クリーナー、エアゾールスプレー、溶剤、アルコール、アンモニア、研磨 剤は使用しないでください。本機は滅菌の必要はありません。

サービスおよびサポート

装置が損傷しているように見えたり、正しく機能しない場合は、ユーザーガイドと本 リーフレットの指示に従ってください。それでも製品が意図したとおりに機能しない場合は、お近くの補聴器専門店まで、サービスおよび保証に関する情報をお問い合わせください。

保証条件

Bellman & Symfonは、購入日から90日間、材料または製造上の欠陥による不具合が発生した場合に、本製品を保証します。この保証は、通常の使用およびサービスにのみ適用され、事故、不注意、誤用、無断での分解、または汚染（原因を問わず）による損傷は保証の対象外となります。この保証は、付随的または派生的な損害を除外します。さらに、火災、洪水、ハリケーン、竜巻などの不可抗力による損傷は保証の対象外となります。

本保証はお客様に特定の法的権利を付与するものであり、地域によってその他の権利を有する場合もあります。一部の国または管轄区域では、付随的または派生的な損害の制限または除外、または黙示的な保証の期間制限が認められていないため、上記の制限がお客様に適用されない場合があります。本保証は、消費者としての法的権利に加えて付与されるものです。本保証は、両当事者が署名した書面による場合を除き、変更することはできません。

シンボル説明

SN	製造者のシリアル番号を示し、特定のデバイスを識別できるようにします。
🏭	デバイスの製造元を示します。
📖	この記号は、ユーザーが使用説明書を参照する必要があることを示しています。
⚠	このシンボルは、シンボルが置かれている場所の近くで装置や制御を操作する際に注意が必要であること、または望ましくない結果を避けるために、オペレーターが状況を認識し、オペレーターの行動が必要であることを示しています。
ℹ	特に緊急時に、情報を入力できる場所を特定すること。
🔥	デバイスを安全にさらすことのできる温度限界を示します。
💧	その機器が安全にさらされることのできる湿度の範囲を示します。

技術仕様

重量	63g
周波数範囲	20 Hz - 20 kHz
インピーダンス	32 Ω +/-10
感度	113 dB/mW @ 1 kHz
カラー	ブラック
ケーブル長	1.2 m
コネクター	3.5 mm ステレオプラグ
付属品	BE9150 ヘッドフォンカバー
構成	このヘッドセットは次のように構成できます。パーソナルアンプ BE2021 高性能集音器 Maxi Pro
動作	温度：0°から35°C、32°から95°F 湿度：15% から 90%、結露なし
同梱物	BE9233 オンイヤーヘッドセット

- ⓘ 製品の詳細情報については、対応するユーザーマニュアルを参照してください。