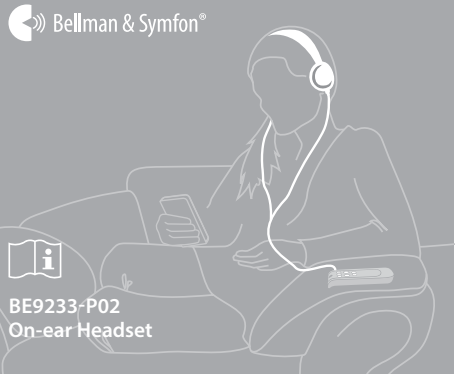




Product information

Read this first

This booklet guides you on how to use and maintain your new On-ear Headset. Ensure you read this booklet carefully, including the **Warnings** section. If you have additional questions, contact your hearing care professional.

About the BE9233-P02 On-ear Headset

Intended purpose

The intended purpose of the audio product family is to amplify the volume and improve the speech intelligibility during conversations and TV-listening. It can also be used with other sound sources.

Intended user group

The intended user group consists of people of all ages experiencing mild to severe hearing loss who need sound amplification in different situations.

Intended user

The intended user is a person with mild to severe hearing loss who needs sound amplification.

Principle of operation

The audio product family consists of several amplifiers and sound transmitters which have been specifically developed to provide sound enhancement even in demanding situations. Depending on the assigned function of the specific amplifier or sound transmitter, different microphones can be used to pick up direct sound or enhance the ambient sound.

- This device will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment or deafness resulting from organic conditions.

General warnings

This section contains important information about safety, handling and operating conditions. Keep this leaflet for future use. If you are just installing the device, this leaflet must be given to the householder.

Hazard warnings

- Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to the device or other property.
- Keep this device out of reach of children under 3 years.
- Do not use or store this device near any heat sources such as naked flames, radiators, ovens or other devices that produce heat.
- Do not dismantle the device; there is a risk of electric shock. Tampering with or dismantling the device will void warranty.
- This device is designed for indoor use only. Do not expose the device to moisture.
- Protect the device from shocks during storage and transport.
- Protect cables from any potential source of damage.
- Do not make any changes or modifications to this device. Use only original Bellman & Symfon accessories to avoid any electrical shock.
- The connected listening device has a very powerful amplifier and the sound level can cause discomfort or, in serious cases, endanger hearing if the product is used carelessly. Always turn the volume down to a low level before putting on the headset!

- Information on product safety**
- Failure to follow these instructions could result in damage to the device and void the warranty.
- Do not use the device in areas where electronic equipment is prohibited.
- The device may only be repaired by an authorized service center.
- If a serious incident occurs in relation to this device, contact the manufacturer and relevant authority.
- If you encounter other problems with your device, contact the point of purchase, your local Bellman & Symfon office or the manufacturer. Visit bellman.com for contact info.
- Do not drop your device. Dropping onto a hard surface can damage it.

Cleaning

Disconnect all cables before you clean your device. Use a soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings. Do not use household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia or abrasives. This device does not require sterilization.

Service and support

If the device appears to be damaged or doesn't function properly, follow the instructions in the user guide and this leaflet. If the product still doesn't function as intended, contact your local hearing care professional for information on service and warranty.

Warranty conditions

Bellman & Symfon guarantees this product for 90 days from date of purchase against any defects that are due to faulty

materials or workmanship. This guarantee only applies to normal conditions of use and service, and does not include damage resulting from accident, neglect, misuse, unauthorized dismantling, or contamination however caused. This guarantee excludes incidental and consequential damage. Furthermore, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary with territory. Some countries or jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This guarantee is in addition to your statutory rights as a consumer. The above warranty may not be altered except in writing signed by both parties hereto.

Compliance information

Herby Bellman & Symfon declares that, in Europe, this product is in compliance with the essential requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. The full text of the declaration of conformity can be obtained from the Bellman & Symfon website bellman.com.

Symbol explanation

MD Indicates the item is a medical device.

UDI Indicates a carrier that contains unique device identifier information.

REF Indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

SN Indicates the manufacturer's serial number so that a specific medical device can be identified.

REF Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified.

MD Indicates the medical device manufacturer.

i This symbol indicates the need for the user to consult the instructions for use.

! This symbol indicates that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.

i To identify a place where information may be found, especially in an emergency.

! Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed.

% Indicates the range of humidity to which the medical device can be safely exposed.

Technical specifications

Weight	63 g
Frequency range	20 Hz – 20 kHz
Impedance	32 Ω +/- 10%
Sensitivity	113 dB/mW @ 1 kHz
Colour	Black
Cable length	1.2 meters
Connector	3.5 mm stereo plug
Accessories	BE9150 Headphone covers
Configuration	This headset can be configured with the following personal amplifier: BE2021-C Maxi Pro Personal Amplifier
Operation	Temperature: 0° to 35° C Humidity: 15% – 90%, non-condensing
In the box	BE9233-P02 On-ear Headset

i For detailed product information, see the corresponding user manual.

DE Produktinformationen

Lesen Sie dies zuerst

Diese Broschüre enthält Anweisungen zur Verwendung und Wartung Ihres neuen Kopfhörer-Headsets. Lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch, einschließlich des Abschnitts **Warnhinweise**. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker.

Über das BE9233-P02 Kopfhörer-Headset

Verwendungszweck Der Verwendungszweck der Audioproduktfamilie besteht darin, die Lautstärke zu verstärken und die Sprachverständlichkeit bei Gesprächen und beim Fernsehen zu verbessern. Sie kann auch mit anderen Tonquellen verwendet werden.

Vorgesehene Anwendergruppe Die vorgesehene Anwendergruppe besteht aus Menschen jeden Alters mit leichtem bis schwerem Hörverlust, die in verschiedenen Situationen eine Klangverstärkung benötigen.

Vorgesehener Anwender Der vorgesehene Anwender ist eine Person mit leichtem bis schwerem Hörverlust, die eine Klangverstärkung benötigt.

Funktionsprinzip Die Produktfamilie der Audioprodukte besteht aus mehreren Verstärkern und Sendern, die speziell dafür entwickelt wurden, auch in schwierigen Situationen eine Klangverbesserung zu bieten. Je nach zugewiesener Funktion des jeweiligen Verstärkers oder Senders können verschiedene Mikrofone verwendet werden, um den direkten Schall aufzunehmen oder den Umgebungsschall zu verstärken.

! Dieses Gerät stellt kein normales Gehör wieder her und kann eine organisch bedingte Hörminderung oder Taubheit weder verhindern noch verbessern.

Allgemeine Warnhinweise

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Handhabung und Betriebsbedingungen. Behalten Sie diese Broschüre den nächsten Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät nur installieren, muss diese Broschüre dem Hausbesitzer ausgehändigt werden.

Gefahrenhinweise

- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder Schäden am Gerät oder an anderen Sachwerten führen.
- Behalten Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie offenen Flammen, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Durch Manipulation oder Demontage des Geräts erlischt die Garantie.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Schützen Sie das Gerät während der Lagerung und des Transports vor Stößen.
- Schützen Sie die Kabel vor möglichen Beschädigungen.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät vor. Verwenden Sie nur Originalzubehör von Bellman & Symfon, um Stromschläge zu vermeiden.
- Das angeschlossene Hörgerät verfügt über einen sehr leistungsstarken Verstärker und der Schallpegel kann bei unsachtmser Verwendung zu Unbehagen führen oder in schweren Fällen das Gehör gefährden. Drehen Sie die Lautstärke immer auf einen niedrigen Pegel, bevor Sie das Headset aufsetzen!

i Informationen zur Produktsicherheit

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen elektronische Geräte verboten sind.

Das Gerät darf nur von einem autorisierten Service-Center repariert werden.

Wenn im Zusammenhang mit diesem Gerät ein schwerwiegender Vorfall auftritt, wenden Sie sich an den Hersteller und die zuständige Behörde.

Wenn Sie andere Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, Ihr örtliches Bellman & Symfon-Büro oder den Hersteller. Visit bellman.com für Kontaktinformationen.

- Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen. Wenn es auf eine harte Oberfläche fällt, kann es beschädigt werden.

Reinigung

Trennen Sie alle Kabel, bevor Sie Ihr Gerät reinigen. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in die Öffnungen gelangt. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel. Dieses Gerät muss nicht sterilisiert werden.

Dienstleistungen und Unterstützung Wenn das Gerät beschädigt zu sein scheint oder nicht richtig funktioniert, befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch und in dieser Broschüre. Wenn das Produkt immer noch nicht wie vorgesehen funktioniert, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Hörgeräteakustiker, um Informationen zu Dienstleistungen und Garantie zu erhalten.

Garantiebedingungen

Bellman & Symfon gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 90 Tagen ab Kaufdatum gegen jegliche Mängel, die auf fehlerhafte Materialien oder Verarbeitung zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt nur für normale Nutzungs- und Dienstleistungsbedingungen und umfasst keine Schäden, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit, Missbrauch, unbefugte Demontage oder Kontamination, wie auch immer verursacht, entstehen. Diese Garantie schließt zufällige und Folgeschäden aus. Darüber hinaus deckt die Garantie keine Fälle höherer Gewalt ab, wie z. B. Feuer, Überschwemmungen, Hurrikane und Tornados.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Je nach Land können Sie auch andere Rechte haben. In einigen Ländern oder Rechtsprechungen ist die Beschränkung oder der Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden oder die Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, sodass die oben genannte Beschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft. Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher. Die oben genannte Garantie darf nur schriftlich und von beiden Parteien unterzeichnet geändert werden.

Information zur Einhaltung von Vorschriften Hiermit erklärt Bellman & Symfon, dass dieses Produkt in Europa den grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist auf der Bellman & Symfon-Website bellman.com verfügbar.

Erklärung der Symbole

MD Gibt an, dass es sich bei dem Artikel um ein medizinisches Gerät handelt.

UDI Gibt an, dass ein Träger eindeutige Informationen zur Gerätekenung enthält.

MD Gibt den Hersteller des medizinischen Geräts an.

! Bedeutet, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden darf, sondern zur Wiederverwertung und zum Recycling an separate Sammelstellen übergeben werden muss.

SN Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes medizinisches Gerät identifiziert werden kann.

REF Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das medizinische Gerät identifiziert werden kann.

i Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, dass er die Gebrauchsanweisung lesen muss.

! Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit des Bedieners erfordert oder ein Eingreifen des Bedieners erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.

i Einen Ort zu finden, an dem Informationen zu finden sind, insbesondere in Notfällen.

! Gibt die Temperaturgrenzen an, denen das medizinische Gerät sicher ausgesetzt werden kann.

% Gibt den Bereich der Luftfeuchtigkeit an, dem das medizinische Gerät sicher ausgesetzt werden kann.

Technische Daten	
Gewicht	63 g
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Impedanz	32 Ω +/- 10%
Empfindlichkeit	113 dB/mW bei 1 kHz
Farbe	Schwarz
Kabellänge	1,2 Meter
Anschluss	3,5-mm Stereo-Klinikenstecker
Zubehör	BE9150 Kopfhörerabdeckungen
Konfiguration	Dieses Headset kann mit dem folgenden persönlichen Verstärker konfiguriert werden: BE2021-C Maxi Pro Hörverstärker
Betrieb	Temperatur: 0° bis 35° C Luftfeuchtigkeit: 15 % – 90 %, nicht kondensierend
Lieferumfang	BE9233-P02 Kopfhörer-Headset

i Detaillierte Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

DK Information om produktet

Læs dette først

Dette hæfte vejleder dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dit nye hovedtelefon. Sørg for at læse denne pjace omhyggeligt, herunder afsnittet **Advarsler**. Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din høreapparatspecialist.

Om BE9233-P02 Hovedtelefonen

Tilslaget formål

Det tilsigtede formål med lydproduktfamilien er at forstærke lydstyrken og forbedre taleforståeligheden under samtaler og tv-lytning. Det kan også bruges sammen med andre lydtilkred.

Tilrættet brugergruppe Den tilrættede brugergruppe består af mennesker i alle aldre med mildt til svært høretab, som har brug for lydforstærkning i forskellige situationer.

Tilrættet bruger Den tilrættede bruger er en person med mildt til svært høretab, som har brug for lydforstærkning.

Funktionsprincip Audioproduktfamilien består af flere forstærkere og lydsendere, som er specielt udviklet til at give lydforbedring selv i krevende situationer. Afhængigt af den specifikke forstærkers eller lydsenders tilfældte funktion kan der bruges forskellige mikrofoner til at opfange direkte lyd eller forbedre den omgivende lyd.

! Denne enhed vil ikke genoprette normal hørelse og vil ikke forhindre eller forbedre en høresensættelse eller døvhed som følge af organiske forhold.

Generelle advarsler

Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, håndtering og driftsbestigelser. Opbevar denne folder til fremtidig brug. Hvis du kan installere enheden, skal denne folder gives til husstanden.

Advarsler om farer

- Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan resultere i brand, elektrisk stød eller anden personskade eller skade på enheden eller anden ejendom.
- Opbevar denne enhed utilgængeligt for børn under 3 år.
- Brug eller opbevar ikke denne enhed i nærheden af varmekilder som f.eks. åben ild, radiatorer, ovne eller andre enheder, der producerer varme.
- Skil ikke enheden ad; der er risiko for elektrisk stød. Garantien forfalder, hvis der pilles ved eller afmonteres enheden.
- Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Udset ikke enheden for fugt.
- Beskyt enheden mod stød under opbevaring og transport.
- Beskyt kablerne mod enhver potentiell kilde til skade.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer af denne enhed. Brug kun originalt Bellman & Symfon-tilbehør for at undgå elektrisk stød.
- Den tilsluttede lytteenhed har en meget kraftig forstærker, og lyttevævet kan forårsage ubehag eller i alvorlige tilfælde bringe hørenerve i fare, hvis produktet bruges uforståeligt. Skru altid ned til et lavt niveau, før du tager headsettet på!

i Se den tilsvarende brugervejledning for detaljerede produktoplysninger.

i Oplysninger om produktsikkerhed

- Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan enheden blive beskadiget, og garantien forfalder.
- Brug ikke enheden i nærheden af, hvor elektrisk udstyr er forbudt.
- Enheden må kun repareres af et autoriseret servicecenter.
- Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med denne enhed, skal du kontakte producenten og den relevante myndighed.
- Hvis der opstår andre problemer med enheden, skal du kontakte kabsstedet, dit lokale Bellman & Symfon-kontor eller producenten. Visit bellman.com for kontaktoplysninger.
- Tab ikke din enhed. Den kan blive beskadiget, hvis du taber den på en hård overflade.

Rengøring

Aftryd alle kabler, før du rengør din enhed. Brug en blød, fugtfulg klud. Undgå at få fugt ind i åbningerne. Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, aerosolsprayer, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller silbemidler. Denne enhed kræver ikke sterilisering.

Service og støtte

Hvis enheden ser ud til at være beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du følge instruktionerne i brugervejledningen og denne folder. Hvis produktet stadig ikke fungerer efter hensigten, skal du kontakte din lokale høreapparatspecialist for at få oplysninger om service og garanti.

Garantibetingelser

Bellman & Symfon garanterer dette produkt i 90 dage fra købsdatoen mod eventuelle defekter, der skyldes materiale- eller fabricationsfejl. Denne garanti gælder kun for normal brug og service og omfatter ikke skader som følge af ulykker, forsømmelse, misbrug, autoriseret demontering eller forurening, uanset hvordan de er opstået. Denne garanti udelukker tilfældige skader og følgeskader. Desuden dækker garantien ikke naturkatastrofer som f.eks. brand, oversvømmelse, orkaner og tornadoer.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer med territoriet. Nogle lande eller jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af tilfældige skader eller følgeskader eller begrænsning af, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti er et supplement til dine lovbestemte rettigheder som forbruger. Ovenstående garanti må ikke ændres, medmindre det sker skriftligt og er underskrevet af begge parter.

Information om overholdelse

Herméd erklærer Bellman & Symfon, at dette produkt i Europa er i overensstemmelse med de væsentlige krav i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745. Den fulde tekst til overensstemmelseserklæringen kan hentes på Bellman & Symfon's hjemmeside bellman.com.

Forklaring af symboler

MD Angiver at varen er en medicinsk enhed.

UDI Angiver en bærer, der indeholder unikke oplysninger om enhedens identifikation.

! Angiver at produktet ikke må bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til separate indsamlingsanlæg til genbrug og genanvendelse.

SN Angiver producentens serienummer, så et specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.

REF Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.

MD Angiver producenten af det medicinske udstyr.

i Dette symbol viser, at brugeren skal læse brugsanvisningen..

! Dette symbol angiver, at der skal udvises forsigtighed ved betjening af enheden eller kontroller i nærheden af, hvor symbolet er placeret, eller at den aktuelle situation kræver, at operatoren er opmærksom eller handler for at undgå uønskede konsekvenser.

i At identificere et sted, hvor man kan finde oplysninger, især i en nødsituation.

! Angiver de temperaturgrenser, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.

% Angiver det fugtighedsområde, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.

Tekniske specifikationer

Vægt	63 g
Frekvensområde	20 Hz - 20 kHz
Impedans	32 Ω +/- 10
Følsomhed	113 dB/mW @ 1 kHz
Farve	Sort
Kabellængde	1,2 meter
Stik	3,5 mm stereostik
Tilbehør	BE9150 Cover til hovedtelefoner
Konfiguration	Dette headset kan konfigureres med følgende personlige forstærker: BE2021-C Maxi Pro Personlig Høreforstærker
Drift	Temperatur: 0° til 35° C Luftfugtighed: 15 % - 90 %, ikke-kondenserende
I kassen	BE9233-P02 Hovedtelefoner til øret

i Se den tilsvarende brugervejledning for detaljerede produktoplysninger.

ES Información sobre el producto

Lea esto primero

Este folleto le guiará en el uso y mantenimiento de sus nuevos auriculares supraaurales. Asegúrese de leer este folleto detenidamente, incluida la sección **Advertencias**. Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en contacto con su audioprotesista.

Información sobre el cumplimiento

Por la presente, Bellman & Symfon declara que, en Europa, este producto cumple los requisitos esenciales del Reglamento sobre productos sanitarios (UE) 2017/745. El texto completo de la declaración de conformidad puede obtenerse en el sitio web de Bellman & Symfon bellman.com.

Grupo de usuarios previsto

El Grupo de usuarios previsto está formado por personas de todas las edades con pérdidas auditivas de leves a severas que necesitan amplificación del sonido en diferentes situaciones.

Usuario previsto

El Usuario previsto es una persona con pérdida de audición de leve a severa que necesita amplificación del sonido.

Principio de funcionamiento

La familia de productos de audio consta de varios amplificadores y transmisores de sonido que se han desarrollado específicamente para proporcionar una mejora del sonido incluso en situaciones exigentes. Dependiendo de la función asignada al amplificador o transmisor de sonido específico, se pueden utilizar distintos micrófonos para captar el sonido directo o realizar el sonido ambiente.

! Este aparato no restablecerá la audición normal y no evitará ni mejorará una deficiencia auditiva o una sordera derivada de afecciones orgánicas.

Advertencias generales

Esta sección contiene información importante sobre seguridad, manejo y condiciones de funcionamiento. Conserve este folleto para un uso futuro. Si acaba de instalar el aparato, entregue este folleto al propietario.

! Advertencias de peligro

- El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones o daños al aparato o a otros bienes.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- No utilice ni guarde este aparato cerca de fuentes de calor como llamas, radiadores, hornos u otros aparatos que produzcan calor.
- No desmonte el aparato; existe riesgo de descarga eléctrica. La manipulación o el desmontaje del aparato anulará la garantía.
- Este aparato está diseñado únicamente para su uso en interiores. No exponga el aparato a la humedad.
- Proteja el aparato de golpes durante su almacenamiento y transporte.
- Proteja los cables de cualquier fuente potencial de daños.
- No realice cambios ni modificaciones en este aparato. Utilice únicamente accesorios originales de Bellman & Symfon para evitar cualquier descarga eléctrica.
- El aparato de escucha conectado tiene un amplificador muy potente y el nivel de sonido puede causar molestias o, en casos graves, poner en peligro la audición si el producto se utiliza de forma descuidada. Baje siempre el volumen a un nivel bajo antes de ponerse los auriculares.

i Información sobre la seguridad de los productos

- El incumplimiento de estas instrucciones podría dañar el aparato y anular la garantía.
- No utilice el aparato en zonas donde esté prohibido el uso de equipos electrónicos.
- El aparato sólo puede ser reparado por un centro de servicio autorizado.
- Si se produce un incidente grave relacionado con este aparato, póngase en contacto con el fabricante y con la autoridad competente.
- Si tiene otros problemas con su aparato, póngase en contacto con el punto de compra, con su oficina local de Bellman & Symfon o con el fabricante. Visite bellman.com para obtener información de contacto.
- No deje caer su dispositivo. Si lo deja caer sobre una superficie dura puede dañarlo.

Tarjetas de información Tarjetas de información sobre la seguridad de los productos

! El incumplimiento de estas instrucciones podría dañar el aparato y anular la garantía.

! No utilice el aparato en zonas donde esté prohibido el uso de equipos electrónicos.

! El aparato sólo puede ser reparado por un centro de servicio autorizado.

! Si se produce un incidente grave relacionado con este aparato, póngase en contacto con el fabricante y con la autoridad competente.

- Si tiene otros problemas con su aparato, póngase en contacto con el punto de compra, con su oficina local de Bellman & Symfon o con el fabricante. Visite bellman.com para obtener información de contacto.
- No deje caer su dispositivo. Si lo deja caer sobre una superficie dura puede dañarlo.

! Este aparato no restablecerá la audición normal y no evitará ni mejorará una deficiencia auditiva o una sordera derivada de afecciones orgánicas.

Informazioni sul prodotto

Legga questo prima

Questo libretto la guida all'uso e alla manutenzione della sua nuova cuffia on-ear. Si assicuri di leggere attentamente questo libretto, compresa la sezione **Avvertenze**. Se ha ulteriori domande, si rivolga al suo audioprotesista.

Informazioni sulle BE9233-P02 Cuffie On-ear

Scopo previsto

Lo scopo previsto della famiglia di prodotti audio è quello di amplificare il volume e migliorare l'intelligibilità del parlato durante le conversazioni e l'ascolto della TV. Può essere utilizzato anche con altre fonti sonore.

Gruppo di utenti previsti

Il Gruppo di utenti previsti è costituito da persone di tutte le età con perdite uditive da lievi a gravi, che hanno bisogno di un'amplificazione del suono in diverse situazioni.

Utente previsto

L'utente previsto è una persona con perdita uditiva da lieve a grave che ha bisogno di un'amplificazione del suono.

Gruppo di utenti previsti

La famiglia di prodotti audio è composta da diversi amplificatori e trasmettitori di suono che sono stati sviluppati specificamente per fornire un miglioramento del suono anche in situazioni difficili. A seconda della funzione assegnata all'amplificatore o al trasmettitore audio specifico, si possono utilizzare diversi microfoni per captare il suono diretto o migliorare il suono ambientale.

Questo dispositivo non ripristina l'udito normale o non previene o migliora un'ipoacusia o una sordità derivante da condizioni organiche.

Avvertenze generali

Questa sezione contiene informazioni importanti sulla sicurezza, la manipolazione e le condizioni operative. Conservi questo opuscolo per un uso futuro. Se sta installando il dispositivo, questo foglio deve essere consegnato al proprietario della casa.

Avvertenze di pericolo

- La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni al dispositivo o ad altri beni.

- Tenga questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

- Non utilizzi o conservi questo dispositivo vicino a fonti di calore come fiamme libere, termosifoni, forni o altri dispositivi che producono calore.

- Non smonti il dispositivo; esiste il rischio di scosse elettriche. La manomissione o lo smontaggio del dispositivo annullerà la garanzia.

- Questo dispositivo è progettato solo per uso interno. Non esponga il dispositivo all'umidità.

- Proteggia il dispositivo dagli urti durante la conservazione e il trasporto.

- Proteggia i cavi da qualsiasi potenziale fonte di danno.

- Non apporti modifiche o cambiamenti a questo dispositivo. Utilizzi solo accessori originali Belman & Symfon per evitare scosse elettriche.

- Il dispositivo d'ascolto collegato è dotato di un amplificatore molto potente e il livello sonoro può causare disagio o, in casi gravi, mettere in pericolo l'udito se il prodotto viene utilizzato in modo incauto. Abbassi sempre il volume a un livello basso prima di indossare le cuffie!

Informazioni sulla sicurezza dei prodotti

- La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

- Non utilizzi il dispositivo in aree in cui è vietato l'uso di apparecchiature elettroniche.

- Il dispositivo può essere riparato solo da un centro servizi autorizzato.

- Se si verifica un incidente grave in relazione a questo dispositivo, contatta il produttore e le autorità competenti.

- Se riscontra altri problemi con il dispositivo, contatti il punto vendita, l'ufficio locale di Belman & Symfon o il produttore. Visiti il sito **bellman.com** per le informazioni di contatto.

- Non faccia cadere il dispositivo. La caduta su una superficie dura può danneggiarlo.

Pulizia

Prima di pulire il dispositivo, scolleghi tutti i cavi. Utilizzi un panno morbido e privo di pelucchi. Eviti che l'umidità penetri nelle aperture. Non utilizzi detergenti domestici, spray, solventi, alcol, ammoniaci o abrasivi. Questo dispositivo non richiede la sterilizzazione.

Servizio e supporto

Se il dispositivo sembra danneggiato o non funziona correttamente, segua le istruzioni contenute nel manuale d'uso e in questo foglio. Se il prodotto continua a non funzionare come previsto, contatti il suo audioprotesista di fiducia per informazioni sul servizio e sulla garanzia.

Condizioni di garanzia

Belman & Symfon garantisce questo prodotto per 90 giorni dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto dovuto a materiali o lavorazione difettosi. Questa garanzia si applica solo alle normali condizioni d'uso e di servizio e non include i danni derivanti da incidenti, negligenza, uso improprio, smontaggio non autorizzato o contaminazione, in qualsiasi modo causati. Questa garanzia esclude i danni incidentali e consequenziali. Inoltre, la garanzia non copre gli Atti Di Dio, come incendi, inondazioni, uragani e tornado.

La presente garanzia le conferisce diritti legali specifici e potrebbe

avere anche altri diritti che variano a seconda del territorio. Alcuni Paesi o giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione di danni incidentali o consequenziali, o limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile a lei. Questa garanzia si aggiunge ai suoi diritti legali di consumatore. La garanzia di cui sopra non può essere modificata se non in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

Informazioni sulla conformità

Con la presente Belman & Symfon dichiara che, in Europa, questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web Belman & Symfon **bellman.com**.

Spiegazione del simbolo

	MD	Indica che l'articolo è un dispositivo medico.
	UDI	Indica un vettore che contiene informazioni univoche sull'identificativo del dispositivo.
		Indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto indifferenziato, ma deve essere inviato a centri di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.
	SN	Indica il numero di serie del produttore, in modo da poter identificare un dispositivo medico specifico.
	REF	Indica il numero di catalogo del produttore, in modo da poter identificare il dispositivo medico.
		Indica il produttore del dispositivo medico.
		Questo simbolo indica la necessità di consultare le istruzioni per l'uso.
		Questo simbolo indica che è necessario prestare attenzione quando si aziona il dispositivo o il comando in prossimità del punto in cui è posizionato il simbolo, oppure che la situazione attuale richiede la consapevolezza dell'operatore o un suo intervento per evitare conseguenze indesiderate.
		Identificare un luogo dove si possono trovare informazioni, soprattutto in caso di emergenza.
		Indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.
		Indica l'intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro.

Specifiche tecniche	
Peso	63 g
Gamma di frequenza	20 Hz - 20 kHz
Impedenza	32 Ω +/- 10%
Sensibilità	113 dB/mW @ 1 kHz
Colore	Nero
Lunghezza del cavo	1,2 metri
Connettore	3,5 mm stereo
Accessori	BE9150 Cuffio
Configurazione	Questa cuffia può essere configurata con i seguenti amplificatori personali seguente amplificatore personale: BE2021-C Amplificatore Personale Maxi Pro
Funzionamento	Temperatura: 0° a 35° C Umidità: 15% - 90%, senza condensa
Nella confezione	BE9233-P02 Cuffie on-ear

	Per informazioni dettagliate sul prodotto, consulti il manuale utente corrispondente.
----------------------------	---

	
Productinformatie	
Lees dit eerst	Dit boekje helpt u bij het gebruik en onderhoud van uw nieuwe on-oor hoofdtelefoon. Zorg ervoor dat u dit boekje zorgvuldig doorleest, inclusief het gedeelte Waarschuwingen . Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien.
Over de BE9233-P02 On-oor Hooftelefoon	
Beoogd doel	Hierbij verklaart Belman & Symfon dat dit product in Europa voldoet aan de essentiële eisen van de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de Belman & Symfon website bellman.com .
Beoogde gebruikersgroep	De beoogde gebruikersgroep bestaat uit mensen van alle leeftijden met een licht tot ernstig gehoorverlies die in verschillende situaties geluidsversterking nodig hebben.
Prinsipp of drift	De audioproductfamilie bestaat uit verschillende versterkers en zenders die speciaal ontworpen zijn voor geluidsversterking, zelfs in veeleisende situaties. Afhankelijk van de toegevoegde functie van de specifieke versterker of zender kunnen verschillende microfoons worden gebruikt om direct geluid op te vangen of het omgevingsgeluid te versterken.

	Dit apparaat kan het normale gehoor niet herstellen en kan gehoorverlies of doofheid als gevolg van organische aandoeningen niet voorkomen of verbeteren.
----------------------------	---

Algemene waarschuwingen

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over veiligheid, bediening

en gebruiksomstandigheden. Bewaar deze folder voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat alleen installeert, moet u deze bijsluiter aan de huseigenaar geven.

Waarschuwingen voor gevaar

- Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken of ander letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
- Gebruik of bewaar dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals open vuur, radiatoren, ovens of andere apparaten die warmte produceren.

- Demonteer het apparaat niet; er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Als u met het apparaat knoeit of het uit elkaar haalt, vervalt de garantie.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan vocht.

- Bescherm het apparaat tegen schokken tijdens opslag en transport.

- Bescherm de kabels tegen mogelijke schadebronnen.

- Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat aan. Gebruik alleen originele Belman & Symfon accessoires om elektrische schokken te voorkomen.

- Het aangesloten apparaat heeft een zeer krachtige versterker en het geluidsniveau kan bij onzorgvuldig gebruik ongemak veroorzaken of, in ernstige gevallen, het gehoor in gevaar brengen. Zet het volume altijd op een laag niveau voordat u de headset opzet!

Informatie over productveiligheid

- Als u deze instructies niet opvolgt, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.

- Gebruik het apparaat niet in gebieden waar elektronische apparatuur verboden is.

- Het apparaat mag alleen gerepareerd worden door een erkend servicecentrum.

- Als er zich een ernstig incident voordoet met betrekking tot dit apparaat, neem dan contact op met de fabrikant en de betreffende instantie.

- Als u andere problemen met uw apparaat ondervindt, neem dan contact op met het verkooppunt, uw plaatselijke Belman & Symfon kantoor of de fabrikant. Visi **bellman.com** voor contactinformatie.

- Laat uw apparaat niet vallen. Als u het op een hard oppervlak laat vallen, kan het beschadigd raken.

Reinigen

Ontkoppel alle kabels voordat u uw apparaat schoonmaakt. Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in de openingen komt. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbusen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuumdiddelen. Dit apparaat hoeft niet gesteriliseerd te worden.

Service en ondersteuning

Als het apparaat beschadigd lijkt of niet goed werkt, volg dan de instructies in de gebruikershandleiding en deze folder. Als het product nog steeds niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met uw audicien voor informatie over service en garantie.

Garantievoorwaarden

Belman & Symfon garandeert dit product gedurende 90 dagen vanaf de aankoopdatum tegen defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor normale gebruiks- en serviceomstandigheden en omvat geen schade als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd gebruik, onbevoegde demontage of verontreiniging door welke oorzak dan ook. Deze garantie sluit incidentele schade en gevolgschade uit. Bovendien dekt de garantie geen overmatch, zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per land verschillen. Sommige landen of rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of beperkingen van de duur van een impliciete garantie niet toe, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten als consument. De bovenstaande garantie kan niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk ondertekend door beide partijen.

Informatie over naleving

	Dit boekje helpt u bij het gebruik en onderhoud van uw nieuwe on-oor hoofdtelefoon. Zorg ervoor dat u dit boekje zorgvuldig doorleest, inclusief het gedeelte Waarschuwingen . Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien.
Productinformatie	
Lees dit eerst	Dit boekje helpt u bij het gebruik en onderhoud van uw nieuwe on-oor hoofdtelefoon. Zorg ervoor dat u dit boekje zorgvuldig doorleest, inclusief het gedeelte Waarschuwingen . Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien.
Over de BE9233-P02 On-oor Hooftelefoon	
Beoogd doel	Hierbij verklaart Belman & Symfon dat dit product in Europa voldoet aan de essentiële eisen van de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de Belman & Symfon website bellman.com .
Beoogde gebruikersgroep	De beoogde gebruikersgroep bestaat uit mensen van alle leeftijden met een licht tot ernstig gehoorverlies die in verschillende situaties geluidsversterking nodig hebben.
Prinsipp of drift	De audioproductfamilie bestaat uit verschillende versterkers en zenders die speciaal ontworpen zijn voor geluidsversterking, zelfs in veeleisende situaties. Afhankelijk van de toegevoegde functie van de specifieke versterker of zender kunnen verschillende microfoons worden gebruikt om direct geluid op te vangen of het omgevingsgeluid te versterken.

	Dit apparaat kan het normale gehoor niet herstellen en kan gehoorverlies of doofheid als gevolg van organische aandoeningen niet voorkomen of verbeteren.
----------------------------	---

Symbol uitleg

	MD	Geeft aan dat het artikel een medisch apparaat is.
	UDI	Geeft een drager aan die unieke informatie over apparaatidentificatie bevat.
		Geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid als ongeoorsteerd afval, maar naar aparte inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor terugwinning en recycling.
	SN	Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.
	REF	Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.
		Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan.

	Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
----------------------------	---

	Dit symbool geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat of de bediening in de buurt van waar het symbool is geplaatst, of dat de huidige situatie vraagt om oplettenheid bij de bedienet of actie van de bediener om ongewenste gevolgen te voorkomen.
----------------------------	---

	Een plaats aanduiden waar informatie kan worden gevonden, vooral in noodgevallen.
	Geeft de temperatuurlimieten aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.
	Geeft het bereik van de vochtigheid aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.

Technische specificaties

Gewicht	63 g
Frequentiebereik	20 Hz - 20 kHz
Impedantie	32 Ω +/- 10%
Gevoeligheid	113 dB/mW @ 1 kHz
Kleur	Zwart
Kabel lengte	1,2 meter
Aansluiting	3,5 mm stereo stekker
Accessoires	BE9150 Hooftelefoonhoezen
Configuratie	Deze headset kan geconfigureerd worden met de volgende persoonlijke versterker: BE2021-C Maxi Pro Persoonlijke Versterker Temperatuur: 0° tot 35° C Vochtigheid: 15% - 90%, niet-condenserend

Working	
In de doos	Zie de bijbehorende gebruikshandleiding voor gedetailleerde productinformatie.

Productinformatasjon

Les dette først

Dette heftet gir deg veiledning i hvordan du bruker og vedlikeholder ditt nye headset. Les dette først for at du leser dette heftet nøy, inkludert avsnittet **Advarsler**. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte audiografen din.

Om BE9233-P02 Øretelefoner med mikrofon

Tiltenkt formål
Det tiltenkte formålet med lydproduktfamilien er å forsterke volumet og forbedre taleforståeligheten under samtaler og TV-lytting. Den kan også brukes sammen med andre lydtiler.

Tiltenkt brukergroupe
Den tiltenkte brukergroupen består av personer i alle aldre med mildt til alvorlig hørselstap som har behov for lydforsterking i ulike situasjoner.

Tiltenkt bruker
Den tiltenkte brukeren er en person med mildt til alvorlig hørselstap som trenger lydforsterking.

Funksjonsprinsipp
Lydproduktfamilien består av flere forsterkere og sendere som er spesielt utviklet for å gi lydforsterkning selv i krevende situasjoner. Avhengig av hvilken funksjon den spesifikke forsterkeren eller lydsenderen er tildekt, kan ulike mikrofoner brukes til å fange opp direkte lyd eller forbedre lyden i omgivelsene.

Denne enheten vil ikke gjennopprette normal hørsel og vil ikke forhindre eller forbedre en hørselsnedsettelse eller døvhets som skyldes organiske forhold.

Generelle advarsler

Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering og driftsforhold. Ta vare på denne brosjyren for fremtidig bruk. Hvis du bare skal installere enheten, må denne brosjyren gis til husets eier.

Fareadvarsler

- Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen personskade eller skade på enheten eller annen eiendom.
- Oppbevar denne enheten utlignegelig for barn under 3 år.
- Ikke bruk eller oppbevar denne enheten i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiatorer, ovner eller andre enheter som produserer varme.

- Ikke demonter enheten; det er fare for elektrisk støt. Garantien bortfaller hvis enheten manipuleres eller demonteres.

- Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke utsett enheten for fuktighet.

- Beskytt enheten mot støt under lagring og transport.

- Beskytt kablene mot potensielle skadekilder.

- Ikke gjør endringer eller modifikasjoner på denne enheten. Bruk kun originalt Belman & Symfon-tilbehør for å unngå elektrisk støt.

- Den tilkoblete lytteenheten har en svært kraftig forsterker, og lydnivået kan forårsake ubehag eller, i alvorlige tilfeller, sette hørselen i fare hvis produktet brukes uforsiktig. Skru alltid ned volumet til et lavt nivå før du tar på deg hodestett!

	Geeft een drager aan die unieke informatie over apparaatidentificatie bevat.
	Geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid als ongeoorsteerd afval, maar naar aparte inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor terugwinning en recycling.
	Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.
	Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.
	Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan.

	Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
	Dit symbool geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat of de bediening in de buurt van waar het symbool is geplaatst, of dat de huidige situatie vraagt om oplettenheid bij de bedienet of actie van de bediener om ongewenste gevolgen te voorkomen.
	Een plaats aanduiden waar informatie kan worden gevonden, vooral in noodgevallen.
	Geeft de temperatuurlimieten aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.
	Geeft het bereik van de vochtigheid aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.

	Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
----------------------------	---

- Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen personskade eller skade på enheten eller annen eiendom.

- Ikke slipp enheten din i gulvet. Den kan bli skadet hvis du mister den på en hard overflate.

Rengjøring

Koble fra alle kabler før du rengjør enheten. Bruk en myk, fuktig klut. Unngå å få fuktighet inn i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler, aerosolprayer, lesemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler. Denne enheten krever ikke sterilisering.

Service og støtte

Hvis enheten ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som den skal, følger du instruksjonene i brukerhåndboken og denne brosjyren. Hvis produktet fortsetter å ikke fungerer som tiltenkt, kan du kontakte din lokale audiograf for informasjon om service og garanti.

Garantibetingelser

Belman & Symfon garanterer dette produktet i 90 dager fra kjøpsdato mot eventuelle defekter som skyldes feil i materialer eller utførelse. Denne garantien gjelder kun ved normal bruk og service, og omfatter ikke skader som følge av uhell, forsømmelse, misbruk, uautorisert demontering eller forurenssning, usansett årsak. Denne garantien omfatter ikke tilfellelige skader og følgeskader. Garantien dekker heller ikke naturkatastrofer som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer med territorium. Noen land eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfellelige skader eller følgeskader, eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovebestemte rettigheter som forbruker. Ovennevnte garanti kan ikke endres, med mindre den er skriftlig undertegnet av begge parter.

Samsvarsinformasjon

Belman & Symfon erklærer herved at dette produktet i Europa er i samsvar med de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen kan hentes fra Belman & Symfon-nettsidetet **bellman.com**.

Symbolforklaring

	MD	Indikerer at enheten er en medisinsk enhet.
	UDI	Indikerer en bærer som inneholder unik informasjon om enhetens identifikator.
		Indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.
	SN	Angir produsentens serienummer slik at den bestemte medisinske enhet kan identifiseres.
	REF	Angir produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
		Angir produsenten av den medisinske enheten.

	Dette symbolet indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.
	Dette symbolet indikerer at det er nødvendig med forsiktighet ved bruk av enheten eller kontrollenheten i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatoren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser.
	Å identifisere et sted hvor man kan finne informasjon, spesielt i en nedslutasjon.
	Angir temperaturregense som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.
	Angir fuktighetsområdet som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.

Tekniske spesifikasjoner

	I nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatøren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser.
	Å identifisere et sted hvor man kan finne informasjon, spesielt i en nødsituasjon.
	Angir temperaturgrensene som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.
	Angir fuktighetsområdet som den medisinske enheten