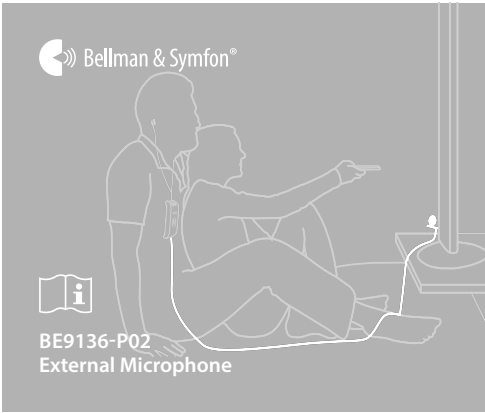




## SE Information om produkten

### Läs detta först

I det här häftet beskrivs hur du använder och underhåller din nya Externa Mikrofon. Läs igenom den här broschyren noggrant, inklusive avsnittet **Varning**. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din audionom.

### Om Extern Mikrofon BE9136-P02

#### Avsett syfte

Det avsedda syftet med ljudproduktfamiljen är att förstärka volymen och förbättra taluppfattbarheten under samtal och när du lyssnar på TV. Den kan också användas med andra ljudkällor.

#### Avsedd användargrupp

Den avsedda användargruppen består av personer i alla åldrar med mild till grav hörselnedsättning som behöver ljudförstärkning i en mängd olika situationer.

#### Avsedd användare

Den avsedda användaren är en person med mild till grav hörselnedsättning som behöver ljudförstärkning.

#### Avsedd användargrupp

Audio-produktfamiljen består av olika ljudförstärkare och sändare som har utvecklats speciellt för att ge ljudförstärkning även i svåra situationer. Beroende på vilken funktion som tilldelats den specifika förstärkaren eller sändaren kan olika mikrofoner användas för att fånga upp direktljud eller förstärka omgivningsljud.

 Denna enhet återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte hörselnedsättning eller dövhet till följd av organiska tillstånd.

### Allmänna varningar

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftförhållanden. Behåll denna broschyr för framtida bruk. Om du installerar enheten måste denna broschyr ges till husägaren.

#### Varningar för faror

- Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan leda till brand, elektriska stötar eller andra personsador eller skador på enheten eller annan egendom.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn under 3 år.
- Använd eller förvara inte enheten i närheten av värmekällor som öppen eld, element, ugnar eller andra enheter som avger värme.
- Ta inte isär enheten, det finns risk för elektriska stötar. Om enheten manipuleras eller demonteras upphör garantin att gälla.
- Den här enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt inte enheten för fukt.
- Skydda enheten från stötar under förvaring och transport.
- Skydda kablarna från alla potentiella skadekällor.
- Gör inga modifieringar eller ändringar på den här enheten. Använd endast original Bellman & Symfon tillbehör för att undvika elektriska stötar.
- Den anslutna lyssningsenheten har en mycket kraftfull förstärkare och ljudnivån kan orsaka obehag eller i allvarliga fall skada hörseln om enheten används ovarsamt. Vrid alltid ner volymen till en låg nivå innan du använder den Externa Mikrofonen!

#### Information om produktsäkerhet

- Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till skador på enheten och att garantin upphör att gälla.
- Använd inte enheten i områden där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning.
- Enheten får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Om en allvarlig olycka inträffar med denna enhet ska du kontakta tillverkaren och berörda myndigheter.
- Om du får andra problem med enheten ska du kontakta försäljningsstället, ditt lokala Bellman & Symfon-kontor eller tillverkaren. För kontaktinformation, besök [bellman.com](http://bellman.com).
- Tappa inte enheten. Om du tappar den på en hård yta kan den skadas.

### Driftförhållanden

Använd enheten i en torr miljö, inom de temperatur- och luftfuktighetsgränser som anges i den här broschyren. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt ska den inte längre anses vara tillförlitlig och måste därför bytas ut.

### Rengöring

Koppla bort alla kablar innan du rengör enheten. Använd en mjuk, luddfri trasa. Förhindra att fukt tränger in i öppningarna. Använd inte hushållsrengöringsmedel, sprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel. Enheten kräver inte sterilisering.

### Service och support

Om enheten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska ska du följa anvisningarna i användarmanualen och denna broschyr. Om produkten fortfarande inte fungerar som förväntat kontakta din audionom för information om service och garanti.

### Villkor för garantin

Bellman & Symfon garanterar denna produkt under 90 dagar från inköpsdatumet mot alla defekter som beror på felaktigt material eller utförande. Garantin gäller endast vid normal användning och service och omfattar inte skador till följd av olyckshändelse, försummelse, felaktig användning, obehörig demontering eller kontaminering, oavsett orsak. Garantin omfattar inte oförutsedda skador eller följskador. Garantin omfattar inte heller force majeure, t.ex. bränder, översvämningar, orkaner och tornados.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar från jurisdiktion till jurisdiktion. Vissa länder eller jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av tillfälliga skador eller följskador, eller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller för dig. Denna garanti är ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter som konsument. Ovanstående garanti får inte ändras annat än skriftligen och undertecknat av båda parter.

### Symbolförklaring

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Anger att enheten är en medicinteknisk enhet.                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Anger en bärare som innehåller information om unik identifiering av enheten.                                                                                                                                                                                                  |
|  | Anger att produkten inte får kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separatav insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.                                                                                                                       |
|  | Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.                                                                                                                                                                                     |
|  | Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska enheten kan identifieras.                                                                                                                                                                                        |
|  | Anger tillverkaren av den medicintekniska enheten.                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Denna symbol anger att användaren bör läsa bruksanvisningen.                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Denna symbol anger att försiktighet är nödvändig vid användning av enheten eller kontrollenheten i närheten av där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att operatören är medveten om eller vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser. |
|  | Att identifiera en plats där information kan hittas, särskilt i en nödsituation.                                                                                                                                                                                              |
|  | Anger de temperaturgränser som den medicintekniska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.                                                                                                                                                                               |
|  | Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten kan exponeras för på ett säkert sätt.                                                                                                                                                                       |

### Information om överensstämmelse

Bellman & Symfon förklarar härmed att denna produkt i Europa uppfyller de väsentliga kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745. Den fullständiga texten till försäkringen om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfons webbplats [bellman.com](http://bellman.com).

### Tekniska specifikationer

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt          | 12 g                                                                                      |
| Kabellängd    | 1 m                                                                                       |
| Anslutning    | 2,5 mm mono                                                                               |
| Färg          | Svart                                                                                     |
| Riktning      | Rundstrålande                                                                             |
| Känslighet    | -44dB                                                                                     |
| S/N           | >58 dB                                                                                    |
| Användning    | Temperatur: 0 till 35 °C<br>Luftfuktighet: 15% – 90%, icke-kondenserande                  |
| Tillbehör     | BE9408 Mikrofonförlängningskabel                                                          |
| Konfiguration | Den här enheten kan konfigureras med följande personliga förstärkare och lyssningssystem: |

**Kompatibla personliga förstärkare:**  
BE2020-P02 Maxi Samtalsförstärkare  
BE2030-C Mino Samtalsförstärkare  
BE2210 Domino Pro mottagare  
**Kompatibla lyssningssystem:**  
BE8005 Domino Pro lyssningssystem

#### I lådan

- BE9136-P02 Extern Mikrofon
- Fästklämma
- Mikrofonskydd av skumplast

 För detaljerad produktinformation, vänligen se motsvarande användarmanual.

### UKRP

Bellman & Symfon UK Limited  
The Tack Room, Rectory Farm  
Offices, Warrington,  
Peterborough, PE8 6UT, UK

CH REP

Audiocare AG  
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal  
Switzerland



Bellman & Symfon Group AB  
Södra Långeborgsgatan 30  
436 32 Askim Sweden  
Phone: +46 31 68 28 20  
E-mail: [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)  
[bellman.com](http://bellman.com)



Revision: BE9136\_004MAN1.0  
Date of issue: 2025-03-19  
© 2025 Bellman & Symfon AB.  
All rights reserved.