
Visit dörrsändare

Visit_001ART013-SE

BE1411

Knappar och anslutningar

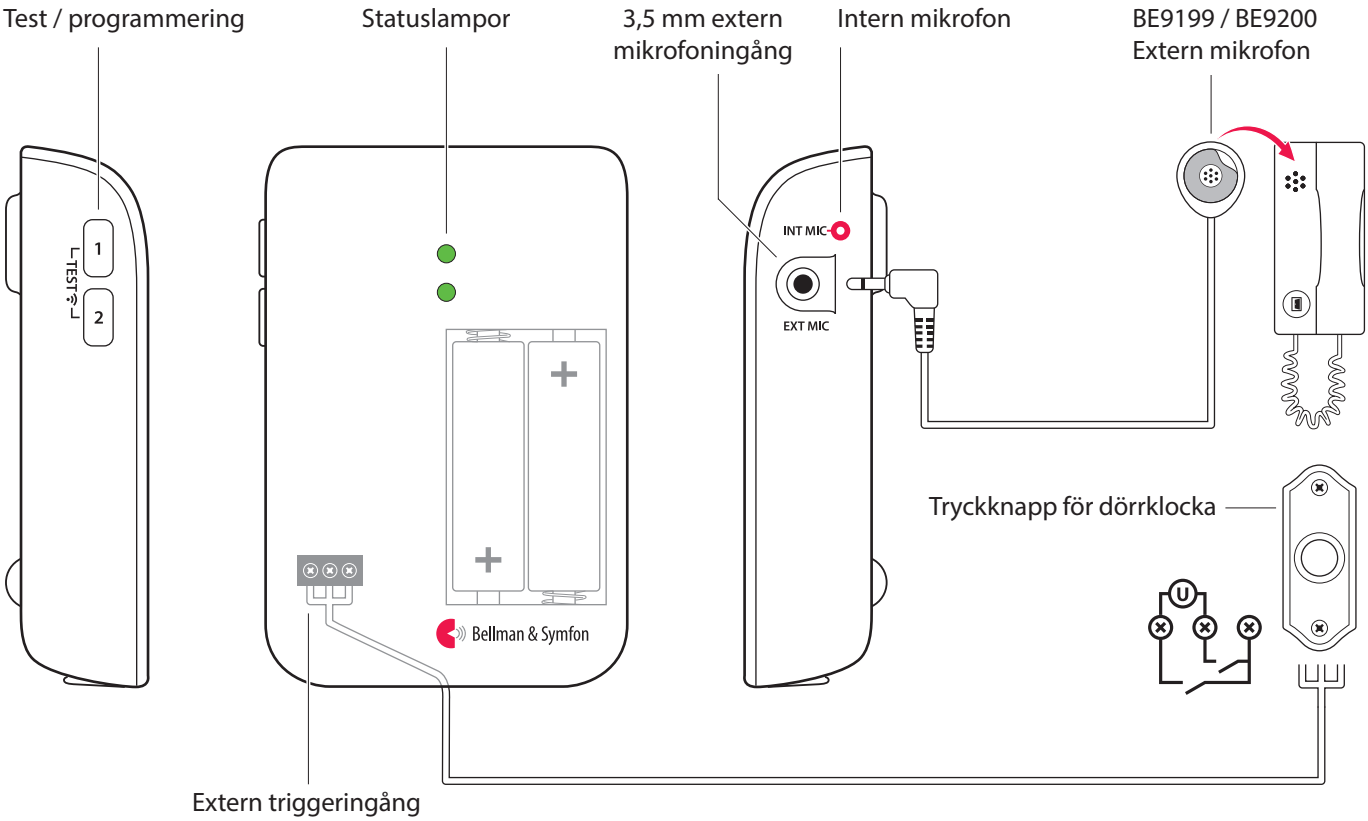

Teknisk information

I förpackningen

- BE1411 Visit dörrsändare
- 2×1,5 V AA alkaliska batterier
- Kardborreband för montering
- Skruv och plugg

Ström och batteri

- Batterityp
  2×1,5 V AA litium eller alkaliska batterier
- Strömförbukning
  Aktiv < 70 mA
  Viloläge < 15 µA
- Driftstid
  Alkaliska batterier ~ 5 år
  Litiumbatterier ~ 10 år

Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g, inkl. batterier

Aktivering

- Via mikrofonen och testknapparna
- Via den elektromagnetiska detektorn
- Via en extern mikrofon (tillbehör)
- Via en befintlig dörrklocka ansluten till den externa triggeringången

Ingångar

- 3,5 mm extern mikrofoningång
- Extern triggeringång (plint)

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
  Arbetstemperatur
  0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet
  15% till 90%, icke-kondenserande

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
  868,3 MHz
- Räckvidd
  50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning

Tillbehör

Dörrsändaren kan kompletteras med:


- BE9199 Extern mikrofon 2,5 m
- BE9200 Extern mikrofon 0,75 m

Visit dörrsändare

Installation – endast en ljudkälla

1 Dra bort batterifliken för att starta sändaren.
Rengör väggen med med-följande våtservett och ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet.

2 Klistra upp dörrsändaren t.v. om dörrklockans ljudkälla så nära som möjligt.
Du kan istället använda medföljande skruv och plugg.

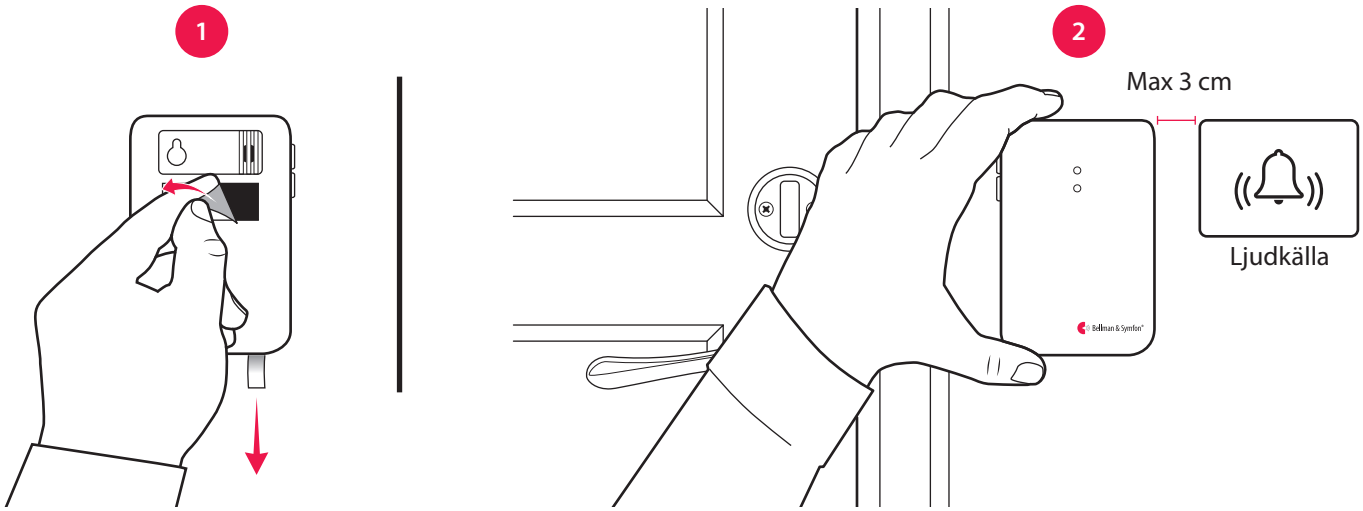


Alternativ installation – endast en ljudkälla

Använd en extern mikrofon (tillbehör)

1 Anslut den externa mikrofonen (säljs separat) till dörrsändaren.
Ta bort skyddsfilmen på mikrofonen och fäst den över porttelefonens högtalare.

2 Dra bort batterifliken för att starta dörrsändaren. Ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet och montera sändaren på väggen.

3 Inom 2 min, tryck 10 ggr på den nedre knappen för att inaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 ggr i rött.
Notera: Om du överstiger 2 minuter, behöver du starta om dörrsändaren genom att ta ur och montera batterierna igen.

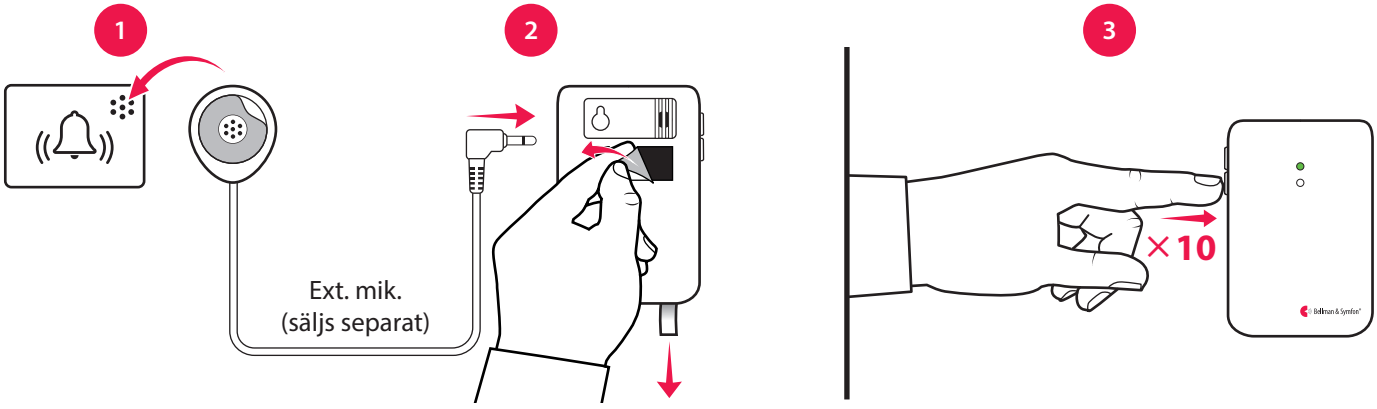

Återaktivera den interna mikrofonen

Starta om dörrsändaren genom att ta ur och montera batterierna igen. Inom 2 minuter, tryck 10 gånger på den nedre knappen för att återaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 gånger i grönt för att visa att mikrofonen är på.


Visit dörrsändare

Installation – porttelefon och elektrisk dörrklocka

1 Anslut den externa mikrofonen (säljs separat) i dörrsändaren.
Ta bort skyddsfilmen från mikrofonen och fäst den på porttelefonens högtalare.

2 Dra bort batterifliken för att starta sändaren.
Rengör väggen med våtservett och ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet.

3 Klistra upp dörrsändaren t.v. om dörrklockans ljudkälla så nära som möjligt.
Notera: Avståndet mellan porttelefon och dörrklocka måste vara minst 25 cm för att undvika ljudstörningar.

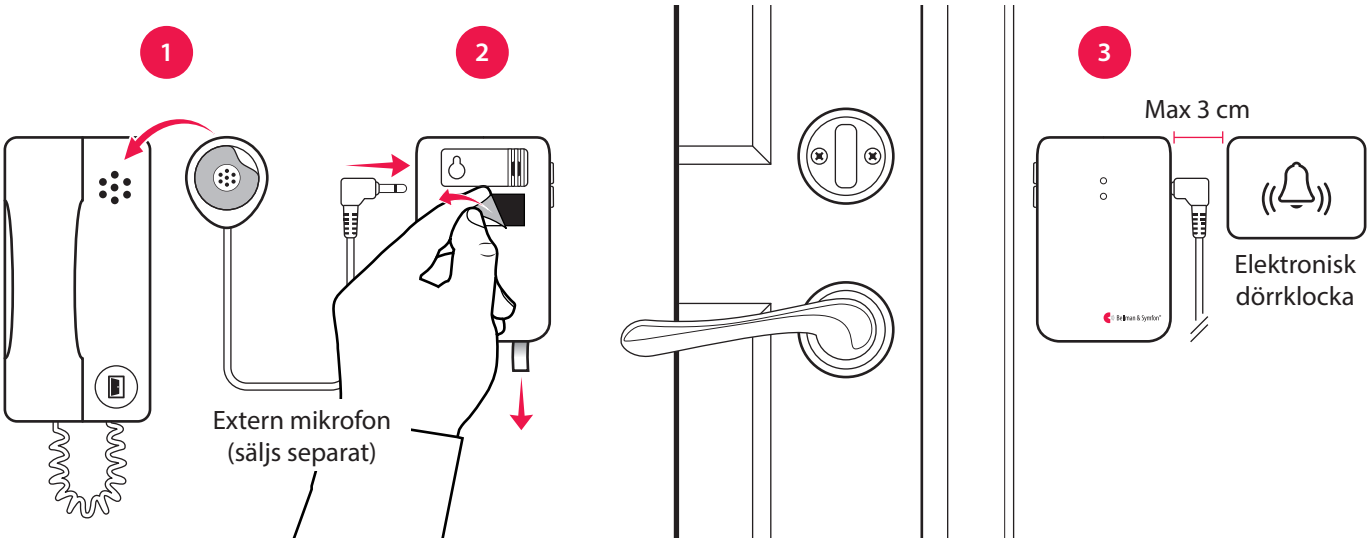


Installation – porttelefon och mekanisk dörrklocka

Om du har en mekanisk dörrklocka och porttelefon kan du behöva två dörrsändare, dvs en för respektive ljudkälla. Så här monterar du dem.

1 Dra bort batterifliken för att starta respektive dörrsändare.
Rengör väggytan med medföljande våtservett och ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet.

2 Klistra upp den ena dörrsändaren t.v. om dörrklockan och den andra t.v. om porttelefonens högtalare, så nära ljudkällorna som möjligt.

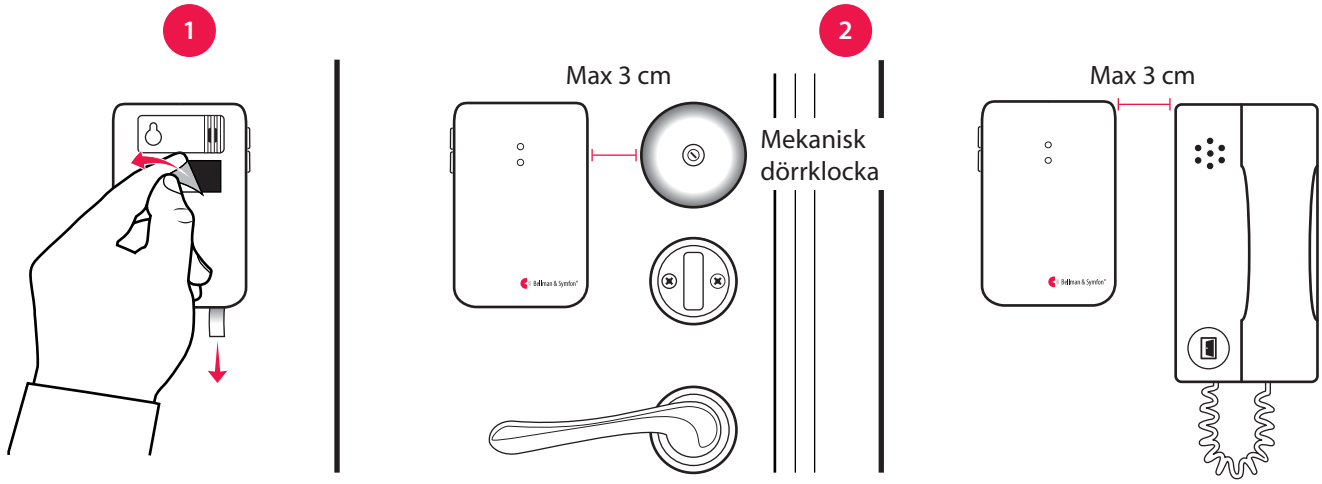


Visit dörrsändare

Installation – trådbunden dörrklocka


1 Dra bort batterifliken för att starta dörrsändaren.
Inom 2 min, tryck 10 ggr på den nedre knappen för att inaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 ggr i rött.

2 Öppna locket på sändaren för att komma åt skruvplinten. Det finns tre anslutningsmöjligheter:

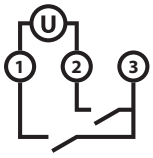

- Använd anslutningspunkt **1** och **2** för att koppla in en **aktiv** brytare, som t.ex ett strömrelä.
  Notera: Strömmen måste vara 2 – 30 VDC, polaritetsoberoende eller 2 – 24 VAC 5 – 150 Hz.
- Använd **2** och **3** för att koppla in en **passiv** mekanisk brytare, som t.ex en dörrklockas tryckknapp.

3 Snäpp fast luckan igen, rengör väggen med en våtservett, ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet och fäst dörrsändaren på väggen.

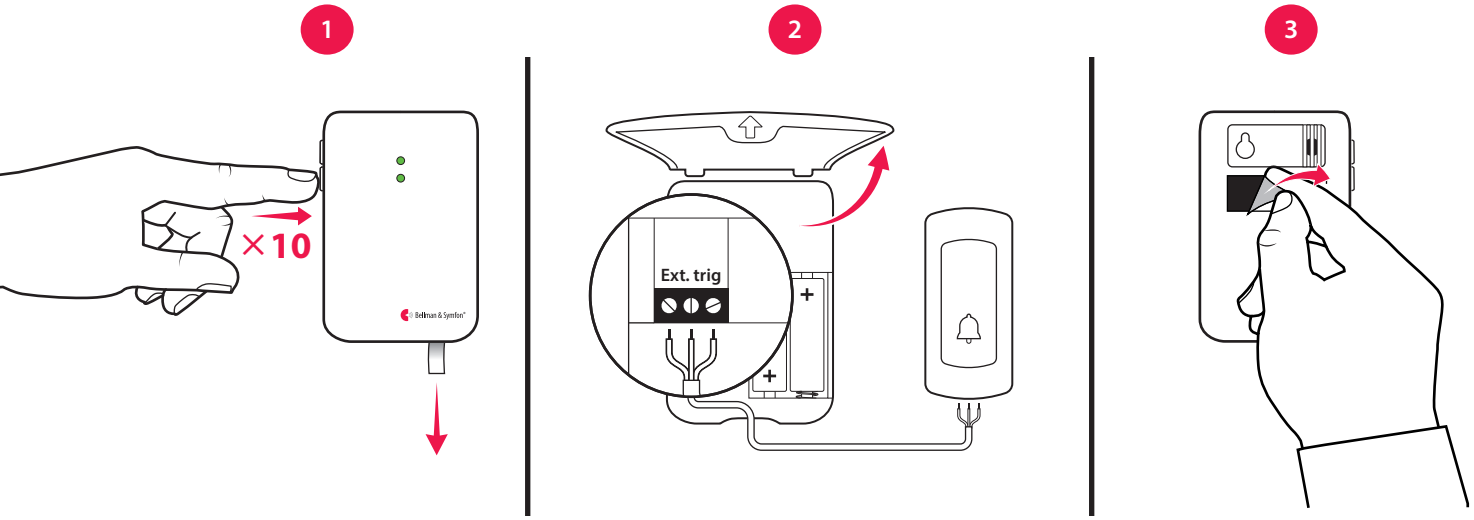

Använda elektromagnetisk avkänning

Sändaren kan ställas in så att den känner av elektromagnetiska fält från elektriska dörrklockor.
Så här gör du:

- **Aktivera elektromagnetisk avkänning:** Flytta signalomkopplare nr 4 uppåt (På).
- **Inaktivera elektromagnetisk avkänning:** Flytta signalomkopplare nr 4 nedåt (Av).



Visit dörrsändare


Optimera identifiering av dörrklockan

Nästa steg är att lära sändaren känna igen dörrklockan.

1 Håll in knapp 1 ända tills den översta lysdioden börjar blinka. Släpp knappen för att börja spela in.

2 **Dörrklocka med summerljud:** Håll in knappen på dörrklockan i minst 8 sekunder.
Dörrklocka med klockljud: Tryck på dörrklockan minst 8 gånger.

3 Tryck på knapp 1 på sändaren för att avsluta inspelningen. Om lysdioden lyser med rött sken måste steg 1 och 2 upprepas. Använd samma metod för att spela in ljudet från porttelefonen/extern mikrofon med knapp 2.
Notera: För att ta bort alla inspelade ljud, tryck och håll nere sändarens testknappar i 5 sekunder. Inställningar för radionyckel och signalmönster påverkas inte.

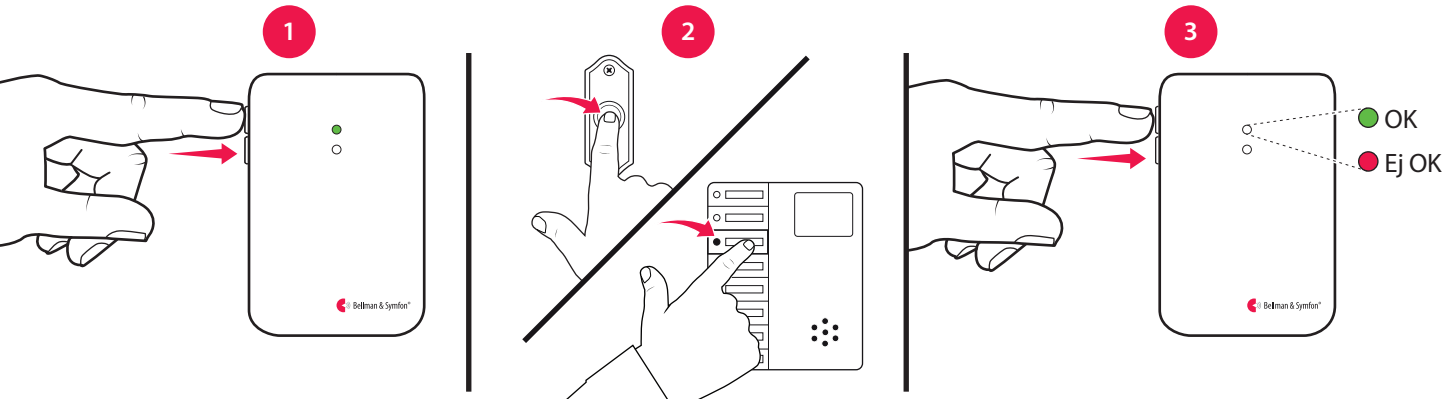


Testa anslutningen

Med testknapparna

1 Tryck samtidigt på dörrsändarens testknappar.
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den skickar en radiosignal.

2 Den gröna Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

Notera: Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

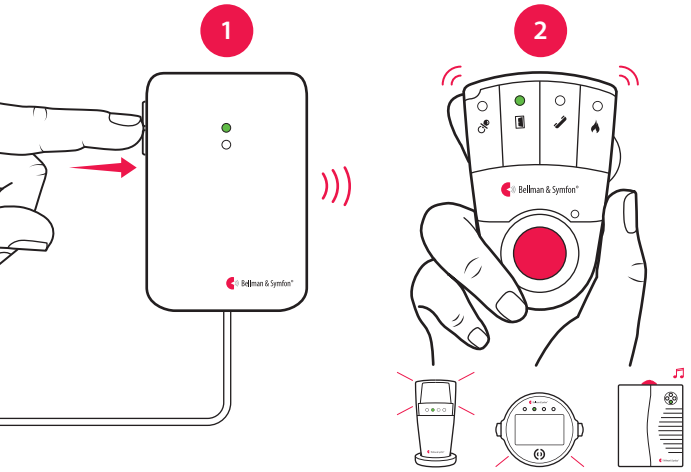


Med dörrklocka eller porttelefon

1 Tryck på dörrklockan eller porttelefonen.
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den aktiveras av ljudet och skickar en radiosignal.

2 Den gröna Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

Notera: Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

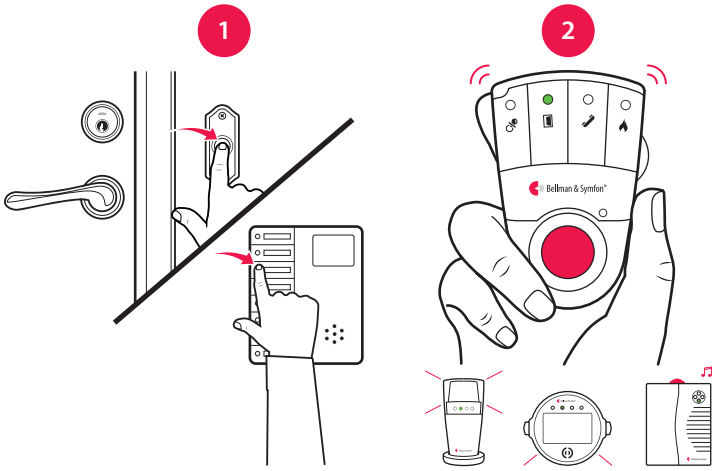

Visit dörrsändare

Förinställt signalmönster

När dörrsändaren aktiveras händer följande:

1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.

2 Den gröna Visitlampan på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

Sändare		Signalmönster, mottagare			
Källa	**Statuslampa**	**Visitlampa**	**Ljud**	**Vibration**	**Blixt**
■ Intern mikrofon	Grön, övre	Fast grönt ljus	1×dörrklocka, mörk	Långsam ■□□□	Ja
■ Extern mikrofon	Grön, nedre	Blinkar grönt	2×dörrklocka, ljus	Långsam ■□□□	Ja
■ Ansluten dörrklocka	Grön, övre	3×blinkar grönt	1×dörrklocka, ljus	Långsam ■□□□	Ja

Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt tabellen nedan:



SIGNAL


Sändare		Signalmönster, mottagare			
Inställning	**Källa**	**Visitlampa**	**Ljud**	**Vibration**	**Blixt**
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	Fast grönt ljus Blinkar grönt 3×blinkar grönt	1×dörrklocka, mörk 2×dörrklocka, ljus 1×dörrklocka, ljus	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Långsam ■□□□	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	2×blinkar grönt 3×blinkar grönt Blinkar grönt	2×dörrklocka, mörk 1×dörrklocka, ljus 2×dörrklocka, ljus	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Långsam ■□□□	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	3×blinkar grönt 2×blinkar grönt 3×blinkar orange	1×dörrklocka, ljus 2×dörrklocka, mörk Babymelodi	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	Blinkar grönt Fast grönt ljus Blinkar orange	2×dörrklocka, ljus 1×dörrklocka, mörk Babymelodi	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	Fast grönt ljus 3×blinkar grönt 2×blinkar grönt	1×dörrklocka, mörk 1×dörrklocka, ljus 2×dörrklocka, mörk	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Långsam ■□□□	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	Fast grönt ljus Blinkar grönt Blinkar gult	1×dörrklocka, mörk 2×dörrklocka, ljus 2×ringsignal, ljus	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Mellan ■□■□	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	3×blinkar grönt Fast grönt ljus Rött + orange ljus	1×dörrklocka, ljus 1×dörrklocka, mörk VMA-signal	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Lång ■■■□	Ja Ja Ja
	Int. mik. / inlärd signal 1 / test Ext. mik. / inlärd signal 2 Ansluten dörrklocka	Blinkar grönt 2×blinkar grönt Blinkar rött	2×dörrklocka, ljus 2×dörrklocka, mörk Brandlarm	Långsam ■□□□ Långsam ■□□□ Lång ■■■□	Ja Ja Ja

Visit dörrsändare

Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under sändarens lock.

Så här byter du radionyckel:

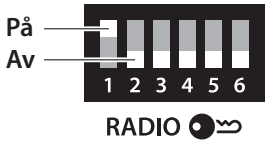

1. Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Alla radioomkopplare är från början positionerade nedåt (av).
2. Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
3. Tryck på sändarens testknappar inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
4. Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

   Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

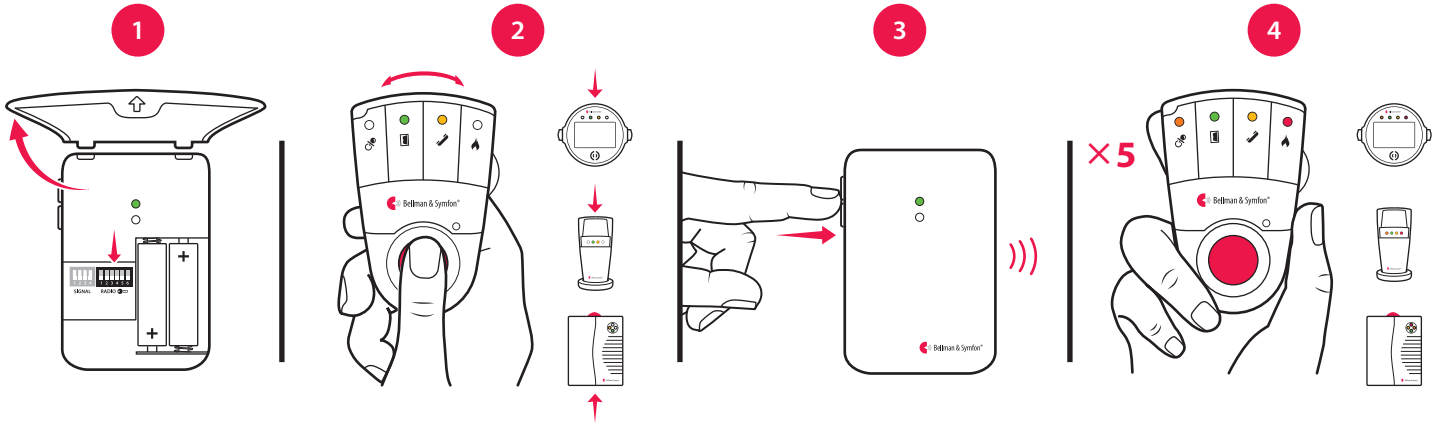


Felsökning

Om	Gör så här
Statuslampan blinkar orange en gång i minuten	▪ Byt batterier. Använd enbart 1.5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.
Statuslampan blinkar orange en gång i sekunden	▪ Det finns andra ljudkällor som stör dörrsändaren. Stäng av dem eller sänk ljudet. ▪ Koppla ur den externa mikrofonen för att säkerställa att den inte är trasig.
Statuslampan tänds när jag ringer på dörrklockan eller porttelefonen men mottagaren aktiveras inte	▪ Kontrollera sändarens och mottagarens batterier och anslutningar. ▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att dörrsändaren och mottagaren har samma radionyckel, se **Byta radionyckel**.
Statuslampan tänds inte när jag ringer på dörrklockan eller porttelefonen	▪ Ring på dörrklockan samtidigt som du flyttar dörrsändaren närmare / längre bort från ljudkällan. Rekommenderat avstånd är mindre än 3 cm. ▪ Lär dörrsändaren ljudet från din dörrklocka, se **Programmera sändaren**. ▪ Om signalen varierar mycket i styrka och ton, byt till elektromagnetisk avkänning. ▪ Om dörrsändaren fortfarande inte aktiveras, tryck och håll nere testknapparna i 5 sekunder för att ta bort de inspelade ljuden, se **Radera inspelade ljud**.
Mottagaren aktiveras utan anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.

Visit tryckknappssändare

Visit_001ART013-SE
BE1420

Knappar och anslutningar

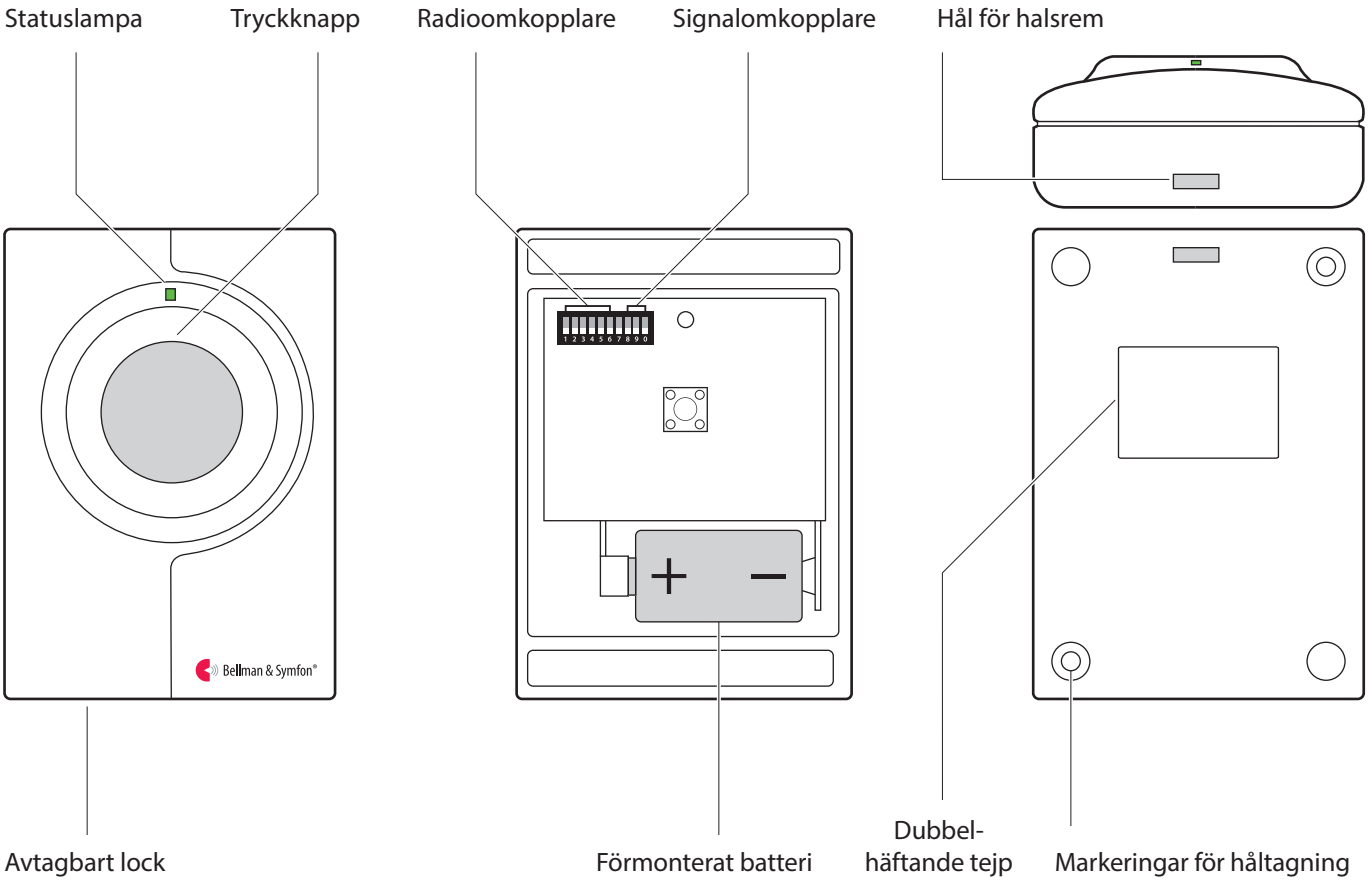

Teknisk information

I förpackningen

- BE1420 Visit trycknappssändare med förmonterat alkaliskt batteri
- Halsrem med säkerhetslås
- Tejp, skruv och plugg

Ström och batteri

- Batterityp
  1×6 V PX28G/PX28M alkaliskt eller
  1×6 V PX28L litiumbatteri
- Strömförbrukning
  Aktiv < 35 mA
  Viloläge < 0,05 µA
- Driftstid
  Alkaliskt batteri ~ 2 år
  Litiumbatteri ~ 5 år

Storlek och vikt

- Höjd: 66 mm
- Bredd: 48 mm
- Djup: 23 mm
- Vikt: 50 g, inkl. batteri

Aktivering

- Via tryckknappen på framsidan

Skötsel och rengöring

- Underhållsfri
  Rengör med en torr trasa
- Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, tryckluft, aerosolsprayer, lösningsmedel, ammoniak eller slipmedel

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
  868,3 MHz
- Räckvidd
  50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning


Omgivning

- För inomhus- och utomhusbruk i skyddat läge.
  Ej vattentät. (IP42)
- Arbetstemperatur
  -10° till 40° C
- Relativ luftfuktighet
  15% till 90%, icke-kondenserande

Visit tryckknappssändare

Använda den som larmknapp

Sändaren kan bäras hängande runt halsen och användas som en trådlös larmknapp.

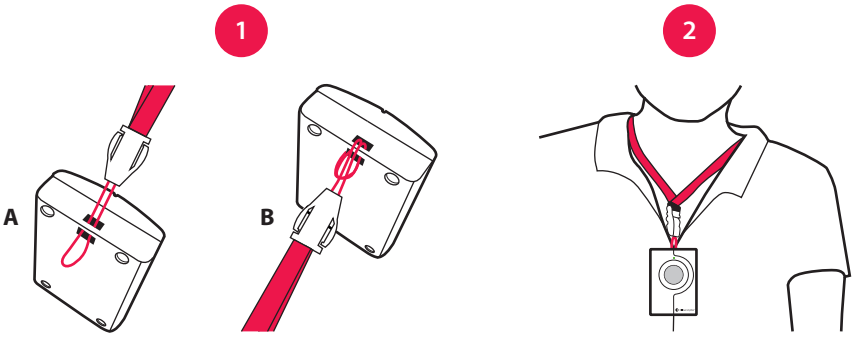

Så här använder du den:

1 Fäst halsremmen i sändaren.

2 Häng sändaren runt halsen.


Använda den som dörrklocka

Sändaren kan också användas som en trådlös dörrklocka. Så här sätter du upp den:

Montera med skruv

1 Avlägsna försiktigt sändarens lock och gör två hål vid markeringarna.


2 Fäst enheten på väggen med de medföljande skruvarna och sätt på locket igen.

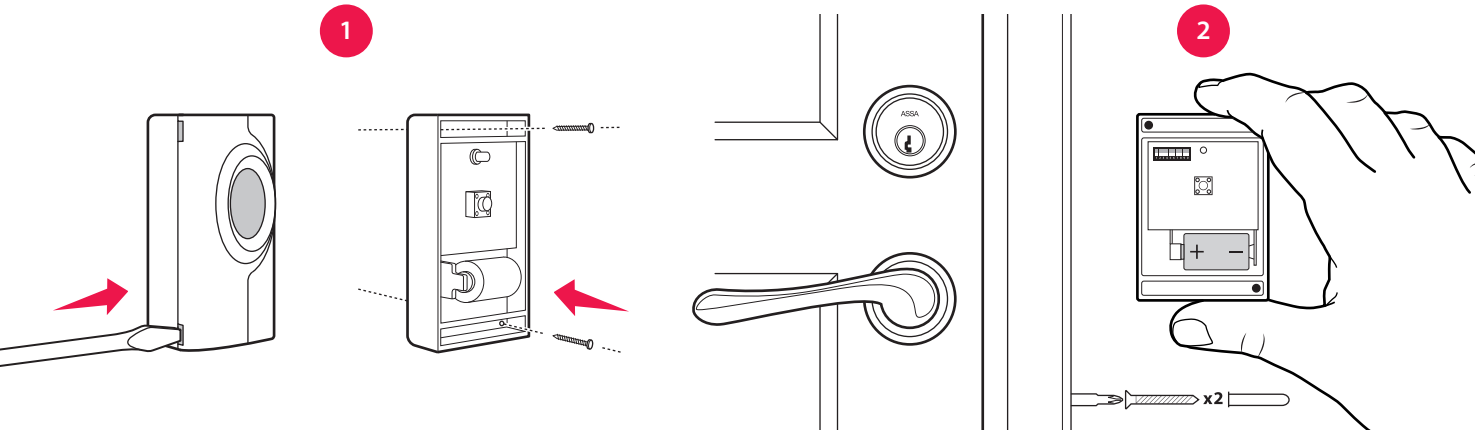

Montera med dubbelhäftande tejp

1 Fäst den dubbelhäftande tejpen på baksidan av sändaren.
Rengör ytan med våtservett och avlägsna skyddsfilmen från tejpen.

2 Montera enheten vid ytterdörren. Se till att den är skyddad från fukt.

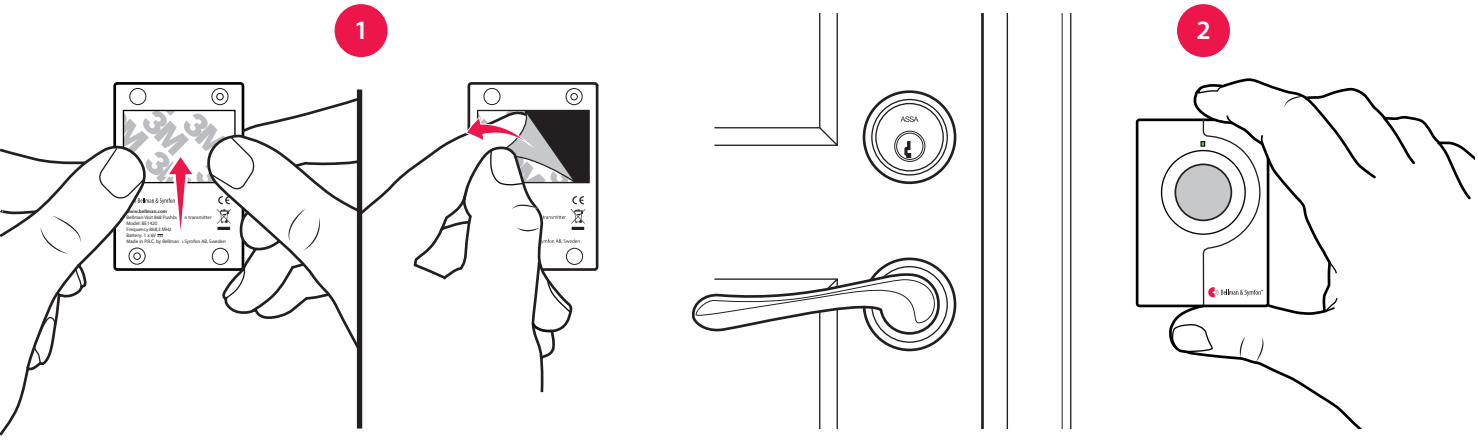

Visit tryckknappssändare


Testa anslutningen

Med tryckknappen

1 Tryck på sändarens knapp. Sändarens statuslampa tänds för att visa att en radiosignal skickas.

2 Den gröna Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster.

Det är sändaren som styr signalmönstret och förinställningen är:

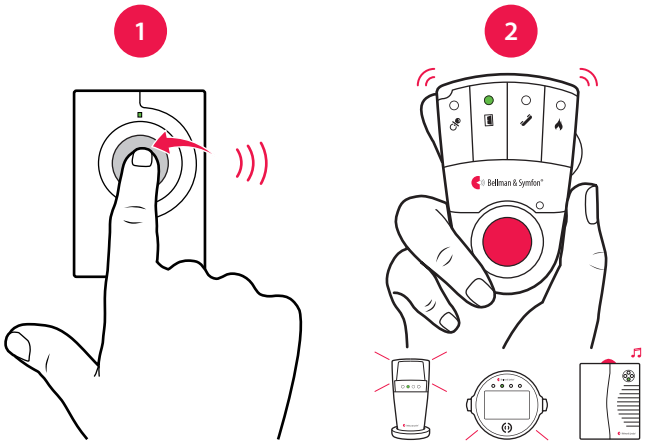

Förinställt signalmönster

Sändare | **Signalmönster, mottagare**

Statuslampa	Visitlampa	Ljud	Vibration	Blixt
■ Grönt ljus	Fast grönt ljus	1×dörrklocka, mörk	Långsam ■□□□	Ja

Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplare nummer 8, 9 och 0 enligt tabellen nedan:



SIGNAL

Sändare | **Signalmönster, mottagare**

Inställning	Visitlampa	Ljud	Vibration	Blixt
	Fast grönt ljus	1×dörrklocka, mörk	Långsam ■□□□	Ja
	2×blinkar grönt	2×dörrklocka, mörk	Långsam ■□□□	Ja
	3×blinkar grönt	1×dörrklocka, ljus	Långsam ■□□□	Ja
	Blinkar grönt	2×dörrklocka, ljus	Långsam ■□□□	Ja
	Fast orange ljus	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja
	Blinkar orange	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja
	Fast gult ljus	1×ringsignal, mörk	Mellan ■□■□	Ja
	Blinkar gult	2×ringsignal, ljus	Mellan ■□■□	Ja

Visit tryckknappssändare

Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under sändarens lock.

Så här byter du radionyckel:



1. Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Alla radioomkopplare är från början positionerade nedåt (av).
2. Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
3. Tryck på sändarens knapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
4. Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

   Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

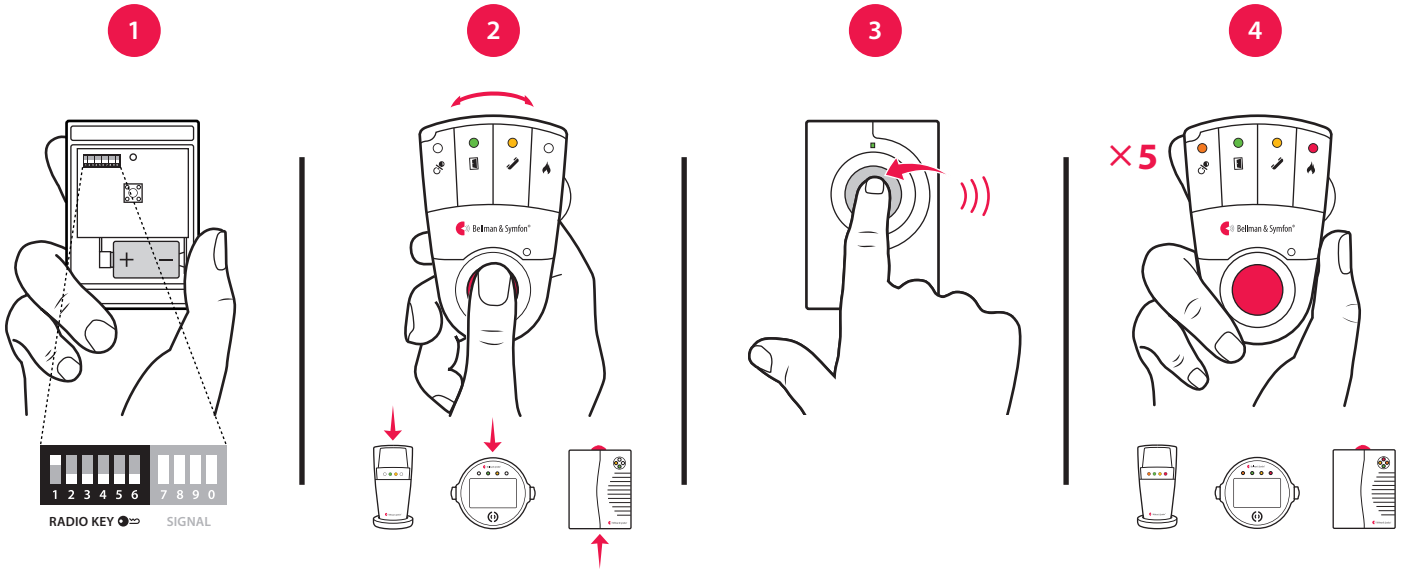

Felsökning


Om	Gör så här
Statuslampan tänds i gult när jag trycker på knappen	▪ Batteriet är nästan tomt. Ersätt det med ett alkaliskt PX28A eller ett litium PX28L batteri
Statuslampan tänds inte när jag trycker på knappen	▪ Kontrollera att batteriet är korrekt monterat. ▪ Ersätt batteriet med ett alkaliskt PX28A eller ett litium PX28L batteri
Statuslampan tänds i grönt när jag trycker på knappen men mottagaren aktiveras inte	▪ Kontrollera mottagarens batterier och anslutningar. ▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se **Byta radionyckel**.
Mottagaren aktiveras utan anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.

Visit telefonsändare

Visit_001ART013-SE

BE1431

Knappar och anslutningar

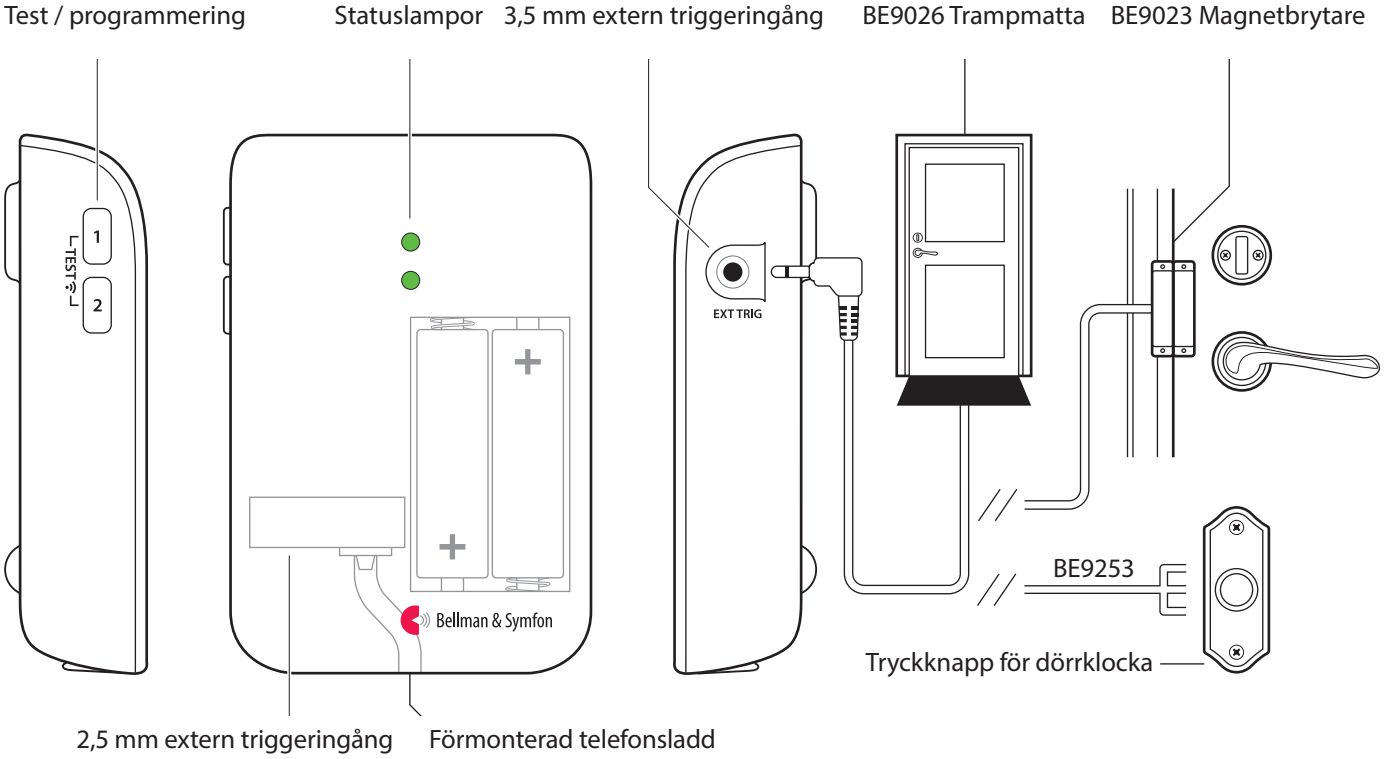

Teknisk information

I förpackningen

- BE1431 Visit telefonsändare
- 2×1,5 V AA alkaliska batterier
- Telefonsladd och mellanpropp
- Skruv och plugg

Ström och batteri

- Batterityp
  2×1,5 V AA litium eller alkaliska batterier
- Strömförbukning
  Aktiv < 70 mA
  Viloläge < 15 µA
- Driftstid
  Alkaliska batterier ~ 5 år
  Litiumbatterier ~ 10 år

Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g, inkl. batterier

Aktivering

- Via testknapparna
- Via en fast telefon
- Via en trampmatta / magnetbrytare
- Via en ansluten dörrklocka

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Temperatur: 0 till 35 °C
  Relativ luftfuktighet: 15% till 90%, icke-kondenserande

Tillbehör

- BE9023 Magnetbrytare
- BE9026 Trampmatta
- BE9253 Extern triggerkabel 3,5 mm

Ingångar

- RJ11 analog telefoningång
- 2,5 mm extern triggeringång
- 3,5 mm extern triggeringång

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
  868,3 MHz
- Räckvidd
  50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning


Visit telefonsändare

Sätta upp sändaren

1 Dra bort batterifliken för att starta enheten.
Rengör ytan med våtservett och ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet.

2 Montera sändaren på väggen. Du kan också använda medföljande skruv och plugg.

3 Anslut mellanproppen enligt bilden nedan.

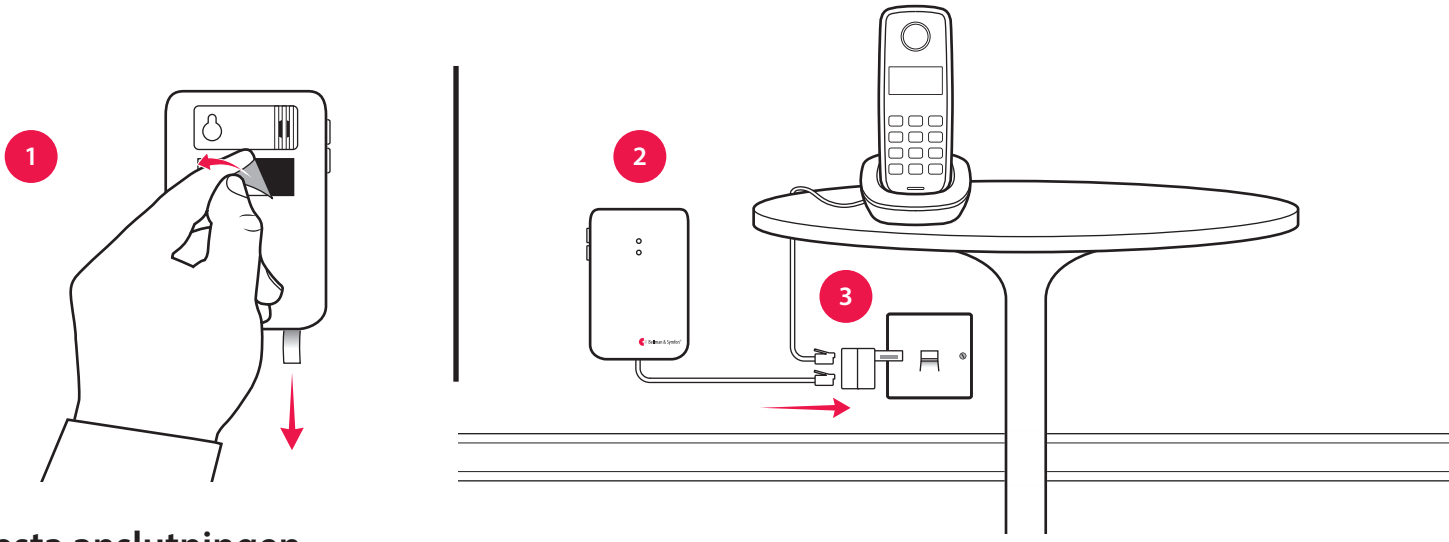

Testa anslutningen

Med testknapparna

1 Tryck samtidigt på telefonsändarens testknappar. Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den skickar en radiosignal.

2 Den gula Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.


Notera: Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.


Med mobiltelefon

1 Använd t.ex en mobiltelefon för att ringa till den fasta telefonen. Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den aktiveras och skickar en radiosignal.

2 Den gula Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

Notera: Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

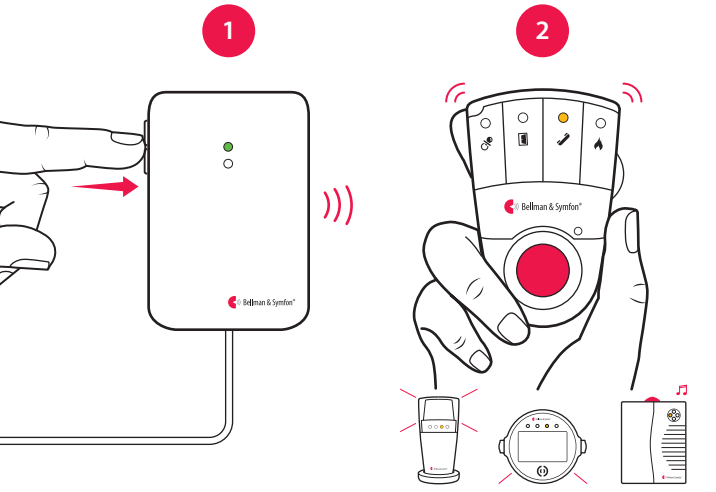

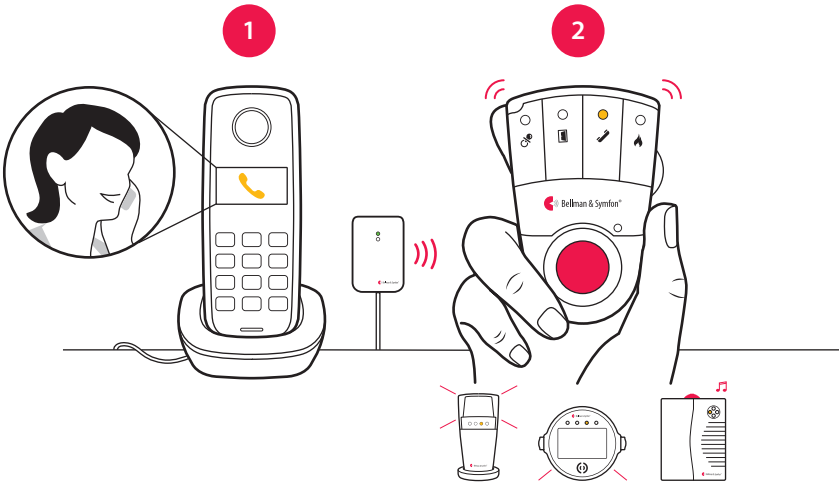

Visit telefonsändare

Förinställt signalmönster

När telefonsändaren aktiveras av ett inkommande samtal eller anslutet tillbehör händer följande:

1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.

2 Den gröna Visitlampan på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

Sändare		Signalmönster, mottagare			
Källa	**Statuslampa**	**Visitlampa**	**Ljud**	**Vibration**	**Blixt**
■ Fast telefon	Grön, övre	Fast gult ljus	1×ringsignal, mörk	Mellan ■□■□	Ja
■ Annat tillbehör	Grön, nedre	Fast grönt ljus	1×dörrsignal, mörk	Långsam ■□□□	Ja

Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt tabellen nedan:



SIGNAL

Sändare		Signalmönster, mottagare			
Position	**Källa**	**Visitlampa**	**Ljud**	**Vibration**	**Blixt**
	Fast telefon / testknappar Annat tillbehör	Fast gult ljus Fast grönt ljus	1×ringsignal, mörk 1×dörrklocka, mörk	Mellan ■□■□ Långsam ■□□□	Ja Ja
	Fast telefon / testknappar Annat tillbehör	Fast gult ljus 2×blinkar grönt	1×ringsignal, mörk 2×dörrklocka, mörk	Mellan ■□■□ Långsam ■□□□	Ja Ja
	Fast telefon / testknappar Annat tillbehör	Fast gult ljus 3×blinkar gult	1×ringsignal, mörk 1×ringsignal, ljus	Mellan ■□■□ Mellan ■□■□	Ja Ja
	Fast telefon / testknappar Annat tillbehör	Fast gult ljus 2×blinkar orange	1×ringsignal, mörk Babymelodi	Mellan ■□■□ Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja Ja
	Fast telefon / testknappar Annat tillbehör	2×blinkar gult 3×blinkar orange	2×ringsignal, mörk Babymelodi	Mellan ■□■□ Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja Ja
	Fast telefon / testknappar Annat tillbehör	2×blinkar gult Blinkar grönt	2×ring signal, mörk 2×dörrklocka, ljus	Mellan ■□■□ Långsam ■□□□	Ja Ja
	Fast telefon / testknappar Annat tillbehör	Blinkar orange 2×blinkar grönt	Babymelodi 2×dörrklocka, mörk	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯ Långsam ■□□□	Ja Ja
	Fast telefon / testknappar Annat tillbehör	3×blinkar gult Blinkar grönt	1×ringsignal, ljus 2×dörrklocka, ljus	Mellan ■□■□ Långsam ■□□□	Ja Ja

Visit telefonsändare

Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under sändarens lock.

Så här byter du radionyckel:



1. Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Alla radioomkopplare är från början positionerade nedåt (av).
2. Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
3. Tryck på sändarens testknappar inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
4. Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

   Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

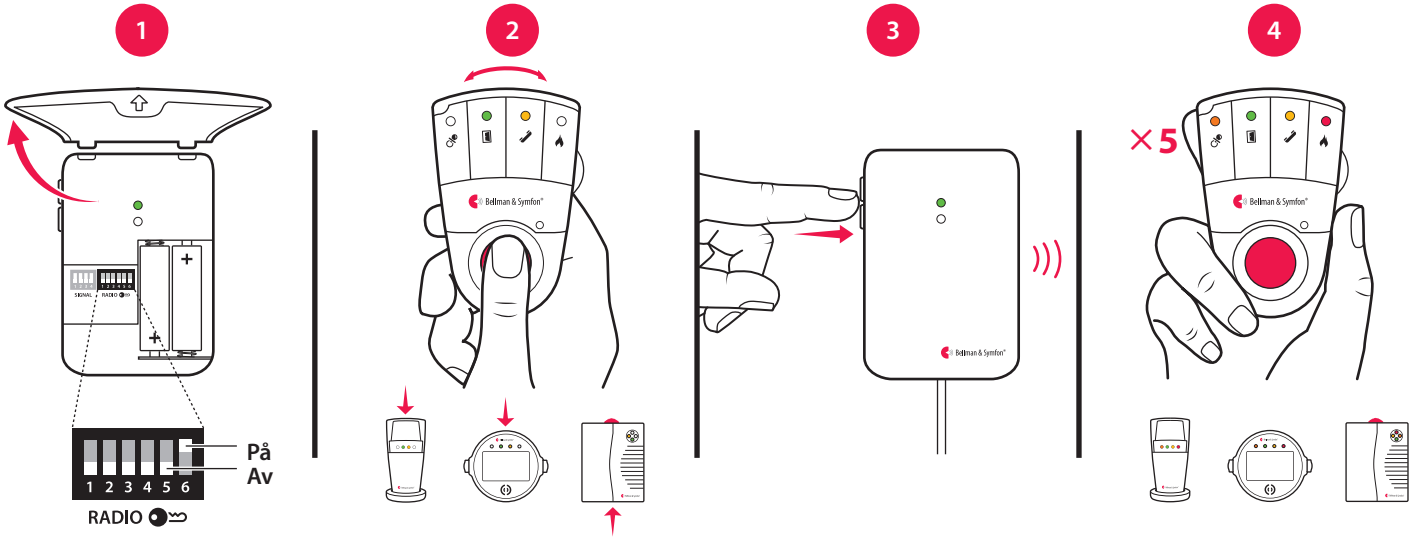


Felsökning

Om	Gör så här
Statuslampan blinkar orange	▪ Byt batterier. Använd enbart 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.
Statuslampan tänds i grönt men mottagaren aktiveras inte	▪ Kontrollera sändarens och mottagarens batterier och anslutningar. ▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se **Byta radionyckel**.
Statuslampan tänds inte när telefonen ringer eller när ett anslutet tillbehör aktiveras	▪ Tryck på sändarens testknappar. Om statuslampan tänds, kontrollera alla anslutningar. Om statuslampan inte tänds, byt batterier. Använd enbart 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.
Statuslampan tänds inte när jag trycker på testknapparna	▪ Byt batterier. Använd enbart 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier. Om statuslampan fortfarande inte tänds, kontakta din leverantör för service.
Mottagaren aktiveras utan anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.

Visit mobiltelefonsändare

Visit_001ART013-SE
BE1433

Knappar och anslutningar

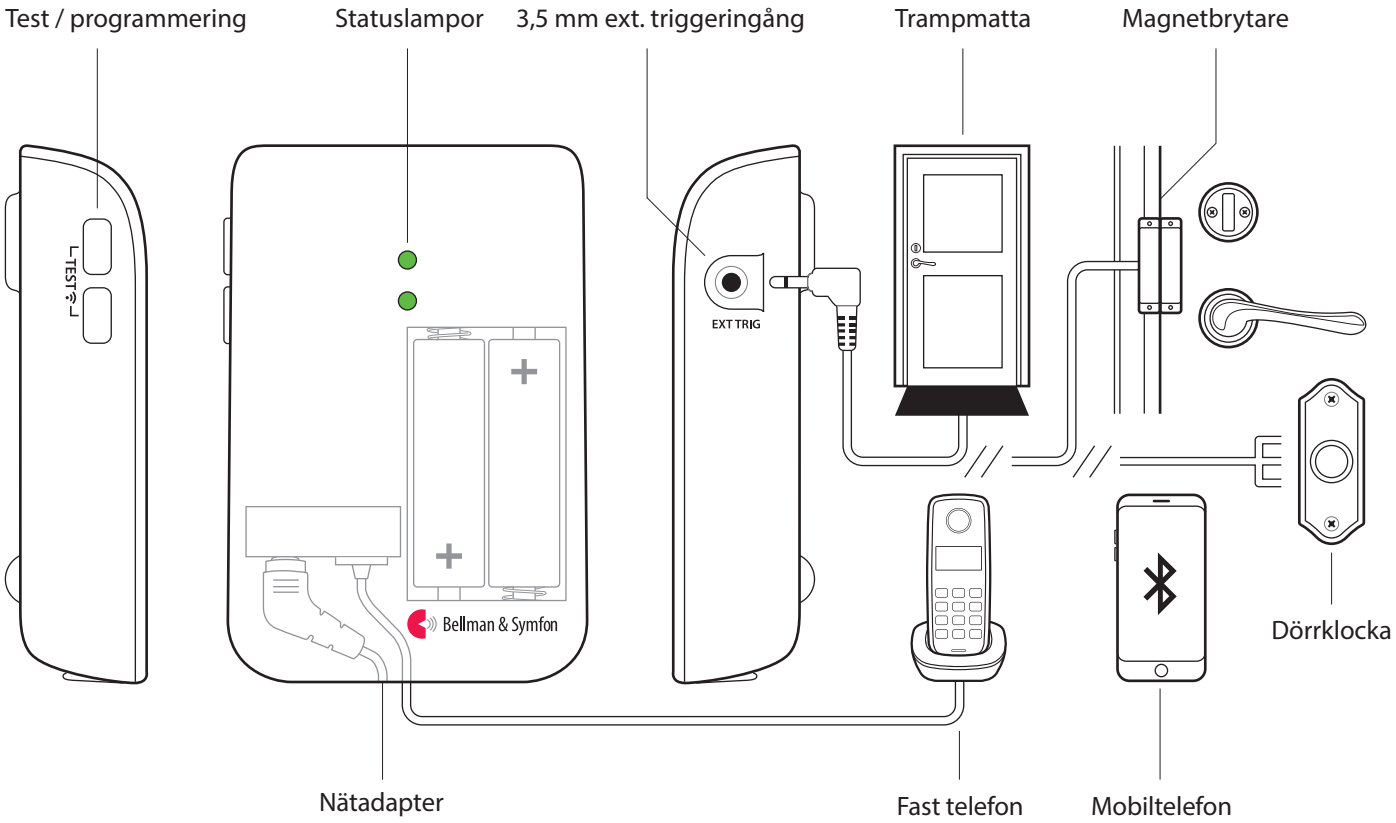

Teknisk information

I förpackningen

- BE1433 Visit Mobilsändare
- Nätadapter och strömkabel
- 2×1.5V AA Alkaliska batterier
- Förmonterad telefonkabel
- Mellanpropp
- Skruv och plugg

Kompatibilitet

- iOS11 eller senare
  Android 6 eller senare
- iPhone 6S eller senare
  Moderna Androidtelefoner

Ström och batteri

- Strömförsörjning:
  5 V DC / 1000 mA
- Reservbatterier:
  2×1.5 V AA, Alkaliska

Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g, inklusive batterier

Aktivering

- En mobil enhet via Bluetooth
- Via fast telefon
- Via en trampmatta / magnetbrytare
- Via en ansluten dörrklocka
- Via testknapparna

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Temperatur: 0 till 35 °C
  Relativ luftfuktighet: 15% till 90%

Anslutningar

- RJ11 analog telefoningång
- 3,5 mm extern triggerport
- Uttag för nätadapter
- Bluetooth 5.0

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Radioräckvidd: Upp till 250 m
- Bluetoothfrekvens: 2400 – 2483.5 MHz
- Bluetoothräckvidd: Upp till 250 m


Tillbehör

- BE9023 Magnetbrytare
- BE9026 Trampmatta
- BE9253 Extern triggerkabel 3,5 mm

Visit mobiltelefonsändare

Installera appen

1 Slå på Bluetooth®
Svep nedåt från skärmens överkant och tryck på Bluetooth-ikonen.

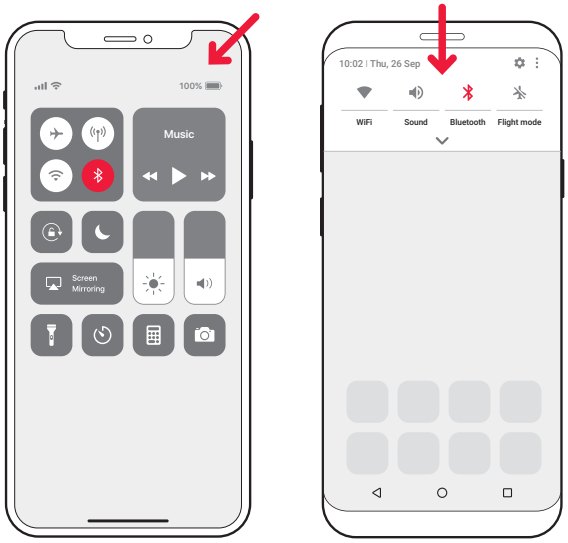

2 Installera Visitappen

Ladda ner **Bellman Visit**-appen från App Store® eller Google Play™ och följ anvisningarna för att komma igång.

Hämta i App Store

LADDA NED PÅ Google Play

Installera sändaren


3 Montera
Ta bort skyddsfilmen från kardborren på sändarens baksida och fäst den på väggen.

4 Starta
Dra bort batterilappen för att starta sändaren. Statuslamporna lyser i grönt för att visa att den är på.

5 Anslut
Anslut USB-kontakten i nätadaptern. Snäpp fast elkontakten och koppla in adaptern i vägguttaget. Om du har fast telefon ansluter du den med hjälp av medföljande mellanpropp enligt bilden.

6 Testa mobilen
Be någon ringa till din mobil. Den gula lampan på Visitmottagaren blinkar gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

7 Testa telefonen
Ring till din fasta telefon. Den gula lampan på Visitmottagaren lyser gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

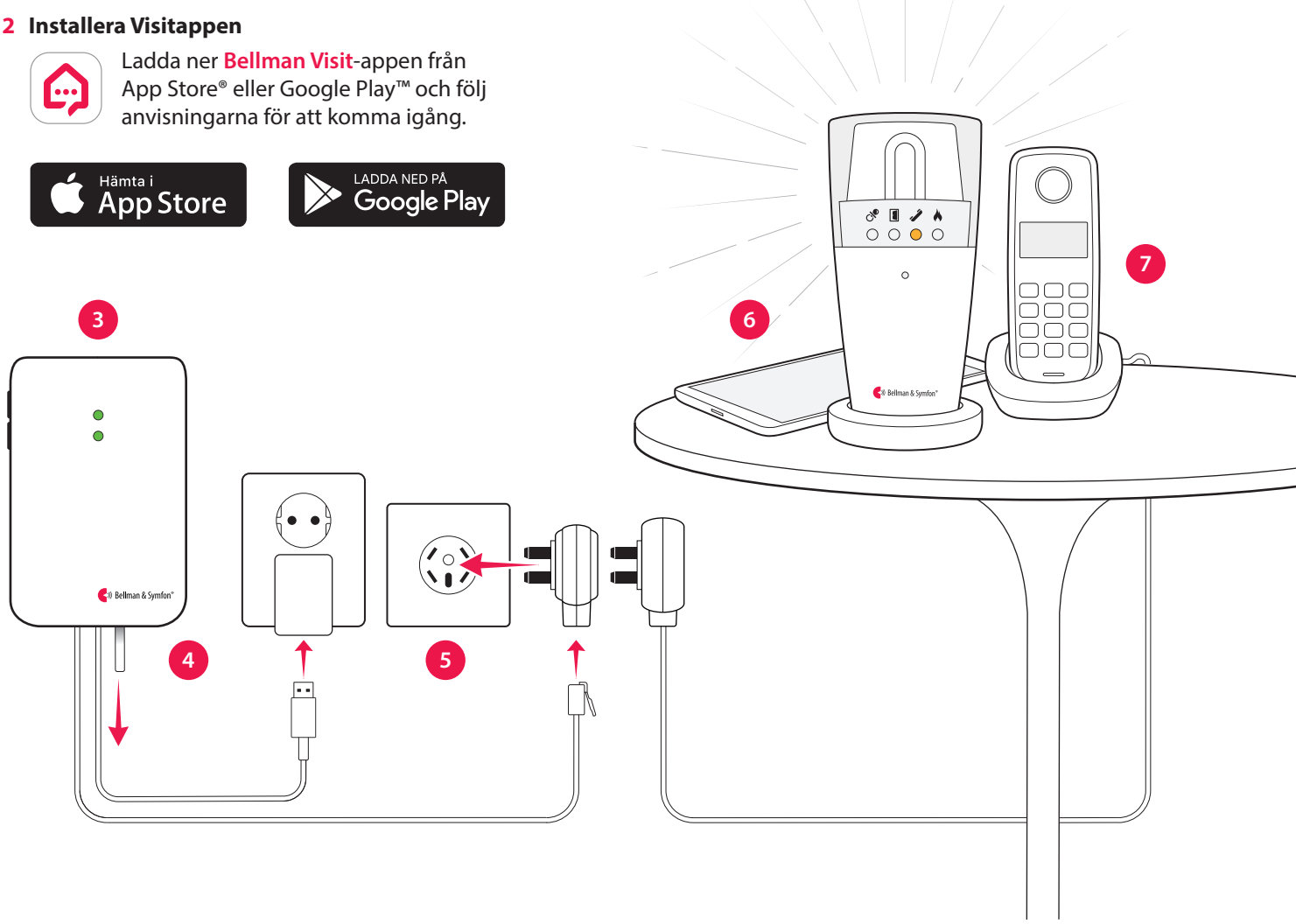

Visit mobiltelefonsändare

Använda appen

När du har installerat appen kommer du att få Visitnotiser på din mobiltelefon. Dessutom aktiveras dina Visitmottagare när mobilen ringer eller tar emot ett meddelande. Både notiser och enheter hanteras enkelt i appen. Så här gör du:



Anpassa notiser
Aktivera, inaktivera eller ta bort en notis med ett enkelt tryck.




Kontrollera enheter
Få en översikt över dina enheter. Tryck på **+** för att lägga till en ny.



Se historik
Se dina senaste notiser, sorterade efter datum och tid.



Lär dig mer
Tryck på **Bruksanvisning** i menyn för att lära dig fler funktioner i appen.

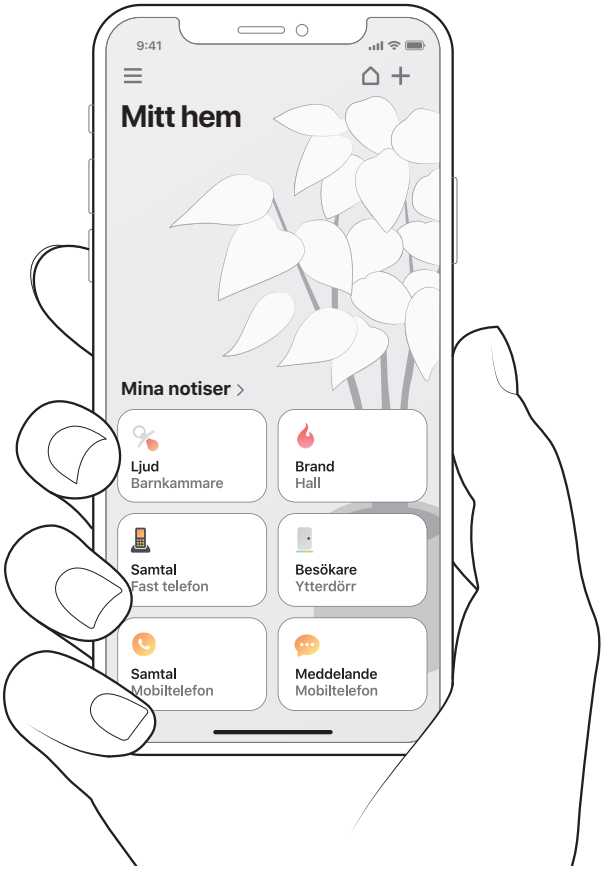

Förinställt signalmönster

När mobilsändaren aktiveras av ett inkommande samtal, meddelande eller ett anslutet tillbehör händer följande:

1. Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.
2. En Visitlampa på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt tabellen i avsnittet **Byta signalmönster** för BE1431 eller i appens Bruksanvisning.

Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. Detta betyder att du bör byta radionyckel på alla enheter, se avsnittet **Byta radionyckel** för BE1431 eller i appens Bruksanvisning.

Sändare		Signalmönster, mottagare			
Källa	**Statuslampa**	**Visitlampa**	**Ljud**	**Vibration**	**Blixt**
■ Fast telefon	Grön, övre	Lyser gult	1×ringsignal, mörk ton	Mellan ■□■□	Ja
■ Mobiltelefon	Grön, övre	Blinkar gult	2×ringsignal, ljus ton	Mellan ■□■□	Ja
■ Tillbehör	Grön, undre	Lyser grönt	1×dörrsignal, mörk ton	Långsam ■□□□	Ja


Visit_001ART013-SE

Visit babyvakt

Visit_001ART013-SE

BE1491

Knappar och anslutningar

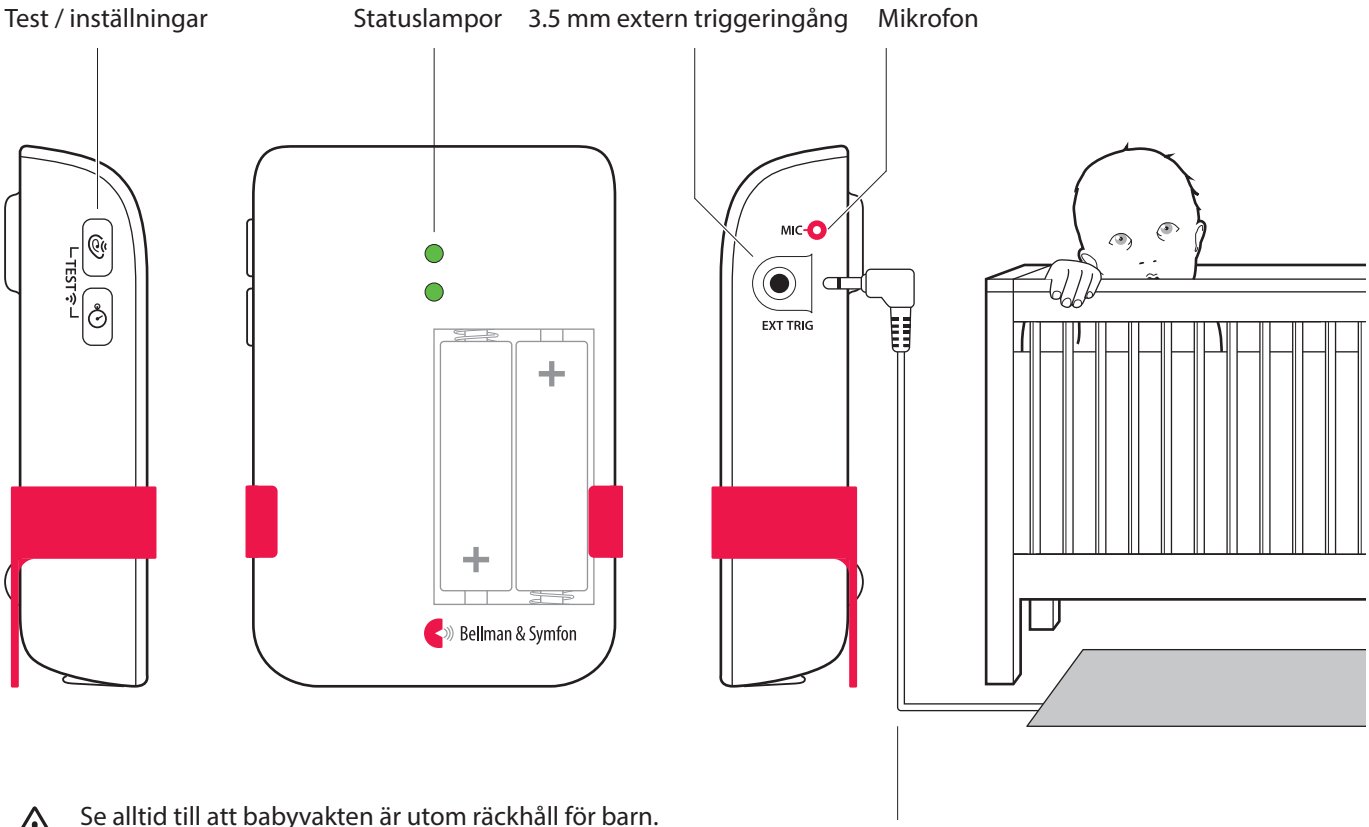

Se alltid till att babyvakten är utom räckhåll för barn.
Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage.

BE9026 Trampmatta

Teknisk information

I förpackningen

- BE1491 Visit babyvakt
- 2×1,5 V AA alkaliska batterier
- Förmonterat bordsställ
- Skruv och plugg

Ström och batteri

- Batterityp
  2×1,5 V AA litium eller
  alkaliska batterier
- Strömförbrukning
  Aktiv < 70 mA
  Viloläge < 400 µA
- Driftstid
  Alkaliska batterier ~ 6 mån
  Litiumbatterier ~ 1 år

Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 118 g, inkl. batterier

Aktivering

- Via mikrofonen och testknapparna
- Via en trampmatta (tillbehör)

Inställningar

- Känslighet
  65 dB, 75 dB, 85 dB
- Fördröjning
  30 s, 10 s, 1 s

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
  868,3 MHz
- Räckvidd
  50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur
  0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet
  15% till 90%, icke-kondenserande

Tillbehör


- BE9026 Trampmatta

Visit babyvakt

Sätta upp babyvakten

1 Dra bort batterifliken för att starta enheten.
(Du kan hålla nere båda testknapparna i 3 sekunder för att sätt på / stänga av den).

2 Ställ babyvakten på sängbordet eller sätt upp den på väggen med medföljande skruv och plugg.
Det rekommenderade avståndet är 0,5 – 2 m, utom räckhåll för barnet.

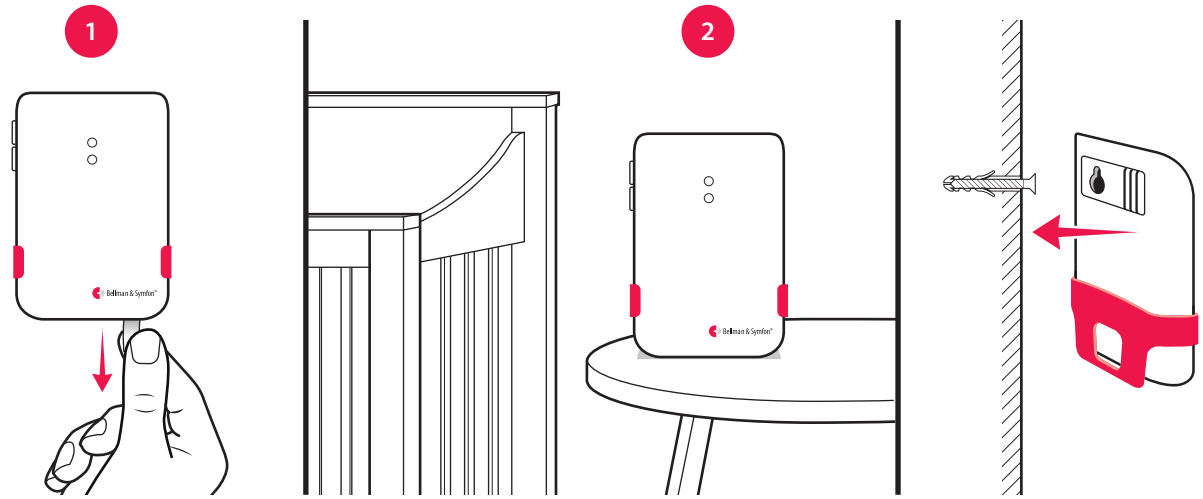

Testa anslutningen

Med testknapparna

1 Tryck samtidigt på babyvaktens testknappar.
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den skickar en radiosignal.

2 Den orangea Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.


Notera: Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.


Med hjälp av din röst

1 Ställ dig i närheten av babyvakten och för lite ljud.
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den aktiveras av ljudet och skickar en radiosignal.

2 Den orangea Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

Notera: Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

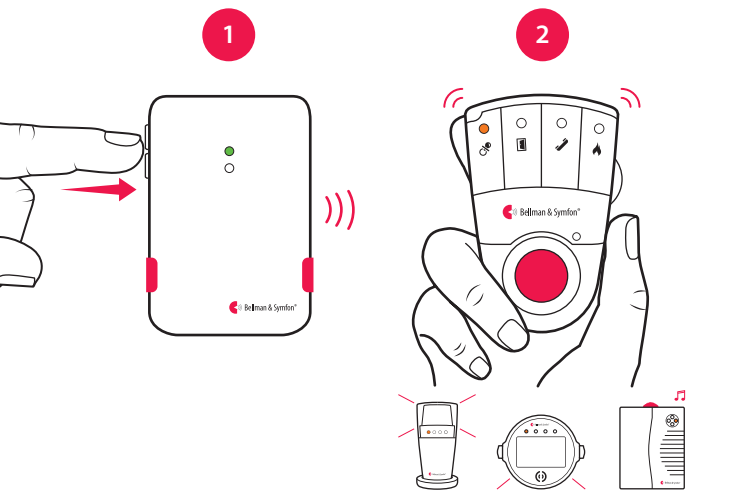

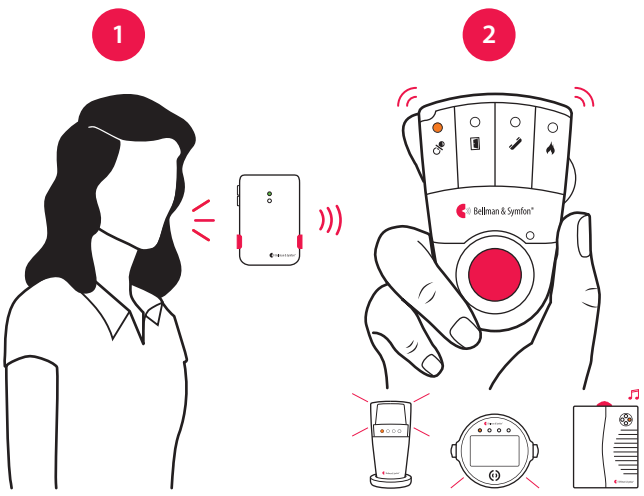


Visit babyvakt

Ändra inställning

Knapparna för känslighet och fördröjning sitter på babyvaktens vänstra sida. När du trycker på knappen visas först din nuvarande inställning. Tryck upprepade gånger på knappen för att ändra inställning.

- Om babyvakten inte aktiveras när barnet gråter – öka känsligheten.
- Om babyvakten aktiveras för lätt – minska känsligheten.
- Om babyvakten aktiveras för tidigt eller för sent – justera fördröjningen.

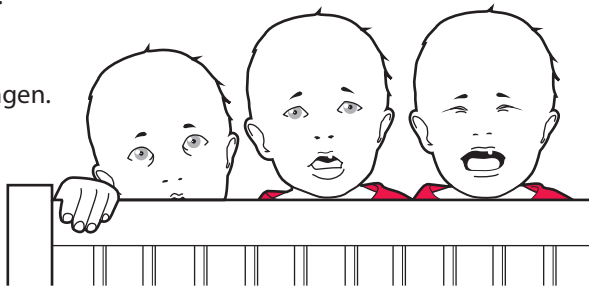

Inställningar, känslighet

65 dB	Röd
75 dB	Orange
85 dB	Grön

Inställningar, fördröjning

30 s	Röd
10 s	Orange
1 s	Grön

Förinställt signalmönster

När babyvakten aktiveras av barnets röst eller en ansluten trampmatta händer följande:

1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att babyvakten skickar en radiosignal till mottagaren.

2 Den orangea Visitlampan på mottagaren tänds och den börjar att ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Babyvakten och trampmattan styr signalmönstret och förinställningen är:

Babyvakt		Signalmönster, mottagare			
Källa	**Statuslampa**	**Visitlampa**	**Ljud**	**Vibration**	**Blixt**
■ Babyröst	Grön, övre	Fast orange ljus	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja
■ Trampmatta	Grön, undre	Fast grönt ljus	1×dörrklocka, mörk	Långsam ■□□□	Ja

Byta signalmönster

Om du har mer än ett barn kan du ställa in ett individuellt signalmönster för varje babyvakt. Öppna locket och flytta någon av signalomkopplarna uppåt (på). Var noga med att de andra signalomkopplarna är nere (av).




Babyvakt			Signalmönster, mottagare			
Inställning	**Källa**		**Visitlampa**	**Ljud**	**Vibration**	**Blixt**
	Babyvakt	1	Fast orange ljus	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja
	Trampmatta	1	Fast grönt ljus	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja
	Babyvakt	2	2×blinkar orange	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja
	Trampmatta	2	2×blinkar grönt	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja
	Babyvakt	3	3×blinkar orange	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja
	Trampmatta	3	3×blinkar orange	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja
	Babyvakt	4	Blinkar orange	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja
	Trampmatta	4	Blinkar orange	Babymelodi	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯	Ja

Visit babyvakt

Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under babyvaktens lock.

Så här byter du radionyckel:

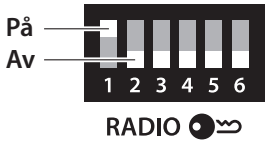

1. Ta försiktigt bort bordsstället från babyvakten och öppna locket. Flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel.
2. Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
3. Tryck på babyvaktens testknappar inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
4. Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

   Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

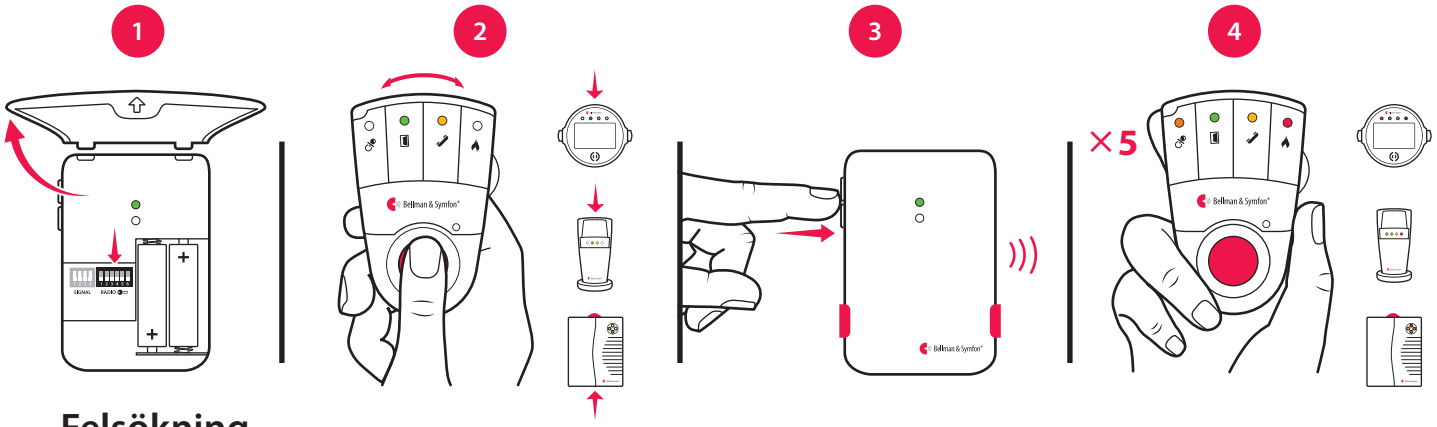

Felsökning


Om	Gör så här
Statuslampan blinkar orange	▪ Byt batterier. Använd enbart 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.
Statuslampan tänds i grönt men mottagaren aktiveras inte	▪ Kontrollera sändarens och babyvaktens batterier och anslutningar. ▪ Flytta mottagaren närmare babyvakten för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se **Byta radionyckel**.
Statuslampan tänds inte trots att babyn gråter	▪ Flytta babyvakten närmare barnet eller öka mikrofonens känslighet, se avsnittet **Ändra inställningar**. **Notera:** Se alltid till att babyvakten är utom räckhåll för barn. Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage.
Babyvakten aktiveras för lätt	▪ Minska mikrofonens känslighet eller flytta babyvakten längre bort från spjälsängen, se **Ändra inställningar**.
Babyvakten aktiveras för snabbt	▪ Öka fördröjningen, se **Ändra inställningar**.
Babyvakten aktiveras för sent	▪ Minska fördröjningen, se **Ändra inställningar**.
Mottagaren aktiveras utan någon anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.

Visit optisk-termisk brandvarnare

BE1481

Visit_001ART013-SE

Knappar och anslutningar

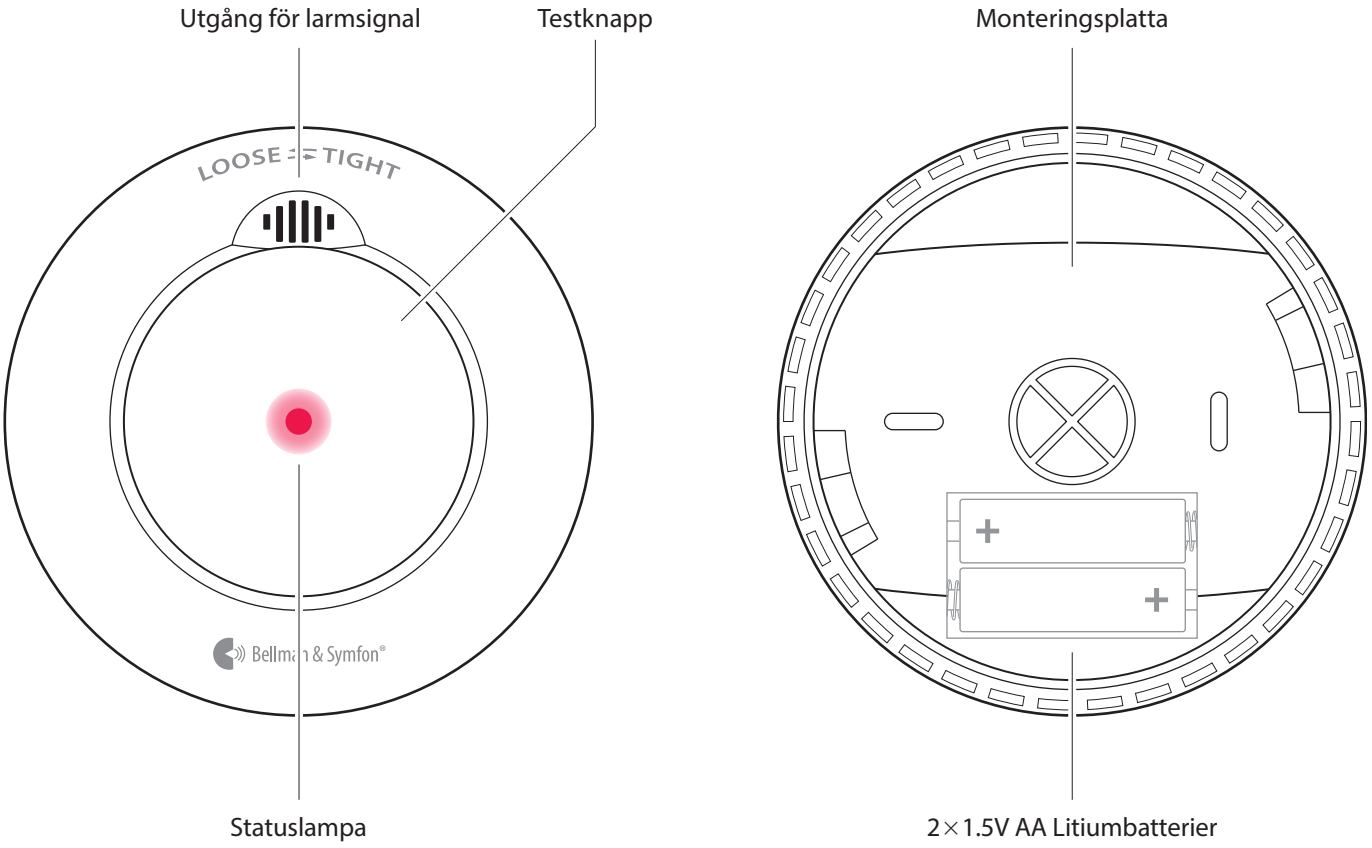

Teknisk information

I förpackningen

- BE1481 Visit brandvarnare
- 2×1.5V AA batterier
- Monteringsplatta
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning

Ström och batteri

- Batterityp
  2×1.5V AA Energizer litium L91
- Strömförbrukning
  Aktiv < 75 mA
  Viloläge < 15 µA
- Drifttid
  Minimum 5 år

Mått och vikt

- Diameter: 120 mm
- Djup: 37 mm
- Vikt: 165 g, inkl. batterier

Sensortyp

- Optisk-termisk sensor med larm på > 85 dB(A) @ 3m, Frekvens: 3.2 kHz

Aktivering

- Via testknappen
- Via rökdetektorn
  Rökkänslighet:
  0.115 – 0.168 dB/m
- Via temperatursensorn:
  Temperaturkänslighet:
  54 till 70 °C

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens:
  868,3 MHz
- Räckvidd:
  Upp till 200 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur:
  4 till 40 °C
- Relativ luftfuktighet
  15% till 95%
  icke-kondenserande


Visit optisk-termisk brandvarnare

Sätta upp brandvarnaren

1 Ta bort monteringsplattan från brandvarnaren genom att vrida den moturs och sätt i medföljande batterier för att starta enheten.

2 Fäst monteringsplattan i taket med medföljande skruv och plugg. Montera den minst 50 cm från väggar och andra utstickande delar, se **Placering av brandvarnare**. För alternativ montering, se **Magnetisk monteringssats** på sid 34.


3 Fäst brandvarnaren på monteringsplattan genom att vrida den medurs.

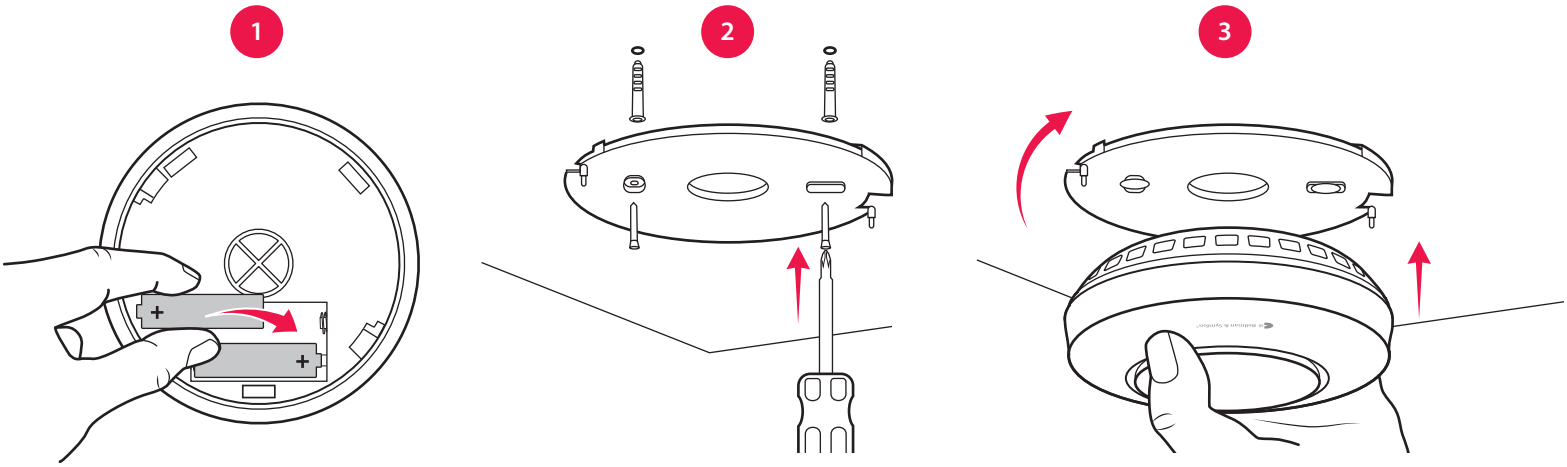

Placering av brandvarnare

Placera brandvarnaren i mitten av taket utanför sovrummen, minst 50 cm från närmsta vägg. Om sovrummen är i olika delar av huset rekommenderas flera brandvarnare. I bostäder med fler än en våning installeras minst en brandvarnare per våning.

Undvik kök, öppna spisar eller garage eftersom ånga och avgaser kan orsaka falsklarm. Den bör inte heller installeras i fuktiga miljöer, nära fläktar eller i jordbruksfastigheter.

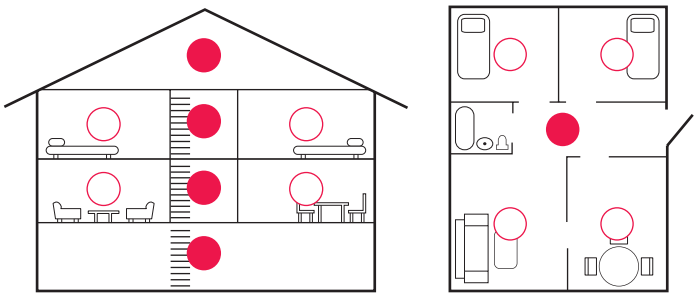


● = Minimum,
○ = Extra brandvarnare

Testa anslutningen

1 Tryck och håll in testknappen på brandvarnaren tills den börjar pipa och blinka. Brandvarnaren skickar då en radiosignal till Visitmottagaren.

2 Den röda Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

Notera: När du släpper testknappen tystnar brandvarnaren och Visitmottagaren slutar signalera inom 1 minut.

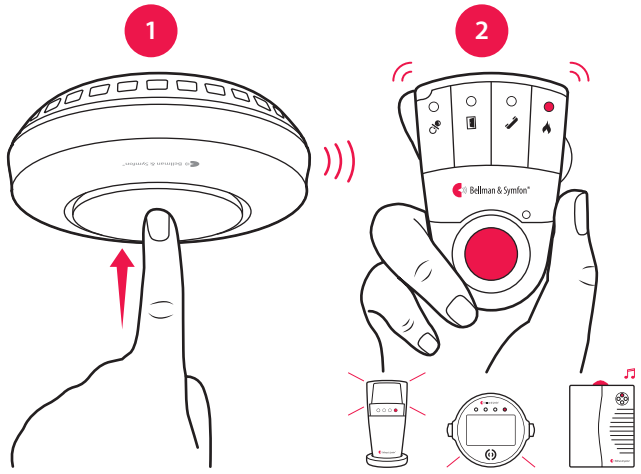

Visit optisk-termisk brandvarnare

Signalmönster

Brandvarnarens statuslampa blinkar rött var 50:e sekund för att visa att den fungerar som den skall. Signalmönstret varierar beroende på larmets orsak enligt tabellen nedan:

Brandlarm			Signalmönster, mottagare			
Orsak	**Statuslampa**	**Ljud**	**Visitlampa**	**Ljud**	**Vibration**	**Blixt**
■ Rök	Blinkar snabbt	■■■□	Blinkar rött	Brandlarm	Lång	Ja
■ Värme	Blinkar snabbt	▮▯▮▯▮▯▮▯	Blinkar rött	Brandlarm	Lång	Ja
■ Svagt batteri	1 blink / 50 s	1 pip / 50 s	Blinkar rött	–	–	–
■ Fel på enheten	1 blink / 50 s	1 pip / 50 s	–	–	–	–

Broadcastläge

Om du vill att brandlarmet skall skickas vidare till ***alla*** mottagare inom radioräckvidd kan du aktivera broadcastläge. Det fungerar oavsett vilken radionyckel enheterna är inställda på.

Aktivera broadcastläge

- Tryck på testknappen tre gånger i snabb följd. Brandvarnaren larmar och statuslampan blinkar tre gånger för att visa att broadcastläget är aktiverat. Varning för svagt batteri kommer endast att skickas till enheter med samma radionyckel.

  Notera: I broadcastläge kan larm inte aktiveras med testknappen. Använd istället rökdetektorspray.

Avaktivera broadcastläge

- Tryck på brandvarnarens testknapp tre gånger i snabb följd. Brandvarnaren larmar och statuslampan lyser i 2 sekunder för att visa att broadcastläget är avaktiverat. Brandvarnaren återgår då till senast sparade radionyckel.

Pausfunktion

Använda pausfunktionen

- Om brandvarnaren larmar i onödan, tryck och håll in testknappen i 2 s för att starta pausläget. Statuslampan blinkar rött var 16:e sekund när pausläget är aktiverat. **Notera:** Pausläget upphör automatiskt efter 10 minuter av säkerhetsskäl.

Test och underhåll

Testa brandvarnaren regelbundet, helst varje vecka, men minst en gång per månad. Brandvarnaren skall även testas omedelbart efter en längre tids frånvaro, som till exempel efter semestern. Rengör endast med en fuktig trasa. Dammsug den med en mjuk borste efter att du bytt batteri. Måla aldrig över brandvarnaren.

Om	Gör så här
Inget händer när jag trycker på brandvarnarens testknapp	▪ Kontrollera att batterierna sitter i ordentligt. ▪ Byt batteri i brandvarnaren. Använd endast AA Energizer litium L91 batterier. ▪ Kontrollera brandvarnarens utgångsdatum på etiketten under "Replace by".
Brandvarnaren larmar när jag trycker på testknappen men Visitmottagaren aktiveras inte	▪ Kontrollera brandvarnarens batteri och mottagarens ström och batteri. ▪ Flytta mottagaren närmare brandvarnaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se **Byta radionyckel**.
Visitmottagaren aktiveras utan någon anledning	▪ Kontrollera om rök eller ånga från kök eller badrum orsakar falsklarmet. ▪ Byt brandvarnarens batteri om mottagaren indikerar lågt batteri, se **Signalmönster**. ▪ Om problemet kvarstår finns det troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**. ▪ Kontrollera om det finns ett annat system i närheten som har broadcastläge aktivt.
Brandvarnaren larmar utan anledning	▪ Avlägsna eventuell spindelväv eller damm. Byt ut enheten om problemet kvarstår.

Visit optisk-termisk brandvarnare

Byta radionyckel


Om ditt system aktiveras utan anledning så kan det finnas ett närliggande Visitsystem som stör. Du bör då byta radionyckel på alla enheter. Förfarandet beror på vilken typ av sändare du har i ditt visitsystem.

System med *olika* typer av sändare

Börja med att byta radionyckel på alla ***övriga*** sändare i systemet genom att flytta valfri radioomkopplare, se respektive sändares bruksanvisning. **Notera:** Alla sändare måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

Steg 1: Byt radionyckel på BE1481 brandvarnare

1. Ta ur ett batteri för att stänga av brandvarnaren och vänta i minst 30 s. Tryck och håll in testknappen samtidigt som du sätter tillbaka batteriet. Fortsätt hålla in testknappen tills statuslampan börjar blinka. Nu kan du släppa knappen. Statuslampan börjar då pulsera snabbt för att visa att brandvarnaren är redo att ta emot en ny radionyckel.
2. Tryck på testknappen på någon av de ***övriga*** sändarna inom 25 s för att skicka den nya radionyckeln.
3. Brandvarnarens statuslampa lyser med ett fast sken för att visa att radionyckeln har mottagits. Tryck på brandvarnarens testknapp för att spara den nya radionyckeln och lämna programmeringsläget.

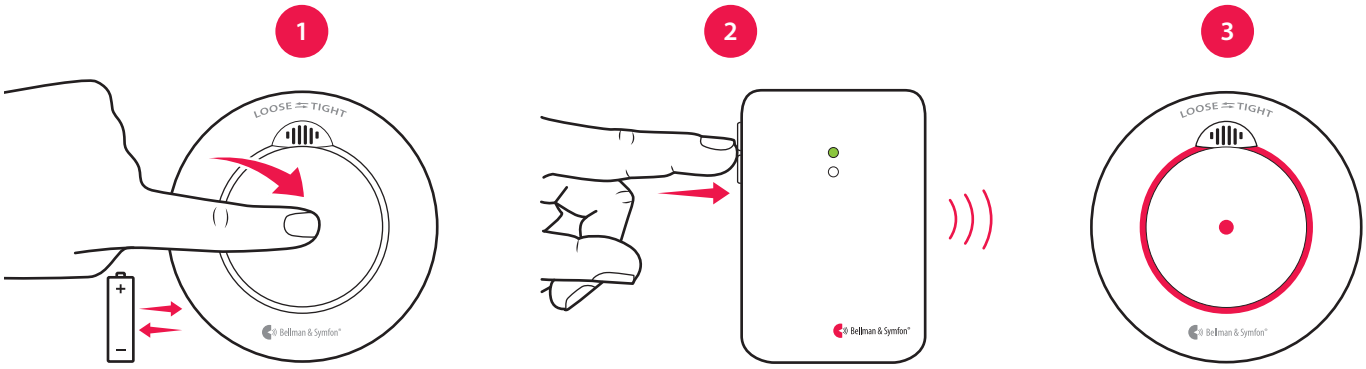

Steg 2: Byt radionyckel på Visitmottagaren

1. Tryck och håll in testknappen på Visitmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
2. Tryck på testknappen på en valfri sändare inom 25 s för att skicka den nya radionyckeln.
3. Alla Visitlampor på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har mottagits.



Visit optisk-termisk brandvarnare

Byta radionyckel

System med *endast* BE1481 brandvarnare

Steg 1: Byt radionyckel på BE1481 brandvarnare


1 Ta ur ett batteri för att stänga av brandvarnaren och vänta i minst 30 s. Tryck och håll in testknappen samtidigt som du sätter tillbaka batteriet. Fortsätt hålla in testknappen och släpp den först när statuslampan övergår från att blinka till att flimra.

2 Brandvarnaren återställs till radionyckel 0 och statuslampan lyser med ett fast sken.

3 **Inom 4 s**, tryck och håll in knappen tills lampan släcks för att stega till nästa radionyckel. Radionyckel 1 är nu vald och lampan tänds igen för att bekräfta. Tryck igen inom 4 s för att stega till nästa radionyckel. Det finns totalt 9 radionycklar att välja bland. Om du stegar förbi radionyckel 9 återställer brandvarnaren radionyckeln till 0.

4 Efter 4 s lämnar brandvarnaren automatiskt programmeringsläget och statuslampan släcks.

Notera: Följ stegen ovan för att byta radionyckel på övriga BE1481 brandvarnare i ditt Visitsystem.

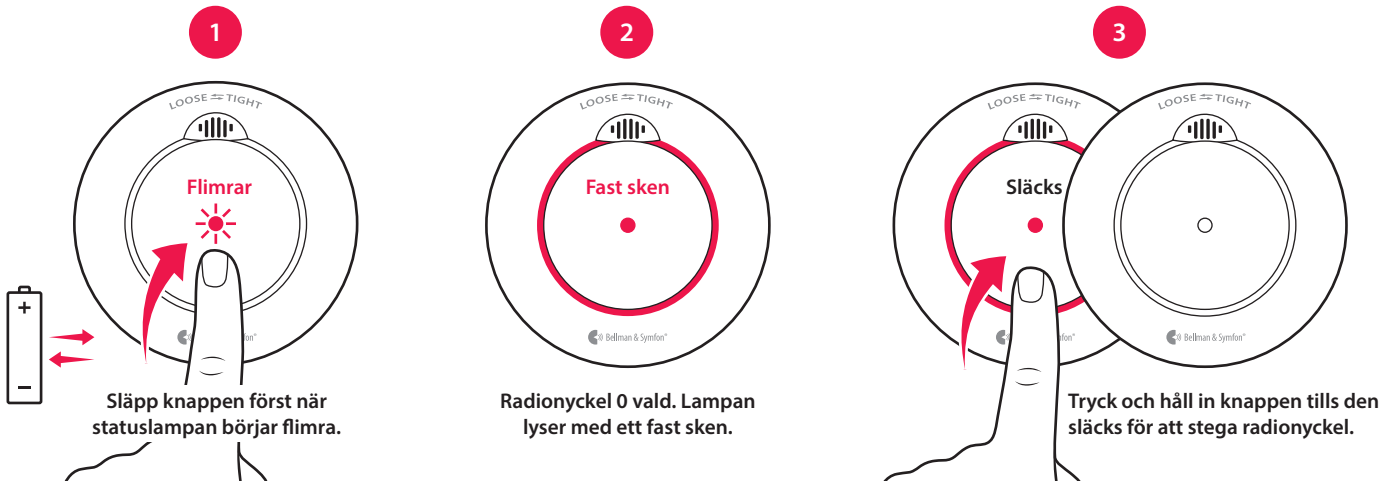


Steg 2: Byt radionyckel på Visitmottagaren

1 Tryck och håll in testknappen på Visitmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.

2 Tryck på testknappen på en valfri sändare inom 25 s för att skicka den nya radionyckeln.

3 Alla Visitlampor på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har mottagits.

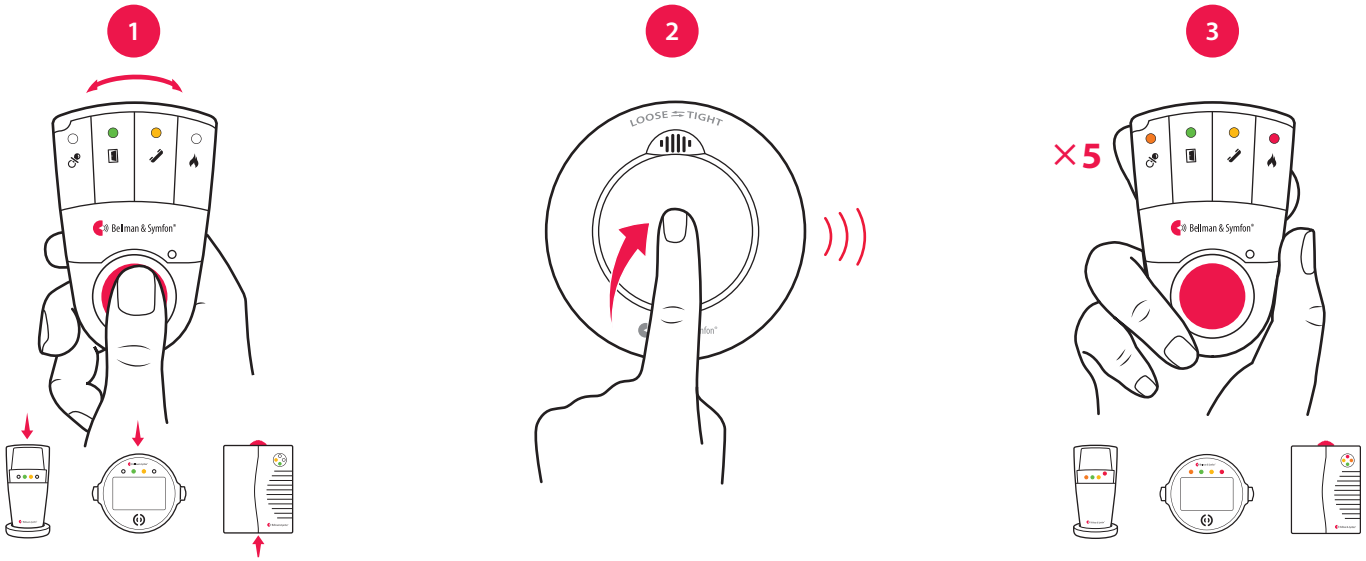

Magnetisk monteringssats

BE9175

Visit_001ART013-SE

För enkel montering av brandvarnare

Den magnetiska monteringssatsen erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ till skruv och plugg vid montering av brandvarnare. Den består av två självhäftande plattor - en som du fäster i taket och en som du fäster på brandvarnaren.


Notera: Monteringsytan måste vara ren från damm och fett. Om ytan inte rengörs ordentligt riskerar enheten att falla ner i förtid. Använd inte rengöringsmedel som våtservetter eller spray eftersom de kan lämna en hal yta. Satsen är inte lämplig för vinyltapeter, anti-adhesiva ytor, kraftigt strukturerade ytor, silikonbelagda eller teflonbelagda ytor. Brandvarnarens diameter får inte vara mindre än 70 mm


Så använder du monteringssatsen


1. Torka försiktigt av ytan med rengöringssprit.
2. Dra av skyddstejpen på takmonteringsplattan.
3. Fäst plattan i taket och håll den på plats i 10 s.
4. Dra av skyddstejpen på den magnetiska plattan och fäst den på brandvarnaren. Håll den på plats i 10 s.
5. Sätt fast brandvarnaren på takmonteringsplattan.


Teknisk information

Diameter	7 mm
Vikt	25 g
Färg	Vit
Miljö	Endast för inomhusbruk

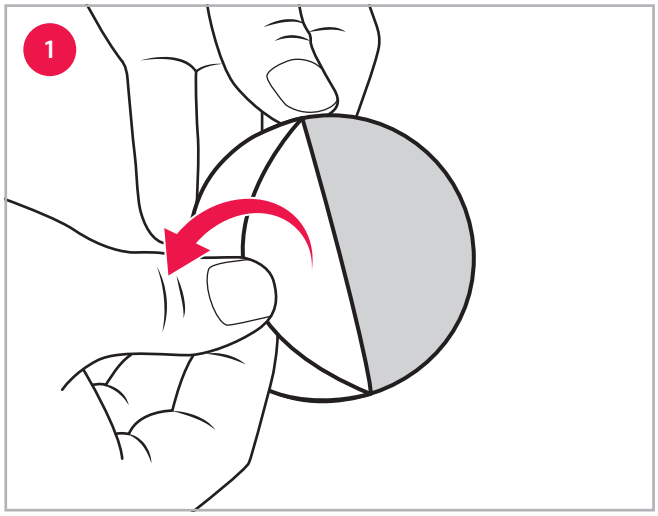

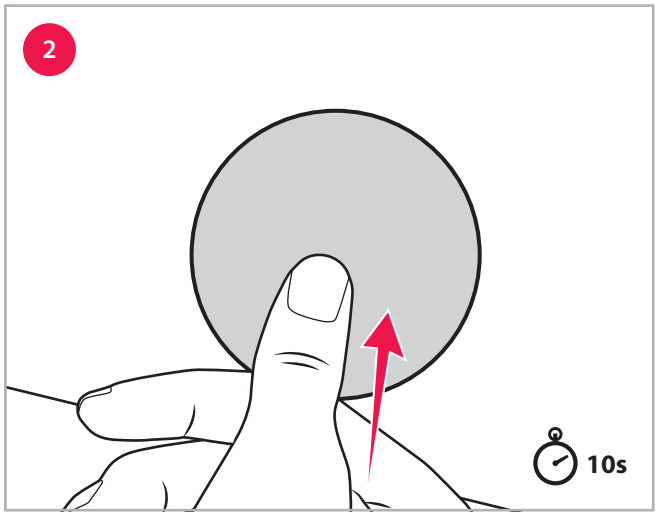

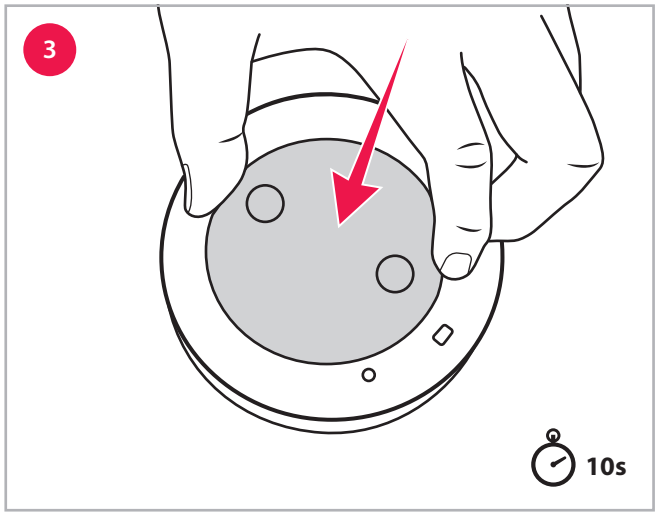


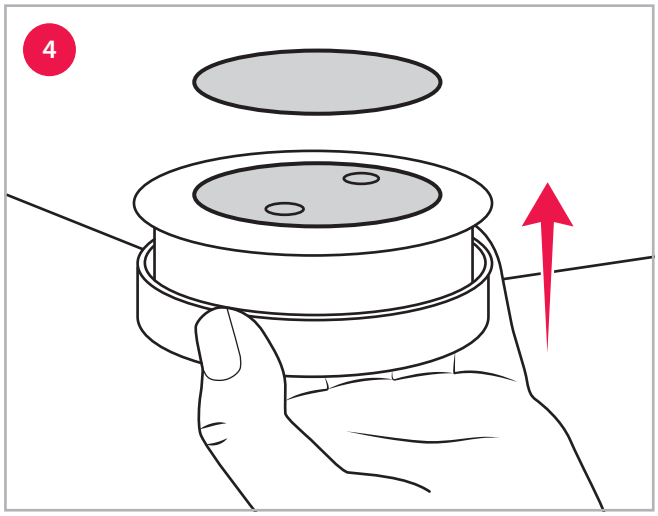

Visit joniserande brandvarnare

BE1551

Översikt

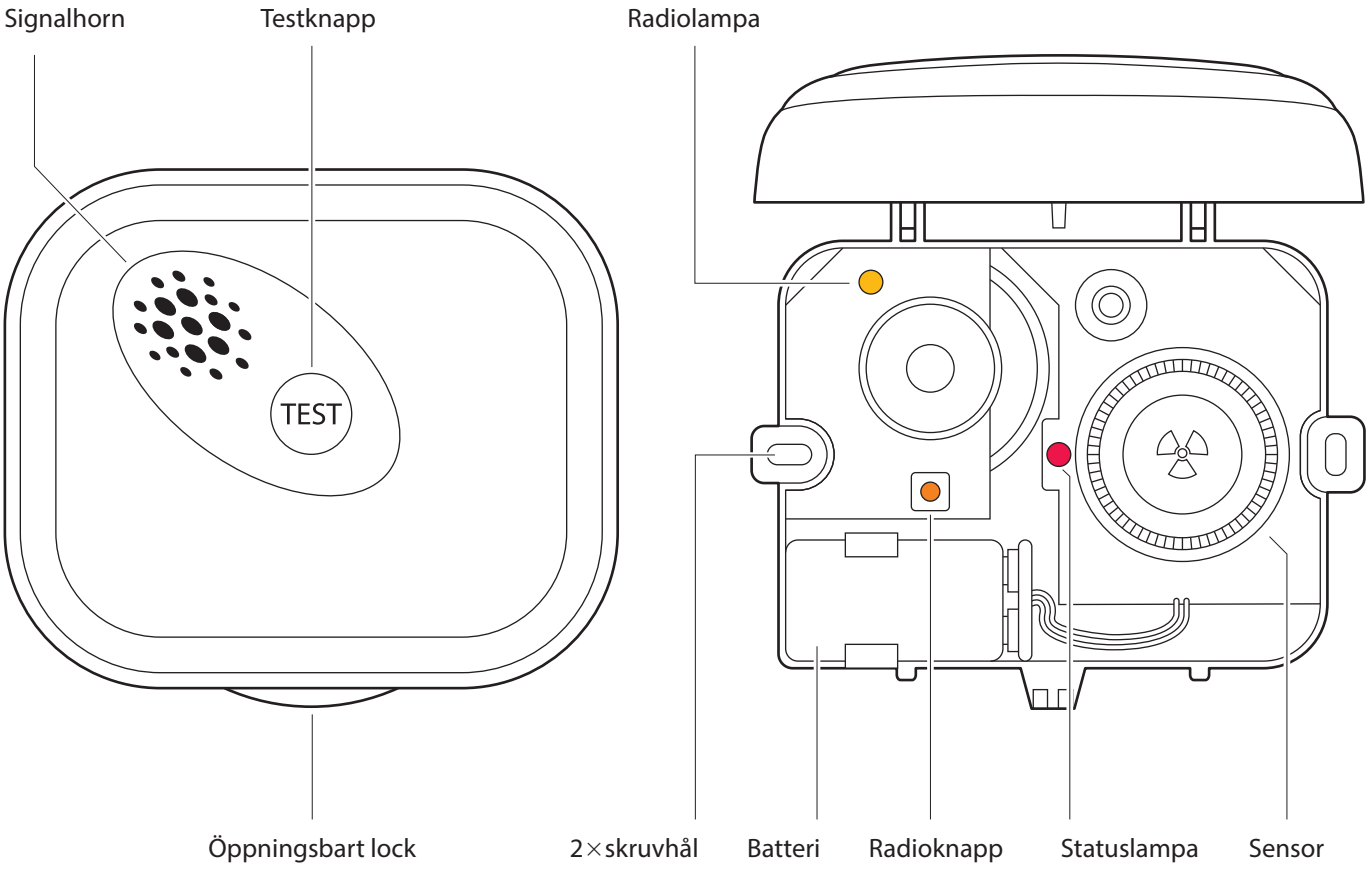

Teknisk information

I förpackningen

- BE1551 Visit brandvarnare
- 1×9 V alkaliskt batteri
- 2×skruv och plugg
- Bruksanvisning

Ström och batteri

- Batterityp
  9V alkaliskt batteri
- Strömförbrukning
  Viloläge < 15 µA
- Batterilivslängd
  Minst 3 år

Sensortyp

- Joniserande rökdetektor

Storlek och vikt

- Höjd: 118 mm
- Bredd: 140 mm
- Djup: 42 mm
- Vikt: 200 g inkl. batteri

Alarmsignal

- Min. 85 dB(A) @ 3m, 2,6 kHz

Aktivering

- Via testknappen
- Via den inbyggda rökdetektorn

Tillbehör

- Magnetisk monteringssats BE9175

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
  868,3 MHz
- Räckvidd: Upp till 200 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare.

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur
  4° till 40° C
- Relativ luftfuktighet
  15% till 95%, icke-kondenserande

Rökkänslighet

- Uppfyller kraven för BS EN 14604:2005

Visit_001ART013-SE


Visit joniserande brandvarnare

Sätta upp brandvarnaren

1 Ta av locket genom att vrida det bakåt och anslut batteriet för att starta enheten. Brandvarnaren piper till under uppstart.

2 Markera borrhålen med en penna och fäst brandvarnaren i taket med medföljande skruv och plugg. Montera den minst 30 cm från väggar och andra utstickande delar, se **Placering av brandvarnare** nedan.


3 Sätt tillbaka locket på brandvarnaren genom att trycka försiktigt tills det snäpper fast.

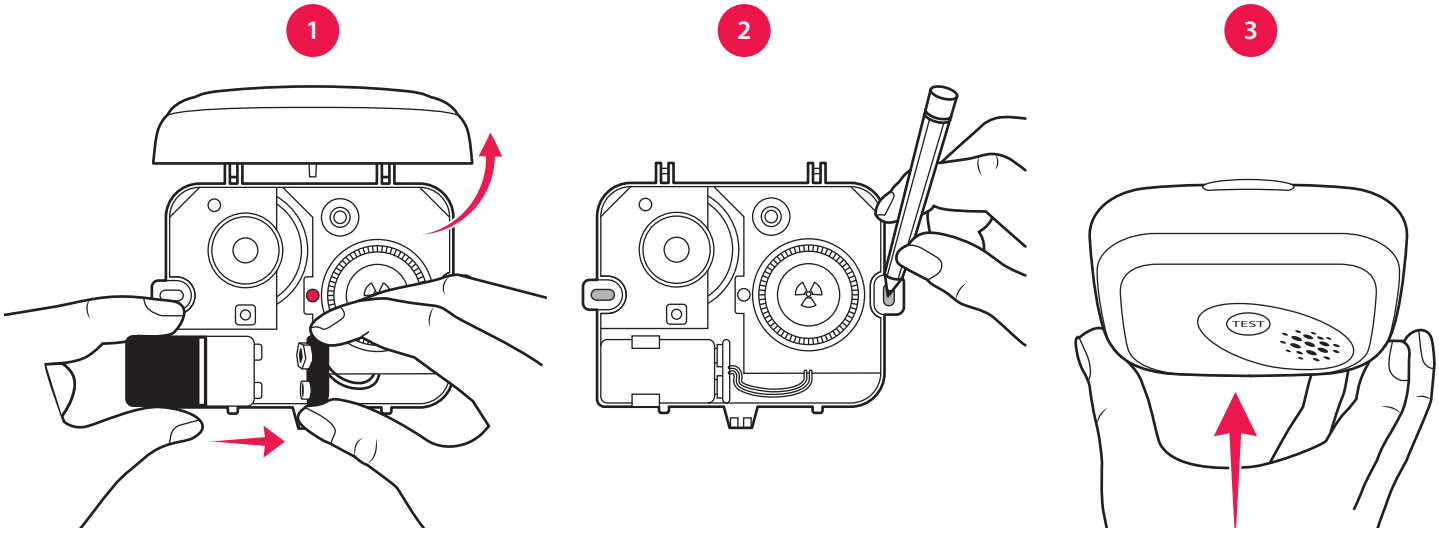

Placering av brandvarnare

Placera brandvarnaren i mitten av taket utanför sovrummen, minst 30 cm från närmsta vägg. Om sovrummen är i olika delar av huset, rekommenderas flera brandvarnare. I bostäder med fler än en våning installeras minst en brandvarnare per våning.

Undvik kök, öppna spisar eller garage eftersom ånga och avgaser kan orsaka falsklarm. Den bör inte heller installeras i fuktiga miljöer, nära fläktar eller i jordbruksfastigheter.

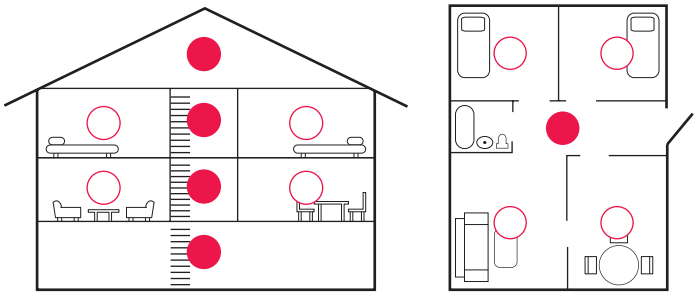


● = Minimum,
○ = Extra brandvarnare

Testa anslutningen

1 Tryck och håll nere testknappen på brandvarnaren tills den börjar larma (OBS! Högt ljud). Brandvarnaren skickar då en radiosignal till Visitmottagaren.

2 Den röda Visitlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

Notera: När du släpper testknappen tystnar brandvarnaren omedelbart och Visitmottagaren slutar signalera efter ca 30 s.

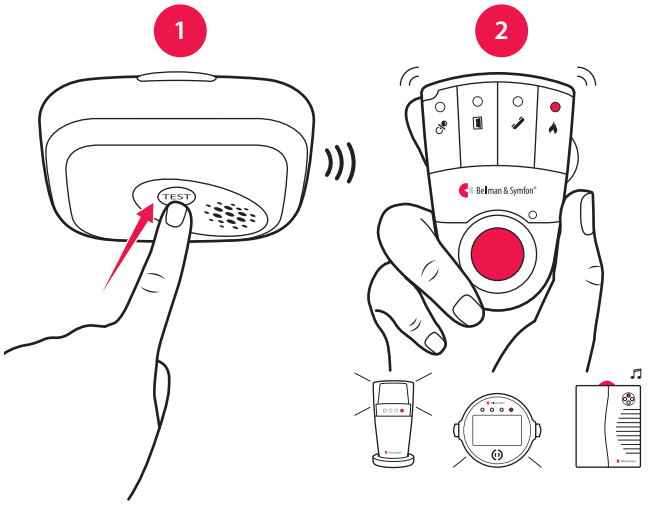

Visit joniserande brandvarnare

Signalmönster

Brandvarnarens statuslampa blinkar rött en gång per minut för att visa att den fungerar som den skall. Signalmönstret varierar beroende på larmets orsak enligt tabellen nedan.

Brandvarnare			Signalmönster, mottagare			
Orsak	**Statuslampa**	**Ljud**	**Visitlampa**	**Ljud**	**Vibration**	**Blixt**
▪ Brand	Blinkar rött	Brandlarm	Blinkar rött	Brandlarm	Lång ▬□	Ja
▪ Lågt batteri	1 rött blink / min	1 kort larm / min	Blinkar rött / 5 s	Kort larm	Kort ▮□	Nej

Notera: När brandvarnaren indikerar lågt batteri har du minst 30 dagar på dig att byta batteri. Sängvibrator ansluten till BE1580 Väckarklocka och BE1441/BE1442 Blixtmottagare avger ingen vibration för att indikera lågt batteri.

Använda broadcast

Om du vill att brandlarmet skall skickas till ***alla*** mottagare inom radioräckvidd kan du aktivera broadcastläge. Det fungerar oavsett vilken radionyckel enheterna är inställda på.

Så här aktiverar du broadcastläge:

1. Öppna brandvarnarens lock för att komma åt radioknappen, se **Översikt**.
2. Tryck på radioknappen tre gånger i snabb följd. Radiolampan pulserar 3 gånger i gult för att visa att broadcastläget är aktiverat.

Notera: Batterivarning kommer endast att skickas till enheter med samma radionyckel. Om du vill avaktivera broadcast, så behöver du välja en ny radionyckel, se **Byta radionyckel** på följande sida.

Test och underhåll

Testa brandvarnaren regelbundet, helst varje vecka, men minst en gång per månad. Brandvarnaren skall även testas omedelbart efter en längre tids frånvaro, som till exempel efter semestern. Rengör endast med en fuktig trasa. Dammsug den med en mjuk borste efter du bytt batteri. Måla aldrig över brandvarnaren.

Felsökning

Om	Gör så här
Inget händer när jag trycker på brandvarnarens testknapp	▪ Kontrollera att batteriet snäpper fast ordentligt i batterikontakten. ▪ Byt batteri i brandvarnaren. Använd endast ett Duracell MN1604 alkaliskt batteri. ▪ Kontrollera åldern på brandvarnaren, se “Replace by”-etikett på sidan av enheten.
Brandvarnaren larmar när jag trycker på testknappen men Visitmottagaren aktiveras inte	▪ Kontrollera brandvarnarens batteri och mottagarens batteri och anslutningar. ▪ Flytta mottagaren närmare brandvarnaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se **Byta radionyckel**.
Visitmottagaren aktiveras utan någon anledning	▪ Byt batteri om mottagaren indikerar för lågt batteri, se **Signalmönster**. ▪ Om problemet kvarstår finns det troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.
Brandvarnaren larmar utan någon anledning	▪ Kontrollera om rök eller ånga från kök eller badrum orsakar falsklarm. Avlägsna eventuell spindelväv eller damm. Byt ut brandvarnaren om problemet kvarstår.

Visit joniserande brandvarnare

Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter.

System med *olika* typer av sändare

Börja med att byta radionyckel på alla ***övriga*** sändare i systemet genom att flytta valfri radioomkopplare, se respektive sändares bruksanvisning. **Notera:** Alla sändare måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

Byta radionyckel på BE1551 brandvarnare

1. Öppna locket på brandvarnaren för att komma åt radioknappen, se **Översikt**. Tryck och håll nere radioknappen tills radiolampan blinkar långsamt i gult. Släpp knappen.
2. Tryck på testknappen på någon av de ***övriga*** sändarna inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln.
3. Radiolampan på brandvarnaren lyser med ett fast gult sken för att visa att radionyckeln har mottagits.

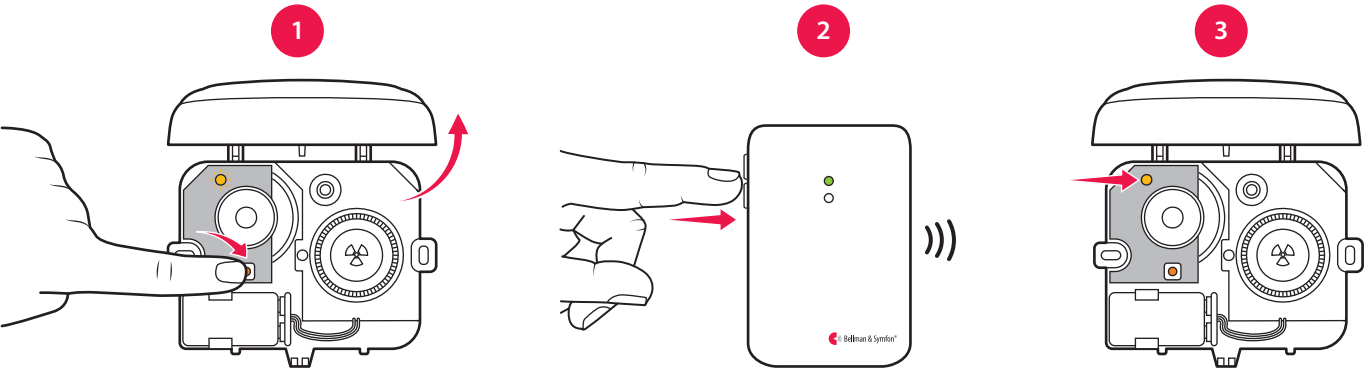

Byta radionyckel på en Visitmottagare

1. Tryck och håll nere testknappen på Visitmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
2. Tryck på testknappen valfri sändare inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln.
3. Alla Visitlampor på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har mottagits.

System med *endast* BE1551 brandvarnare

Byta radionyckel på dina brandvarnare

Välj ut en BE1551 brandvarnare som kommer att fungera som ***huvudenhet***. Den andra BE1551 brandvarnaren kommer då att fungera som ***slavenhet***. Öppna locket på bägge brandvarnare för att komma åt radioknappen, se **Översikt**.

1. Tryck och håll nere radioknappen på ***huvudenheten*** tills radiolampan blinkar långsamt i gult. Tryck och håll nere knappen igen för att generera en ny radionyckel. Radiolampan ändrar blinkmönster för att bekräfta bytet.
2. Tryck och håll nere radioknappen på ***slavenheten*** tills radiolampan blinkar långsamt i gult.
3. Tryck och håll nere testknappen på ***huvudenheten*** inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln. Den börjar då larma.
4. Radiolampan på ***slavenheten*** lyser med ett fast gult sken för att visa att radionyckeln har mottagits.

   Notera: Repetera steg 2 - 4 för att byta radionyckel på nästa BE1551 brandvarnare.


Byta radionyckel på en Visitmottagare

1. Tryck och håll nere testknappen på Visitmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
2. Tryck på testknappen på valfri brandvarnare inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln.
3. Alla Visitlampor på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har mottagits.

Visit kolmonoxidvarnare (CO)

Visit_001ART013-SE
BE1555

Knappar och anslutningar

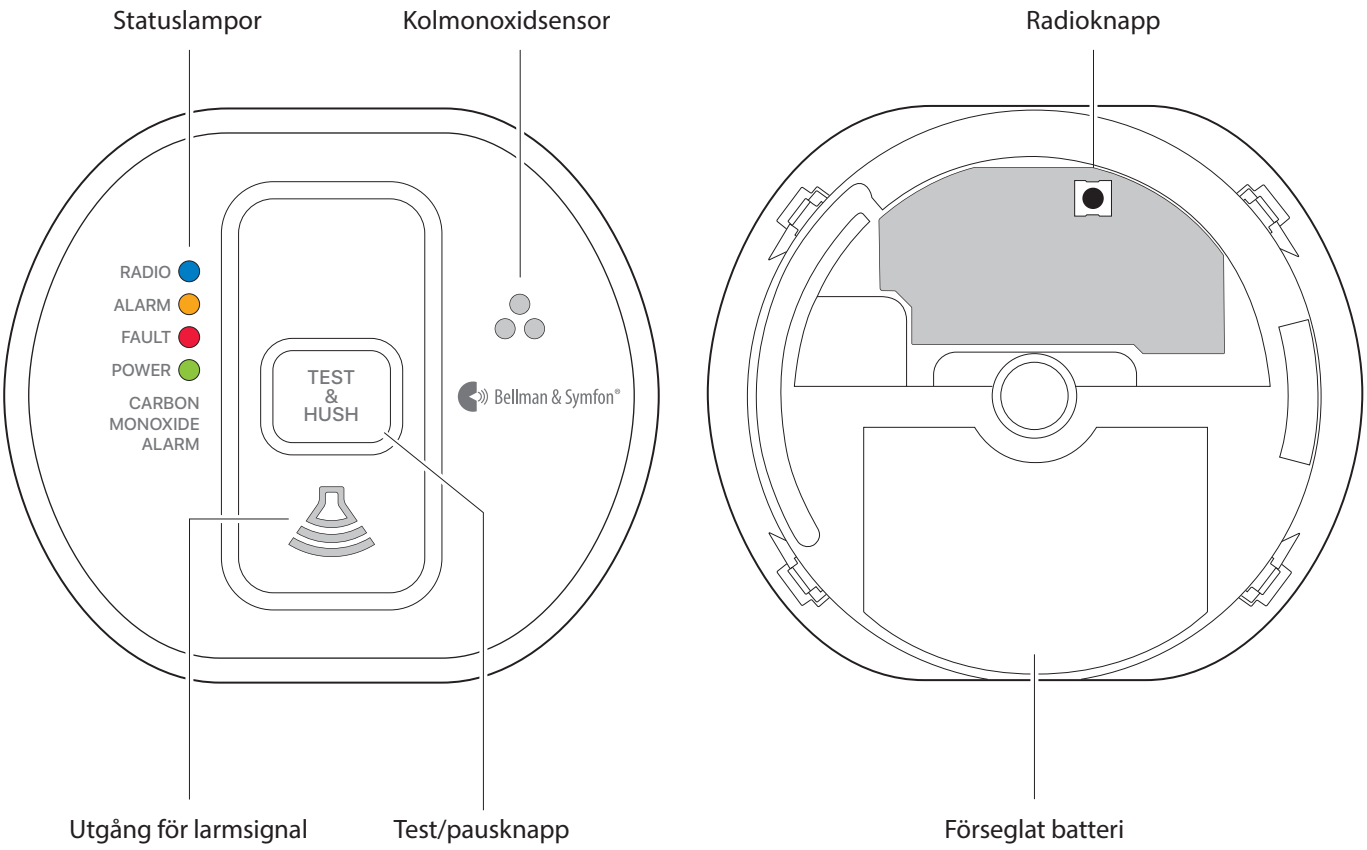

Teknisk information

I förpackningen

- BE1555 Visit kolmonoxidvarnare
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning

Ström och batteri

- Batteri:
  Inbyggd strömförsörjning från förseglat litiumbatteri.
- Batterilivslängd:
  10 år. Samma som produktens livslängd.

Aktivering

- Via test/pausknapp
- Via kolmonoxidsensorn

Storlek och vikt

- Höjd: 105 mm
- Bredd: 120 mm
- Djup: 40 mm
- Vikt: 195 g inkl. batteri

Omgivning

- Endast för inomhusbruk.
- Arbetstemperatur -10° till 40° C
- Relativ luftfuktighet:15% till 95%, icke-kondenserande

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens : 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 200 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning.

CO-varnare

- BE1555 aktiveras av följande nivåer av kolmonoxid (CO):

CO-nivå/fel	Alarmsignal
> 43 ppm	På inom 60 – 90 min.
> 80 ppm	På inom 10 – 40 min.
>150 ppm	På inom 2 minuter
Svagt batteri	1 pip varje minut
Fel på enheten	2 pip varje minut
Utgången	3 pip varje minut


Visit kolmonoxidvarnare (CO)

Sätta upp CO-varnaren

1 Ta bort monteringsplattan från CO-varnaren genom att vrida det moturs.

2 Fäst monteringsplattan i taket eller på väggen med medföljande skruv och plugg och var noga med att undvika befintlig elinstallation. Montera den minst 30 cm från väggar, se **Placering av CO-varnare** nedan.


3 Fäst CO-varnaren i monteringsplattan genom att vrida det medurs tills det klickar fast. Den röda, gula och gröna statuslampan tänds efter varandra för att visa att CO-varnaren är på.

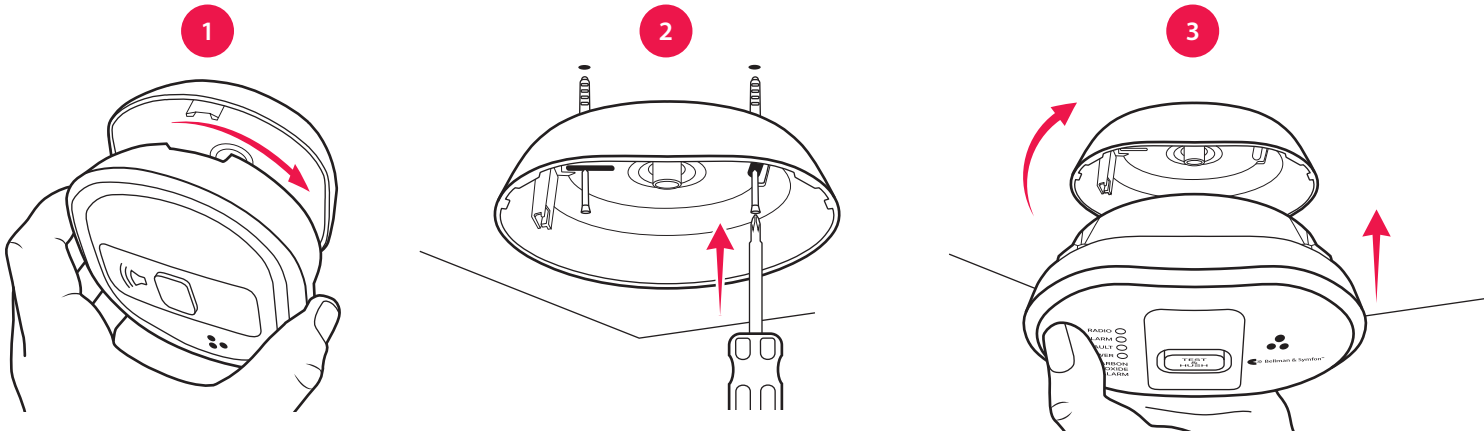

Placering av CO-varnare

Placera en CO-varnare i alla sovrum, rum i olika delar av huset där boende spenderar mycket tid, samt i nära anslutning till rum med eldstad eller värmepanna. Montera larmen i taket eller på väggen, minst 30 cm från väggar och utstående delar.

Undvik kök, öppna spisar eller garage eftersom ånga och avgaser kan orsaka falsklarm. CO-varnaren bör inte heller installeras i fuktiga miljöer, nära fläktar eller i jordbruksfastigheter.

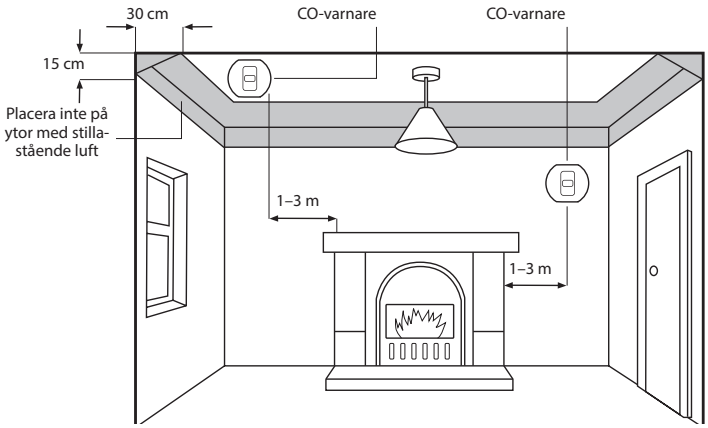


Testa anslutningen

1 Vänta i 15 s. Tryck och håll in test/pausknappen tills larmet ljuder. CO-varnaren skickar då en radiosignal till Visitmottagaren.

2 Den röda och den orange Visitlampan på mottagaren tänds växelvis för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

Notera: När du släpper testknappen tystnar CO-varnaren och Visitmottagaren slutar signalera inom 1 minut.

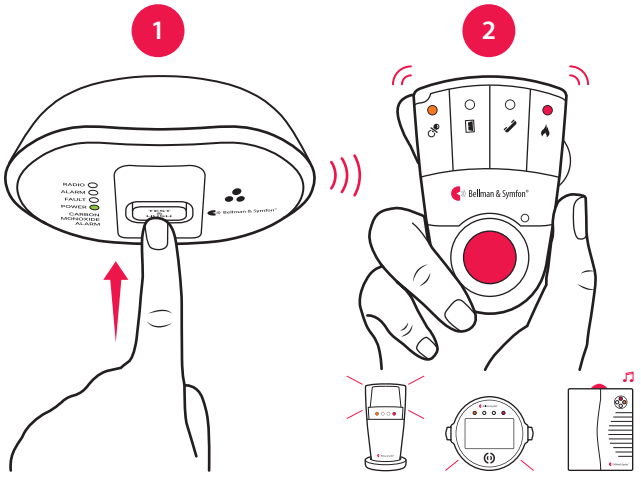

Visit kolmonoxidvarnare (CO)

Signalmönster

När larmet upptäcker över 43 ppm kolmonoxid, börjar den röda statuslampan blinka enligt tabellen nedan. Larmet kan aktiveras av till exempel matlagning på gasspis eller grill, bilmotorer, cigarettrök och aerosoler. Var uppmärksam på om larmet fortsätter ljuda och källan till kolmonoxidutsläppet är okänd.
Signalmönstret varierar beroende på larmets orsak enligt tabellen nedan:

Kolmonixidnivå / fel	Statuslampa	Alarmsignal	Visitmottagare
▪ > 43 ppm	Blinkar rött varannan s.	På inom 60 – 90 min.	På inom 60 – 90 min.
▪ > 80 ppm	2×röd blink varannan s.	På inom 10 – 40 min.	På inom 10 – 40 min.
▪ >150 ppm	4×röd blink varannan s.	På inom 2 minuter	På inom 2 minuter
▪ Svagt batteri	Blinkar gult varje minut	1 pip varje minut	Blinkar rött
▪ Fel på enheten	2×gul blink varje minut	2 pip varje minut	—
▪ Utgången enhet	3×gul blink varje minut	3 pip varje minut	—

Notera: När BE1555 för första gången varnar för låg batterinivå, har du ca 30 dagar att byta ut enheten. Du kan trycka på test / pausknappen för att tillfälligt stänga av larmsignalen för svagt batteri under 24 timmar.

Aktivera broadcastläge

Om du vill att brandlarmet skall skickas vidare till ***alla*** mottagare inom radioräckvidd kan du aktivera broadcastläge. Det fungerar oavsett vilken radionyckel enheterna är inställda på.

- För att aktivera broadcastläge, ta först ner CO-varnaren från monteringsplattan för att komma åt radioknappen, se **Knappar och anslutningar**. Tryck sedan på radioknappen tre gånger i snabb följd. Den blå statuslampan blinkar tre gånger för att visa att broadcastläget är aktiverat.

Pausfunktion

- Du kan tillfälligt stänga av alarmsignalen på din CO-varnare genom att trycka på test/pausknappen. Statuslampan fortsätter att blinka rött när pausläget är aktiverat och larmet ljuder igen efter ca 4 minuter. CO-varnaren kan endast tystas en gång under ett larm. Vid kolmonoxidnivåer över 150 ppm kan pausfunktionen inte aktiveras.

Test och underhåll

Testa CO-varnaren och Visitanslutningen regelbundet, minst en gång per månad. Genomför alltid en test efter semester eller en längre tids frånvaro. Rengör endast med en fuktig trasa. Undvik luftrenare, hårspray, färg eller andra aerosoler nära CO-varnaren. Måla aldrig över CO-varnaren.

Felsökning

Om	Gör så här
CO-varnaren aktiveras utan någon anledning	▪ Följ anvisningarna under sektionen **Vad gör jag när larmet ljuder?** i CO-varnarens bruksanvisning.
Visitmottagaren aktiveras utan någon anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.
Inget händer när jag trycker på CO-varnarens test/pausknapp	▪ Kontrollera att CO-varnaren sitter säkert fast i monteringsplattan. Vänta 15 s innan du trycker på test/pausknappen igen. ▪ Kontrollera CO-varnarens utgångsdatum på etiketten under “Replace by”
CO-varnaren ljuder när jag trycker på test/pausknappen men Visitmottagaren aktiveras inte	▪ Kontrollera mottagarens ström och batteri. ▪ Flytta mottagaren närmare CO-varnaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se **Byta radionyckel**.

Visit kolmonoxidvarnare (CO)

Byta radionyckel


Om ditt system aktiveras utan anledning så kan det finnas ett närliggande Visitsystem som stör. Du bör då byta radionyckel på alla enheter. Förfarandet beror på vilken typ av sändare du har.

System med *olika* typer av sändare

Börja med att byta radionyckel på alla ***övriga*** sändare i systemet genom att flytta valfri radioomkopplare, se respektive sändares bruksanvisning. **Notera:** Alla sändare måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

Steg 1: Byt radionyckel på BE1555 CO-varnare

1. Ta först loss CO-varnaren från monteringsplattan för att komma åt radioknappen, se **Knappar och anslutningar**. Tryck sedan och håll nere radioknappen tills radiolampan blinkar långsamt i blått. Släpp knappen.
2. Tryck på testknappen på en ***annan*** sändare inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln.
3. Radiolampan på CO-varnaren lyser med ett fast blått sken för att visa att radionyckeln har mottagits.

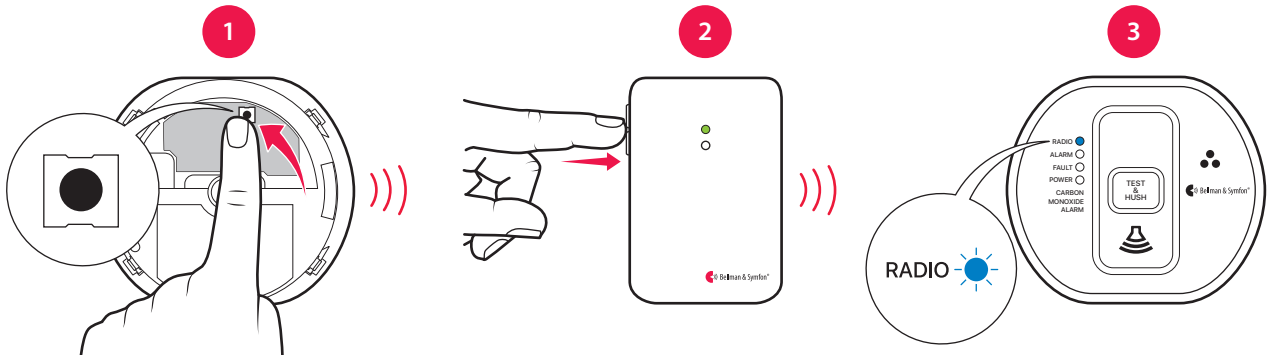

System med *enbart* Visit CO-varnare


Steg 1: Byt radionyckel på BE1555 CO-varnare

Välj ut en BE1555 CO-varnare som kommer att fungera som ***huvudenhet***. Den andra BE1555 CO-varnaren kommer då att fungera som ***slavenhet***. Öppna locket på bägge enheter för att komma åt radioknappen, se **Knappar och anslutningar**.

1. Tryck och håll nere radioknappen på ***huvudenheten*** tills radiolampan blinkar långsamt i blått. Tryck och håll nere knappen igen för att generera en ny radionyckel. Radiolampan ändrar blinkmönster för att bekräfta bytet.
2. Tryck och håll nere radioknappen på ***slavenheten*** tills radiolampan blinkar långsamt i blått.
3. Tryck och håll nere testknappen på ***huvudenheten*** inom 30 s för att skicka den nya radionyckeln. Den börjar då larma.
4. Radiolampan på ***slavenheten*** lyser med ett fast blått sken för att visa att radionyckeln har mottagits.
   Repetera steg 2 - 4 för att byta radionyckel på nästa BE1555 CO-varnare.

Steg 2: Byt radionyckel på Visitmottagaren

1. Tryck och håll in testknappen på Visitmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
2. Tryck på test/pausknappen inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
3. Alla Visitlampor på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har mottagits.

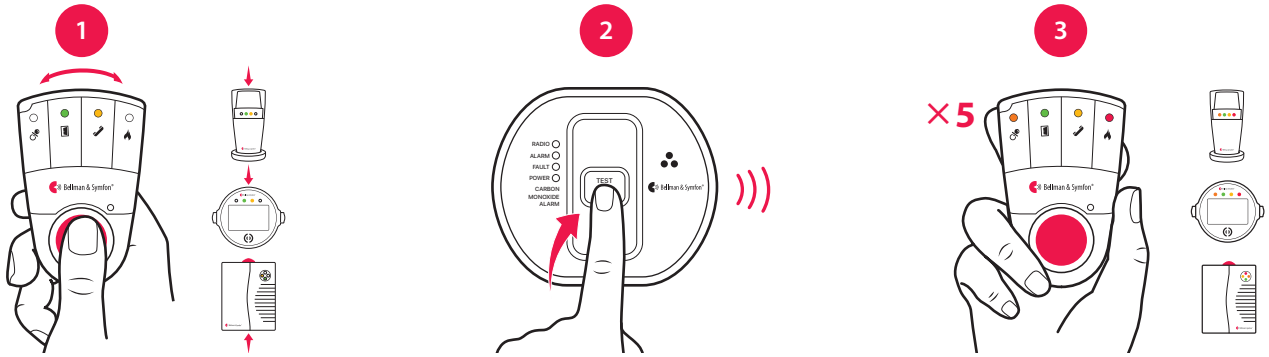


Visit blixtmottagare

BE1441 | BE1442

Visit_001ART013-SE

Knappar och reglage

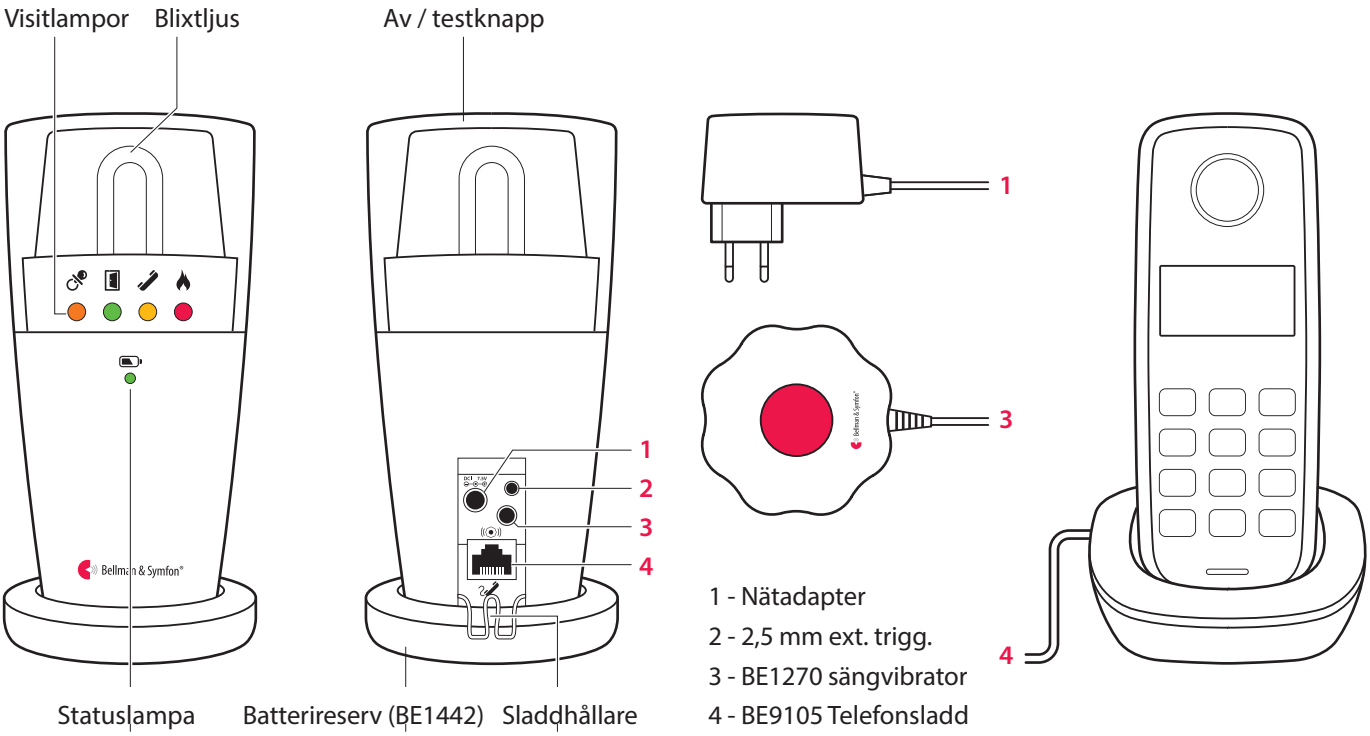

1 - Nätadapter
2 - 2,5 mm ext. trigg.
3 - BE1270 sängvibrator
4 - BE9105 Telefonsladd

Teknisk information

I förpackningen

- BE1441 Blixtmottagare
  BE1442 Blixtmottagare m. batterireserv
- Nätadapter
- 4×1,2 V AAA NiMH-batterier
  (Endast BE1442)

Ström och batteri

- Strömförsörjning: 7,5 V DC / 1500 mA
  Extern nätadapter
- Strömförbrukning: Aktiv: 900 mA
  viloläge: 10 mA
- Batterireserv (endast BE1442)
  4×1,2 V AAA NiMH
  uppladdningsbara batterier
- Driftstid, batterireserv
  ~ 48 h vid fullt laddat batteri

Omgivning

- Endast för inomhusbruk.
  Arbetstemperatur -10° till 40° C
- Relativ luftfuktighet
  15% till 95%, icke-kondenserande

Storlek och vikt

- Höjd BE1441: 140 mm
  BE1442: 155 mm
- Diameter BE1441: 70 mm
  BE1442: 78 mm
- Vikt 308 g

Visitlampor

Visitlamporna indikerar normalt följande:

- Orange lampa, nappsymbol
  Babyvakten är aktiverad
- Grön lampa, dörrsymbol
  Dörrsändaren är aktiverad
- Gul lampa, telefonsymbol
  Telefonsändaren är aktiverad
- Röd lampa, brandsymbol
  Brandvarnaren är aktiverad
- Orange och röd LED blinkar växelvis
  CO-larmet är aktiverat.

Tillbehör

- BE9075 Väggfäste
- BE1270 Sängvibrator
- BE9105 Telefonsladd

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
  868,3 MHz
- Räckvidd:
  50 - 250 m beroende på
  byggnadens egenskaper och
  kombinationen av sändare
  och mottagare.

Blixtsignal

- Inbyggd ~ 30 Candela Xenon-blixt

Varning!
Blixtljus kan orsaka epilepsianfall


Visit blixtmottagare

Komma igång

1 Anslut nätadaptern till mottagaren och väggutaget. Dra bort batterifliken på undersidan av mottagaren (endast BE1442). Ställ den på ett plant underlag eller sätt upp den på väggen (BE9075 väggfäste krävs).

2 För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.

3 En Visitlampa tänds på mottagaren och den börjar blixtra. Om en sängvibrator är ansluten börjar den vibrera. Tryck på testknappen om du vill se den senaste händelsen. Om mottagaren inte reagerar, se **Felsökning**.

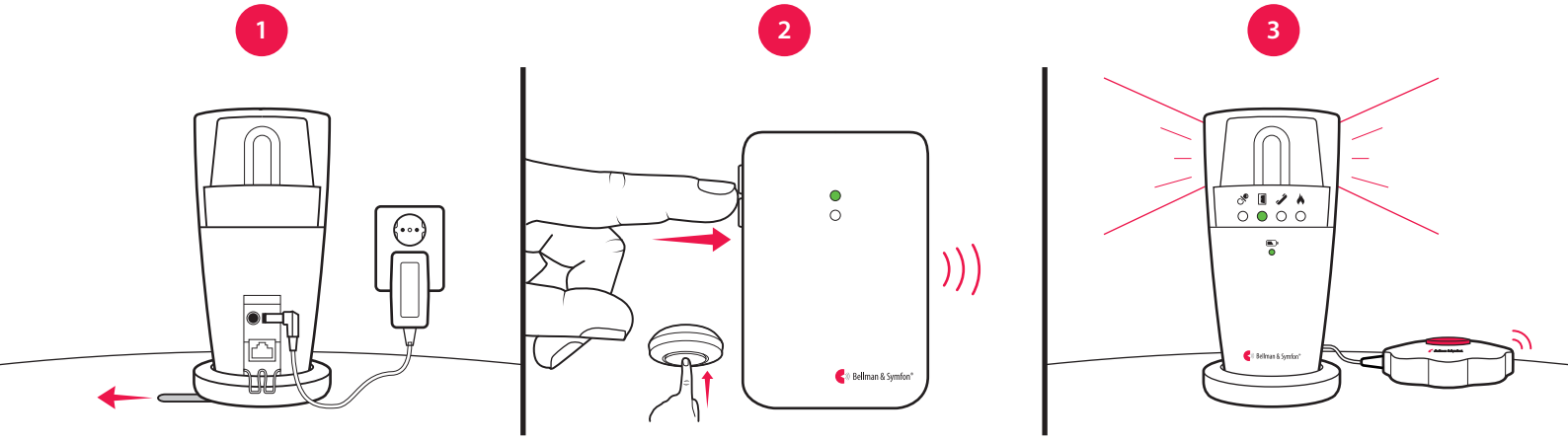

Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras börjar mottagaren blixtra och sängvibratorn att vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

Sändare	Blixtmottagare		Sängvibrator
Aktiverad källa	**Visitlampa**	**Blixt**	**Vibration**
■ Dörrsändare / tryckknappssändare	Grön	Ja	Långsam ■□□□
■ Telefonsändare / ansluten telefon	Gul	Ja	Mellan ■□■□
■ Babyvakt	Orange	Ja	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯
■ Brandvarnare	Röd	Ja	Lång ■□
■ Kolmonoxidvarnare	Orange och röd	Ja	Lång ■□

Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

Statuslampa för ström och batteri

När blixtmottagaren är nätansluten lyser statuslampan i grönt.
Modell BE1442 är utrustad med batterireserv och statuslampan betyder följande:


Statuslampa	Status
■ Fast grönt ljus	Blixtmottagaren är nätansluten och reservbatterierna fungerar.
■ Blinkar grönt	Blixtmottagaren är nätansluten men reservbatterierna fungerar ej.
■ Fast rött ljus	Blixtmottagaren går på reservbatteri.
■ Blinkar rött	Reservbatterierna är nästan urladdade.

Visit blixtmottagare

Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplare sitter på ***sändarna***.

Så här byter du radionyckel:

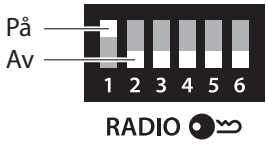

1. Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
2. Tryck och håll nere testknappen på ovansidan av mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
3. Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
4. Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.


   Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

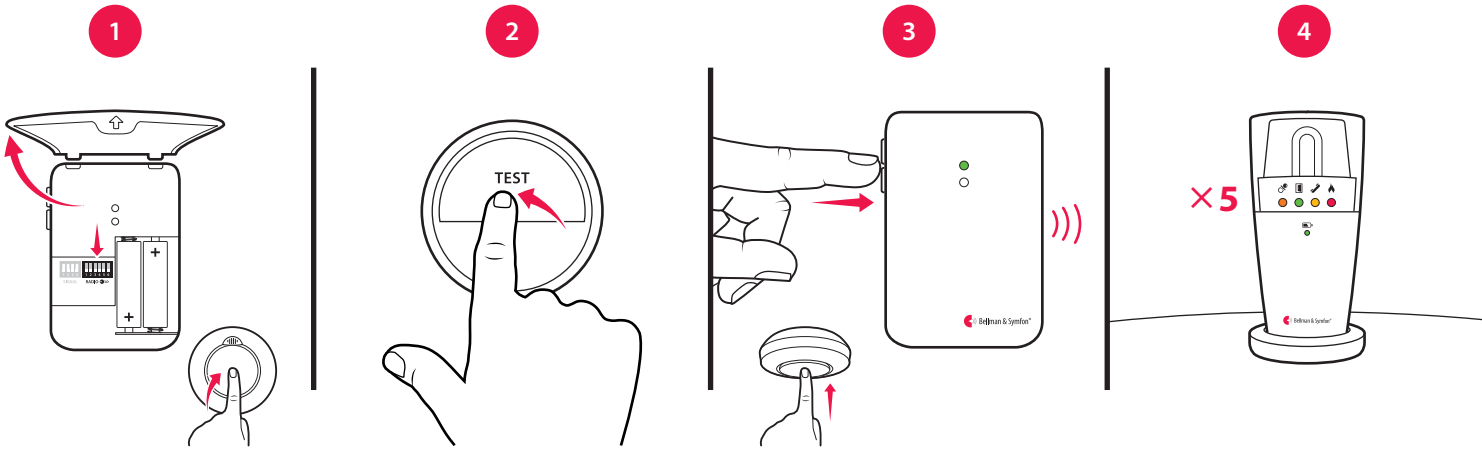

Tillbehör

Blixtmottagaren kan kompletteras med följande tillbehör:

- **BE1270 Sängvibrator**
  Väcker dig med vibrationer under kudden eller madrassen.
- **BE9105 Telefonsladd**
  Använd den för att ansluta din fasta telefon till mottagaren så blixtrar den när telefonen ringer.
- **BE9075 Väggfäste**

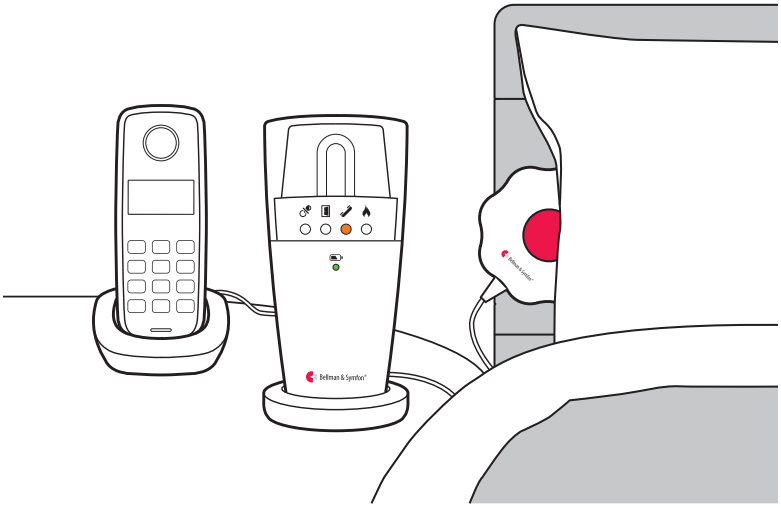

Rikta blixtljuset

Blixtmottagaren har en roterbar överdel som gör det enkelt att rikta ljuset. Om du t.ex tycker att ljuset är för starkt kan du rikta det mot en vägg. Det finns även ljusdämpande silikonöverdrag i ett flertal färger (art.nr. BE9164 – BE9167).

Visit blixtmottagare

Avancerad programmering

Med avancerad programmering kan du styra mottagarens ljudsignal och vibrationsmönster för en specifik sändare och händelse. Då paras enheterna via sitt serienummer istället för radionyckeln. Notera att beteende för brandlarm och kolmonoxidvarnare inte kan ändras av säkerhetsskäl.

Notera: Sändaren måste aktiveras på det sätt den är tänkt att användas. Detta innebär att du inte alltid kan aktivera den med testknappen (se **Förinställt signalmönster** för respektive sändare).

Så här programmerar du blixtmottagaren:

1. Tryck och håll nere testknappen på mottagaren. Den gröna och gula Visitlampan börjar blinka växelvis. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt samtidigt som du aktiverar den aktuella sändaren. Släpp testknappen.
2. Bläddra mellan de olika **Visitlamporna** genom att trycka på testknappen på mottagaren. Välj den du vill ha genom att hålla nere testknappen tills mottagarens statuslampa släcks och tänds igen.
3. Bläddra mellan de olika **vibrationsmönstren** genom att trycka på testknappen (sängvibrator krävs). Välj den du vill ha genom att hålla nere testknappen tills statuslampan släcks och tänds igen.
4. Mottagaren kommer nu att visa den valda Visitlampan och vibrationsmönstret. Tryck på testknappen för att avsluta demonstrationen. Därefter återgår den till normalläge.

Radera avancerad programmering

Följ stegen nedan för att radera den avancerade programmeringen:

1. Tryck och håll nere testknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
2. Tryck på testknappen 3 gånger i följd.
3. Alla Visitlampor tänds i 2 sekunder för att visa att programmeringen är raderad.

Felsökning

De flesta problem med blixtmottagaren kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:


Om	Gör så här
Mottagaren verkar vara avstängd	▪ Kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten. ▪ Ladda reservbatterierna i minst 24 timmar (endast BE1442).
Statuslampan blinkar rött	▪ Nätadaptern är inte ansluten och reservbatterierna är nästan urladdade. Anslut nätadaptern och ladda reservbatterierna i minst 24 timmar.
Statuslampan blinkar grönt	▪ Mottagaren detekterar inga reservbatterier. Dra bort batterifliken, se **Komma igång**.
Mottagaren reagerar inte när en sändare aktiveras, men fungerar när jag använder testknappen	▪ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar. ▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att mottagaren har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se **Byta radionyckel**.
Mottagaren aktiveras utan någon anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.
Blixtljuset är för starkt	▪ Rikta ljuset mot en vägg eller använd ett ljusdämpande silikonöverdrag.

Visit portabel mottagare

Visit_001ART013-SE

BE1450

Knappar och reglage

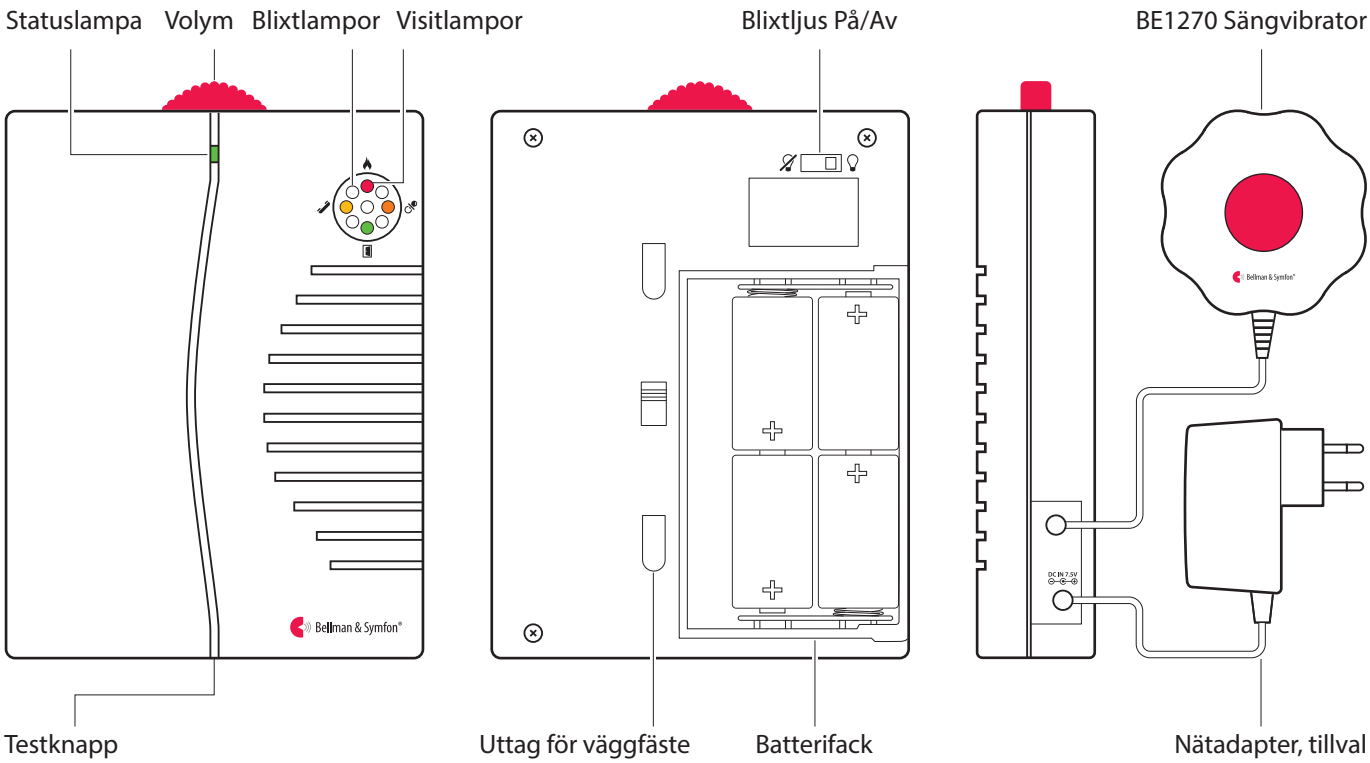

Teknisk information

I förpackningen

- BE1450 Portabel mottagare
- 4×1,5V LR14 batterier
- Väggfäste
- Skruv och plugg

Ström och batteri

- Strömförsörjning: 7,5 V DC / 1500 mA
  Nätadapter finns som tillval,
  Artikelnummer: BE9201
- Batterityp: 4×1,5 V LR14
  alkaliska batterier
- Driftstid:
  Aktiv: 1000 mA,
  viloläge: 0,1 mA
- Strömförbrukning: 2 – 3 år med
  alkaliska batterier

Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator
- Bellman & Symfon nätadapter

Storlek och vikt

- Höjd: 165 mm
- Bredd: 130 mm
- Djup: 36 mm
- Vikt: 590 g, inkl. batterier

Visitlampor

Visitlamporna indikerar normalt följande:

- Orange lampa, nappsymbol
  Babyvakten är aktiverad
- Grön lampa, dörrsymbol
  Dörrsändaren är aktiverad
- Gul lampa, telefonsymbol
  Telefonsändaren är aktiverad
- Röd lampa, brandsymbol
  Brandvarnaren är aktiverad
- Orange och röd LED blinkar växelvis
  CO-larmet är aktiverat.

Utsignaler

- Justerbar ljudsignal
  Max 93 dBA @ 1 m
  Frekvensomfång: 500 – 1000 Hz
- Uttag för sängvibrator: 2,0 – 4,0 VDC

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
  868,3 MHz
- Räckvidd
  50 - 250 m beroende på
  byggnadens egenskaper och
  kombinationen av sändare
  och mottagare.

Omgivning

- Endast för inomhusbruk.
- Arbetstemperatur 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet
  15% till 95%, icke-kondenserande


Visit portabel mottagare

Komma igång

1 Öppna batteriluckan, sätt i batterierna och stäng luckan igen. Ställ mottagaren på ett plant underlag eller montera den på väggen med väggfästet.

2 För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.

3 En Visitlampa tänds på mottagaren och den börjar blixtra och ljuda. Om en sängvibrator är ansluten börjar den vibrera. Tryck på testknappen om du vill se den senaste händelsen. Om mottagaren inte reagerar, se **Felsökning**.

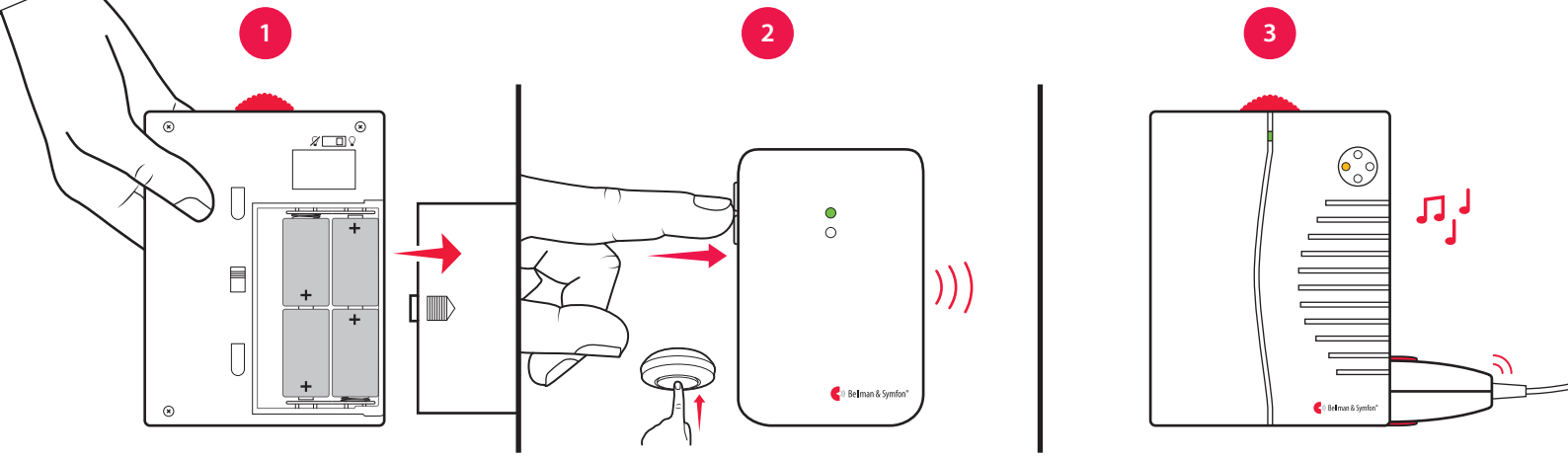

Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras börjar mottagaren blixtra och ljuda och sängvibratorn vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

Sändare	Portabel mottagare			Sängvibrator
Aktiverad källa	**Visitlampa**	**Ljud**	**Blixt**	**Vibration**
■ Dörrsändare / tryckknappssändare	Grön	Dörrklocka	Ja	Långsam ■□□□
■ Telefonsändare	Gul	Ringsignal	Ja	Mellan ■□■□
■ Babyvakt	Orange	Babymelodi	Ja	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯
■ Brandvarnare	Röd	Brandlarm	Ja	Lång ■□
■ Kolmonoxidvarnare	Orange och röd	VMA-signal	Ja	Lång ■□

Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

Justera volym och blixtljus

Justera volymen med det röda vredet på ovansidan av mottagaren. Den kan justeras från 0 till 93 dBA @ 1 m och frekvensomfånget är 500 – 1000 Hz. Använd På/Av-knappen på baksidan av mottagaren för att sätta på eller stänga av blixtljuset.

Byta batterier

Om statuslampan lyser gult när mottagaren aktiveras är batterierna nästan slut. Så här byter du batterier:


- Öppna batteriluckan och ersätt de gamla batterierna med fyra nya 1,5 V LR14 alkaliska batterier, se monteringsanvisning i batterifacket. Stäng luckan igen.

Visit portabel mottagare

Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter på ***sändarna***.

Så här byter du radionyckel:

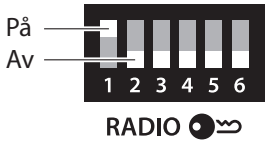

1. Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
2. Tryck och håll nere testknappen på undersidan av mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
3. Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
4. Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

   Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

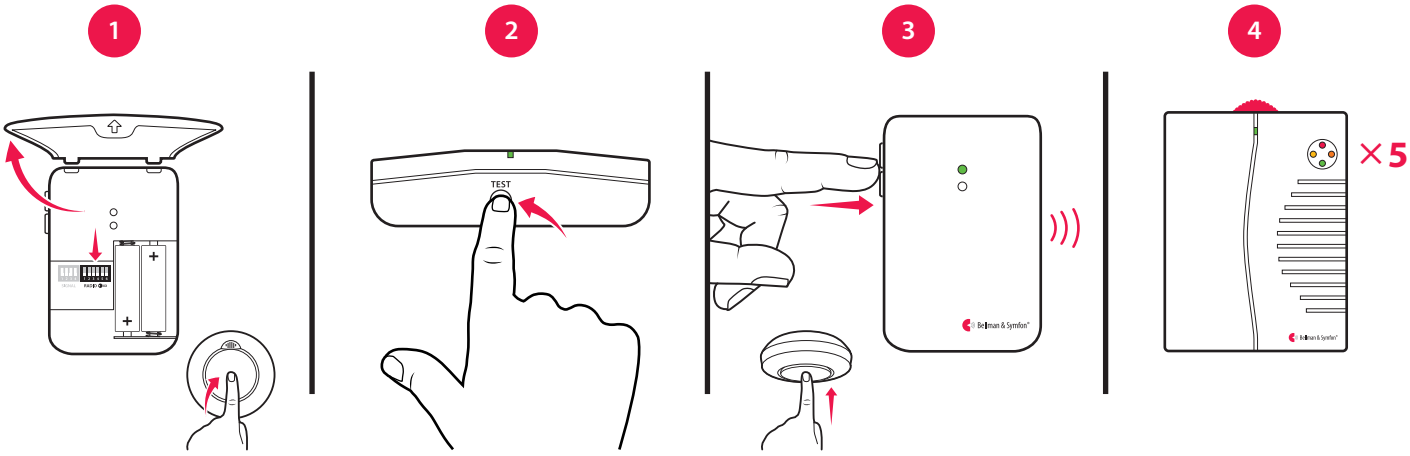

Tillbehör


Den portabla mottagaren kan kompletteras med följande tillbehör:

- **BE1270 Sängvibrator**

  Väcker dig med vibrationer om något skulle hända medan du sover. Anslut den till mottagaren och lägg den under huvudkudden eller madrassen.

- **Bellman & Symfon nätadapter**

  Om din mottagare har en fast plats i hemmet kan du nätansluta den istället för att behöva använda batterier.

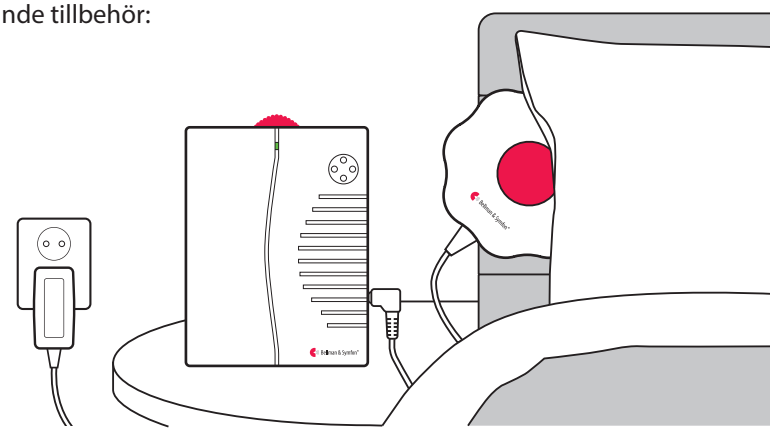

Visit portabel mottagare

Avancerad programmering

Med avancerad programmering kan du styra mottagarens ljudsignal och vibrationsmönster för en specifik sändare och händelse. Då paras enheterna via sitt serienummer istället för radionyckeln. Notera att beteende för brandlarm inte kan ändras av säkerhetsskäl.

Notera: Sändaren måste aktiveras på det sätt den är tänkt att användas. Detta innebär att du inte alltid kan aktivera den med testknappen (se **Förinställt signalmönster** för respektive sändare).

Så här programmerar du den portabla mottagaren:

1. Tryck och håll nere testknappen på mottagarens undersida. Den gröna och gula Visitlampan börjar blinka växelvis. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt samtidigt som du aktiverar den aktuella sändaren. Statuslampan på mottagaren tänds i gult för att visa att du är i programmeringsläge. Släpp testknappen.
2. Bläddra mellan de olika **Visitlamporna** genom att trycka på testknappen på mottagaren. Välj den du vill ha genom att hålla nere testknappen tills mottagarens statuslampa släcks och tänds igen.
3. Bläddra mellan de olika **ljudsignalerna** genom att trycka på testknappen. Välj den du vill ha genom att hålla nere testknappen tills statuslampan släcks och tänds igen.
4. Bläddra mellan de olika **vibrationsmönstren** genom att trycka på testknappen (sängvibrator krävs). Välj den du vill ha genom att hålla nere testknappen tills statuslampan släcks och tänds igen.
5. Mottagaren kommer nu att visa den valda Visitlampan, ljudsignalen och vibrationsmönstret. Tryck på testknappen för att avsluta demonstrationen. Därefter återgår den till normalläge.

Radera avancerad programmering

Följ stegen nedan för att radera den avancerade programmeringen:

1. Tryck och håll nere testknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
2. Tryck på testknappen 3 gånger i följd.
3. Alla Visitlampor tänds i 2 sekunder för att visa att programmeringen är raderad.

Felsökning


Om	Gör så här
Mottagaren verkar vara avstängd	▪ Batterierna är slut. Ersätt dem med 4×1,5V LR14 alkaliska batterier.
Statuslampan lyser gult när mottagaren aktiveras	▪ Batterinivån är låg. Ersätt dem med 4×1,5V LR14 alkaliska batterier.
Mottagaren reagerar inte när en sändare aktiveras, men fungerar när jag använder testknappen	▪ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar. ▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att mottagaren har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se **Byta radionyckel**.
Mottagaren aktiveras utan någon anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.
Ljudet är för lågt	▪ Höj volymen med det röda vredet på mottagarens ovansida.
Mottagaren blixtrar inte	▪ Kontrollera att knappen för blixtljus på baksidan av mottagaren är påslagen.

Visit pager

Visit_001ART013-SE

BE1470

Knappar och reglage

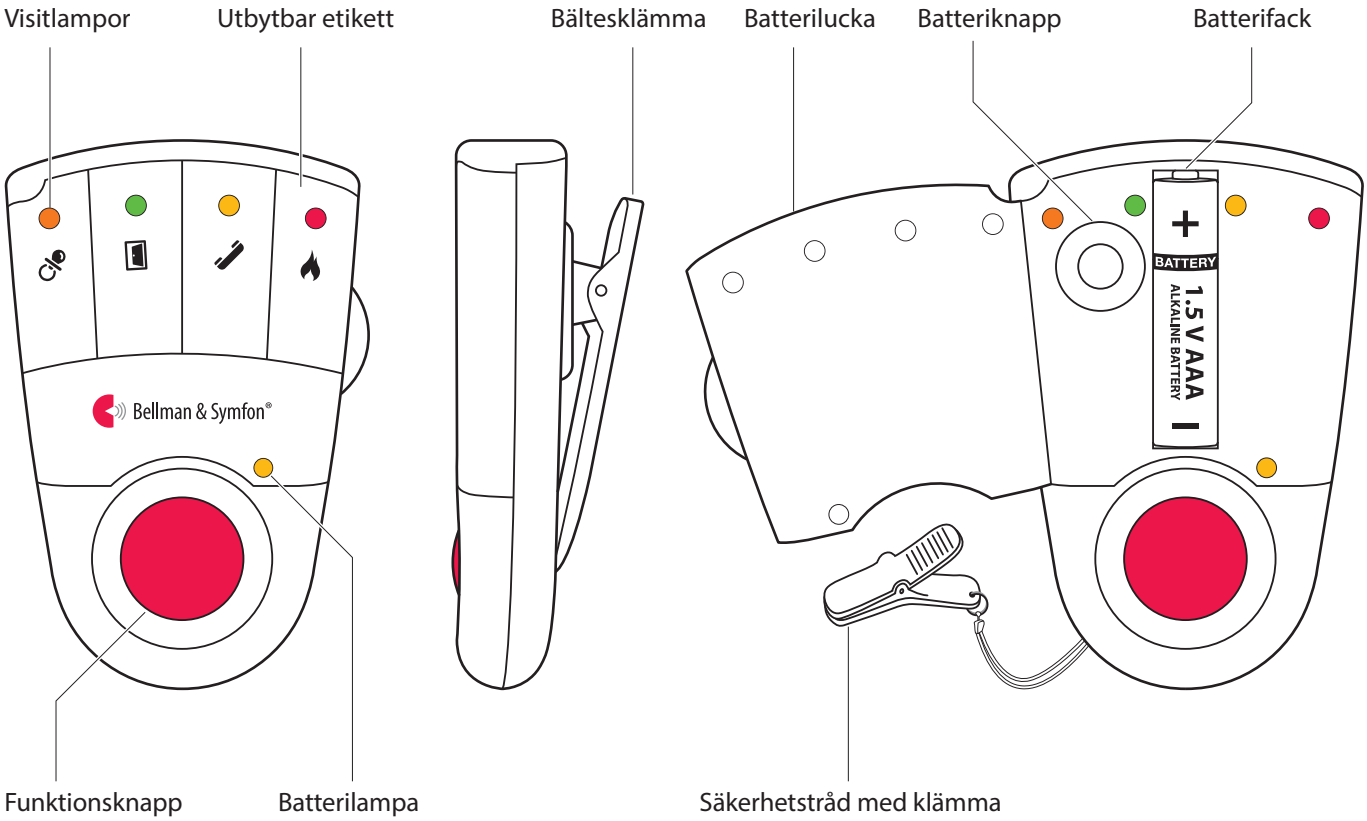

Teknisk information

I förpackningen

- BE1470 Visit pager
- Säkerhetstråd med klämma
- Extra etikett

Ström och batteri

- Strömförsörjning
  7,5 V DC 1500 mA via pagerladdaren
- Batterityp
  1 × 1,5 V AAA alkaliskt batteri eller
  1 × 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbart
- Batterilivslängd
  Alkaliskt batteri: 2 – 3 veckor
  NiMH batteri: ~1 vecka
- Strömförbrukning
  Aktiv: 220 mA, Viloläge: ≤ 1 mA

Storlek och vikt

- Höjd: 86 mm
- Bredd: 57 mm
- Djup: 29 mm
- Vikt: 70 g, inkl. batteri

Visitlampor

Visitlamporna indikerar normalt följande:

- Orange lampa, nappsymbol
  Babyvakten är aktiverad
- Grön lampa, dörrsymbol
  Dörrsändaren är aktiverad
- Gul lampa, telefonsymbol
  Telefonsändaren är aktiverad
- Röd lampa, brandsymbol
  Brandvarnaren är aktiverad
- Orange och röd LED blinkar växelvis
  CO-larmet är aktiverat.

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet
  15% till 90%, icke-kondenserande

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
  868,3 MHz
- Räckvidd
  50 - 250 m beroende på byggnadens egenskaper och kombinationen av sändare och mottagare.

Tillbehör

- BE1260 Pagerladdare
- BE1270 Sängvibrator


Visit pager

Komma igång

1 Öppna batteriluckan, sätt i batteriet och stäng luckan igen. Sätt fast pagern på bältet med hjälp av bältesklämman. För extra säkerhet kan du fästa pagern med medföljande tråd och klämma.

2 För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.

3 En Visitlampa tänds på pagern och den börjar vibrera. Om en sängvibrator är ansluten medan pagern laddas, börjar den vibrera istället. Om pagern inte reagerar, se **Felsökning**.

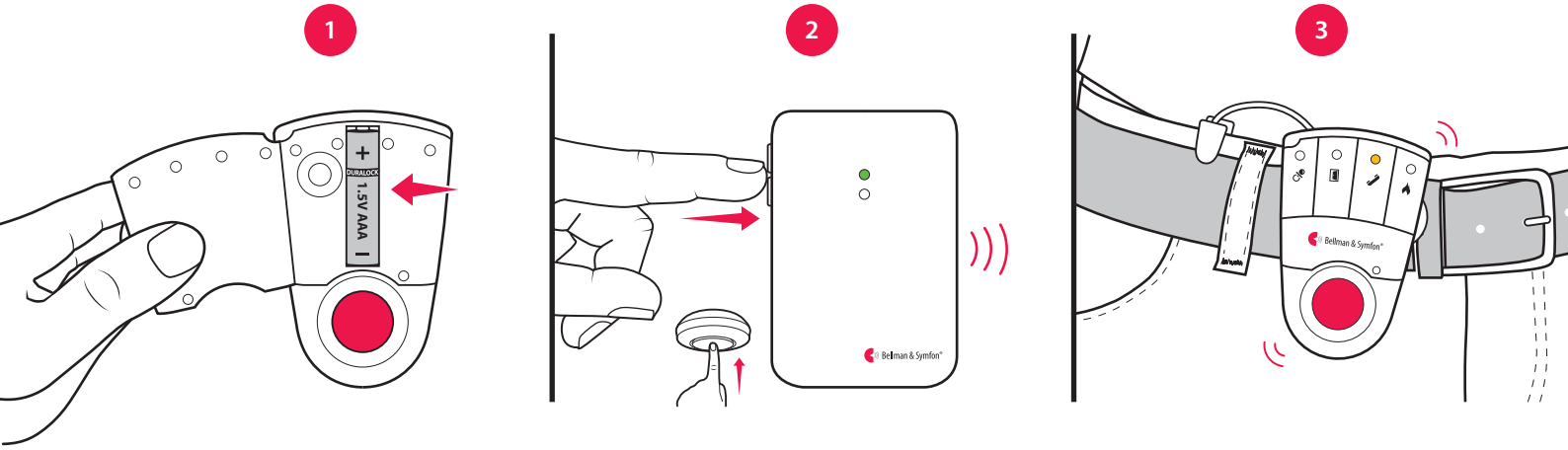

Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras tänds en Visitlampa på pagern och den börjar vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

Aktiverad sändare	Visitlampa, pager	Vibration, pager eller sängvibrator
Dörrsändare	Grön	Långsam ■□□□
Tryckknappssändare	Grön	Långsam ■□□□
Telefonsändare	Gul	Mellan ■□■□
Babyvakt	Orange	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯
Brandvarnare	Röd	Lång ■□
Kolmonoxidvarnare	Orange och röd	Lång ■□

Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

Byta etikett

Om du vill använda Visit för ett annat syfte så kan du själv skriva på den bifogade extraetiketten. Så här byter du etikett:

- Öppna batteriluckan och ersätt originaletiketten med den bifogade extraetiketten. Stäng luckan igen.

Byta batteri

När batterilampan börjar blinka gult är batteriet nästan slut. Så här byter du batteri:


- Öppna batteriluckan och tryck på batteriknappen för få ut batteriet. Sätt i ett 1,5 V AAA alkaliskt batteri, eller ett 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbart batteri om du använder pagerladdaren (tillbehör).

Visit pager

Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter på ***sändarna***.

Så här byter du radionyckel:

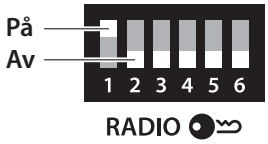

1. Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
2. Tryck och håll nere funktionsknappen på pagern tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
3. Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
4. Visitlamporna på pagern blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

   Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

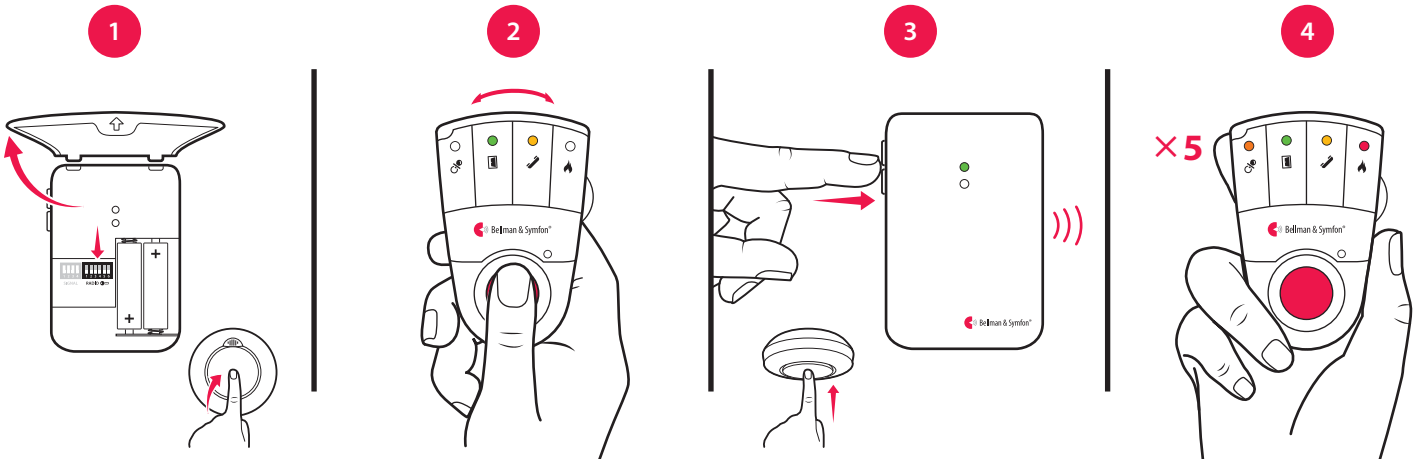

Pagertillbehör

Pagern kan kompletteras med följande tillbehör:


- **BE1260 Pagerladdare**

  Laddar din pager under natten. Placera den på sängbordet och anslut upp till två sängvibratorer.

  Notera: Pagern vibrerar inte när den laddas men Visitlamporna fungerar som vanligt.

- **BE1270 Sängvibrator**

  Väcker dig med vibrationer om något skulle hända när du sover. Anslut den till laddaren och lägg den under kudden eller madrassen.

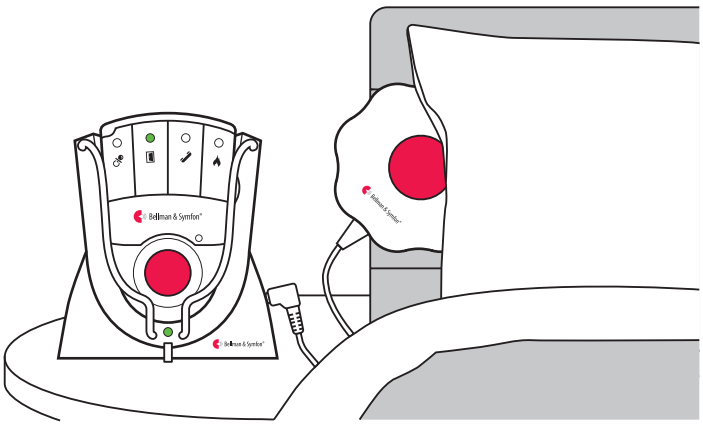

Varning! När pagerladdaren används skall **ENDAST UPPLADDNINGSBARA NiMH BATTERIER** användas i pagern. Standardbatterier kan börja läcka om de placeras i laddaren och kommer då att förstöra elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.

Visit pager

Avancerad programmering

Med avancerad programmering kan du styra mottagarens ljudsignal och vibrationsmönster för en specifik sändare och händelse. Då paras enheterna via sitt serienummer istället för radionyckeln. Notera att beteende för brandlarm inte kan ändras av säkerhetsskäl.

Notera: Sändaren måste aktiveras på det sätt den är tänkt att användas. Detta innebär att du inte alltid kan aktivera den med testknappen (se **Förinställt signalmönster** för respektive sändare).

Så här programmerar du pagern:

1. Tryck och håll nere funktionsknappen på pagern. Den gröna och gula Visitlampan börjar blinka växelvis. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt samtidigt som du aktiverar den aktuella sändaren. Batterilampan på pagern tänds i gult för att visa att du är i programmeringsläge. Släpp knappen.
2. Bläddra mellan de olika **Visitlamporna** genom att trycka på funktionsknappen på mottagaren. Välj den du vill ha genom att hålla nere knappen tills pagerns batterilampa släcks och tänds igen.
3. Bläddra mellan de olika **vibrationsmönstren** genom att trycka på funktionsknappen. Välj den du vill ha genom att hålla nere knappen tills pagerns batterilampa släcks och tänds igen.
4. Pagern kommer nu att visa den valda Visitlampan och vibrationsmönstret. Tryck på funktionsknappen för att avsluta demonstrationen. Därefter återgår den till normalläge.

Radera avancerad programmering

Följ stegen nedan för att radera den avancerade programmeringen:

1. Tryck och håll nere funktionsknappen på pagern tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
2. Tryck på funktionsknappen 3 gånger i följd.
3. Alla Visitlampor tänds i 2 sekunder för att visa att programmeringen är raderad.

Felsökning


De flesta problem med pagern kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:

Om	Gör så här
Pagern verkar vara avstängd	▪ Batteriet är slut. Ersätt det med ett 1,5 V AAA alkaliskt batteri. ⚠ **Viktigt!** Använd endast ett uppladdningsbart 1,2 V AAA NiMh batteri i pagern om du har en pagerladdare.
Batterilampan blinkar gult	▪ Batterinivån är låg. Ersätt det med ett 1,5 V AAA alkaliskt batteri. ⚠ **Viktigt!** Använd endast ett uppladdningsbart 1,2 V AAA NiMh batteri i pagern om du har en pagerladdare.
Pagern reagerar inte när en sändare aktiveras	▪ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar. ▪ Flytta pagern närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att pagern har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se **Byta radionyckel**.
Pagern aktiveras utan någon anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din pager. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.

Visit armbandsmottagare

Visit_001ART013-SE
BE8102

Knappar och reglage

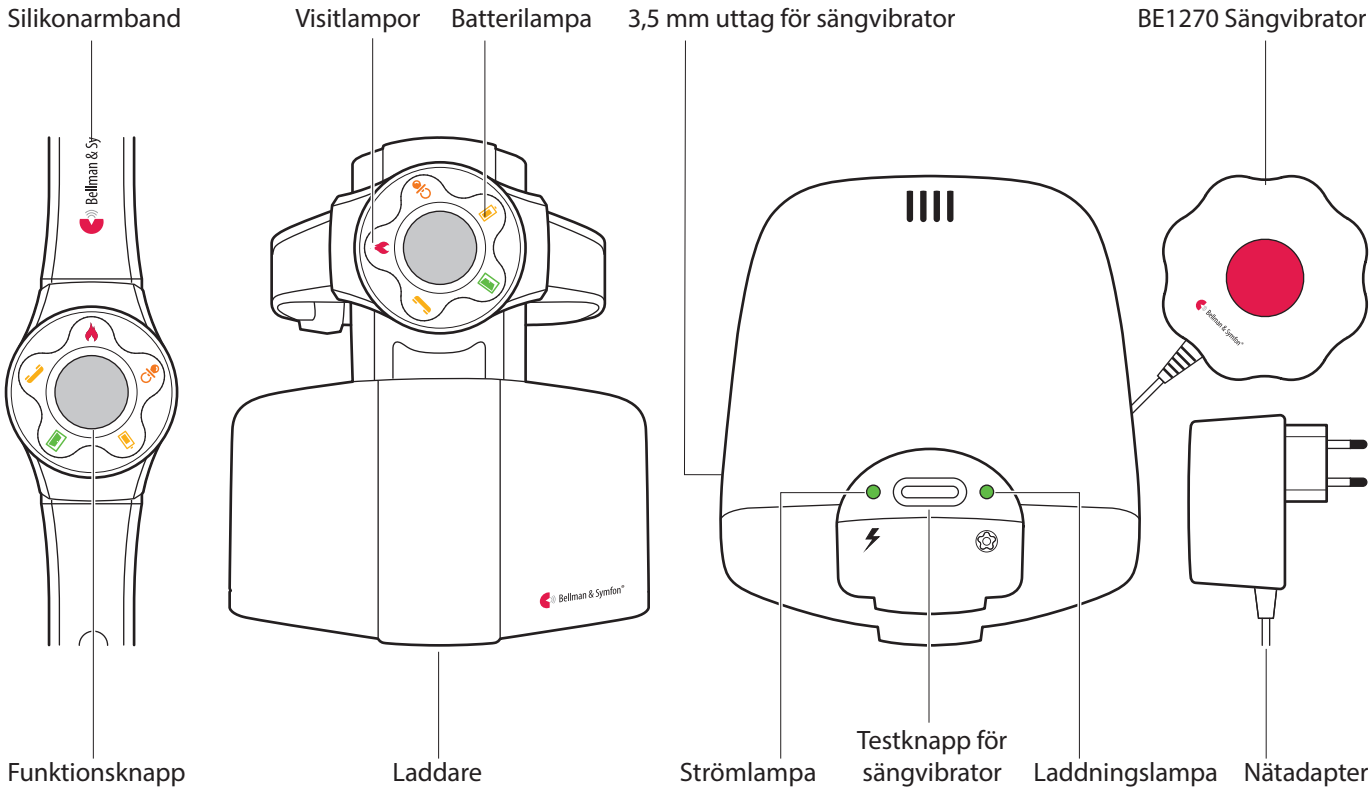

Teknisk information

I förpackningen

- BE1560 Visit armbandsmottagare
- BE1570 Laddare
- Extra armband (elastiskt)
- Nätadapter

Ström och batteri

- Strömförsörjning: 7,5 V DC/1500 mA
- Strömförbrukning
  Mottagare: Aktiv: 100 mA, vila: 3 mA
  Laddare: Aktiv: 650 mA, vila: 70 mA
- Batterityp
  Mottagare: 1x1,2V uppladningsbart
  Laddare: 4x1,2V NiMH uppladningsbara
- Driftstid och laddningstid
  Mottagare: ~30 h
  Laddningstid: ~ 10 h
  Laddningstid för reservbatteri: ~ 24 h

Storlek och vikt

	Mottagare	Laddare
Höjd	49 mm	100 mm
Bredd	38 mm	95 mm
Djup	12 mm	117 mm
Vikt	30 g	300 g

Visitlampor

Visitlamporna indikerar normalt följande:

- Orange lampa, nappsymbol
  Babyvakten är aktiverad
- Grön lampa, dörrsymbol
  Dörrsändaren är aktiverad
- Gul lampa, telefonsymbol
  Telefonsändaren är aktiverad
- Röd lampa, brandsymbol
  Brandvarnaren är aktiverad
- Orange och röd LED blinkar växelvis
  CO-larmet är aktiverat.

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur
  0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet
  15% till 90%, icke-kondenserande

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
  868,3 MHz
- Räckvidd
  50 - 100 m beroende på byggnadens egenskaper och kombinationen av sändare och mottagare.

Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator


Visit armbandsmottagare

Komma igång

1 Dra bort batterifliken på laddaren och anslut nätadaptern till vägguttaget. Strömlampan tänds i grönt. Sätt armbandsmottagaren i laddaren och vänta minst 2 timmar innan du använder den. Laddningslampan lyser grönt när den laddar.

2 För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.

3 En Visitlampa tänds på mottagaren och den börjar vibrera. Om en sängvibrator är ansluten medan mottagaren laddas, börjar den vibrera istället. Om den inte reagerar, se **Felsökning**.

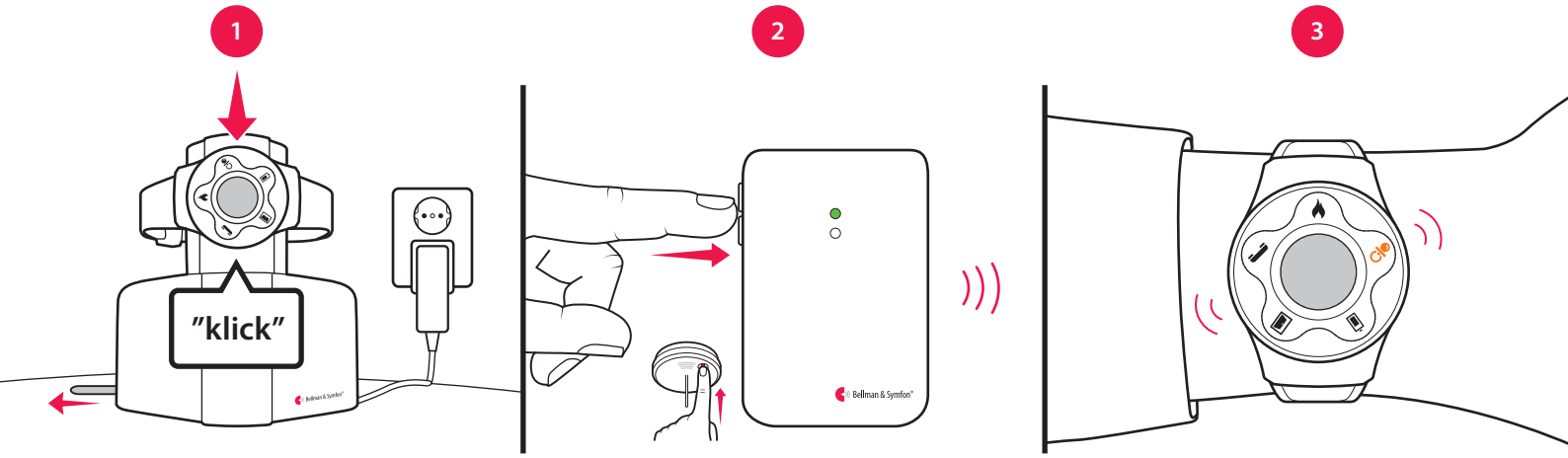

Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras tänds en Visitlampa på armbandsmottagaren och den börjar vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

Aktiverad sändare	Visitlampa, mottagare	Vibration, mottagare eller sängvibrator
■ Dörrsändare	Grön	Långsam ■□□□
■ Tryckknappssändare	Grön	Långsam ■□□□
■ Telefonsändare	Gul	Mellan ■□■□
■ Babyvakt	Orange	Snabb ▮▯▮▯▮▯▮▯
■ Brandvarnare	Röd	Lång ■□
■ Kolmonoxidvarnare	Orange och röd	Lång ■□

Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

Lampa för ström- och laddningsstatus

När batteriet i armbandsmottagaren nästan är tomt börjar batterilampan blinka gult. Det tar upp till 8 timmar att ladda batteriet. Laddaren har en batterireserv och statuslamporna betyder följande:


Statuslampa	Indikation	Status
Laddningslampa	Fast grönt ljus	Armbandsmottagarens batteri laddas.
Strömlampa	Fast grönt ljus	Laddaren är nätdriven.
Strömlampa	Blinkar grönt	Laddaren går på reservbatteri.

Visit armbandsmottagare

Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter på ***sändarna***.

Så här byter du radionyckel:

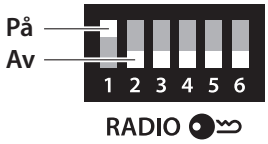

1. Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
2. Tryck och håll nere funktionsknappen på armbandsmottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
3. Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
4. Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

   Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

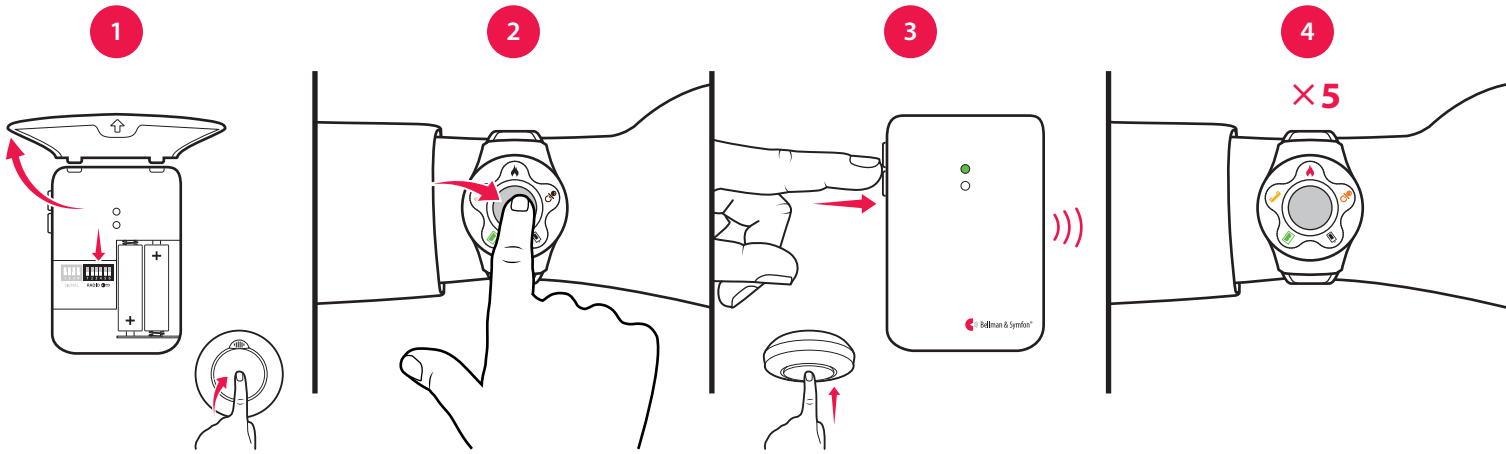

Tillbehör


Armbandsmottagaren kan kompletteras med följande tillbehör:

- **BE1270 Sängvibrator**

  Väcker dig med vibrationer om något skulle hända när du sover. Anslut den till laddaren och lägg den under kudden eller madrassen.

  Notera: Sängvibratorn vibrerar endast när mottagaren sitter i laddaren. Armbandsvibratorn vibrerar inte medan den laddas men Visitlamporna lyser som vanligt.

  Tryck på testknappen för sängvibratorn på ovansidan av laddaren för att kontrollera att den vibrerar.

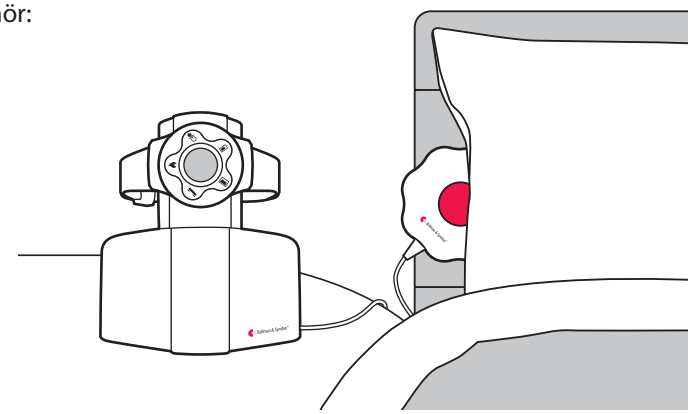

Varning! Använd **ENDAST UPPLADDNINGSBARA NiMH BATTERIER** i armbandsmottagaren och laddaren. Standardbatterier kan börja läcka om de placeras i enheterna och kommer då att förstöra elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.

Visit armbandsmottagare

Avancerad programmering

Med avancerad programmering kan du styra mottagarens ljudsignal och vibrationsmönster för en specifik sändare och händelse. Då paras enheterna via sitt serienummer istället för radionyckeln. Notera att beteende för brandlarm inte kan ändras av säkerhetsskäl.

Notera: Sändaren måste aktiveras på det sätt den är tänkt att användas. Detta innebär att du inte alltid kan aktivera den med testknappen (se **Förinställt signalmönster** för respektive sändare).

Så här programmerar du armbandsmottagaren:

1. Tryck och håll nere funktionsknappen på mottagaren. Den gröna och gula Visitlampan börjar blinka växelvis. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt samtidigt som du aktiverar den aktuella sändaren. Batterilampan på mottagaren tänds i gult för att visa att du är i programmeringsläge. Släpp knappen.
2. Bläddra mellan de olika **Visitlamporna** genom att trycka på funktionsknappen på mottagaren. Välj den du vill ha genom att hålla nere knappen tills mottagarens batterilampa släcks och tänds igen.
3. Bläddra mellan de olika **vibrationsmönstren** genom att trycka på funktionsknappen. Välj den du vill ha genom att hålla nere knappen tills mottagarens batterilampa släcks och tänds igen.
4. Armbandsmottagaren kommer nu att visa den valda Visitlampan och vibrationsmönstret. Tryck på funktionsknappen för att avsluta demonstrationen. Därefter återgår den till normalläge.

Radera avancerad programmering

Följ stegen nedan för att radera den avancerade programmeringen:

1. Tryck och håll nere funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
2. Tryck på funktionsknappen 3 gånger i följd.
3. Alla Visitlampor tänds i 2 sekunder för att visa att programmeringen är raderad.

Felsökning

De flesta problem med armbandsmottagaren kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:


Om	Gör så här
Mottagaren verkar vara avstängd	▪ Batteriet är slut. Ladda eller ersätt det med ett VARTA V40H NiMH-batteri.
Batterilampan blinkar gult	▪ Batterinivån är låg. Ladda eller ersätt det med ett VARTA V40H NiMH-batteri.
Armbandsmottagaren laddar inte	▪ Kontrollera att mottagaren är korrekt placerad i laddaren och att nätadaptern är ansluten till vägguttaget. Ström- och laddningslampan skall lysa grönt. ▪ Ladda eller ersätt reservbatterierna med 4 × 1,2 V NiMH uppladdningsbara batterier.
Armbandsmottagaren reagerar inte när en sändare aktiveras	▪ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar. ▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att mottagaren har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se **Byta radionyckel**.
Armbandsmottagaren aktiveras utan någon anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.
Sängvibratorn vibrerar inte	▪ Kontrollera att sängvibratorn är ansluten och att mottagren är placerad i laddaren.

Visit väckarklocka

Visit_001ART013-SE

BE1580

Knappar och reglage

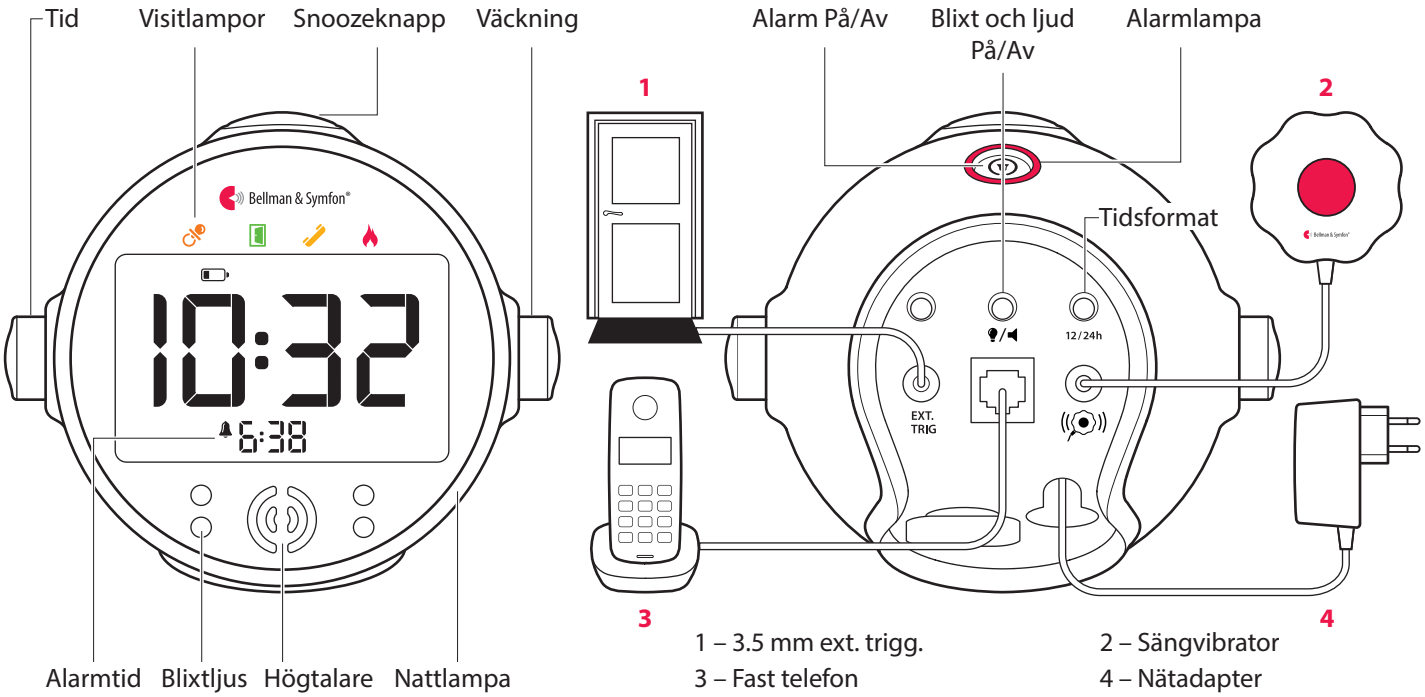

1 – 3.5 mm ext. trigg.
2 – Sängvibrator
3 – Fast telefon
4 – Nätadapter

Teknisk information

I förpackningen

- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1270 Sängvibrator
- Nätadapter
- 4×1,2 V AAA NiMH-batterier

Ström och batteri

- Strömförsörjning: 7,5 V DC / 1,5 A Extern nätadapter
- Batterireserv: 4×1,2 V AAA NiMH uppladdningsbara batterier
- Driftstid, batterireserv: ~ 24 h vid fullt laddat batteri
- Laddningstid, batterireserv: ~ 10 h vid helt urladdat batteri

Signaler

- Ljudsignal: 100 dB @ 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- Fyra högintensiva LED-blixtar
- Vibratorstyrka: 2,0 – 4,0 VDC

Storlek och vikt

- Höjd: 108 mm
- Bredd: 121 mm
- Djup: 92 mm
- Vikt: 390 g, inkl. batterier

Visitlampor

Visitlamporna indikerar normalt följande:

- Orange lampa, nappsymbol
  Babyvakten är aktiverad
- Grön lampa, dörrsymbol
  Dörrsändaren är aktiverad
- Gul lampa, telefonsymbol
  Telefonsändaren är aktiverad
- Röd lampa, brandsymbol
  Brandvarnaren är aktiverad
- Orange och röd LED blinkar växelvis
  CO-larmet är aktiverat.

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens
  868.3 MHz
- Räckvidd
  50 - 250 m beroende på byggnadens egenskaper och kombinationen av sändare och mottagare.

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur
  0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet
  15% till 90%, icke-kondenserande

Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator
- BE9105 Telefonsladd
- BE9023 Magnetbrytare
- BE9026 Trampmatta


Visit väckarklocka

Komma igång

1 Dra bort batterifliken och anslut nätadaptern till väckarklockan och vägguttaget.
Anslut sängvibratorn, lägg den under kudden eller madrassen och ställ väckarklockan på nattduksbordet.

2 För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp.

3 En Visitlampa tänds på väckarklockan och den börjar ljuda och blixtra. Sängvibratorn vibrerar under kudden.
Om ingenting händer, se **Felsökning**.

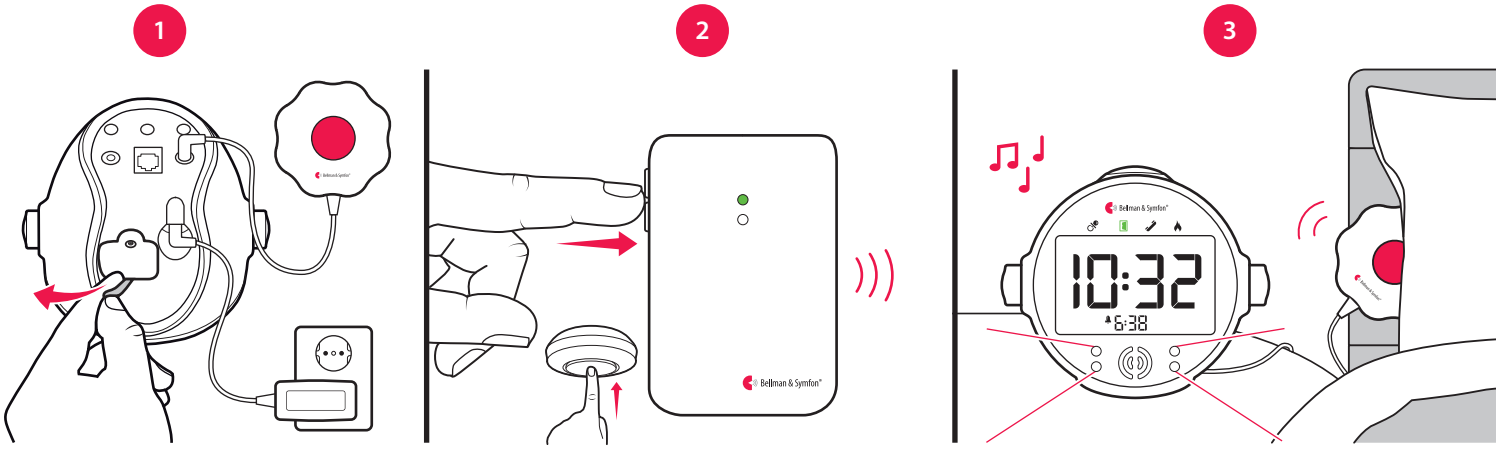

Förinställt signalmönster

När en sändare aktiveras börjar väckarklockan ljuda och blixtra och sängvibratorn vibrera med ett specifikt mönster. Det kallas signalmönster. Sändaren styr signalmönstret och förinställningen är:

Sändare	Väckarklocka			Sängvibrator
Aktiverad källa	**Visitlampa**	**Ljud**	**Blixt**	**Vibration**
■ Dörrsändare/ tryckknappssändare	Grön	Dörrklocka	Ja	Långsam
■ Telefonsändare / ansluten telefon	Gul	Ringsignal	Ja	Mellan
■ Babyvakt	Orange	Babymelodi	Ja	Snabb
■ Brandvarnare	Röd	Brandlarm	Ja	Lång
■ Kolmonoxidvarnare	Orange och röd	VMA-signal	Ja	Lång

Byta signalmönster

Signalmönstret kan endast bytas på sändarna, se **Byta signalmönster** för respektive sändare.

Inställningar

Blixt och ljud På/Av
Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med / på baksidan av väckarklockan för att växla mellan alternativen. När blixtljuset är avstängt ser du en -symbol på urtavlan. När ljudet är avstängt syns en -symbol.

Bakgrundsbelysning
Tryck på knappen markerad med för att justera ljuset i 4 steg. **Steg 5 resulterar i att klockdisplayen lyser permanent.**


Tidsformat
Tryck på knappen markerad med **12/24h** på klockans baksida för att växla mellan 24-timmars och 12-timmars visning.

Visit_001ART013-SE

Visit väckarklocka


Ställa tiden

Tryck på det **vänstra** vredet och vrid för att ställa in timmar. Tryck och vrid igen för att ställa in minuter. Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.

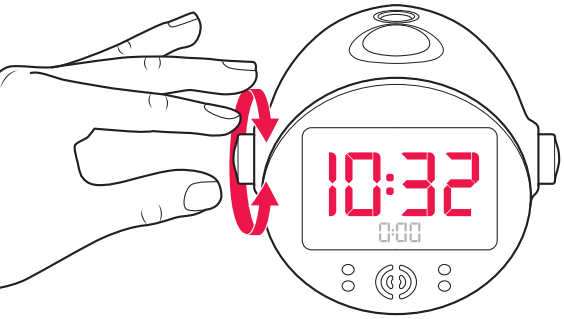


Ställa alarmet

Tryck på det **högra** vredet och vrid för att ställa in timmar. Tryck och vrid igen för att ställa in minuter. Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.

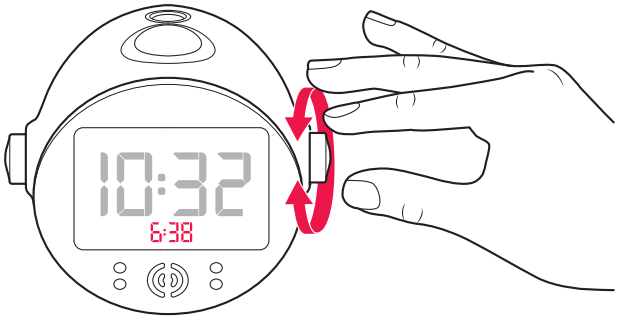


Aktivera alarmet

Tryck på alarmknappen för att aktivera alarmet. Alarmlampan tänds i rött. För att stänga av alarmet, tryck på knappen igen.

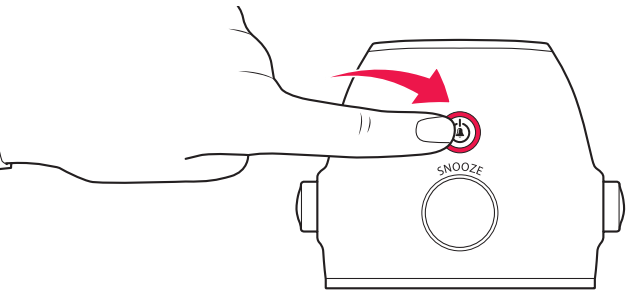

Använda snooze och nattlampa


Tryck på snooze-knappen för att snooza. (Brandlarm kan inte snoozas av säkerhetsskäl).
Tryck och håll nere snooze-knappen i 3 s för att tända nattlampan. För att släcka den, tryck på knappen igen.

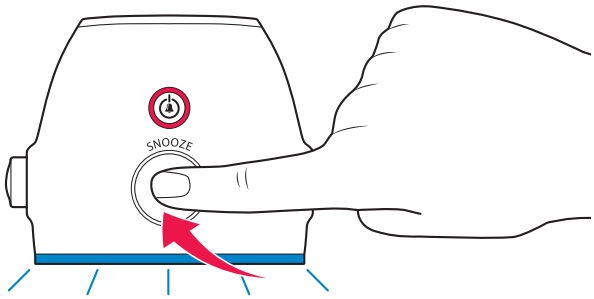

Tillbehör

Väckarklockan kan kompletteras med följande tillbehör:

- **BE1270 Sängvibrator**
  Anslut den till ext. trig. ingången och placera den under kudden för att vakna med hjälp av vibrationer om väckarklockan blir aktiverad.
- **BE9026 Trampmatta**
  Anslut trampmattan till väckarklockan så väcker den dig om din partner kliver ur sängen.
- **BE9105 Telefonsladd**
  Använd den för att ansluta din fasta telefon till väckarklockan så väcker den dig när telefonen ringer.

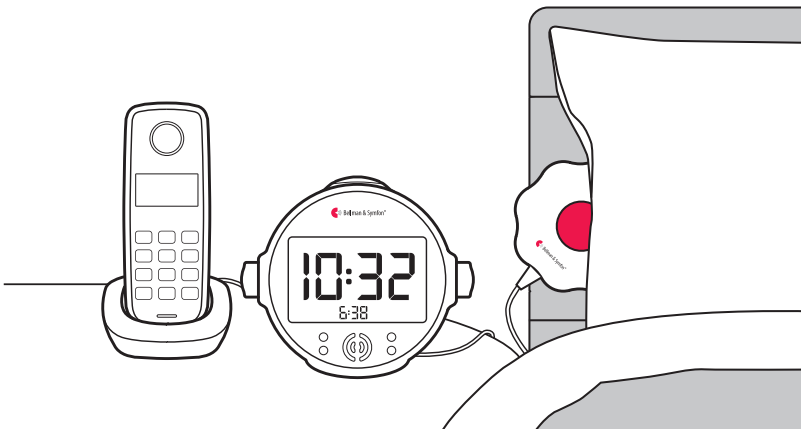


Visit väckarklocka

Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter på ***sändarna***.

Så här byter du radionyckel:

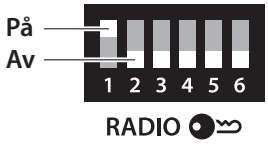

1. Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel. Se avsnittet **Byta radionyckel** för respektive sändare.
2. Tryck och håll nere snooze-knappen på väckarklockan tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
3. Tryck på sändarens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
4. Visitlamporna på klockan blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

   Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

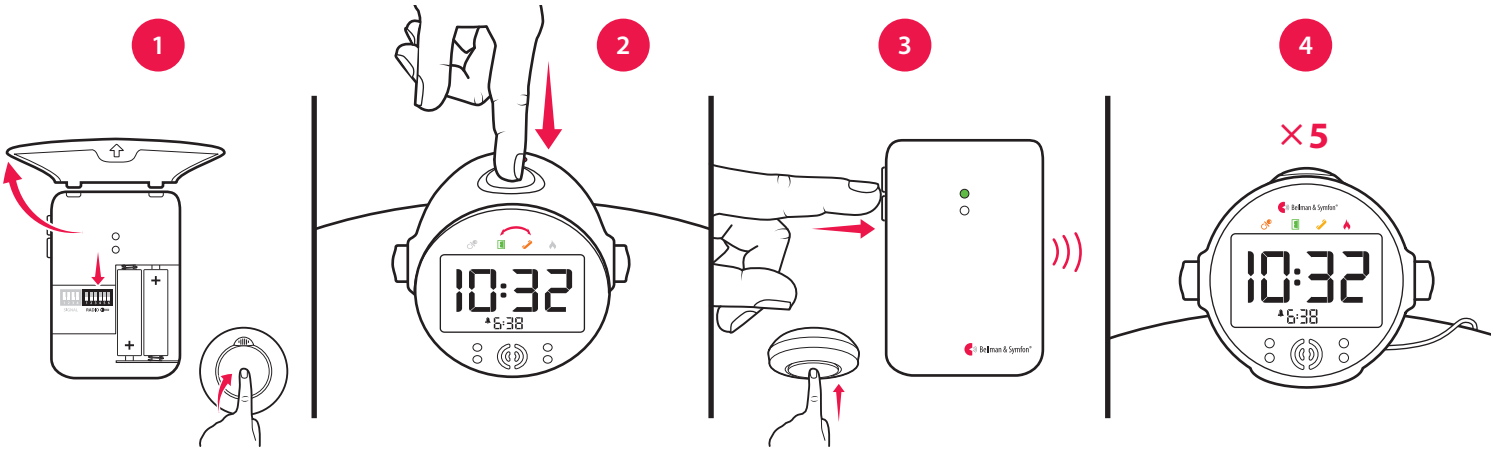

Felsökning


Om	Gör så här
Väckarklockan verkar vara avstängd	▪ Kontrollera att nätadapern är ansluten i väggutaget. ▪ Ladda reservbatterierna i ett par timmar.
Urtavlans -symbol börjar blinka	▪ Nätadaptern är urkopplad och reservbatterierna är nästan helt urladdade. Anslut nätadaptern i väggutaget och ladda reservbatterierna i ett par timmar.
En -symbol tänds på urtavlan	▪ Väckarklockan detekterar inga resevbatterier. Dra bort batterifliken, se **Komma igång**.
Väckarklockan reagerar inte när en sändare aktiveras	▪ Kontrollera sändarens batterier och anslutningar. ▪ Flytta väckarklockan närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd. ▪ Kontrollera att väckarklockan har samma radionyckel som de andra enheterna i Visitsystemet, se **Byta radionyckel**.
Väckarklockan aktiveras utan någon anledning	▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din väckarklocka. Byt radionyckel på alla enheter, se **Byta radionyckel**.
Ljudet för väckning är för lågt	▪ Volymen ökar gradvis och når över 100 dB.

Pagerladdare

Visit_001ART013-SE

BE1260

Knappar och reglage

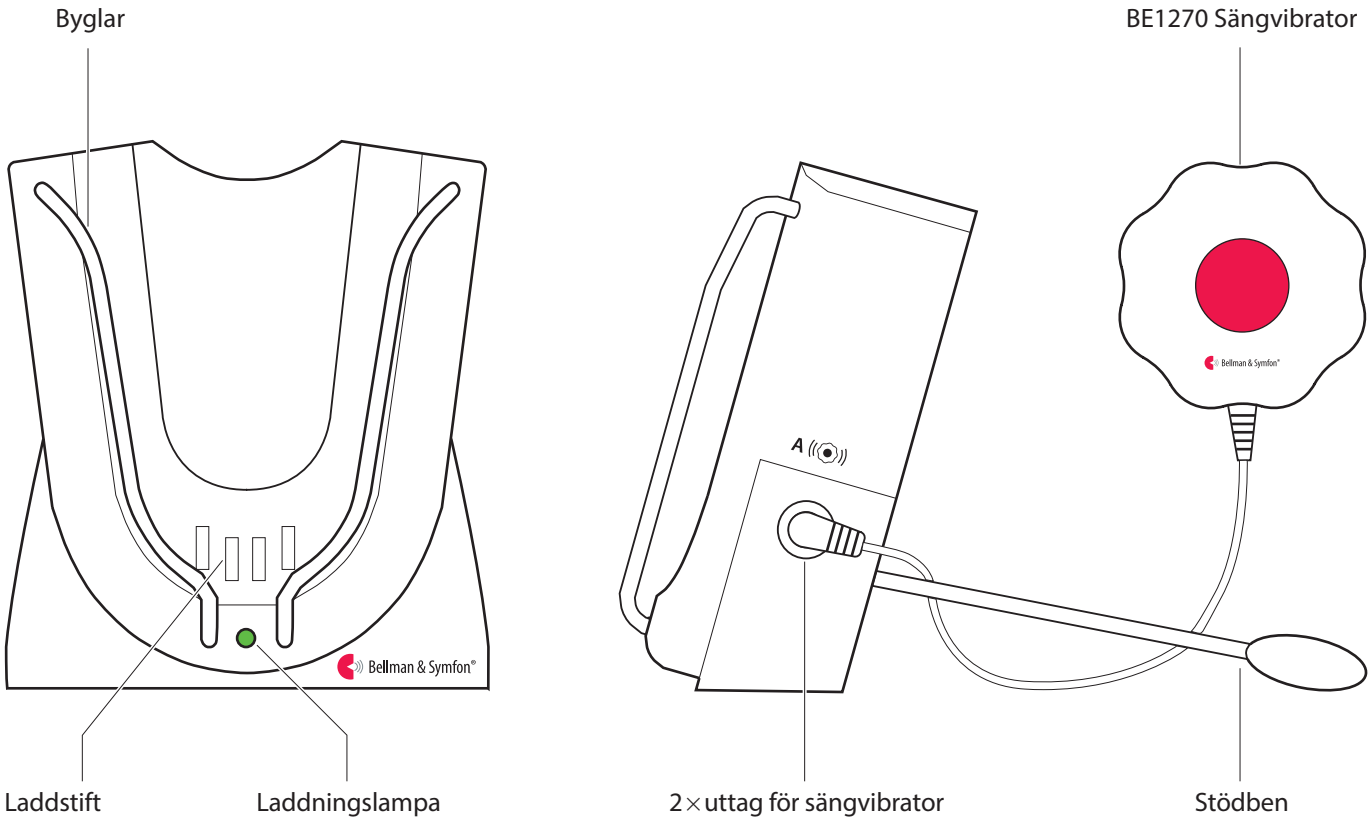

Teknisk information

I förpackningen

- BE1260 Pagerladdare med förmonterade reservbatterier
- Nätadapter
- 1×1,2 V NiMH uppladdningsbart batteri för pagern
- Stödben samt skruv och plugg

Statuslampa

- **Tänd:** Pagern laddas
- **Släckt:** Pagern är fulladdad *eller* nätadaptern är inte korrekt ansluten

Ström och batteri

- Strömförsörjning:
  7,5 VDC / 1500 mA
- Batterireserv:
  2×1,2 V NiMH uppladdningsbara

  Notera:
  Batterierna får endast bytas av auktoriserad servicepersonal.
- Laddningstid, pager
  Normal laddningstid: ~ 6 h
  Vid helt urladdat batteri: ~ 24 h
- Vibratorstyrka: 2.0 – 4,0 VDC

Storlek och vikt

- Höjd: 79 mm
- Bredd: 88 mm
- Djup: 43 mm
- Vikt: 200 g, inkl. batterier och adapter

Omgivning

- Endast för inomhusbruk

Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator
  Laddaren har uttag för upp till två sängvibratorer

Varning! När pagerladdaren används skall **ENDAST UPPLADDNINGSBARA NiMH BATTERIER** användas i pagern. Standardbatterier kan börja läcka om de placeras i laddaren och kommer då att förstöra elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.


Pagerladdare

Komma igång

1 **Viktigt!** Ersätt det alkaliska batteriet i pagern med det bifogade 1,2 V NiMH uppladdningsbara batteriet.

2 Skruva fast de två stödbenen på baksidan av laddaren och ställ den på en plan yta. Du kan också hänga den på väggen med medföljande skruv och plugg.

3 Anslut nätadaptern till vägguttaget och sätt pagern i laddaren. Laddningslampan lyser grönt när pagern laddas och släcks när den är fulladdad. Anslut sängvibratorn (tillbehör) och lägg den under kudden eller madrassen.

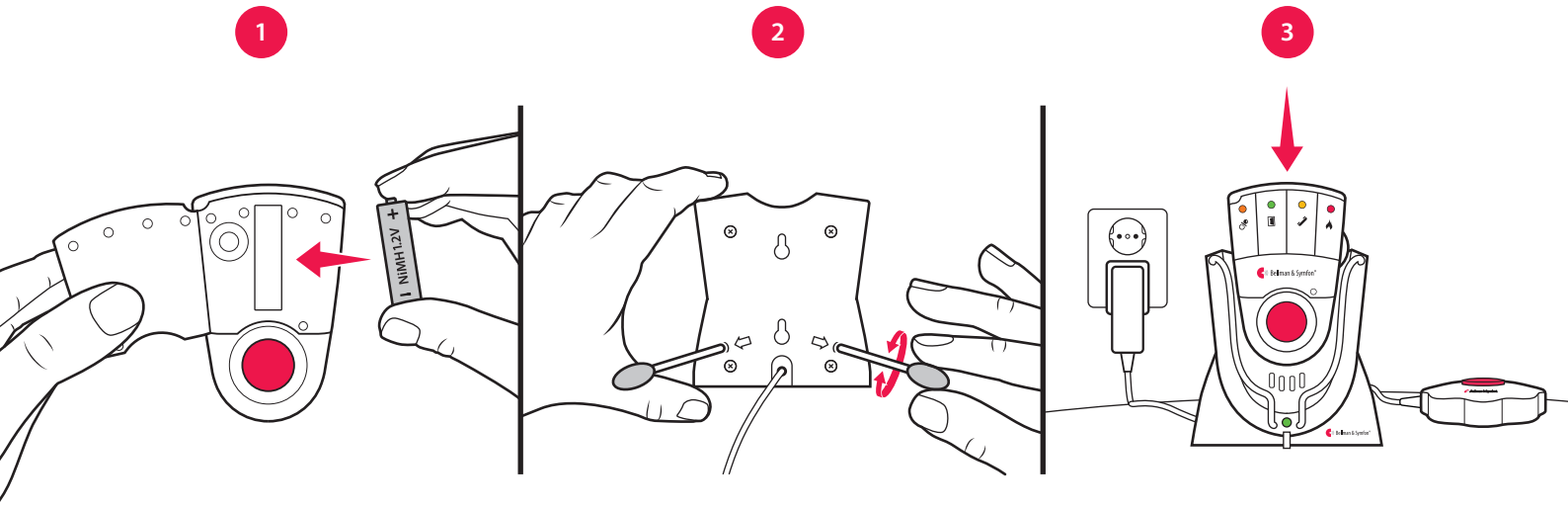

Testa anslutningen

Notera: Ladda reservbatteriet i minst 24 timmar innan du använder laddaren med en sängvibrator.

1 För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp (se **Testa anslutningen** för respektive sändare).

2 Om pagern sitter i laddaren, tänds en Visitlampa på pagern och sängvibratorn börjar vibrera. Om ingenting händer, se **Felsökning**.

Felsökning

De flesta problem med pagerladdaren kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:


Om	Gör så här
Pagern laddas inte trots att den sitter i laddaren	▪ Kontrollera att pagern är korrekt placerad i laddaren. Laddningslampan tänds i grönt för att visa att pagern laddar. ▪ Om laddningslampan inte tänds kan reservbatterierna vara urladdade. Anslut nätadaptern i vägguttaget för att ladda reservbatterierna.
Sängvibratorn vibrerar inte när pagern aktiveras	▪ Kontrollera att sängvibratorn är korrekt ansluten till pagerladdaren. ▪ Kontrollera att pagern är korrekt placerad i laddaren. Laddningslampan tänds i grönt för att visa att pagern laddar. ▪ Om laddningslampan inte tänds kan reservbatterierna vara urladdade. Anslut nätadaptern i vägguttaget för att ladda reservbatterierna.

Sängvibrator

Visit_001ART013-SE

BE1270

Anslutningar

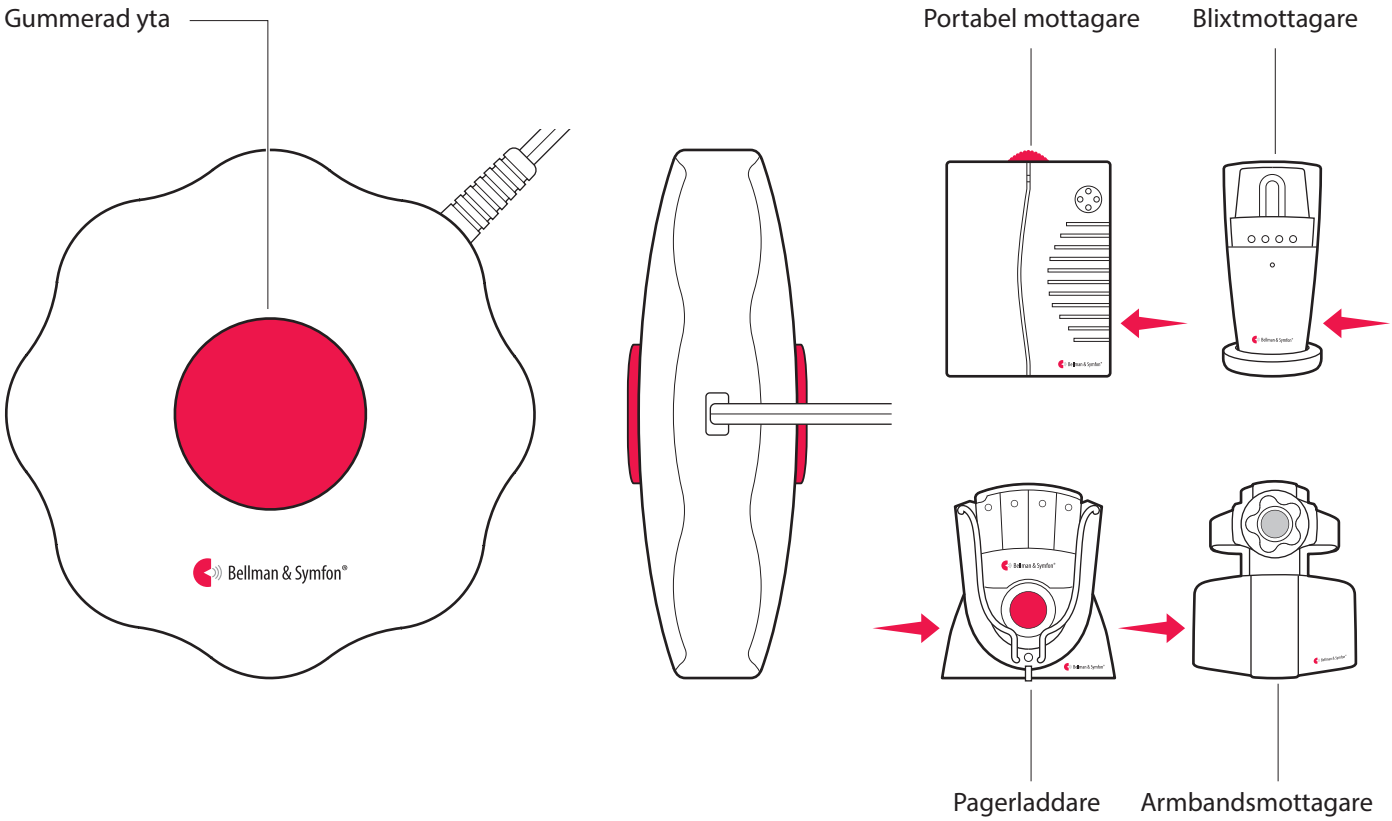

Teknisk information

Funktion

Väcker dig med vibrationer under kudden eller madrassen. Behöver inget batteri och kan anslutas till de flesta Visit mottagare, laddartillbehör och väckarklockor.

I förpackningen

- BE1270 Sängvibrator

Strömförsörjning

- Driftspänning
  2,0 – 4,0 V DC från en mottagare
- Strömförbrukning
  250 – 750 mA

Kablar och kontakter

- Kabellängd: 2 meter
- Kontakt: 3,5 mm mono

Storlek och vikt

- Höjd: 88 mm
- Bredd: 88 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% till 90% Icke-kondenserande

Underhåll och rengöring

- Rengör endast med en torr trasa
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel

Kompatibilitet

Sängvibratorn kan anslutas till följande produkter och laddartillbehör:

- BE1450 Visit portabel mottagare
- BE1441 Visit blixtmottagare
- BE1442 Visit blixtmottagare med reservbatteri
- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1350 Väckarklocka classic
- BE1370 Väckarklocka pro
- BE1260 Pagerladdare för BE1470 Visitpager
- BE1570 laddare för BE1560 Visit armbandsmottagare

Väggfäste för blixtmottagare

Visit_001ART013-SE

BE9075


Montera blixtmottagare

BE1441

1 Använd borrmallen för att göra hål för skruv och plugg.

2 Använd en insexnyckel för att ta loss foten från undersidan av blixtmottagaren.

3 Sätt upp väggfästet på väggen. Skruva fast foten och montera blixtmottagaren på väggfästet.

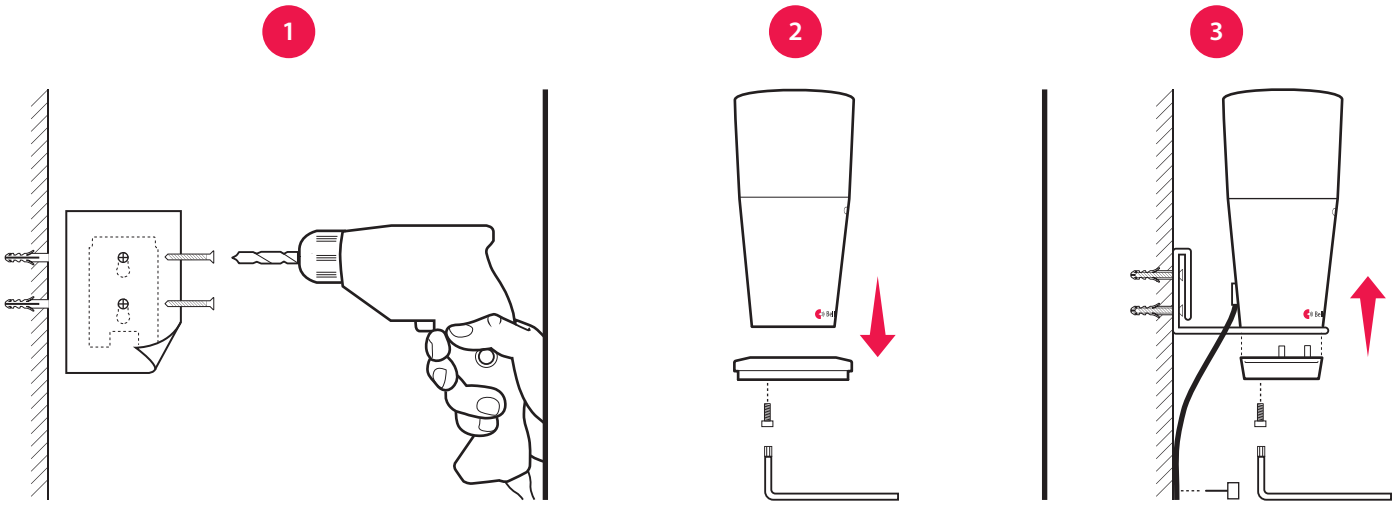


Montera blixtmottagare med batterireserv

BE1442/BE1444

1 Använd borrmallen för att göra hål för skruv och plugg.

2 Ta loss skruven markerad i rött på undersidan av blixtmottagaren.

3 Sätt upp väggfästet på väggen. Sätt fast skruven för att montera blixtmottagaren på väggfästet.

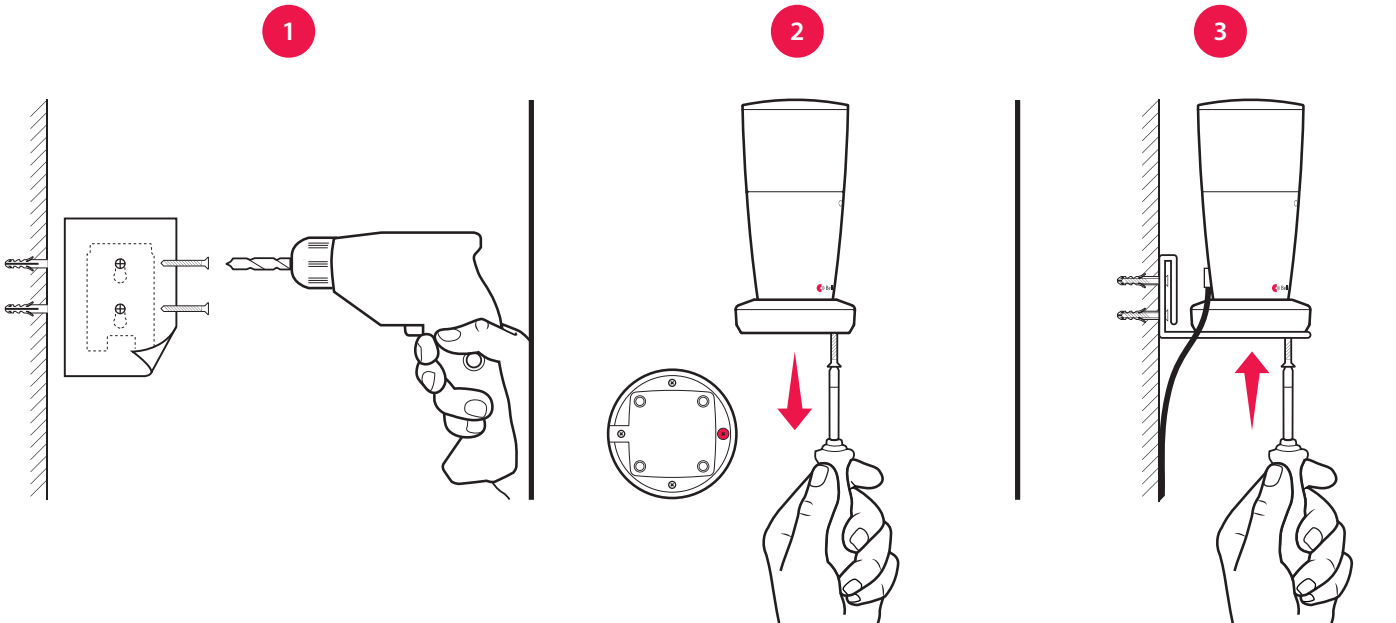


Magnetbrytare

Visit_001ART013-SE

BE9023

Håller koll på dina fönster och dörrar

Montera magnetbrytaren på dörr- eller fönsterkarmen och anslut den till telefonsändaren. När magneterna separeras, signalerar sändaren till din Visitmottagare som ljuder, blixtrar eller vibrerar beroende på mottagare.

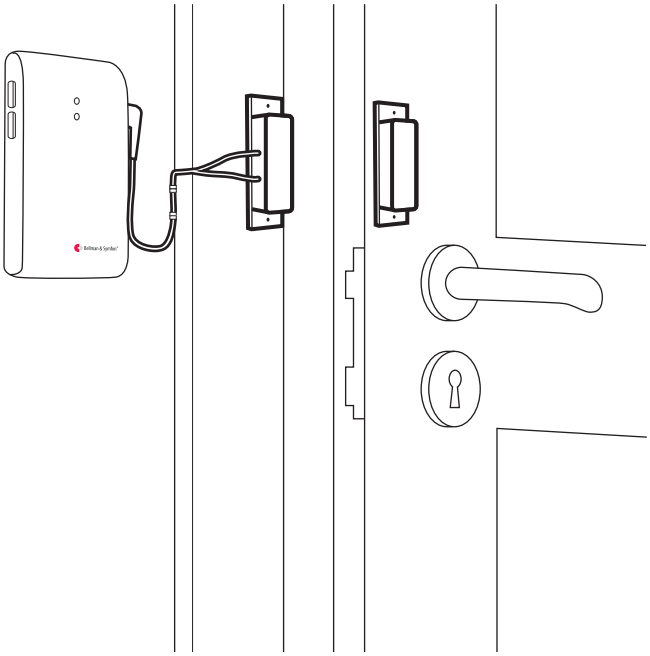

Teknisk information

- Storlek 25×62×13 mm
- Vikt 25 g
- Kontakt 3,5 mm mono
- Kabellängd 0,5 m
- Kontaktbrytare
  Öppen: På > 2 cm från magnet
  Sluten: Av < 1 cm från magnet
- Färg Vit
- Omgivning Endast för inomhusbruk

Extern mikrofon


Visit_001ART013-SE

BE9199 | BE9200

När ljudkällan befinner sig långt bort

En extern mikrofon kan anslutas till dörrsändaren när dörrklockans ljudkälla befinner sig för långt bort ifrån sändarens interna mikrofon.

Den kan också användas när du vill ha olika signaler för dörrklocka och porttelefon.

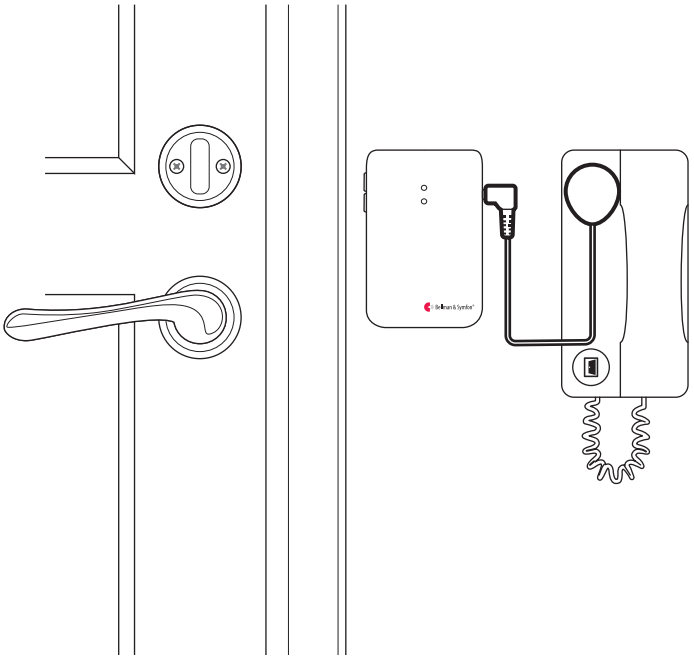

Teknisk information

Storlek	33×36×4 mm
Vikt	15 g
Kontakt	3,5 mm mono
Kabellängd	BE9199: 2,5 m BE9200: 0,75 m
Mikrofontyp	Piezoelektrisk
Färg	Vit
Omgivning	Endast för inomhusbruk


Trampmatta

Visit_001ART013-SE

BE9026

Håller koll på alla som kommer och går

Placera trampmattan vid ytterdörren eller nedanför sängen och anslut den till telefonsändaren eller babyvakten för att få reda på när någon rör sig i ditt hem.

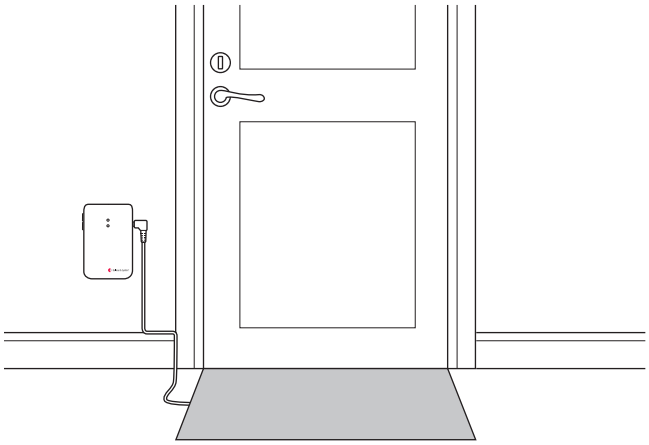

Teknisk information

- Storlek 540×395×4,6 mm
- Vikt 255 g
- Kontakt 3,5 mm mono
- Kabellängd 200 cm
- Dammtät och uppfyller IP65 skyddsklass

Funktioner

- Kontakt N/O normalt öppen
- Motstånd <100 Ω (beroende på tryck)
- Normalt tryck >5 kg över en yta på 50 mm i diameter
- Arbetstemperatur -15 till 65 °C

Maxklassificering

- Kontaktspänning Max 10 VA
- Kopplingsspänning Max 25 VDC
- Kopplingsström Max 0,25 A DC resistiv
- Bärande ström Max 0,25 A DC resistiv

Extern triggerkabel

Visit_001ART013-SE

BE9253

Ansluter Visit till en extern trigger

Används för att ansluta en Visitprodukt till en extern trigger. Anslut till exempel en befintlig dörrklocka till telefonsändaren för att få reda på när någon ringer på dörrklockan.

Teknisk information

- Vikt 25 g
- Kontakt 3,5 mm stereo
- Kabellängd 0,5 m
- Färg Vit

Spänning

Ⓤ 2 – 30 VDC

3 – 24 VAC

Se relevant Visitprodukt för ytterligare information.

