

Visit Telefonsändare

BE1431-868



Håll kontakten med dina nära och kära

Visit telefonsändare är en del av Visitsystemet som hjälper människor med hörselnedsättning att uppfatta signaler i hemmet. Den kan användas för att detektera både fast och mobil telefon och till och med visa när du får ett meddelande på surfplattan (tillbehör krävs).

Så fungerar det

När telefonen ringer skickar telefonsändaren en signal till din Visitmottagare som visar med ljud, blixtljus eller vibrationer att någon försöker nå dig.

Visit telefonsändare är utrustad med två extra triggeringsångar för anslutning av t.ex:

- Trampmatta eller magnetbrytare
- Befintlig dörrklocka etc.

Du kan dessutom välja att ha olika signal-mönster för varje tillbehör så att det blir lätt att skilja dem åt.

Visit telefonsändare är mycket enkelt att installera, praktiskt taget underhållsfri och har en batterilivslängd på upp till tio år.



Egenskaper

Detekterar alla fasta telefoner

Multipla anslutningar
Tre separata triggeringsångar

Valbar signal
Olika signaler för olika tillbehör

Lång batteritid
Upp till 10 års batterilivslängd

Säker radiolänk
Upp till 250 m räckvidd

MD

CE-märkt medicinsk enhet
enligt EU MDR 2017/745


Teknisk information

Mått och vikt

Höjd:	100 mm
Bredd:	65 mm
Djup:	27 mm
Vikt:	134 g inkl. batterier



Knappar och anslutningar

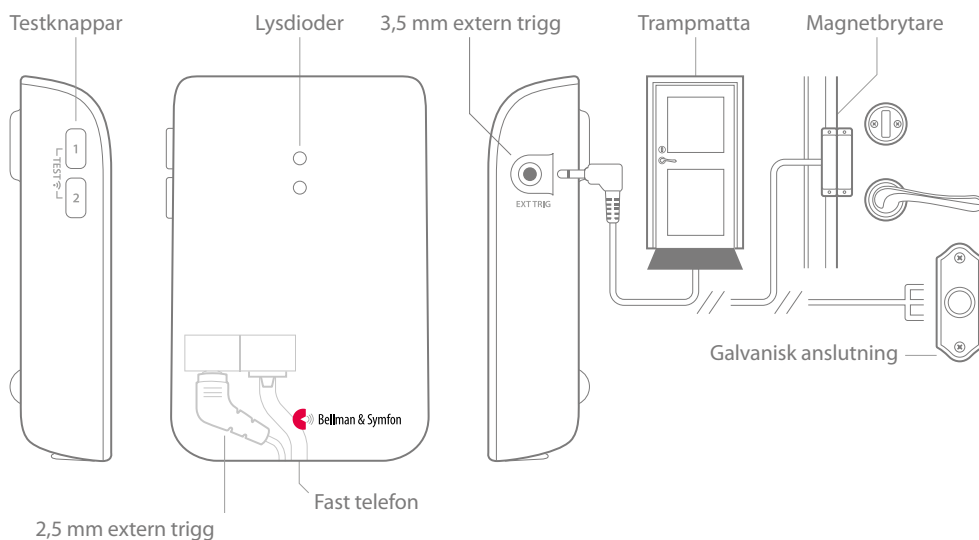

Anslutningar

- Modular RJ11 kontakt för analogt telenät
- 2,5 mm extern triggeringång för Mobilsensor
- 3,5 mm extern triggeringång för övriga tillbehör

Aktivering

- Testknappar
- Fast telefon och mobiltelefon via Mobilsensorn
- Trampmatta eller magnetbrytare
- Befintlig dörrklocka kan anslutas till extern trigg

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Godkännanden



Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

Ström och batteri

- Strömförsörjning
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkaliskt
- Strömförbrukning
Aktiv < 70 mA, Viloläge < 15 µA
- Drifttid
Alkaliskt batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år

Antal radionycklar

- 64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Ej för återanvändning

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15 % till 90 % (ej kondenserande)

I paketet

- BE1431-868 Visit Telefonsändare
- BE9105 Telefonsladd
- 2 x 1.5V AA alkaliska batterier
- Kardborreband för väggmontage
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning



Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- BE9026-P02 Trampmatta
- BE9023-P02 Magnetbrytare
- BE9253 Extern triggerkabel (3,5 mm kontakt)

© och TM 2025, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Produktdesignen är patenterad. Innehållet i trycksaken kan komma att ändras utan förvarning.

BE1431-868_001DSH1.0_SE

bellman.com