

Halsslynge

BE9159-P02

BE9161-P02



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

- 1 Høy uteeffekt**
Gir veldig lite signaltap
- 2 Delbar sikkerhetslås**
For å unngå ulykker
- 3 Utbyttbart tekstiltrekk**
For hygiene og komfort
- 4 Deksel med gummibelegg**
For økt komfort
- 5 Kabel i silikonmaterial**
For økt følsomhet
- 6 Festeklemme**
Holder halsslyngen på plass
- 7 Gullbelagte kontakter**
Ingen korrosjon

Få ut mer av ditt høreapparat.

Halsslyngen fra Bellman & Symfon kan brukes med lydkilder som er utstyrt med et 3,5 mm hodetelefonuttak. Kan kobles til samtaleforsterker, mobiltelefon, nettbrett eller datamasin. Still høreapparatet i T-posisjon. Halsslyngen er diskret og bekvem og kan bæres under skjorten eller genseren.

Tekniske data

- Lengde, halsslynge 70 cm
- Ledningslengde BE9159-P02 90 cm
- Ledningslengde BE9161-P02 15 cm
- Diameter, halsslynge 22 cm

Uteffekt

- 1500 mA/m på 15 cm avstand og 2 x 50 mW innsignal

Størrelse på dekselet

- Bredde 3,4 cm
- Høyde 3,8 cm
- Tykkelse 1,4 cm
- Vekt BE9159-P02 62 g
- Vekt BE9161-P02 58 g

Tilkobling

- 3,5 mm teleplugg (stereo) gullbelagt kontakt, vinklet 90 grader
- Impedans: 2 x 5 Ω

Godkjenninger




Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).





Teknisk informasjon

Frekvens (Referanse: -20 dB ~ 0.1 A/m)

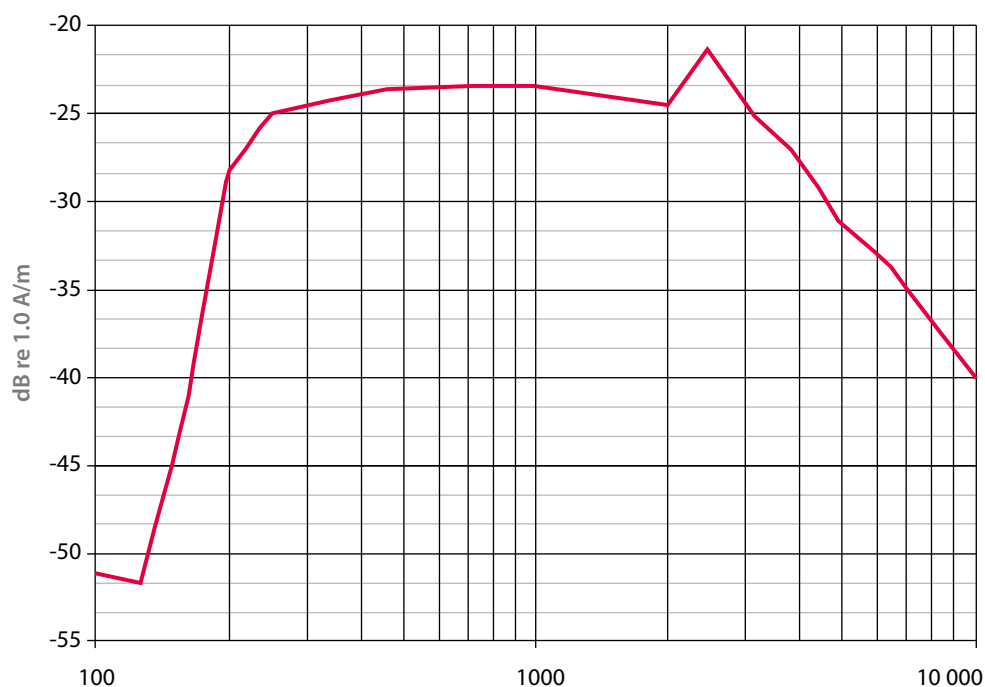

Bruk BE9161-P02 med Domino og Mino

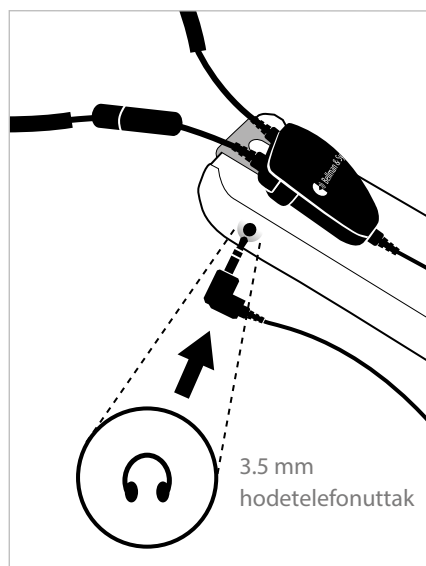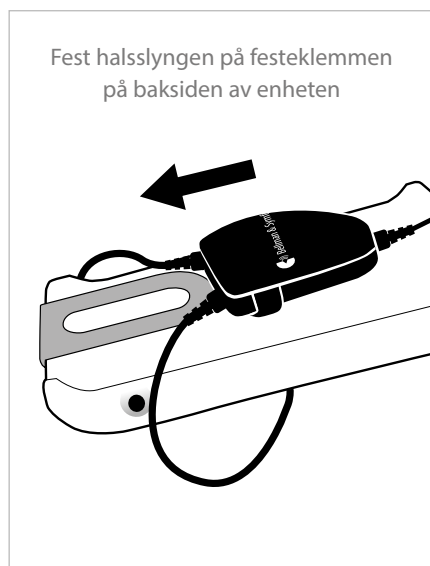

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.
Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE9159-P02_BE9161-P02_001DSH1.0_NO bellman.com