

Visit Brandvarnare

BE1481 / BE1481-DE



Egenskaper

Sensortyp
Optisk-termisk sensor

Batteritid
Håller minst 5 år

Pausfunktion
Användbar vid matlagning

Säker radiolänk
Täcker hela hemmet

MD

CE-märkt medicinteknisk
enhet enligt EU MDR 2017/745
och rökdetektor enligt SE
14604:2005/AC:2008

Skydda ditt hem och din familj.

Visit Brandvarnare är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Den upptäcker rök och pyrande eld i ett tidigt skede och skickar larmet direkt till din Visitmottagare

Vakar över ditt hem

Om det börjar brinna, skickar brandvarnaren omedelbart en signal till din Visitmottagare som larmar med ljud,

blixtar eller vibrationer (beroende på mottagare). Visit ger dig en varning i tid, så du hinner undkomma faran.

Brandvarnaren använder en säker radiolänk som täcker en hel våning. Det är robust och har långlivade batterier som håller i minst 5 år. Brandvarnaren är också utrustad med en pausfunktion för att tysta falsklarm när du lagar mat och varnar om den slutar fungera.



Teknisk information

Storlek och vikt


Höjd:	120 mm
Bredd:	120 mm
Djup:	37 mm
Vikt:	165 g inkl batteri




Egenskaper

- Sensortyp
Optisk-temisk sensor
- Rökkänslighet
0.115 – 0.168 dB/m
- Värmekänslighet
54° - 70° C
- Akustiskt larm
> 85 dB(A) @ 3m
Frekvens: 3.2 kHz
- Radio
Innehåller en separat radiomodul inuti brandvarnaren.
- Varning för lågt batteri
Skickar larm till alla Visit mottagarna inom räckhåll (samma radionyckel krävs).
- Varning för fel
Avger larm om enheten blir för dammig och smutsig och slutar fungera.
- Broadcast-funktion
Skickar larm till alla Visitmottagare inom räckvidd oavsett vilken radionyckel som ställts in.
- Aktivering
 - Via testknappen
 - Via rökdetektor
 - Via temperatursensorn, om temperaturen är mellan 54 - 70°C.

Knappar och batterier

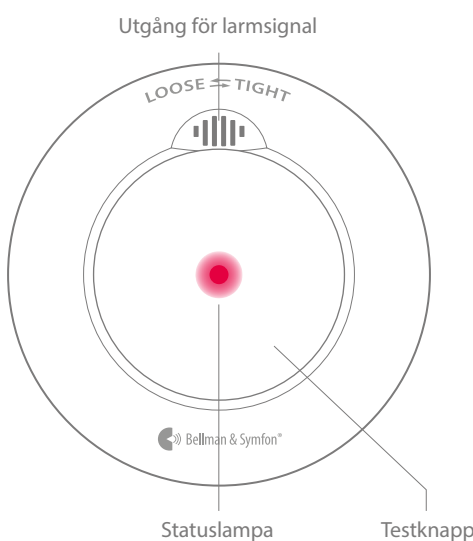

Monteringsplatta

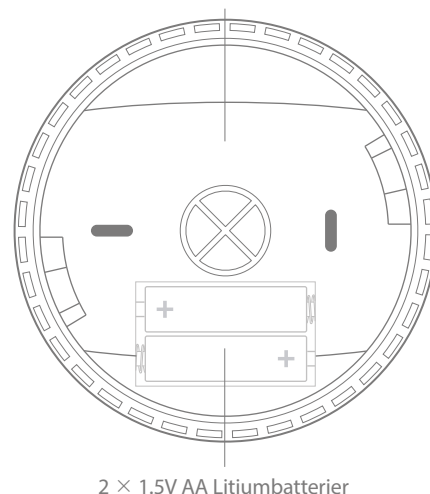

Ström och batterier

- Batterityp
2 × 1.5V AA Energizer Litium L91
- Strömförbrukning
Aktiv < 75 mA, Viloläge < 15 µA
- Drifttid: Minimum 5 år

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 4 – 40° C
- Relativ luftfuktighet: 15% – 95% R.H. (icke-kondenserande)

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868,30 MHz
- Räckvidd: Upp till 200 m fri sikt.
Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Godkännanden

MD Denna produkt är en medicinteknisk enhet i enlighet med förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicintekniska enheter) och en rökdetektor i enlighet med SE 14604:2005/AC:2008.

I förpackningen

- BE1481/-DE Brandvarnare
- Batterier
- Fäste
- Skruvar
- Bruksanvisning



Underhåll och rengöring

- Dammsug brandvarnaren regelbundet (och alltid när batteriet ersätts) med mjuk borste och torka av enheten med lätt fuktad trasa.
- Varning: Måla ej över brandvarnaren.

Tillbehör

- BE9175 Magnetfäste
Erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ till skruv och plugg.

© och TM 2025, Bellman & Symfon AB

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1481/BE1481-DE_014DSH1.0-SE

bellman.com