

Visit Babyvakt

BE1491-868



Egenskaper

Tillförlitlig radiolänk
Upp till 250 m räckvidd

Flexibel
Justerbar känslighet & fördröjning

Trygg och säker
Barnsäker lucka för batterierna

Fungerar med trampmatta
Upptäck om barnet lämnar sängen

Enkel att använda
Tar endast minuter att sätta upp

MD

CE-märkt medicinsk enhet
enligt EU MDR 2017/745

Alltid nära ditt barn

Som förälder sätter man sitt barns hälsa och säkerhet i första rummet. Bellman & Symfon erbjuder en babyvaktslösning som hjälper dig med nedsatt hörsel att hålla ett extra vakande öga på bebisen. Den uppmärksammar dig så fort barnet behöver dig och den fungerar lika bra när du sover eller befinner dig ett par rum bort.

Så fungerar det

När barnet vaknar och börjar gråta, skickar babyvakten en signal till din Visitmottagare som visar med ljud, blixtljus eller vibrationer att ditt barn behöver dig.

Säker och tillförlitlig

Babyvakten använder en säker radiolänk som täcker hela hemmet så att du alltid finns till hands.

Justerbar känslighet och fördröjning

Du kan enkelt justera känslighet och fördröjning så att den inte aktiveras av misstag när din bebis rör sig i sömnen.

Valbar signal

Om du har flera barn kan du ställa in individuella signaler så att du genast vet vem som behöver dig.



Teknisk information




Mått och vikt

Höjd:	100 mm
Bredd:	65 mm
Djup:	27 mm
Vikt:	118 g inkl. batterier



Knappar och anslutningar

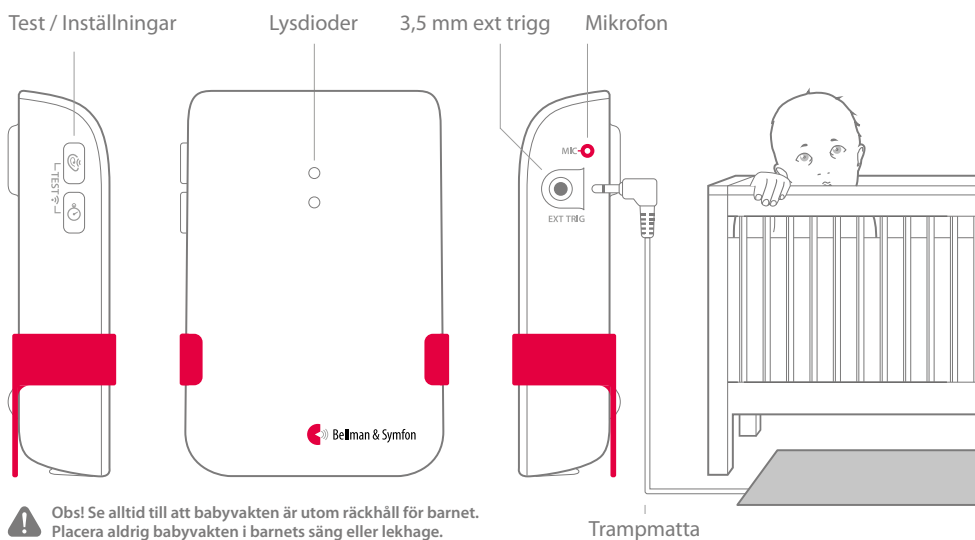

Anslutningar

- 3,5 mm extern triggergång

Aktivering

- Testknappar
- Intern mikrofon och ansluten trampmatta

Inställningar

- Känslighet: Hög, Mellan, Låg
- Fördröjning: 30 s, 10 s, 1 s

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Godkännanden



Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

Ström och batteri

- Strömförsörjning
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkaliskt
- Strömförbrukning
Aktiv < 70 mA, Viloläge < 400 µA
- Drifttid
Alkaliskt batteri ~ 6 mån Litiumbatteri ~ 1 år

Antal radionycklar

- 64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Ej för återanvändning

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15 % - 90 % (ej kondenserande)

I paketet

- BE1491-868 Visit Babyvakt
- Bordsställ
- 2 x 1.5V AA alkaliska batterier
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning



Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- BE9026-P02 Trampmatta

© och TM 2025, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Produktdesignen är patenterad. Innehållet i trycksaken kan komma att ändras utan förvarning.

BE1491-868_001DSH1.0_SE

bellman.com