

Visit Pager-ontvanger

BE1470-868



 Bellman & Symfon®



Functies

Stil maar duidelijk
Waarschuwt met trilfunctie

Duidelijke bediening
Grote knop en heldere iconen

Licht en draagbaar
Draag hem aan uw riem

Vervangbaar front label
Gemakkelijk aan te passen

Optioneel laadaccessoire
Met twee jack-aansluitingen
voor trilalarmen

MD

Medisch apparaat met CE-markering
volgens EU MDR 2017/745

Past perfect in uw dag en in uw broekzak.

De Pager van Bellman & Symfon maakt deel uit van het Visit-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij waarschuwt u met trillingen wanneer de deurbel of de telefoon overgaat, wanneer uw baby u nodig heeft of wanneer er brand ontstaat.

De Pager maakt gebruik van gekleurde lampen om de Visit signalen te onderscheiden en werkt tot drie weken op een enkele batterij. Hij is robuust en lichtgewicht en kan aan uw riem worden bevestigd of in uw broekzak worden opgeborgen. Gebruik hem in en om het huis om te weten wanneer er iets gebeurt dat uw aandacht vraagt.

De Pager-oplader is een los verkrijgbare accessoire. Hij komt met oplaadbare batterijen die in de Pager-ontvanger passen. U kunt de Pager erin zetten en dan laden de oplaadbare batterijen op.

Ook komt de Pager-oplader met uitgangen voor twee trilschuiven. Leg deze onder uw kussen of matras om met trillingen te worden gewaarschuwd als er's nachts iets gebeurt.



Technische specificaties




Afmetingen en gewicht

- Hoogte: **86 mm, 3,4"**
Breedte: **57 mm, 2,2"**
Diepte: **29 mm, 1,1"**
Gewicht: **70 g, 2,5 oz. (incl. batterij)**



Knoppen en bedieningselementen

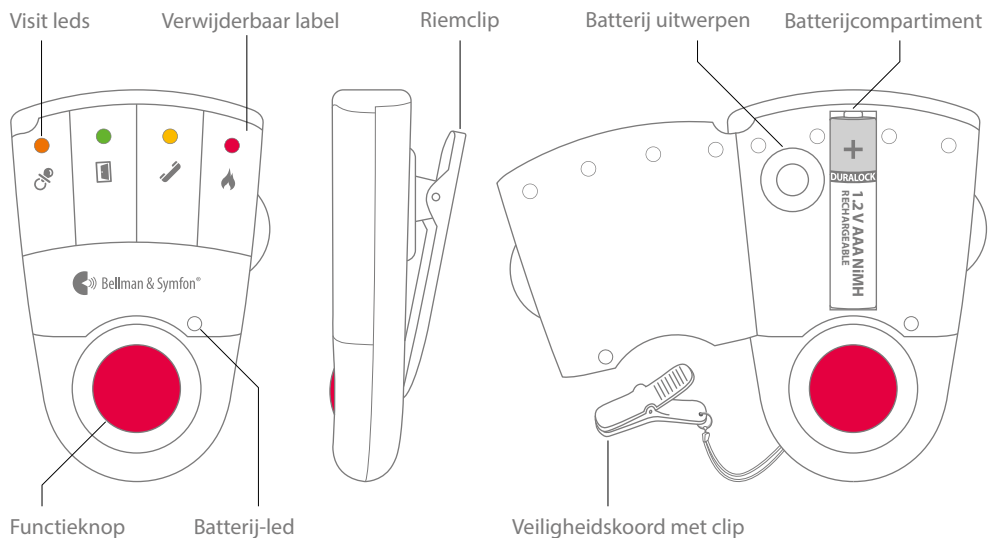

Funcities

- Discrete waarschuwingen
Produceert stille en niet opdringerige trillingen
- Duidelijke signaalidentificatie
Gebruikt gekleurde leds en trillingspatronen
- Licht en draagbaar
Weegt slechts 70 g
- Optioneel laadaccessoire
Uitgerust met twee jack-aansluitingen voor trilschijven

Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 868,3 MHz
- Bereik: 50 - 250 m (164 ft)
Het bereik is afhankelijk van de radiofrequentie, de kenmerken van het gebouw en de combinatie van zenders en ontvangers.

Goedkeuringen

- MD** Dit product is een medisch apparaat dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 (Verordening betreffende medische hulpmiddelen).

Stroom en batterij

- Netstroom
Gevoed via het BE1260-C laadaccessoire
- Batterijvermogen
1 x 1,5 V AAA alkaline of
1 x 1,2 V AAA NiMH oplaadbare batterij
- Stroomverbruik
Actief: 220 mA, inactief: 1 mA
- Gebruikstijd
Alkalinebatterijen: 2 - 3 weken
NiMH-batterijen: ~1 week, volledig opgeladen

In de doos

- BE1470-868 Visit Pager-ontvanger
- Riemclip, veiligheidskoord, extra front label

Milieueisen

- Temperatuur tijdens gebruik: 0 tot 35 °C
- Relatieve vochtigheid: 15% tot 90% (niet-condenserend)

Visit indicatoren

De Visit leds geven normaal gesproken het volgende aan:

- Oranje led, fopspeensymbool
De babyfoon is geactiveerd
- Groene led, deursymbool
De deurzender is geactiveerd
- Gele led, telefoonsymbool
De telefoonzender is geactiveerd
- Rode led, vuursymbool
De rookmelder is geactiveerd

Accessoires

- BE1260-C Pager-oplader
- BE1270-P02 Trilalarm (aangesloten op de lader)

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1470_001DSH1.0_NL

bellman.com