

Halsslinga

BE9159-P02

BE9161-P02



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

- 1 Hög uteffekt**
Ger mycket låg signalförlust
- 2 Delbart säkerhetslås**
För att undvika olyckor
- 3 Utbytbart textilöverdrag**
För hygien och komfort
- 4 Hölje med mjuk skyddslack**
För ökad komfort
- 5 Kabel i silikonmaterial**
För ökad följsamhet
- 6 Klämma**
Håller halsslingan i rätt läge
- 7 Guldpläterade kontakter**
Ingen korrosion

Få ut mer av din hörapparat.

Halsslingan från Bellman & Symfon kan användas med ljudkällor som är utrustade med ett 3,5 mm hörlursuttag. Anslut den till din samtalsförstärkare, mobiltelefon, surfplatta eller dator och ställ hörapparaten i T-läge. Halsslingan är diskret och bekväm och kan bäras under tröjan eller skjortan.

Teknisk data

- Längd, halsslinga 70 cm
- Kabellängd BE9159-P02 90 cm
- Kabellängd BE9161-P02 15 cm
- Diameter, halsslinga 22 cm

Uteffekt

- 1500 mA/m på 15 cm avstånd och 2 x 50 mW insignal

Storlek på hölje

- Bredd 3,4 cm
- Höjd 3,8 cm
- Tjocklek 1,4 cm
- Vikt BE9159-P02 62 g
- Vikt BE9161-P02 58 g

Anslutning

- 3,5 mm teleplugg (stereo) guldpläterad kontakt, vinklad 90 grader
- Impedans: 2 x 5 Ω

Godkännanden


MD

Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).





Teknisk information

Frekvensgång (Referens: -20 dB ~ 0.1 A/m)

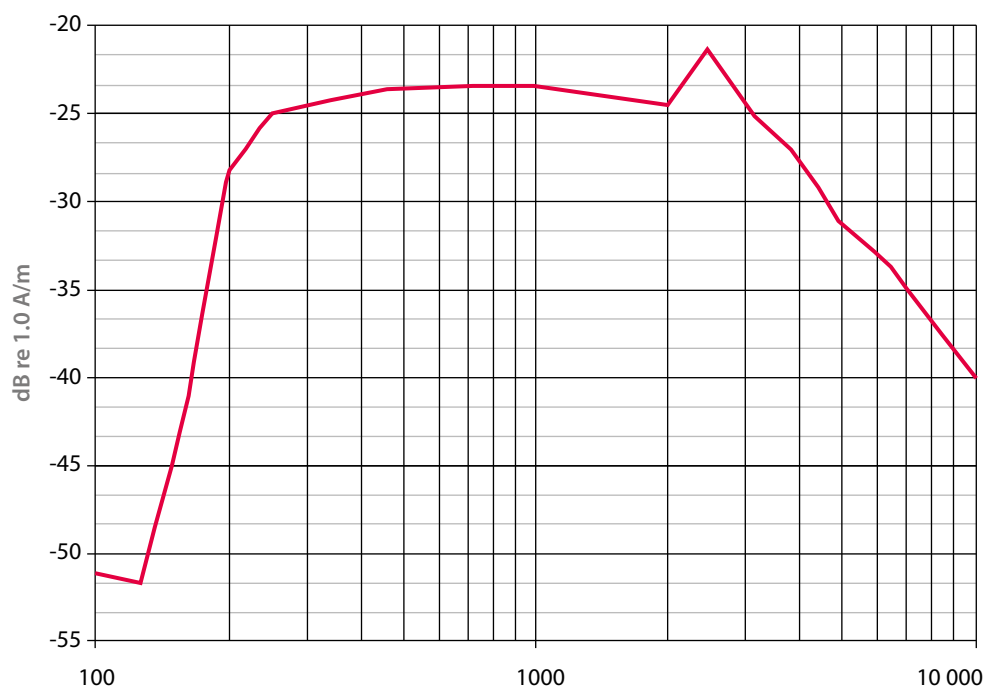

Använda BE9161-P02 med Domino och Mino

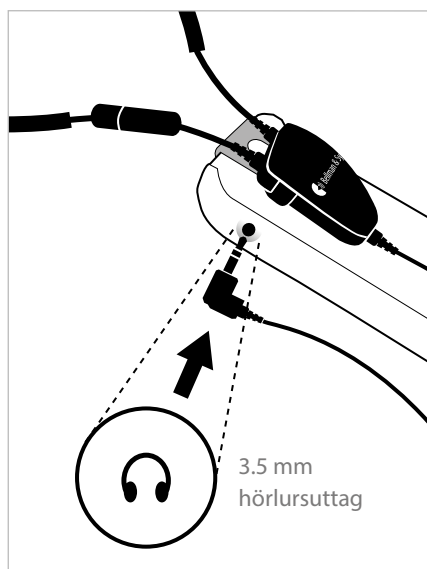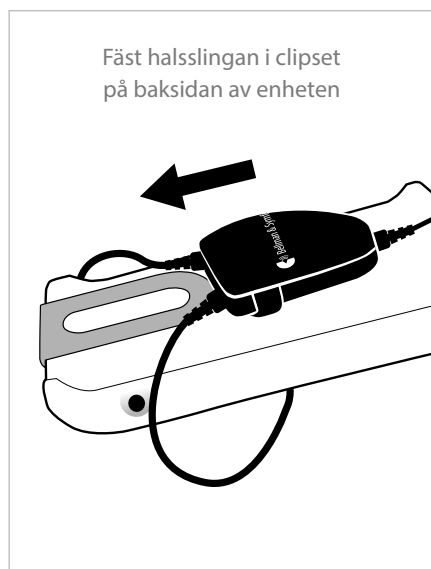

© och TM 2025, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Innehållet kan komma att ändras utan förvarning.

BE9159-P02_BE9161-P02_001DSH1.0_SE bellman.com