

Vibio Sängvibrator

BE1221-P02



Egenskaper

Kraftfulla vibrationer
Väcker dig som sover tungt

Trådlös Bluetooth®
Lättanvänd mobilapp ingår

Notifiering
För samtal och meddelanden

Snoozeband
Snooza med ett lätt ryck

"Set-and-Forget"
Fungerar även utan mobil

Vakna i tid utan att störa resten av familjen.

Vibio är en trådlös sängvibrator som du styr från mobilen. Bädda ner Vibio under kudden eller madrassen och ställ alarmet i appen som finns tillgänglig för både iOS och Android. När det är dags att stiga upp, väcker Vibio dig med vibrationer istället för ljud. Vibio är ett perfekt val för dig som är svårväckt, har en partner som sover lätt, eller har svårt att höra en traditionell väckarklocka.

Vibio har en räckvidd på ca 30 meter och kan dessutom notifiera för samtal och meddelanden. Du kan välja att snooza på mobilen eller direkt under huvudkudden genom att rycka i textilbandet.



MD

CE-märkt
medicinsk enhet
enligt EU MDR
2017/745

Teknisk information



Mått och vikt

Sängvibrator

Ø: 94 × 94 mm

Höjd: 27 mm


Vikt: 153 g

Snoozeband

Längd: 120 mm



Knappar och uttag

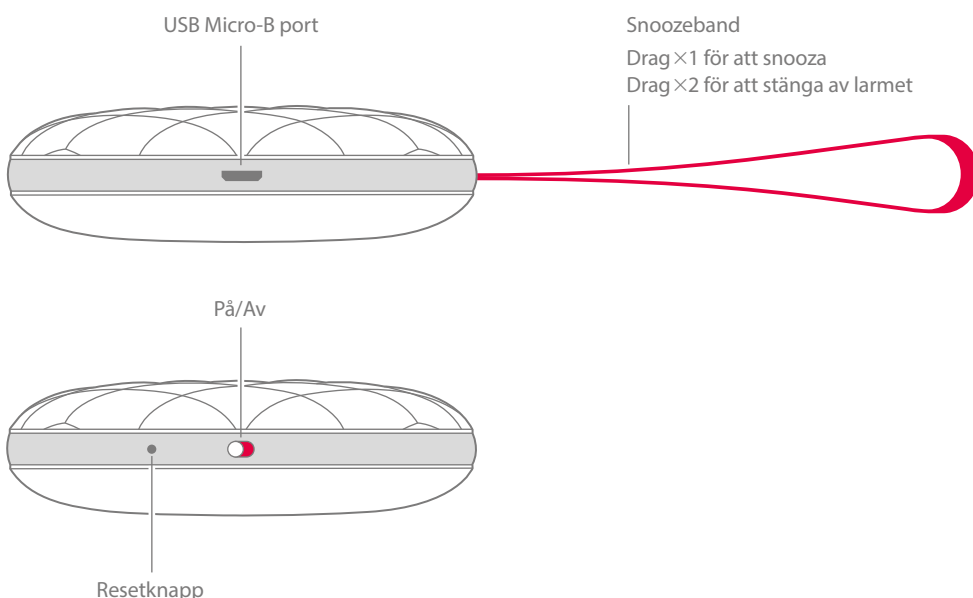

Kompabilitet

- iOS 15 / Android 8 och senare
- iPhone 6S och senare
- Moderna Android-mobiler

Frekvens och räckvidd

- Bluetooth® frekvens: 2400 – 2483,5 MHz
- Bluetooth® räckvidd: Upp till 30 m.
Räckvidden kan försämrats av väggar och stora föremål.

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Temperatur: 0° – 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% – 90%, ej kondenserande

Kablar och anslutningar

- Kabellängd: 1 m
- Kontakter: USB typ A till USB Micro-B

Kommunikation

- Bluetooth® 5

Ström och batteri

- Batteridrift: 1 × 3.7V AA Litium-jon
- Strömförbrukning:
Aktiv med stark vibration < 1000 mA
Viloläge < 100 µA
- Drifttid: Upp till 60 dagar per laddning
- Laddningstid: Upp till 1,5 timmar @ 500mA
- Laddningsström: Upp till 500 mA, 5V DC

Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med torr trasa.
- Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller produkter som innehåller slipmedel.

Godkännanden



Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

I paketet

- Vibio Sängvibrator
- Laddkabel
- Bruksanvisning (mobiltelefon ej inkluderad)



© 2025 och ™ Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Innehållet i trycksaken kan komma att ändras utan förvarning.

BE1221-P02_033DSH1.0-SE

bellman.com