

Magnetbrytare

BE9023-P02



Egenskaper

Flexibel

Fungerar på dörrar och fönster

Enkel att sätta upp

Med dubbelhäftande tejp

Kompatibel med Visit

Fungerar med Visitsystemet


Håller koll på dina fönster och dörrar.

Magnetbrytaren från Bellman & Symfon är speciellt utformad för Visitsystemets lösningar för smarta hem.

Montera magnetbrytaren på dörr- eller fönsterkarmen och anslut den till Visit telefonsändare. När magneterna separeras, signalerar sändaren till din Visitmottagare som talar om med ljud, blixtar eller vibrationer (beroende på mottagare) när en dörr eller ett fönster öppnas.

Teknisk information

- Dimensioner 25 × 62 × 13 mm
- Vikt 25 g
- Kontaktdon 3,5 mm mono teleplugg
- Kabellängd 0,5 m
- Kontaktbrytare:
 - Öppen > 1 cm från magnet
 - Stängd < 2 cm från magnet
- Färg Vit
- Endast för inomhusbruk

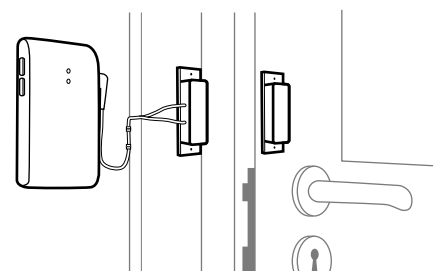

Godkännanden

MD Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna. Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE9023-P02_001DSH1.0-SE

bellman.com