


Visit Dørsender

BE1411-868

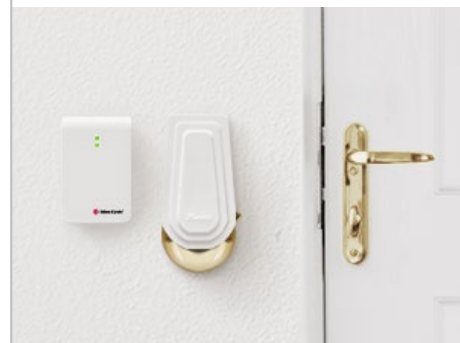

Egenskaper

Fleksibel

For dørklokke og porttelefon

Pålitelig deteksjon

Digitalt fingeravtrykkalgoritme

Programmerbar

Kjenner igjen din dørklokke

Lang batteritid

Opp til 10 års batterilevetid

Sikker radiotilkobling

Opp til 250 m rekkevidde



CE-merket medisinsk enhet i henhold til EU MDR 2017/745

Gå ikke glipp av besøk

Visit dørsender er et produkt som inngår i Bellman & Symfons løsninger for smarte hjem. Den forteller når besøk står ved døren, slik at du vet hvem som kommer på besøk. Dørsenderen er forhåndsprogrammert for å kjenne igjen de fleste dørklokker og porttelefoner og kan også lære seg å kjenne igjen praktisk talt hvilket som helst dørsignal.

Slik fungerer den

Når noen ringer på, sender dørsenderen et signal til Visitmottakeren som viser med lyd, blitslyss eller vibrasjoner at gjestene er kommet.

Fleksibel deteksjon


Visit dørsender kan aktiveres gjennom:

- Den interne mikrofonen
- Den innebygde magnetiske detektoren
- Det eksterne mikrofontilbehøret
- En galvanisk tilkoblet dørklokke

Visit dørsenderen bruker et digitalt fingeravtrykkalgoritme for lydanalyse og en sikker radiotilkobling med lang rekkevidde. Den er meget lett å installere, praktisk talt vedlikeholdsfri og har en batterilevetid på opp til ti år.



Teknisk informasjon

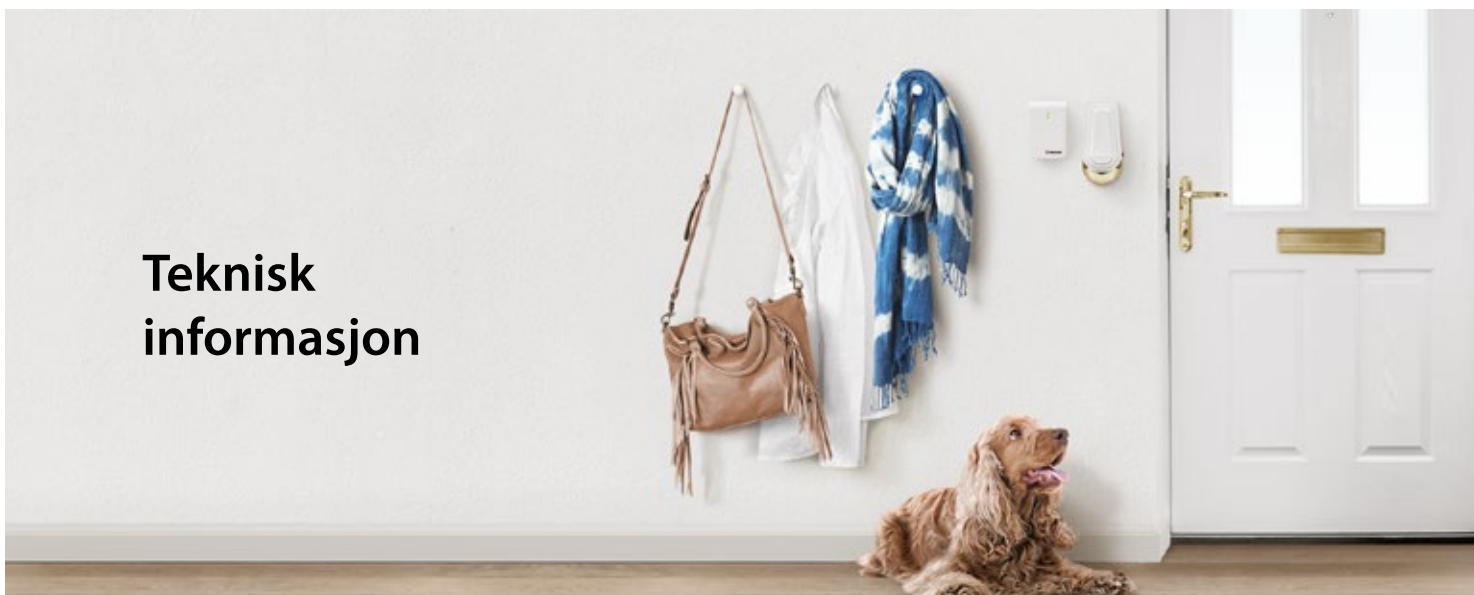


Mål og vekt

- Høyde: **100 mm**
Bredde: **65 mm**
Dybde: **27 mm**
Vekt: **120 g inkl. batterier**



Knapper og tilkoblinger

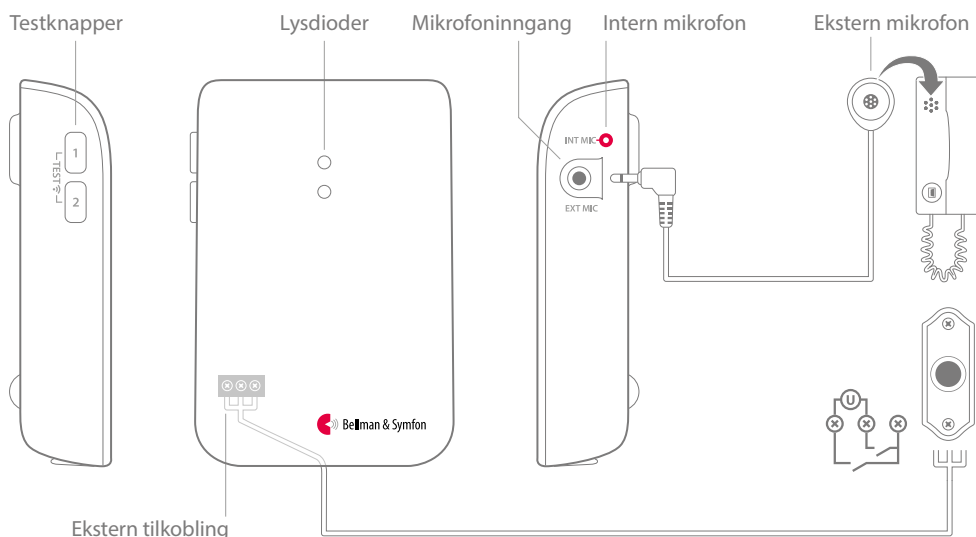

Tilkoblinger

- Mikrofoninngang (3,5 mm monokontakt)
- Ekstern uttak for galvanisk tilkobling

Aktivering

- Testknapper
- Intern mikrofon
- Ekstern mikrofon (tilbehør)
- Magnetisk deteksjon
- Eksisterende dørklokke koblet til ekstern uttak

Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt felt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og radiosendere som TV og mobiltelefon.

Godkjenninger

- MD** Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

Strøm og batteri

- Strømforsyning
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkalisk
- Strømforbruk
Aktiv < 70 mA, Standby < 15 µA
- Driftstid
Alkalisk batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år

Antall radionøkler

- 64. Kan økes til 256 med egen programvare.

Vedlikehold og rengjøring

- Vedlikeholdsfri. Rengjør kun med en tørr klut.
- Ikke bruk vaskemidler, spray, løsemidler, alkohol, ammoniak eller skuremidler
- Ikke for gjenvinning

Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15 % -90 % (ikke kondenserende)

I esken

- BE1411-868 Visit Dørsender
- 2 x 1.5V AA Alkaliske batterier
- Borrelås for veggmontering
- Skruer og plugg
- Bruksanvisning



Tilbehør

- BE9199-P02 Ekstern mikrofon 2.5 m

© 2025 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1411-868_001DSH1.0-NO

bellman.com